



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ZET-1280

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение /Частота	220V/ 50-60Hz
Мощность	96 W
Вес кресла	50 кг
Вес пользователя	до 100 кг

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.

ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИП МАССАЖА:

Приятный массаж всего тела

Уникальный массаж, который осуществляется, учитывая при этом все изгибы позвоночника - это максимум расслабления, никаких неприятных ощущений! К тому же, каждый пользователь может индивидуально настроить движение роликов под свой вес и рост.

Компрессионный массаж всего тела

Компрессоры, которые поддерживают постоянное давление в воздушных подушках, - это массаж высшего уровня! Режим может запускаться без роликового массажа, в качестве дополнительной программы.

Прогрев

Согревает поясницу и всю спину. Этот режим является профилактикой радикулита, так как прогрев позволяет роликам глубоко прорабатывать мышцы спины. Они становятся более расслабленными и эластичными.

ВИДЫ МАССАЖА:

• Поколачивающий массаж

Массажные ролики осуществляют поочередные короткие удары.

• Роликовый массаж

Приятное чередование напряжения и расслабления мышц. Массаж способствует релаксации и успокоению, оказывает на организм лимфодренажное воздействие.

• Разминающий массаж

Массажные ролики, подобно рукам массажиста, тщательно разминают кожу и мышцы, повторяя движения большого и указательного пальцев рук.

• Похлопывающий массаж

Рельефные массажные ролики осуществляют легкие удары, похожие на удары ладони. Такой вид массажа стимулирует естественные защитные силы организма.

• Шиаци массаж


Шиаци, или надавливание пальцев, это техника массажа заключается в легких надавливаниях на строго определенные активные точки.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ:

1. Кнопка включения/выключения кресла.
2. Экстренная остановка массажа. Нажмите эту кнопку, после чего все функции

перестанут работать.

3. Автоматическая кнопка для переключения между двумя автоматическими режимами.
4. Спинка кресла активизирует 2 вида массажа с каждым нажатием и выключает массаж с третьим нажатием кнопки. (Разминающий массаж \ Роликовый массаж \ выключение массажных функций)
5. Спинка кресла активизирует 2 вида массажа с каждым нажатием и выключит массаж с третьим нажатием кнопки. (Поколачивающий массаж \ Похлопывающий массаж \ выключение массажных функций)
6. Массажная функция Шиаци активизируется одновременным нажатием кнопок 4 и 5.
7. Можно выбрать определенную часть тела для выполнения массажа. (всё тело \ верхняя часть \ нижняя часть)
8. Когда выбрана ручная программа (кроме Шиаци) этой кнопкой можно регулировать интенсивность массажа (низкая \ средняя \ высокая скорости)
9. Давления воздуха: нажмите эту кнопку, чтобы выбрать уровень давления воздуха (слабый \ средний \ сильный режим)
10. Кнопка нагрева: нажмите эту кнопку, чтобы включить / выключить функцию отопления.
11. Кнопка фиксирования положения: при выборе ручной программы (кроме шиаци), длительное нажатие кнопок вверх / вниз, меняет соответствующее направление кресла для регулировки положения. Отпустите кнопку и кресло зафиксировано в выбранном положении.
12. Кнопка положения сидя: длительное нажмите кнопок вверх \ вниз, отрегулирует положение спинки назад \ вперед. Отпустите кнопку и кресло зафиксировано в выбранном положении.

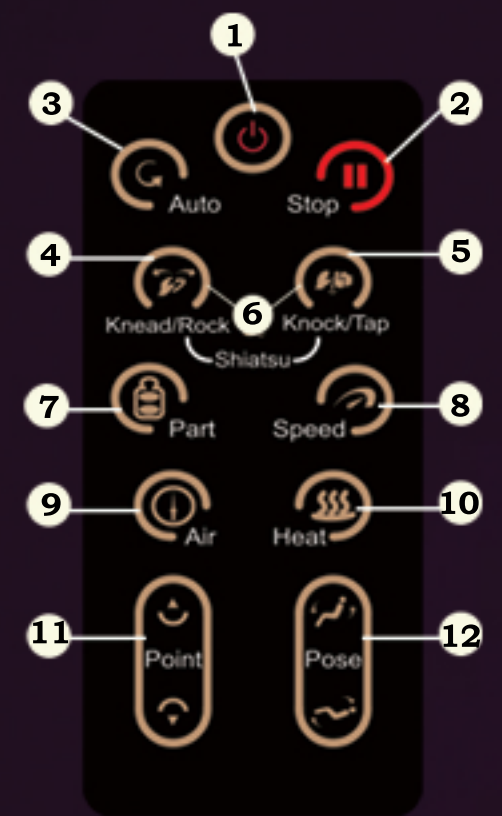

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____