

# JAY

## МЫШЕЧНЫЙ МАССАЖЕР JAY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГАРАНТИЯ

[jay.net.ua](http://jay.net.ua)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: массажер мышечный

Применение: фитнес и оздоровительный массаж

Дисплей: LED

Амплитуда колебаний: 12 мм/0,47 дюйма

20 режимов скорости

Скорость: 1200-3300 р/мин

Аккумулятор: 24 В, 2400 мАч

Время работы: до 6 ч

Время зарядки: 3,5 ч

Напряжение зарядки: 220 В

Размер: 24x24,5x51 см

Сменные насадки: 4 шт



- для позвоночника



- для суставов



- для больших групп мышц



- для всех частей тела

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРОЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

### ЗАРЯДКА

- Полностью зарядите аккумулятор в течение шести часов перед первым использованием.
- Чтобы зарядить массажер, подсоедините к зарядному порту батареи штекер зарядного устройства и подключите к розетке.
- Во время зарядки на корпусе массажера будет пульсировать светодиодный индикатор зелёного цвета.
- Полный заряд отображается, когда светодиодный индикатор перестанет мигать и будет статично гореть зелёный свет, а на дисплее будет отображаться максимальное значение заряда 09.
- Аккумулятор можно перезаряжать при любом уровне заряда.
- Не рекомендуется полностью разряжать батарею до красного светодиодного уровня.

### РАБОТА

- Включите устройство, переместив выключатель питания на нижней части аккумулятора в положение "ON". Выключите устройство, переместив выключатель питания в положение "OFF".
- Для запуска нажмите на кнопку пуска "⏻" на дисплее массажера, после чего устройство заработает на скорости 01 из максимальных 20. Чтобы увеличить скорость, нажимаете кнопку "+", чтобы уменьшить скорость - "-".
- Изменяйте насадки только при выключенном устройстве. Чтобы вставить насадку, поместите ее в соответствующее отверстие и силовым движением толкните ее до упора. Чтобы снять насадку, просто потяните ее на себя.
- Массируйте желаемую часть тела при комфортной скорости, прилагая давление по мере необходимости.
- Чтобы извлечь аккумулятор, зажмите большим пальцем кнопку разблокировки аккумулятора и потяните его на себя.

## ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ЗАГОРАНИЯ И ТРАВМИРОВАНИЯ, ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ:**

- Не мочить. Уберечь вентиляционные отверстия от пыли и мусора.
- Не вынимать винты.
- Между сеансами массажа делать перерывы по 30 мин.
- Отсоединять зарядное устройство от аккумулятора после зарядки или перед использованием.
- Только для взрослых. Перед использованием массажера проконсультируйтесь с врачом.
- Использовать только на сухой чистой поверхности тела (можно использовать поверхность одежды), слегка надавливая и перемещаясь по телу в течение примерно 60 секунд в каждой области.
- Используйте массажер только на мягких тканях тела. Не используйте его на голове или на любом твердом или костном участке тела.
- Используйте только те насадки, которые обеспечивают наилучший желаемый эффект.
- Синяки могут появиться независимо от настроек скорости или применяемого давления. Регулярно проверяйте обработанные участки тела и сразу же прекращайте массаж при первых признаках боли или дискомфорта.
- Не допускайте попадания волос, пальцев или других частей тела в зону траектории движения насадки.
- Для чистки устройства используйте слегка влажную или сухую мягкую ткань.
- Извлекайте аккумулятор при хранении или транспортировке массажера.

## ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ


### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не помещайте никакие предметы в вентиляционные отверстия массажера.
- Не погружайте массажер в воду и не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.
- Не роняйте массажер.
- Для зарядки массажера используйте только зарядное устройство, которое идет в комплекте.
- Внимательно осматривайте устройство и аккумулятор перед каждым использованием.
- Ни в коем случае не вскрывайте массажер.
- Никогда не оставляйте включенный массажер без присмотра.

### **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖЕР ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ПРИБОР БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ С ВАШИМ ВРАЧОМ В СЛУЧАЯХ:**

- Беременности, диабета с осложнениями, такими как невропатия или повреждение сетчатки, ношение кардиостимуляторов, недавние операции, эпилепсия или мигрени, грыжи дисков, спондилолистез, спондилолиз или спондилёз, недавние замены суставов или внутриматочных спиралей, металлические пластинки или булавки, а также любые опасения, связанные с вашим физическим здоровьем. Больных пациентов и детей при использовании любого вибрационного устройства должен сопровождать взрослый. Эти противопоказания не означают, что вы не можете использовать вибрационные или тренировочные устройства, но мы советуем вам сначала проконсультироваться с врачом.

## ЧАСТИ МАССАЖЕРА

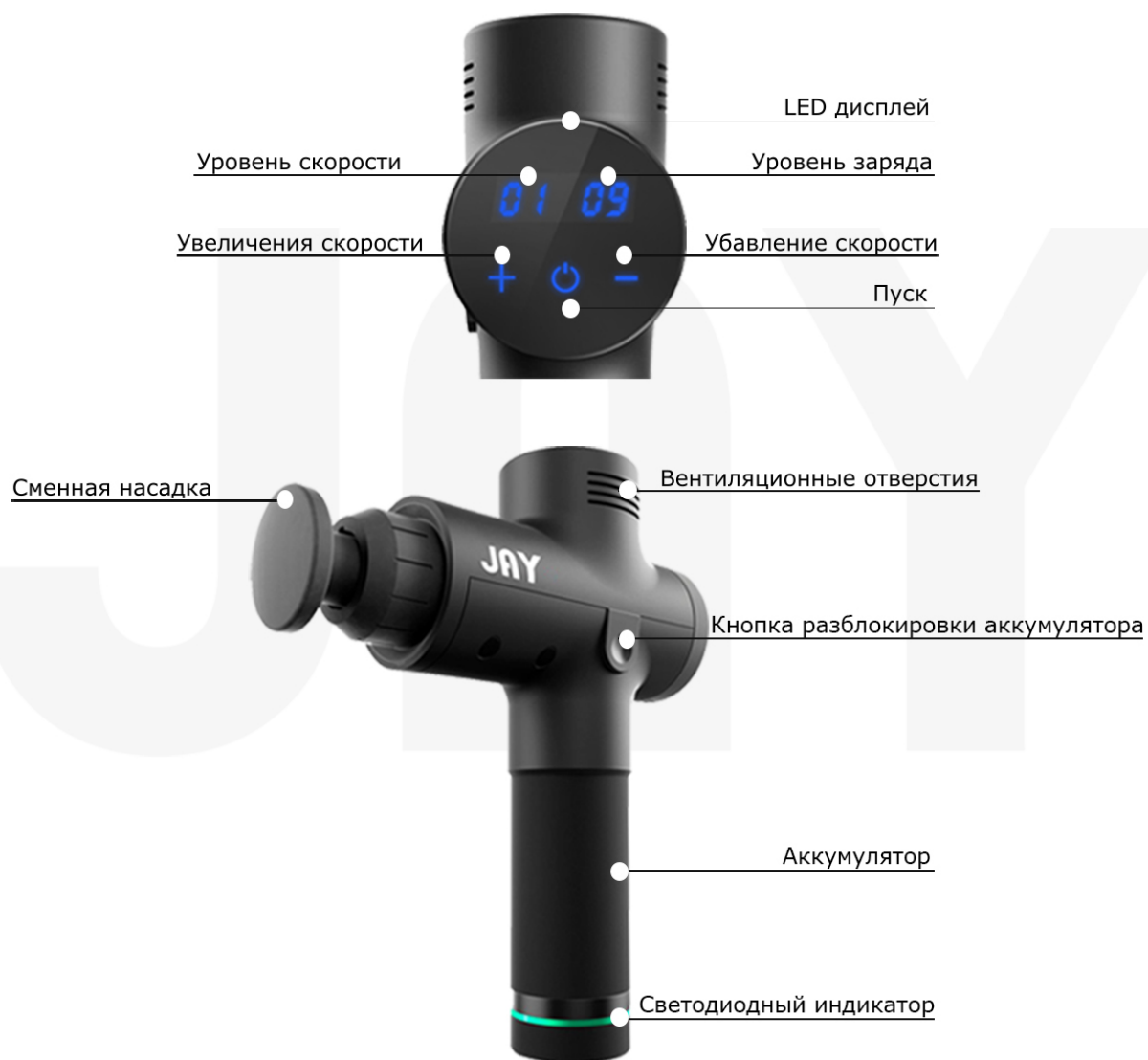

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 6 месяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного периода продавец обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина или подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи.

Если в результате проверки изделия продавцом будет установлено, что гарантийный срок уже истек, расходы по проверке и ремонту оплачивает покупатель.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Вид техники  | Модель                |
| Дата продажи   | Серийный номер        |
| Фирма-продавец   |                       |
| Подпись продавца   | Печать фирмы-продавца |
| Изделие надлежащего качества,<br>укомплектовано, технически<br>исправно, претензий не имею.<br>С условиями гарантии ознакомлен | Подпись покупателя    |



# JAY

Веб-сайт: <https://jay.net.ua>  
Эл. почта: [infomassagerjay@gmail.com](mailto:infomassagerjay@gmail.com)