



Складання  
виробу

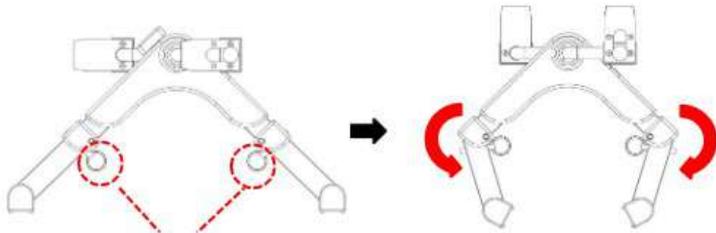


Примітка

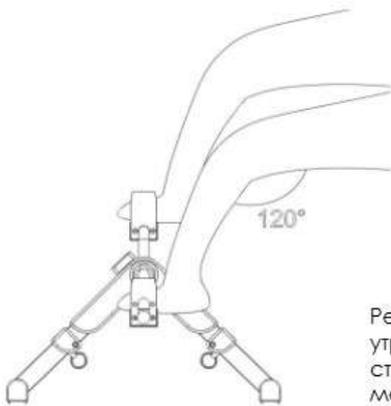

Рекомендується  
утримувати кут між  
стегном і голілкою  
меншим за 120°. Будь  
ласка, сідайте на стілець  
відповідної висоти під час  
використання пристрою

## ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ


Велотренажер для реабілітації  
нижньої і верхньої частини тіла  
Atleto ES-8110

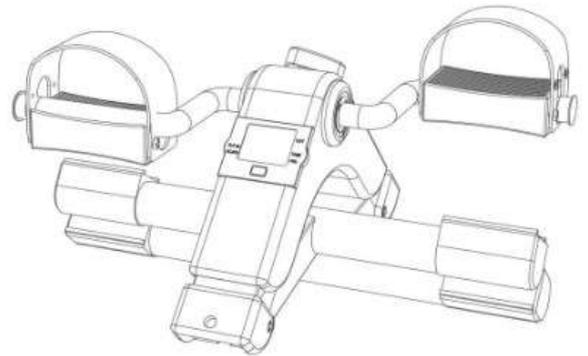


# ATLETO

## Правила безпеки

1. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем, щоб переконатися, що ваш фізичний стан дозволяє користування тренажером.
2. Перед збиранням уважно прочитайте цю інструкцію. Дотримуйтесь усіх попереджень та правил експлуатації. Зберігайте інструкцію для подальшого користування.
3. Діти не повинні користуватись цим пристроєм без належного нагляду дорослих.
4. Будьте обережні, щоб уникнути ризику защемлення.
5. Власник несе відповідальність за те, щоб користувач був добре поінформований про правильне використання цього виробу.
6. Цей продукт призначений виключно для використання в приміщенні.
7. Тримайте пристрій подалі від джерел тепла та вологого середовища.
8. Під час використання розміщуйте тренажер на рівній, стійкій та твердій підлозі. Переконайтеся, що навколо достатньо вільного простору для тренування.
9. Наполегливо рекомендується розмістити під пристроєм килимок, щоб захистити підлогу.
10. Не носіть вільний одяг або прикраси під час використання тренажера, оскільки вони можуть зачепитися за рухомі частини.
11. Якщо ви відчули біль, запаморочення або дискомфорт — негайно припиніть використання.
12. Показники витрачених калорій, що відображаються на цьому пристрої, є лише приблизними оцінками і не мають медичної точності.
13. При виявленні пошкоджень або дефектів негайно припиніть використання пристрою.
14. Переконайтеся, що педалі надійно закріплені.
15. Не стійте на мінібайку.
16. Цей продукт призначений лише для реабілітаційних тренувань і не повинен використовуватись для інтенсивних фізичних вправ.

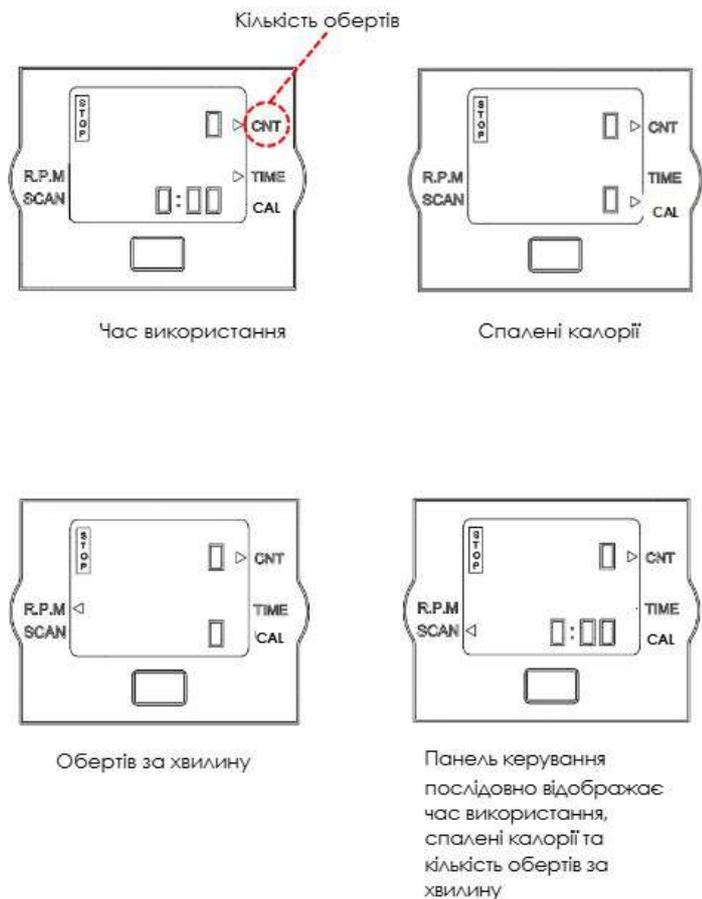


## Операційна панель

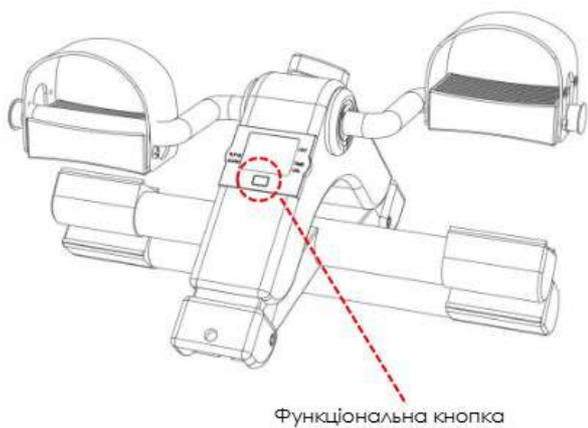

Під час використання пристрою натискайте функціональну кнопку послідовно. Панель керування відобразить різну інформацію.

## Комплектація

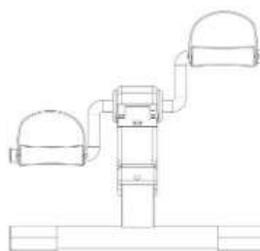

Мінібайк x 1




Ручка x 1

## Технічні характеристики

Загальні розміри (L x W x H)


14 9/16" x 19 5/16" x 11"  
(37 x 49 x 28 cm)

## Інструкція зі збирання

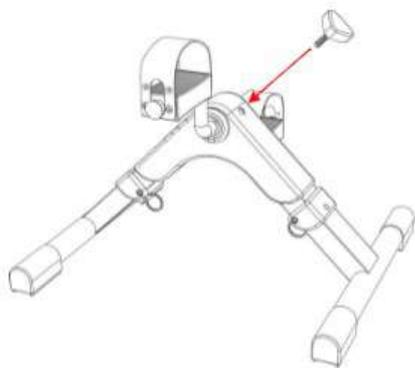


Встановіть ручку на корпус мінібайка, як показано вище.

## Регулювання тугості

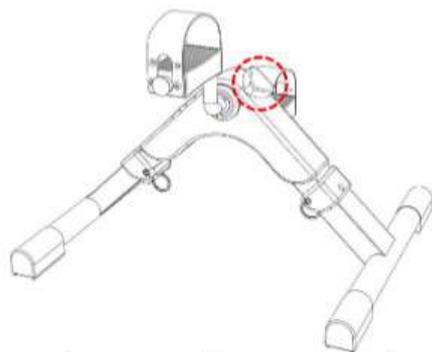


Послабте або затягніть ручку, щоб відрегулювати тугість педалювання

## Заміна батарейки

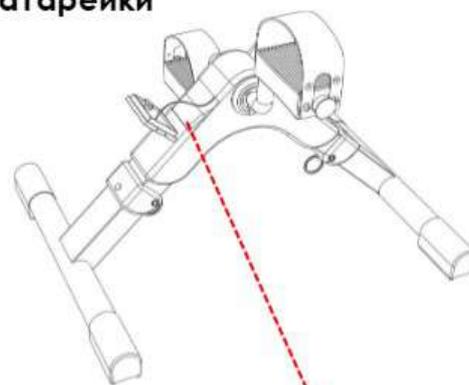

Батарейка

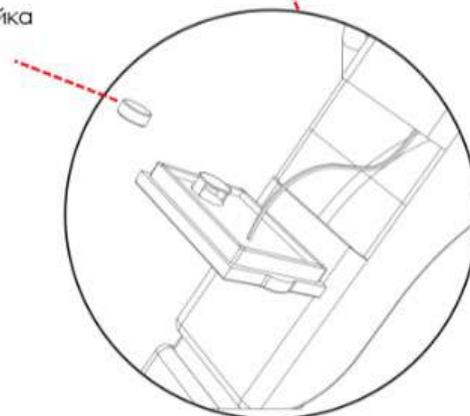

Вийміть панель керування, щоб замінити батарейку.  
**(Примітка: не витягуйте панель керування занадто далеко від корпусу мінібайка, оскільки це може пошкодити дрiт.)**