

JOVS

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОДУКТУ

JOVS LED маска для шиї та декольте



ЗМІСТ

01

Представлення
продукту

02

Основні
Переваги

03

Спосіб
використання

04

Питання
&Відповіді

05

Порівняння
конкурентів

01

Представлення продукту

【Інформація про параметри】

- Назва продукту: JOVS LED маска для шиї та декольте
- Модель продукту: JLN1
- Розміри продукту: 340*236*5.5mm
- Вага продукту: 350g (включаючи контролер)
- Матеріал виробу: Харчовий силікон
- Кількість світлодіодних ламп: 66
- Налаштування продукту: Високий/Низький
- Час використання: 10 хвилин/15 хвилин/20 хвилин



【Вміст】

- Пакувальна коробка*1
- Маска для шиї та декольте*1
- Контролер*1
- Зарядний кабель ТРС*1
- Фіксовані ремінці*2
- Гарантійний талон*1

Інформація про параметри та аксесуари

Назва Розміри	Модель вихідна потужність
------------------	------------------------------



Пакувальна
коробка



Маска для шиї та
грудей




Контролер



Кабель Type-C



Фіксуєчі
ремени

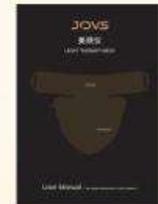

Гарантійний
талон

*Комплектація головного пристрою може відрізнятися залежно від версії.

*Переважну силу матиме фактична отримана упаковка.


【Технічний принцип】 Високочисте червоне світло 660 nm, що використовується в клініці

- **Вплив червоного світла 660 nm**

“Червоне світло не має фототермічного чи будь-якого іншого негативного впливу на морфологію тканини шкіри людини.

Воно мінімізує пошкодження, спричинені ультрафіолетовими променями, підвищує метаболічний рівень фібробластів, сприяє синтезу та ремоделюванню колагену, роблячи шкіру молодшою, пружнішою та наповненою .

Дослідження під назвою «УЛЬТРАСТРУКТУРНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ШКІРИ ЛЮДИНИ ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ ВИДИМИМИ ЧЕРВОНИМИ СВІТЛОДІОДАМИ (LED): ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ IN VIVO» було опубліковано в авторитетному академічному журналі «Laser Therapy».

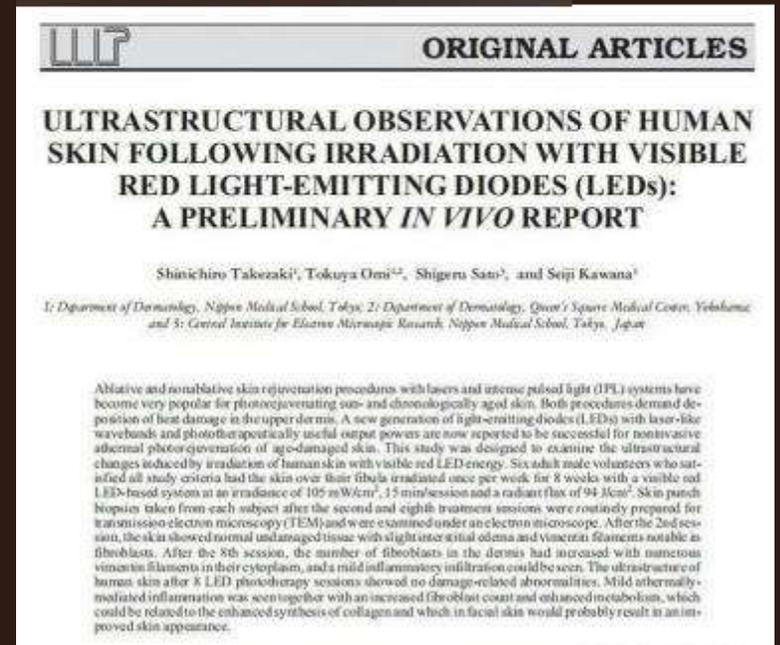

02

Переваги

【Один пристрій для догляду за шиєю, декольте та спиною】

- Одна ціна
- Три "плюси"
- Догляд не тільки за шиєю
- Багатозональне опромінення
- Багатовимірний догляд за шкірою



Антивікове колагенове світло Отримайте красиву шию

1 Освітлює

99.3% чистота опромінення
Світліший тон шкіри

2 Розгладжує

Втручання в пошкодження
ультрафіолетом. Шкіра на
ший гладка, мов шовк

3 Зміцнення

360-градусний гарячий SPA комплекс
Шия не дрябла, обличчя більш
підтягнуте

4 Зменшення зморшок

Активация колагену за низької температури
Автоматичне зменшення зморшок на ший

Відновіть опромінену шкіру
зосередьтеся на догляді за грудьми та шиєю після впливу сонця

Втручання у пошкоджену УФ шкіру.
Запобігання фотостарінню шкіри



З настання літа стає
неймовірно спекотно

Захистіть декольте та спину
від обгорання



03

Спосіб використання



КРОК 1

Очистіть та висушіть шию.
Підключіть основний пристрій до контролера та відрегулюйте ремінці.



КРОК 2

Затисніть кнопку живлення протягом 1,55 секунд.
За замовчуванням встановлено налаштування 1, для перемикавання натисніть кнопку налаштування




КРОК 1

Натисніть кнопку часу, щоб налаштувати тривалість процедури.
За замовчуванням – 10 хвилин після увімкнення



КРОК 2

Автоматичне вимкнення після опромінення.
Рекомендовано 3-5 разів на тиждень

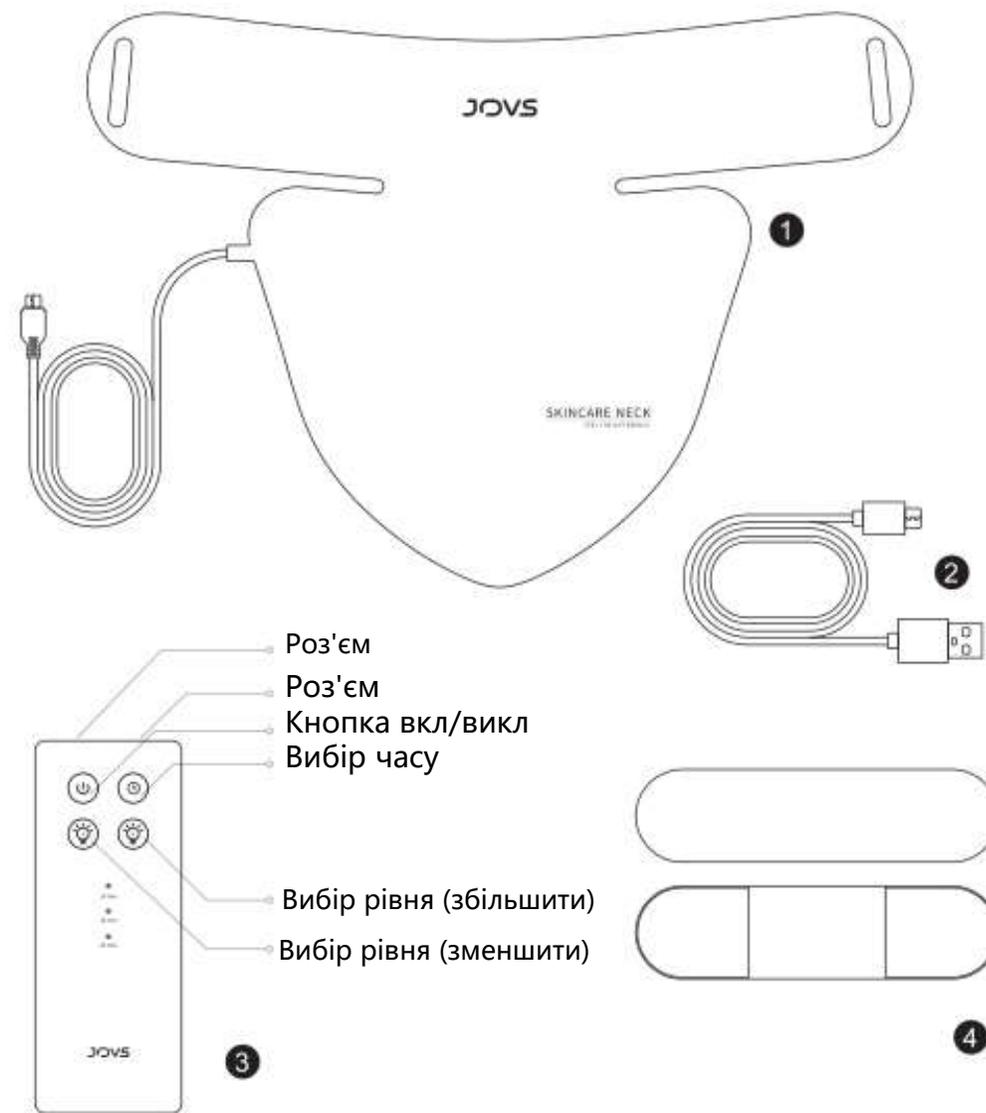

1 JOVS LED маска для шиї та грудей

2 Type-C кабель

3 Контролер

4 Ремінь для фіксації

Примітка: аксесуари залежать від фактично отриманих товарів.

04

Питання&Відповіді

Питання	Відповідь
Чи потрібно його повністю заряджати перед першим використанням?	Рекомендується повністю зарядити пристрій перед першим використанням, використовуючи адаптер живлення 5 В
Чи можна його використовувати під час заряджання?	Ні
Зарядка та час дії батареї	Повна зарядка займає близько 6 годин, можна використовувати безперервно близько 100 хвилин
Стан індикатора під час заряджання?	Три білі індикатори блимають під час заряджання; три білі індикатори постійно світяться, коли пристрій повністю заряджений.
Частота використання?	Можна використовувати щодня (рекомендовано 3-5 разів на тиждень), зважаючи на потреби шкіри, щоденний сукупний час не повинен перевищувати 30 хвилин.
Чи можна це здати в багаж?	Містить батарею, не можна перевозити в зареєстрованому багажу.
Чи є продукт водонепроникним?	Основний блок водонепроникний, його можна протирати нетканою або пілонепроникною тканиною, але не можна безпосередньо промивати водою.
Чи можна його носити разом з маскою для обличчя?	Рекомендується не носити пристрій для шиї під час використання маски для обличчя (впливає на проникнення світла), рекомендується використовувати пристрій перед накладанням маски.
Основні ефекти	Використовує червоне світло 660 nm для стимуляції активності клітин, вивільнення енергії АТФ, сприяння регенерації колагену, прискорення відновлення шкіри та омолодження, освітлення, підтягнення та зменшення зморшок

Питання	Відповідь
Застереження перед використанням?	<ol style="list-style-type: none">1. Шкіра має бути чистою і сухою2. Якщо ви носите прикраси на шиї, рекомендується їх зняти (щоб не пошкодити прикраси під час використання)
Протипоказання	<ol style="list-style-type: none">1. Дітям, вагітним та жінкам, що годують грудьми, не можна користуватися2. Людям із фоточутливою шкірою, шкірними захворюваннями чи іншими захворюваннями слід проконсультуватися з лікарем перед використанням.

04

Порівняння з конкурентами

			
Назва продукту	JOVS LED маска для шиї та декольте	Маска для шиї Yaman Green Light	CurrentBody Skin LED маска для шиї та декольте
Довжина хвилі	Червоне світло (660nm)	Зелене світло (505nm) Червоне світло 630nm)	Червоне (633nm) Ближнє інфрачервоне світло (830nm)
LED лампи	66	76	50
Енергія	67,26 mW/cm² (більша енергія для більш значних ефектів)	55-60mW/m ²	30mW/m ²
Вага	350 г (включно з контролером)	337 г (включно з контролером)	266 г (включно з контролером)
Зона опромінення	Шия, декольте, спина	Шия	Шия, декольте, спина
Матеріал	JOVS (Харчовий силікон) > CURRENTBODY (Медичний силікон) > Yaman (Медичний силікон+смола)		
Зменшення зморшок	JOVS > Yaman > CURRENTBODY		

Чому варто обрати JOVS LED Маску для шиї та декольте?

JOVS LED Маска для шиї та декольте VS Звичайний пристрій для шиї

1. Площа опромінення: більша (шия, декольте, спина)
2. Джерело світла: високочисте червоне світло, що використовується в професійних умовах
3. Контакт зі шкірою: покриття на 360° харчовим силіконом
4. Комфорт: Фіксована підтримка шиї

JOVS LED маска для шиї та декольте

Звичайний пристрій для шиї



VS



Більше зон опромінення
Один пристрій для шиї, декольте та спини

Опромінення шкіри

Тільки шия

Високочисте світлодіодне світло
Світліша, пружніша шкіра та менше зморшок на шиї

Джерело світла

Неякісне джерело світла

360-градусний обхват, безпечна для шкіри та гарно прилягає
Сертифікований харчовий силікон

Відчуття контакту зі шкірою

Неточність через витік світла

Фіксована підтримка шиї
Запобігає дискомфорту при нахилі

Рівень комфорту

Немає підтримки
Нахиляється вперед

Не лише для шиї

А також робить гарною зону декольте та спину

Діє на лінії шиї та забезпечує відновлення після засмаги



“Світлодіодна маска для шиї та декольте JOVS, порівняно з іншими косметичними пристроями для шиї на ринку, має більшу площу опромінення світловою хвилею, являє собою один пристрій для догляду за шиєю, декольте та спиною. Вона використовує високочисте червоне світло 660 nm, яке використовується в професійних умовах, забезпечуючи омолодження шкіри, освітлення, підтягування та зменшення зморшок за один крок. Харчовий силіконовий матеріал більш безпечний для шкіри та зручний у використанні.