

# Розумний пістолет Lenovo N3

Виробник: Fuan Heyi Health Technology Co., Ltd Зроблено в Китаї

Адреса: 318 Century Avenue, провінція Фуцзянь

Примітка: Зображення наведено лише для ознайомлення, а продукти є фізичними.

«Lenovo», «Lenovo» та логотип є торговими марками групи компаній Lenovo та інших компаній, продуктів або послуг, на які посилаються.

Назви можуть бути торговими марками інших відповідних власників.

2023 Lenovo group of companies усі права захищено.

Інформація про безпеку

Перед використанням цього продукту прочитайте наступні інструкції з безпеки та дотримуйтесь усіх стандартних запобіжних заходів.

Будь-яка операція, що не відповідає цій специфікації, може призвести до пошкодження цього виробу.

Зверніть увагу на

Щоб уникнути опіків, ошпарювання, ураження електричним струмом та інших небезпечних ситуацій через неправильне використання, зверніть увагу на наступне під час використання виробу:

1. Після використання та перед використанням виробу спочатку очистіть штекер живлення від розеток.

2. Якщо виріб упаде у воду, не занурюйте руку у воду, щоб дістати його, спочатку вийміть вилку живлення з розетки.

3. Не використовуйте цей продукт під час прийняття ванни або душу.

4. Не розміщуйте та не зберігайте виріб там, де це може призвести до його затоплення водою.

5. Не кладіть та не занурюйте виріб у воду чи інші рідини.

6. Не використовуйте гострі предмети для цього виробу.

7. Будь ласка, тримайте виріб сухим та не використовуйте його у вологому середовищі.

8. Коли ніхто не дивиться, від'єднайте виріб від розетки.

9. Не дозволяйте дітям гратися з цим виробом.

10, шнур живлення або вилка пошкоджені, не працюють належним чином, впали у воду, не використовуйте цей виріб.

11. Шнур живлення слід тримати на безпечній відстані від нагрівальної поверхні.

Не розміщуйте виріб поблизу джерел вогню та легкозаймистих місць, щоб уникнути нещасливих випадків або небезпеки.

12. Цей продукт має освіжаючий ефект, не використовуйте його продукт під час сну.

13. Не вставляйте та не кидайте жодних предметів у будь-які отвори виробу.

14. Не використовуйте розпилювач у місці, наповненому легкозаймистим газом.

15. Не кладіть виріб під подушку або валик, щоб уникнути перегріву, займання, короткого замикання або пошкодження виробу.

16. Не тягніть за шнур живлення, щоб перемістити виріб, і не використовуйте шнур живлення як ручку.


17. Цей продукт не призначений для медичного використання.

18. Не допускайте сильного впливу цього продукту.

19. Не використовуйте запасні частини, що не надаються виробником.

Завжди використовуйте цей продукт для цілей, описаних у посібнику користувача.

20. Прилад має поверхневий нагрів, людям, чутливим до тепла, слід звернути увагу на використання.

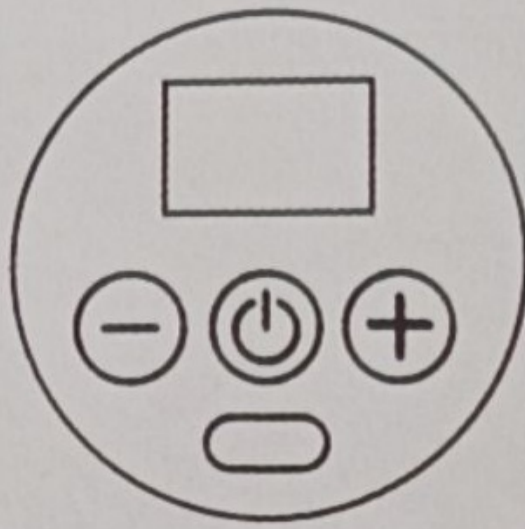

## Варна

Тим, хто проходить лікування або має патологічні стани чи наступні стани, необхідно проконсультуватися з лікарем перед використанням: пацієнтам із серцевими захворюваннями, пацієнтам зі злоякісними пухлинами, вагітним жінкам та пацієнтам, людям з деформацією хребта або патологічними захворюваннями, людям, які проходили лікування у пацієнтів, остеопорозу, пацієнтам з імплантацією кардіологічного стрілового пристрою, використання суворо заборонено.

## Інструкції:

Короткий режим очікування:

1. Натисніть , щоб відобразити рівень потужності, коли пристрій вимкнено.
2. Тривале натискання для увімкнення/вимкнення.

+ Кнопка: Натисніть, щоб збільшити інтенсивність масажу

-Кнопка: Натисніть, щоб зменшити інтенсивність масажу

Порт заряджання: підключіть зарядний кабель, світлодіодний екран покаже лінію зарядки.

Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Дітям заборонено гратися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

Пристрій можна використовувати лише з блоком живлення, що постачається в комплекті.

Пристрій може живитися лише безпечною напругою, яка відповідає позначенню на ньому.