

Електрична зубна нитка Мi 2

Інструкція із застосування



▲ Попередження







- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з фізичними, сенсорними або розумовими вадами, або тими, хто не має досвіду та знань щодо використання приладу, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції від особи, відповідальної за їхню безпеку, щодо використання приладу.
- За дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися з цим обладнанням.
- Цей пристрій містить незмінний акумулятор.
- Виріб можна заряджати лише за допомогою безпечного джерела постійного струму наднизького струму з вихідною напругою 5 В та силою струму 1 А.
- Не використовуйте цей виріб, якщо ви не знайомі з процедурами експлуатації та інструкціями з техніки безпеки, оскільки неправильна експлуатація може призвести до травмування.
- Користувачам із захворюваннями пародонту або тим, хто переніс хірургічне втручання в ротовій порожнині протягом останніх шести місяців, слід використовувати цей продукт під керівництвом стоматолога.
- Не використовуйте цей виріб будь-яким способом, окрім описаного в цій інструкції з експлуатації.
- Не використовуйте цей продукт для будь-яких інших цілей, окрім гігієни порожнини рота.
- **Не натискайте насадку сильно на ясна або зуби, щоб уникнути пошкодження.**
- Цей виріб не призначений для використання як іграшка. Будь ласка, тримайте його в недоступному для дітей місці.
- Не розбирайте та не модифікуйте цей виріб, оскільки це може призвести до пожежі або травмування. Для ремонту зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
- Не пошкоджуйте, не модифікуйте, не згинайте, не тягніть і не скручуйте зарядний кабель із застосуванням **сили.**
- Не розміщуйте у місцях з високою температурою або вологістю, а також уникайте прямих сонячних променів.
- Цей виріб має вбудований акумулятор. Не кидайте його у вогонь, не нагрівайте, не заряджайте, не використовуйте та не розміщуйте в середовищі з високою температурою, інакше це може призвести до перегріву, пожежі або вибуху.
- Перед заряджанням переконайтеся, що зарядний порт та зарядний кабель сухі, інакше це може спричинити коротке замикання.
- Не кидайте та не вставляйте сторонні предмети в порт зарядки, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом або коротке замикання.
- Якщо цей виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, повністю зарядіть його перед зберіганням. Після цього його також слід повністю заряджати кожні 6 місяців.
- Дітям не слід дозволяти чистити, використовувати або обслуговувати виріб без нагляду.

▲ Увага

- Не використовуйте цей продукт без насадки.
- Не наповнюйте резервуар для води водою з температурою вище 40°C та не використовуйте її для очищення рота, щоб уникнути опіків.
- Якщо у вас є рани в роті або на язичі, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього засобу, щоб уникнути зайвої шкоди.
- Після використання обов'язково спорожніть резервуар для води та запустіть його на кілька секунд, щоб злити залишки води, аби запобігти розмноженню бактерій, появі неприємних запахів або несправностям.
- Під час заряджання обов'язково вставте резервуар для води назад у основний корпус.

▲ Порада

- Примітка: Ілюстрації продукту та аксесуарів у посібнику з експлуатації наведені лише для ілюстрації. Через оновлення та модернізацію продукту фактичний вигляд продукту може дещо відрізнятися від ілюстрацій. Будь ласка, зверніться до фактичного продукту.

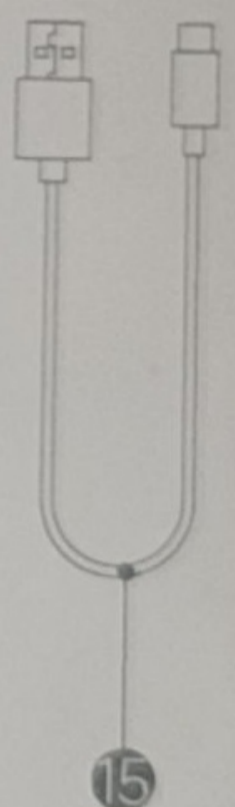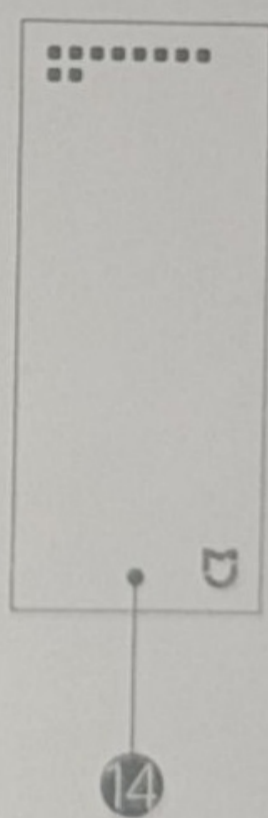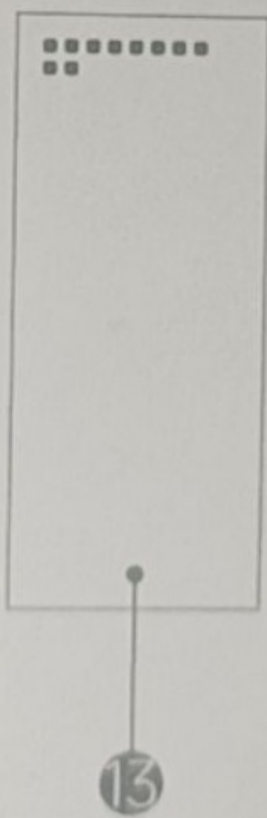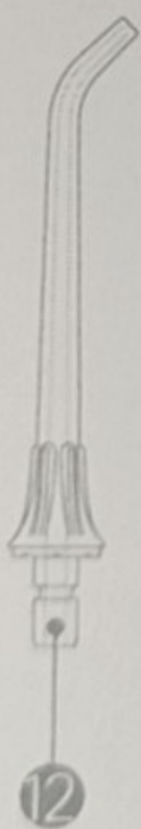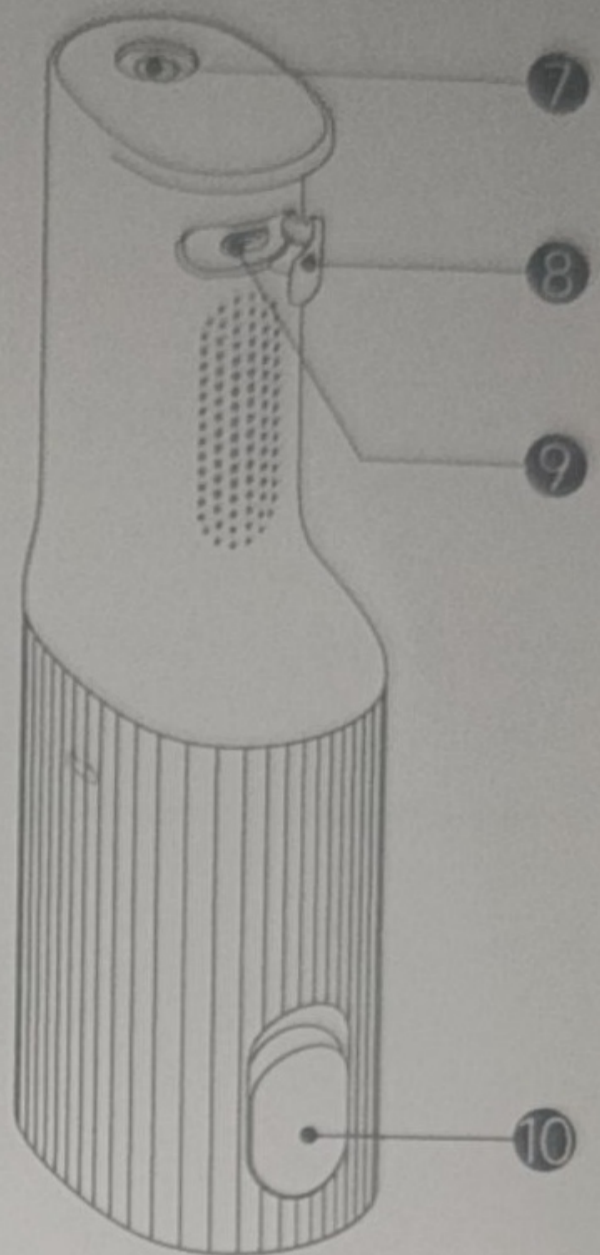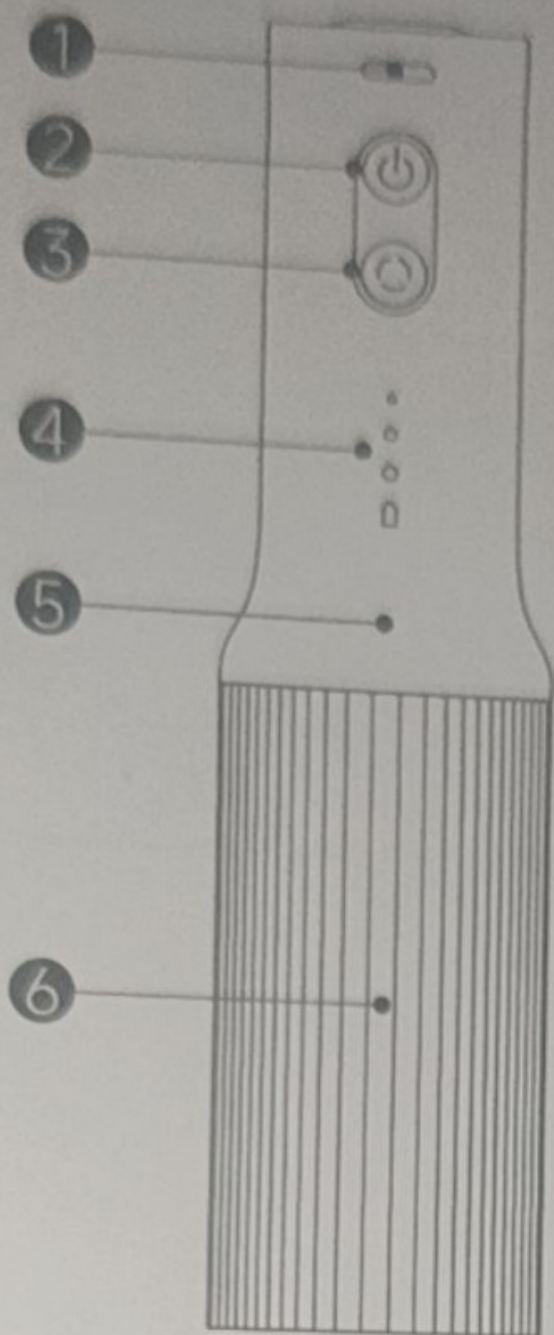

- ① Кнопка розблокування насадки
- ② кнопка живлення
- ③ Клавiша перемикання режимiв
- ④ світловий iндикатор
- М'який режим
- Стандартний режим
- Сильний режим
- потужнiсть

⑤ Корпус

⑥ резервуар для води

- ⑦ Отвiр для крiплення насадки
- ⑧ Гумова пробка зарядного порту
- ⑨ Порт зарядки
- ⑩ кришка бака для води
- ⑪ мiкропухирчаста насадка
- ⑫ Стандартна насадка
- ⑬ Короткий посiбник
- ⑭ посiбник
- ⑮ Кабель для зарядки Type-C

підказка:

- Усі вироби проходять випробування перед відправкою з заводу. Всередині може залишатися трохи води, що є нормальним явищем. Будь ласка, використовуйте з упевненістю.
- Під час першого використання цього продукту ваші ясна можуть свербіти або кровоточити. Це пояснюється тим, що ваші ясна ще не звикли до стимуляції водною інгалятором, і цей стан зазвичай зникає протягом 1-2 тижнів.
- Для тих, хто вперше користується водяною ниткою, рекомендується вибрати щадний режим з насадкою з мікробульбашками. Використовуйте її безперервно протягом одного тижня, щоб користувач міг звикнути, перш ніж вибирати інші режими та насадки. Якщо дискомфорт триває більше двох тижнів, припиніть використання цього виробу та зверніться до стоматолога.

Зарядити

- Будь ласка, зарядіть перед першим використанням.
- Зарядний кабель Type-C цього виробу є спеціальним аксесуаром для Mi Electric Oral Flosser 2. Повна зарядка займає приблизно 4 години, тому, будь ласка, тримайте його в хорошому стані.

підказка:


- Будь ласка, заряджайте за кімнатної температури від 0°C до 35°C. Зарядження неможливе, якщо температура занадто низька (нижче 0°C).

Опис індикатора батареї

Статус полоскання зубів	потужність	Індикатор стану батареї
робочий стан	40%-100%	Стійкий білий
	20%-40%	твердий помаранчевий
	10%-20%	помаранчевий спалах
	<10%	Миготливий помаранчевий індикатор (не вмикається)
стан зарядки	100%	Стійкий білий
	40%-100%	білий спалах
	<40%	блимає оранжевим

Наповніть бак водою

- Тримайте інгалятор горизонтально, відкрийте кришку резервуара для води та налейте відповідну кількість води, потім закрийте кришку.

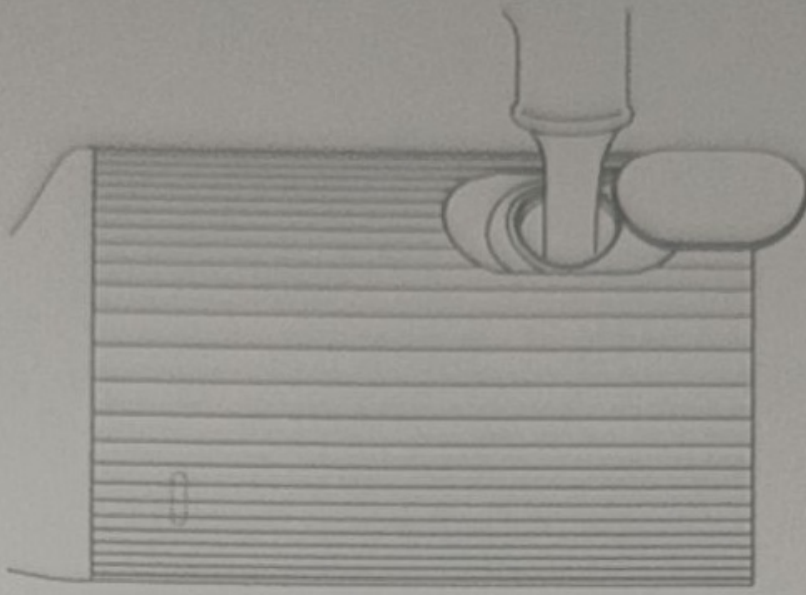

підказка:

- Рекомендується використовувати теплу воду або проточну воду з-під крана з температурою не вище 40°C.
- Не вводьте зубну пасту, сіль, тверді таблетки для полоскання рота, ополіскувач для рота, що містить ізопропілміристант, або інші хімічні речовини, які можуть засмітити або пошкодити інгалятор.

насадка

- Мікробульбашкова насадка: насадка генерує велику кількість бульбашок мікронного розміру. Під час розпилення бульбашки лопаються та видаляють залишки їжі з поверхні зубів та щілин, одночасно масажуючи ясна для комфортного чищення.
- Стандартна насадка: розпилює надзвичайно тонкий струмінь води, який може глибоко проникати в проміжки та щілини між зубами для очищення від залишків їжі, запобігання карієсу та утворенню зубного каменю, підходить для користувачів, які потребують щоденного або глибокого чищення.



мікробульбашкова насадка



Стандартна насадка

підказка:


- Якщо кінчик сопла деформується, негайно замініть його новим, інакше це може призвести до несправності виробу. Рекомендується замінювати сопло кожні 3-6 місяців.

Встановити/зняти насадку

- Вставте сопло вертикально в отвір для кріплення сопла. Клацання свідчить про правильне встановлення.
- Натисніть і утримуйте кнопку звільнення сопла, одночасно потягнувши сопло вгору, щоб зняти його.

підказка:

Не натискайте кнопку звільнення насадки під час використання, щоб уникнути її випадання та випадкового травмування.

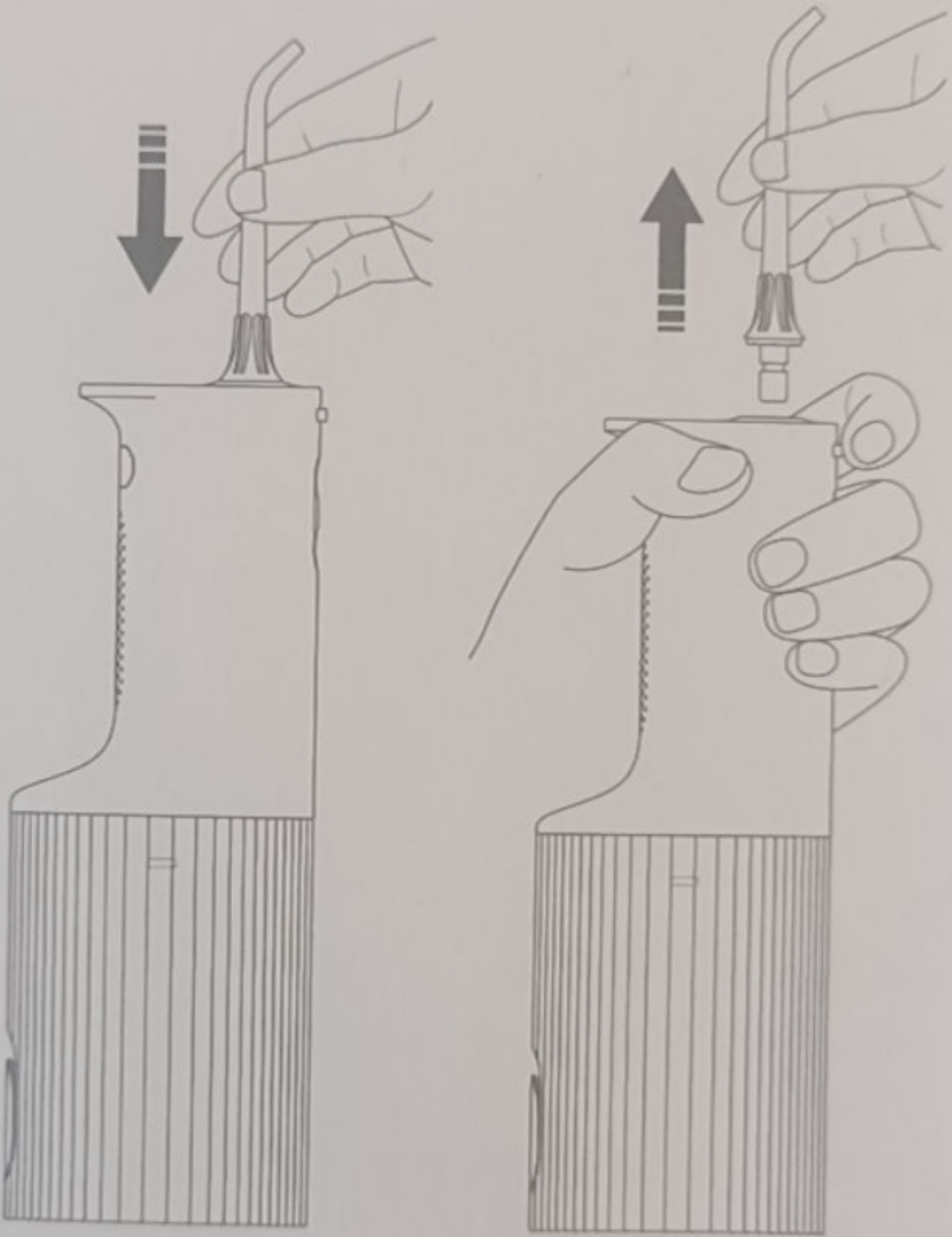

- Коротко натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.

підказка:


- Цей виріб має функцію 2-хвилинного таймера; він автоматично вимкнеться через 2 хвилини безперервного використання. Щоб продовжити його використовувати, просто знову коротко натисніть кнопку живлення.
- При повному заповненні водою стандартний режим забезпечує до 50 секунд безперервного очищення. Тривалість може змінюватися залежно від використовуваного режиму.

Режим перемикання

- Коротким натисканням кнопки перемикання режимів можна перемикатися між щадним, стандартним та потужним режимами. Після активації режиму на пристрої засвітиться відповідний індикатор.

підказка:

- Цей виріб має функцію запам'ятовування режимів; під час наступного увімкнення він за замовчуванням перейде до режиму, в якому він був під час останнього вимкнення.


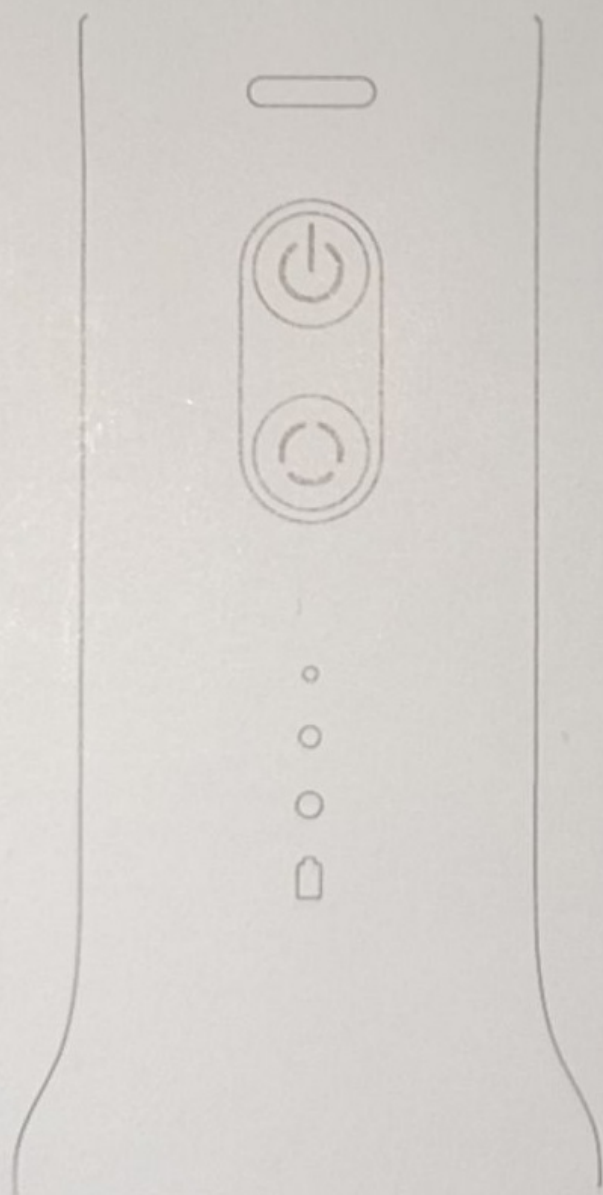


Щадний режим:

- Легкий тиск води для дбайливого очищення зубів;
- Стандартний режим:
Стандартний тиск води, ефективне очищення;
- Потужний режим:
Потужний тиск води для глибокого очищення.

щоденне прибирання

1. Після використання увімкніть машину та дайте їй попрацювати кілька секунд на холостому ході, щоб злити воду, що залишилася всередині.
2. Тримайте корпус машини однією рукою, а іншою потягніть резервуар для води вниз.
3. Промийте чистою водою або очистіть резервуар для води вологою ганчіркою чи щіткою.
4. Після очищення витріть корпус машини та резервуар для води насухо та поставте їх у прохолодне місце для висихання на повітрі.

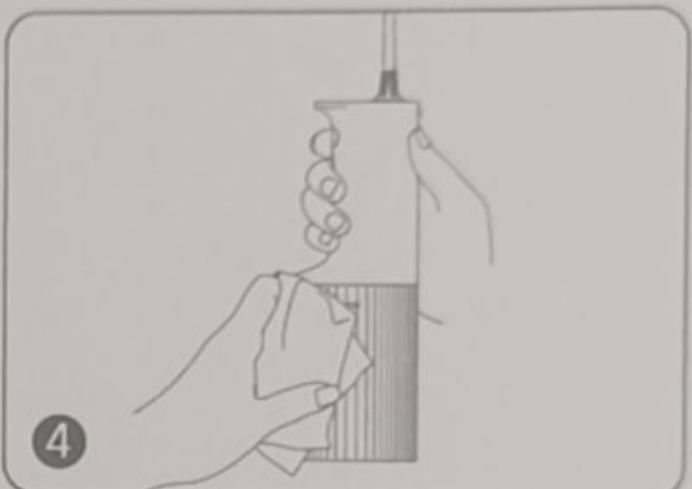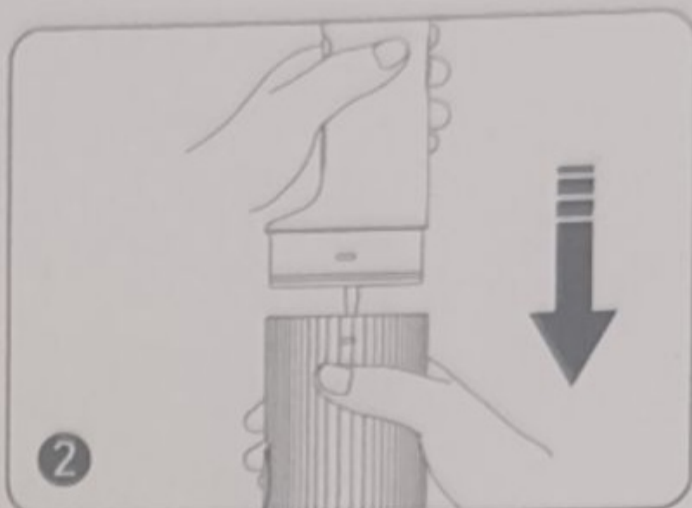

підказка:

- Температура води під час миття не повинна перевищувати 40°C.
- Не використовуйте агресивні рідини, розчинники, спирт або інші подібні речовини для очищення цього виробу.
- Корпус та резервуар для води можна протерти вологою ганчіркою або промити водою. Після очищення, будь ласка, висушіть їх.
- Якщо всередині резервуара для води є вапняний наліт, його можна очистити щіткою.
- Будь ласка, переконайтеся, що внутрішня частина резервуара для води та поверхня корпусу машини сухі, перш ніж знову встановлювати резервуар для води в корпус машини.
- Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, будь ласка, очистіть його та дайте висохнути перед зберіганням.

Регулярне обслуговування





- Наповніть резервуар для води теплою водою температурою не вище 40°C, потім додайте столову ложку білого оцту. Увімкніть пристрій і працюйте, доки резервуар для води не спорожніє. Після того, як резервуар для води спорожніє, продовжуйте працювати ще приблизно 1 хвилину, і водяний флоссер автоматично вимкнеться. Після цього наповніть резервуар для води теплою водою температурою не вище 40°C і знову увімкніть його, доки резервуар для води не спорожніє.

Примітка: Для забезпечення продуктивності виробу рекомендується проводити технічне обслуговування кожні 1-3 місяці.

Технічне обслуговування та догляд

щоденне прибирання

1. Після використання увімкніть машину та дайте їй попрацювати кілька секунд на холостому ході, щоб злити воду, що залишилася всередині.
2. Тримайте корпус машини однією рукою, а іншою потягніть резервуар для води вниз.
3. Промийте чистою водою або очистіть резервуар для води вологою ганчіркою чи щіткою.
4. Після очищення витріть корпус машини та резервуар для води насухо та поставте їх у прохолодне місце для висихання на повітрі.

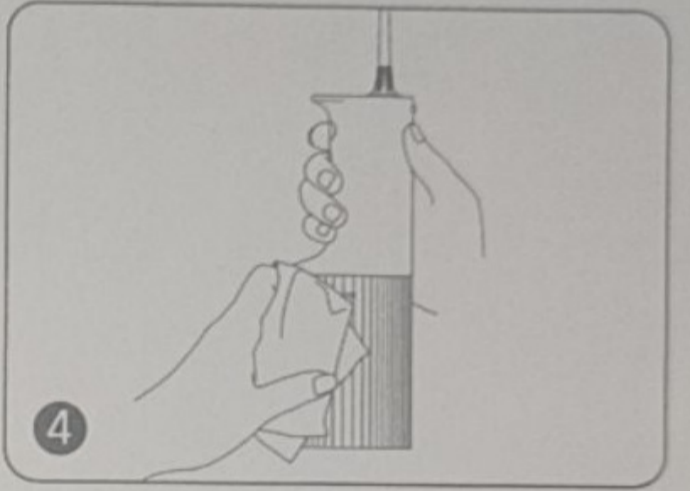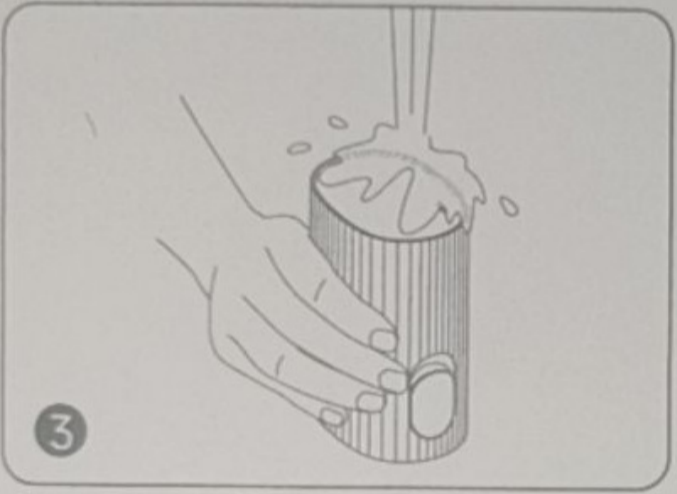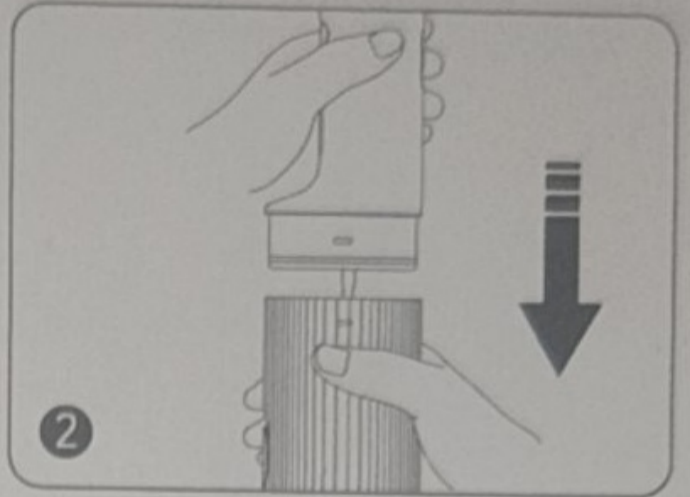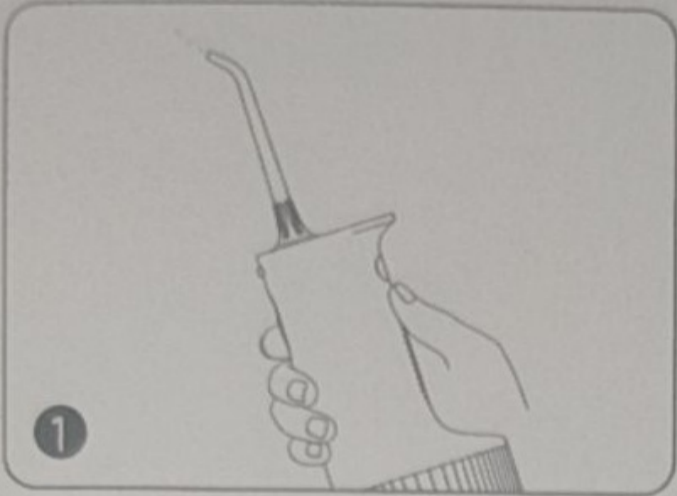

підказка:

- Температура води під час миття не повинна перевищувати 40°C.
- Не використовуйте агресивні рідини, розчинники, спирт або інші подібні речовини для очищення цього виробу.
- Корпус та резервуар для води можна протерти вологою ганчіркою або промити водою. Після очищення, будь ласка, висушіть їх.
- Якщо всередині резервуара для води є вапняний наліт, його можна очистити щіткою.
- Будь ласка, переконайтеся, що внутрішня частина резервуара для води та поверхня корпусу машини сухі, перш ніж знову встановлювати резервуар для води в корпус машини.
- Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, будь ласка, очистіть його та дайте висохнути перед зберіганням.

Регулярне обслуговування

- Наповніть резервуар для води теплою водою температурою не вище 40°C, потім додайте столову ложку білого оцту. Увімкніть пристрій і працюйте, доки резервуар для води не спорожніє. Після того, як резервуар для води спорожніє, продовжуйте працювати ще приблизно 1 хвилину, і водяний флоссер автоматично вимкнеться. Після цього наповніть резервуар для води теплою водою температурою не вище 40°C і знову увімкніть його, доки резервуар для води не спорожніє.

Примітка: Для забезпечення продуктивності виробу рекомендується проводити технічне обслуговування кожні 1-3 місяці.



Коли термін служби виробу закінчується, згідно із законами та нормативними актами країни чи регіону, внутрішній акумулятор необхідно вийняти та належним чином переробити перед утилізацією. Якщо акумулятор неможливо вийняти, рекомендується утилізувати його суворо відповідно до місцевих правил сортування та управління побутовими відходами.

▲ Попередження


- Не кидайте батарейку у вогонь, оскільки це може призвести до її вибуху або виділення токсичних чи шкідливих речовин.
- Не замикайте акумулятор, оскільки це може призвести до його займання.
- Не розбирайте цей виріб самостійно, якщо не маєте наміру його утилізувати, оскільки передчасне розбирання призведе до його пошкодження.
- Батарейки необхідно вийняти з приладів перед їх утилізацією.
- Під час виймання акумулятора пристрій має бути вимкнений.
- Батарейки слід утилізувати безпечно.

Зняття акумуляторної батареї


1. Зніміть резервуар для води, від'єднайте водопровідну трубу, підніміть три гвинтові заглушки внизу машини, відкрутіть три гвинти та зніміть нижню кришку машини.

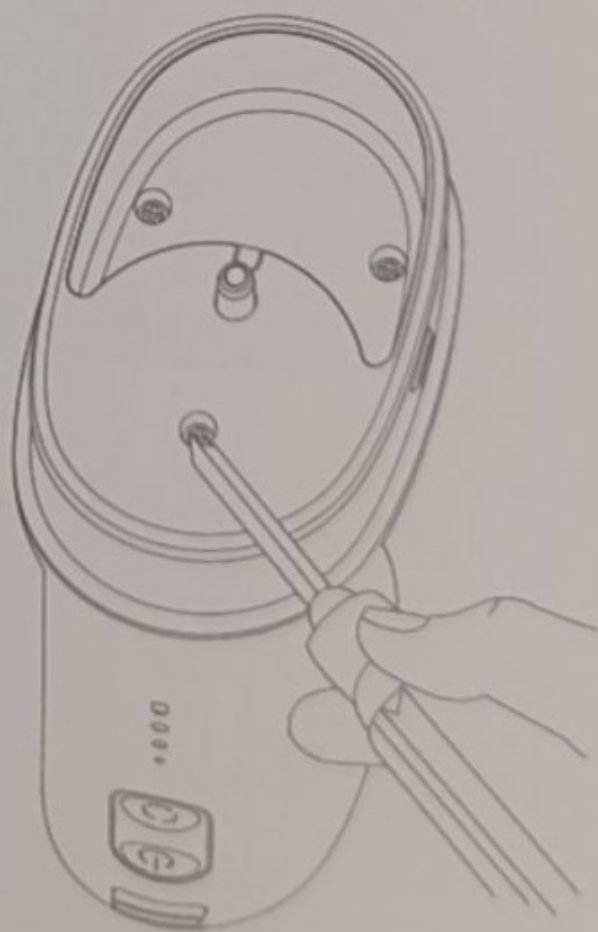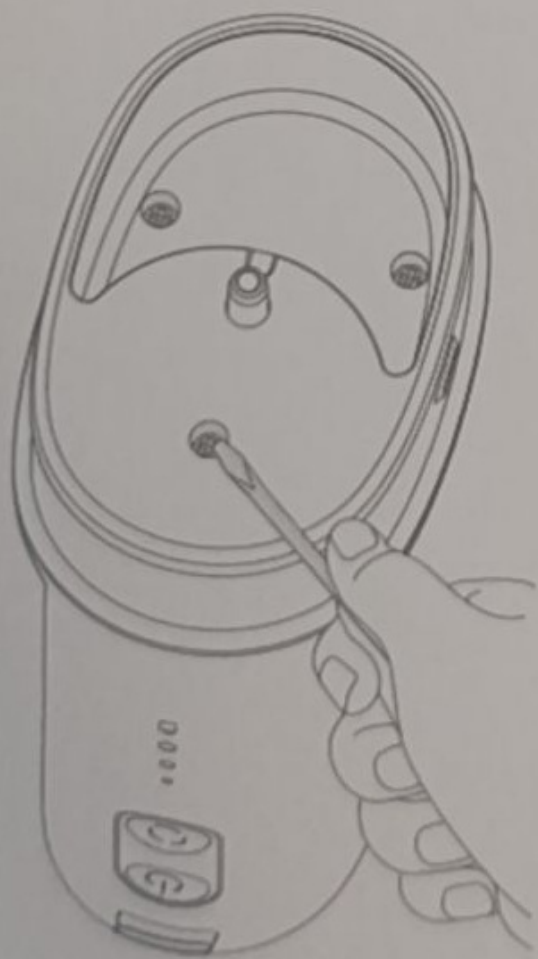


2. Після зняття нижньої кришки відкрутіть два гвинти на нижній частині корпусу машини та відкрийте верхню кришку.

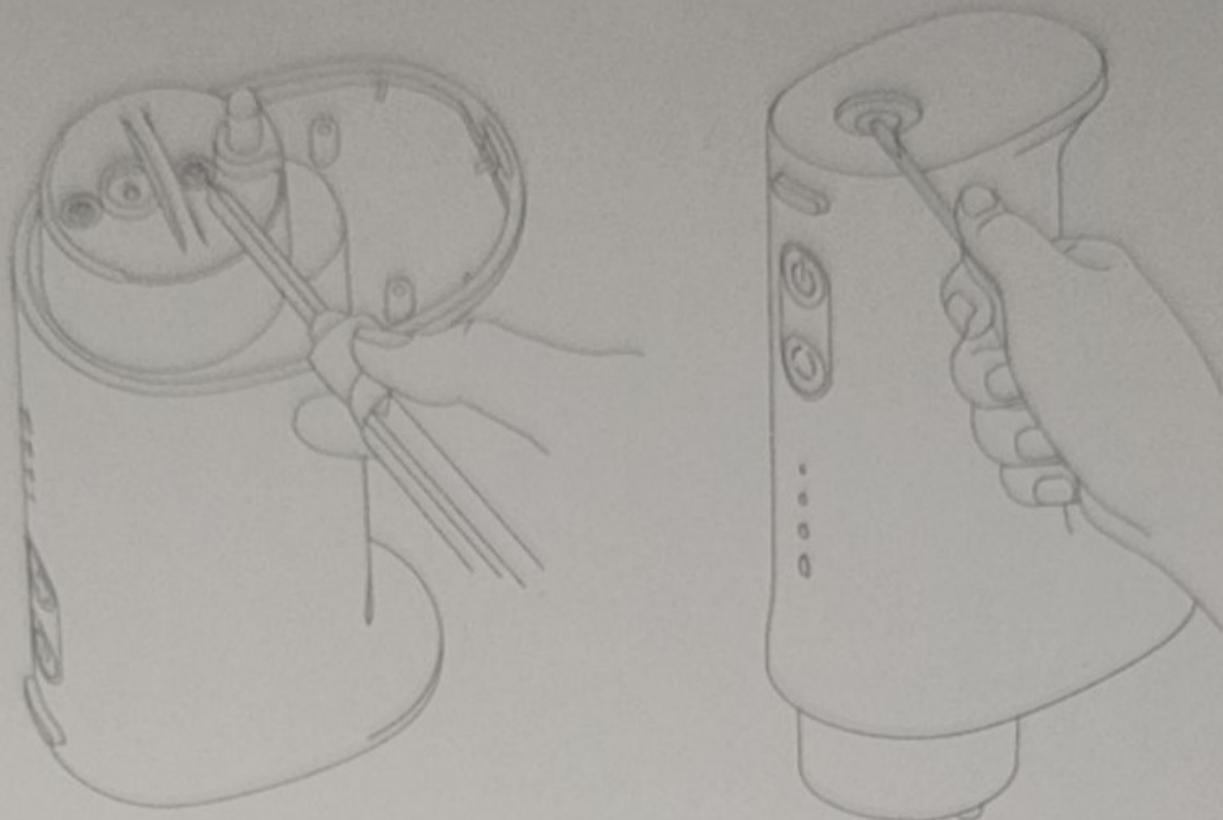

3. Відкрутіть три гвинти у верхній частині пристрою, зніміть кнопку фіксації сопла, витягніть штекер зарядного порту та вийміть механізм.

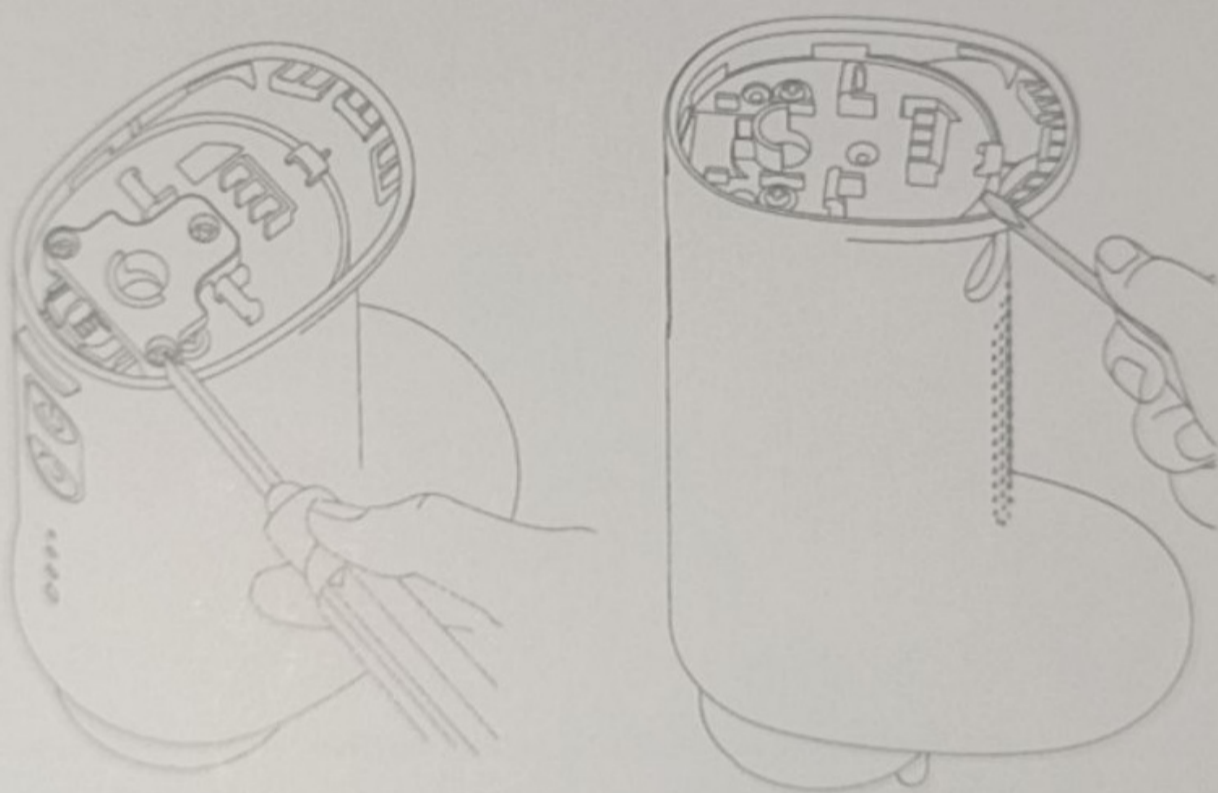

4. Відріжте три з'єднувальні дроти між акумулятором та материнською платою (відріжайте їх по одному) та вийміть акумулятор.

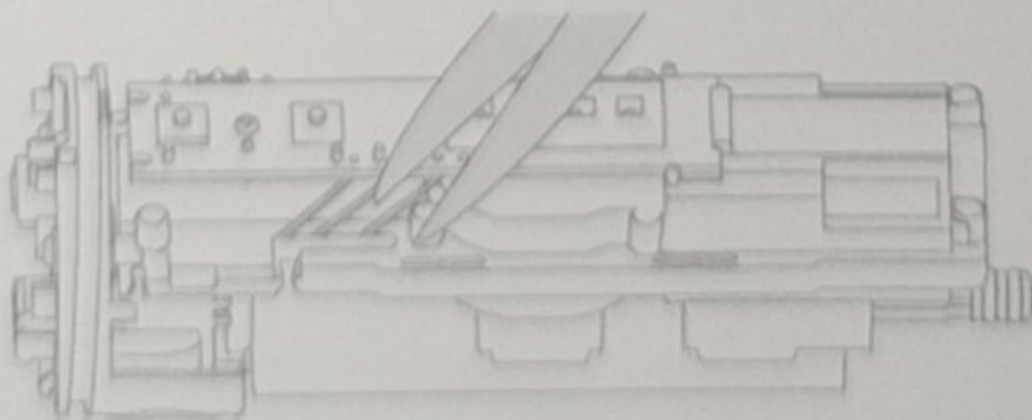

▲ Увага

- Будь ласка, будьте обережні під час виймання акумулятора, щоб уникнути короткого замикання позитивних та негативних клем.
- Після виймання акумулятора не вмикайте виріб знову.

усунення несправностей

Феномен несправності	Можливі причини	Рішення
Індикатор живлення не світиться під час заряджання.	Підключення живлення ненормальне	Будь ласка, правильно підключіть джерело живлення
Робочий час після заряджання занадто короткий.	Час заряджання занадто короткий	Зарядіть виріб
Не вдається завантажитися	Низький заряд батареї	Зарядіть виріб
	Форсунка забита	Замініть насадку
занадто низький тиск води	Сопло пошкоджено	Замініть насадку
	засмічена водопровідна труба	Очистіть дно водопровідної труби

Основні параметри

Назва продукту: Електрична зубна нитка

Модель продукту: МЕО705

Номинальна напруга/потужність: 3,7 В = 12 Вт

Зарядна напруга/струм: 5 В - 1 А

Рейтинг водонепроникності: IPX7

Час заряджання: приблизно 4 години

Стандарти впровадження: GB/T

4706.1-2024, GB/T 4706.59-2024,

GB 39669-2020

Перелік небезпечних речовин у продукті

Небезпечні речовини										
Назва частини	Свинець та (Pb)	ртуть (Hg)	镉 (Cd)	Шестивалентний хром [Cr(VI)]	Полібромовані біфеніли (ПБД)	Полібромовані дифенілові ефіри (ПБДЕ)	Дибутилфталат (ДВР)	Діізобутилфталат (ДІВР)	Бутилбензилфталат (ВВР)	Ди(2-етил)фталат (ДЕНР)
насадка	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Чарул стоматологічного іригатора	THE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
дружкована плата	X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Акумулятор	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Зарядний кабель Type-C 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
апендікс	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Примітка 1: 0: Це вказує на те, що вміст небезпечної речовини у всіх однорідних матеріалах цього компонента не перевищує вимог національного стандарту щодо обмеження вмісту небезпечних речовин в електричних та електронних виробках.

X: вказує на те, що вміст небезпечної речовини принаймні в одному однорідному матеріалі компонента перевищує вимоги національного стандарту щодо обмеження вмісту небезпечних речовин в електричних та електронних виробках.

Примітка 2: Компоненти, не перелічені вище, означають, що вміст небезпечних речовин у них не перевищує національних стандартів щодо обмеження вмісту небезпечних речовин в електричних та електронних виробках.



Післяпродажне обслуговування та підтримка

Післяпродажне обслуговування електричної зубної нитки Miija Oral Flosser 2 суворо дотримується «Закону Китайської Народної Республіки про захист прав споживачів» та «Закону Китайської Народної Республіки про якість продукції», запроваджуючи тристороннє гарантійне обслуговування. Деталі обслуговування наведено

нижче:

1. Гарантійна політика

- Якщо протягом 7 днів з моменту отримання цього продукту виявляться будь-які з несправностей, перелічених у «Таблиці несправностей електричної зубної нитки Mi Electric Oral Flosser 2», і ці несправності будуть підтвержені сервісним центром Xiaomi, ви можете скористатися безкоштовним поверненням або обміном товару.
- Якщо протягом 8-15 днів з дати отримання цього продукту виявиться будь-який із дефектів, перелічених у «Таблиці дефектів продуктивності Mi Electric Oral Flosser 2», і дефект буде підтверджено сервісним центром Xiaomi, ви можете скористатися безкоштовною заміною або ремонтом.
- Якщо протягом 12 місяців з дати підписання акта отримання вами виникнуть будь-які несправності цього виробу, перелічені в «Таблиці несправностей електричної зубної нитки Mi Electric Oral Flosser 2», і ці несправності будуть підтвержені сервісним центром Xiaomi, ви можете скористатися безкоштовним ремонтом.

II. Таблиця несправностей електричної зубної нитки Mi Oral Flosser 2

назва	Збої в продуктивності
Електрична зубна нитка Mi 2	1. Помилка ввімкнення/вимкнення живлення
	2. Ненормальний індикатор
	3. Ненормальний тиск води

3. Правила, що не поширюються на гарантію

- Несанкціонований ремонт, неправильне використання, зіткнення, недбалість, зловживання, потрапляння рідини, аварії, зміни, неправильне використання деталей, що не належать до виробу, або розрив чи пошкодження етикеток чи знаків захисту від підробок;
- **Гарантійний термін минув;**
- Збитки, спричинені форс-мажорними обставинами;
- Він не відповідає недолікам продуктивності, переліченим у «Таблиці недоліків продуктивності електричної зубної нитки Mi Oral Flosser 2»;
- Продукт та його аксесуари можуть мати збої в роботі, перелічені в «Таблиці збоїв у роботі Mi Electric Oral Flosser 2», через людський фактор.

4. Поради

- Оскільки пакувальні коробки необхідні для забезпечення безпеки продукту під час транспортування, ми рекомендуємо зберігати пакувальні коробки щонайменше 30 днів з дати отримання.
- Цей продукт продається лише в Китаї (за винятком Гонконгу, Макао та Тайваню). Тому післяпродажне обслуговування цього продукту надається лише в Китаї (за винятком Гонконгу, Макао та Тайваню). Ця гарантійна політика поширюється лише на Китай (за винятком Гонконгу, Макао та Тайваню).
- Через конструктивні обмеження, технічне обслуговування цього виробу полягає в заміні, а не в ремонті.



Відскануйте QR-код, щоб переглянути відео

Отримуйте зручніші послуги

Гаряча лінія сервісного обслуговування: 950816

Відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до електронної інструкції з експлуатації.

Гаряча лінія сервісного обслуговування: 950816

Вебсайт сервісу: www.mi.com/service

Клієнт: Xiaomi Communications Technology Co., Ltd.

Адреса клієнта: № 33, Середня дорога Сьєрці, район Хайдянь, Пекін

Кімната 019, 9-й поверх, корпус 6

Виробник: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.

Адреса виробника: кімнати 1101, 1102, 1103 і 1104, будівля 2, парк Чунвен,


Наньшань Чжиюань, № 3370 проспект Люсянь, громада Фугуан, вулиця

Таоюань, район Наньшань, Шеньчжень




папір

Короткий посібник

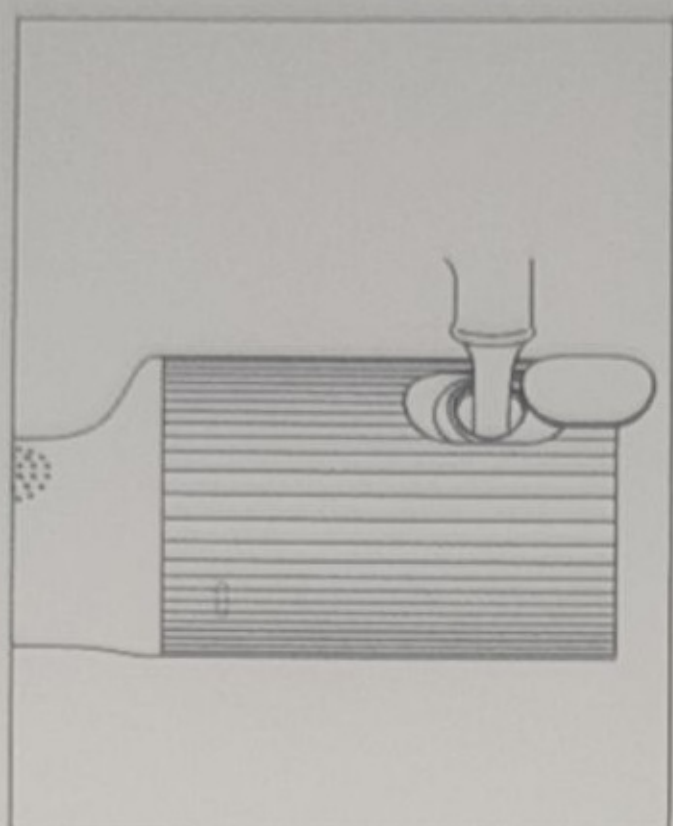


① Відкрийте кришку резервуара для води, наповніть його чистою водою, а потім закрийте кришку резервуара для води.


Примітка: Не перевищуйте температуру води 40°C.

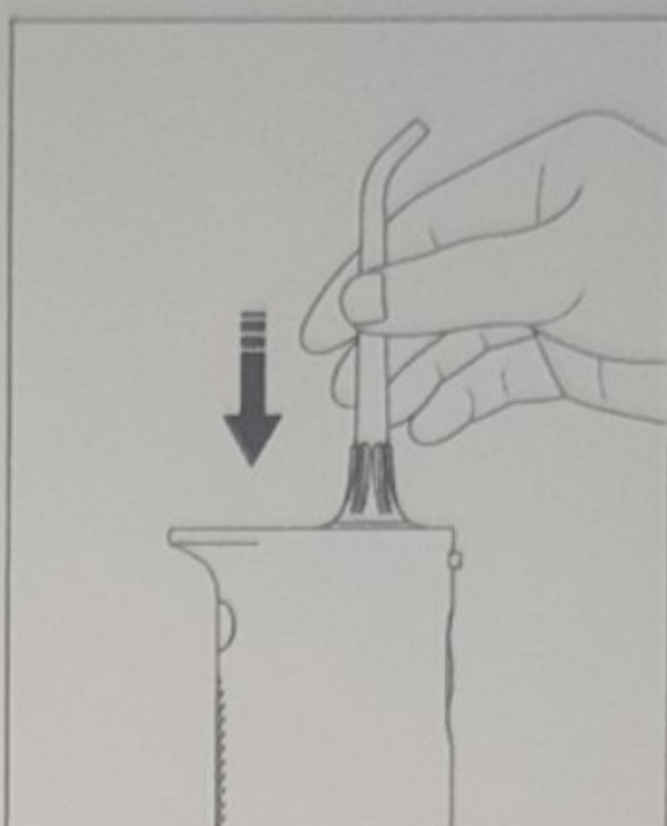


② Вставте насадку в отвір для кріплення насадки, доки не почуєте клацання.

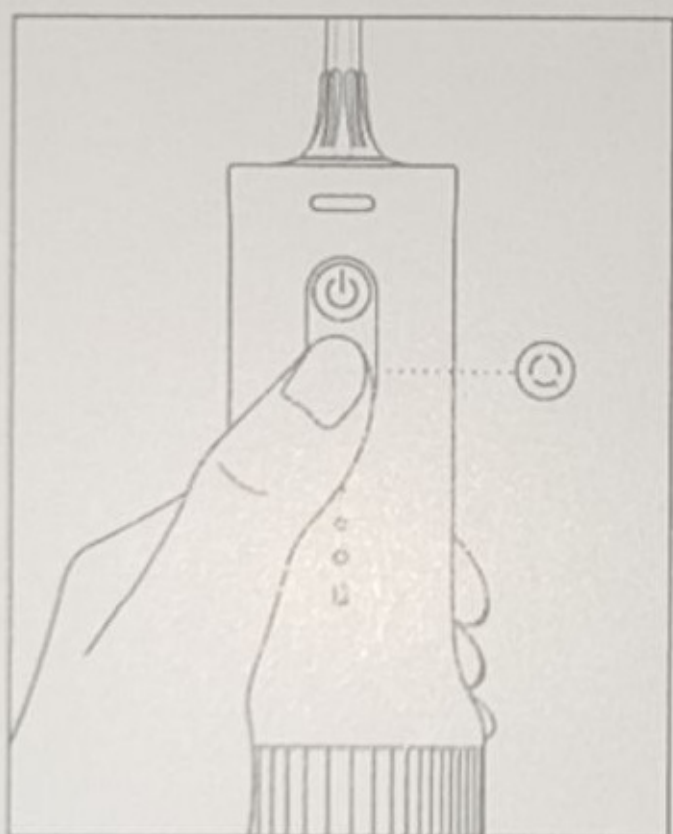


③ Коротко натисніть кнопку перемикання режимів, щоб переключитися на потрібний режим.

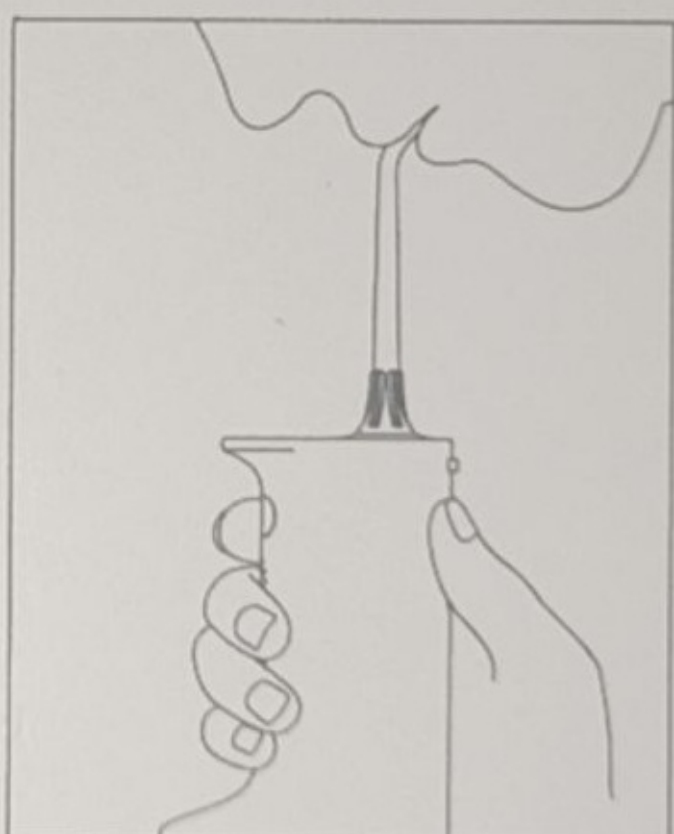

④ Вставте насадку в рот, злегка стисніть губи та нахиліть тіло до раковини.

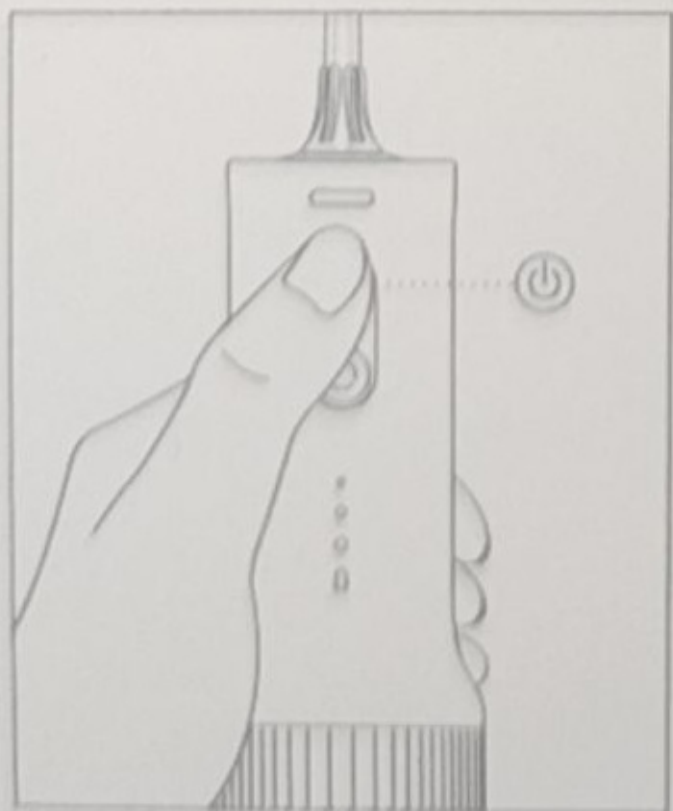


⑤ Коротко натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.

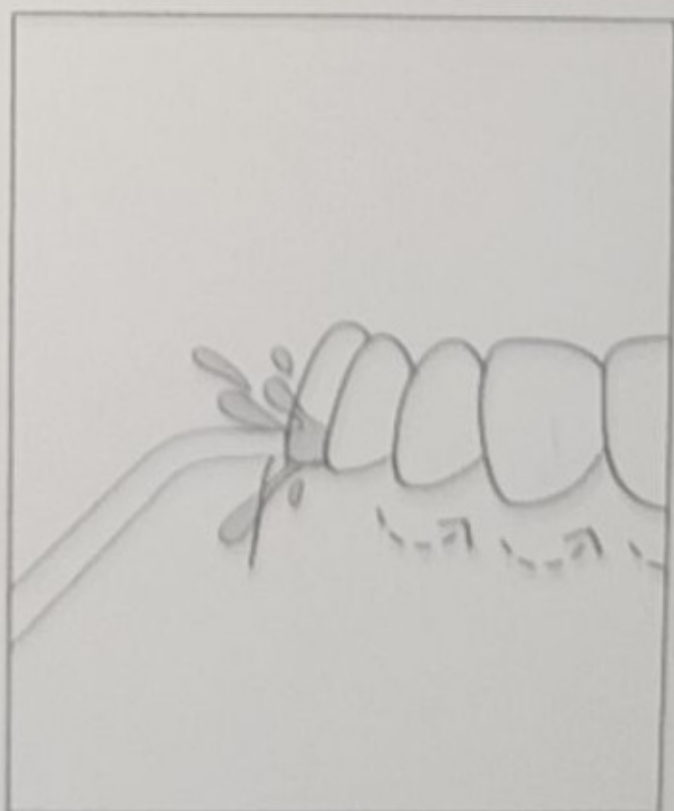


⑥ Переміщуйте насадку для промивання між зубами та вздовж лінії ясен.

щоденне прибирання

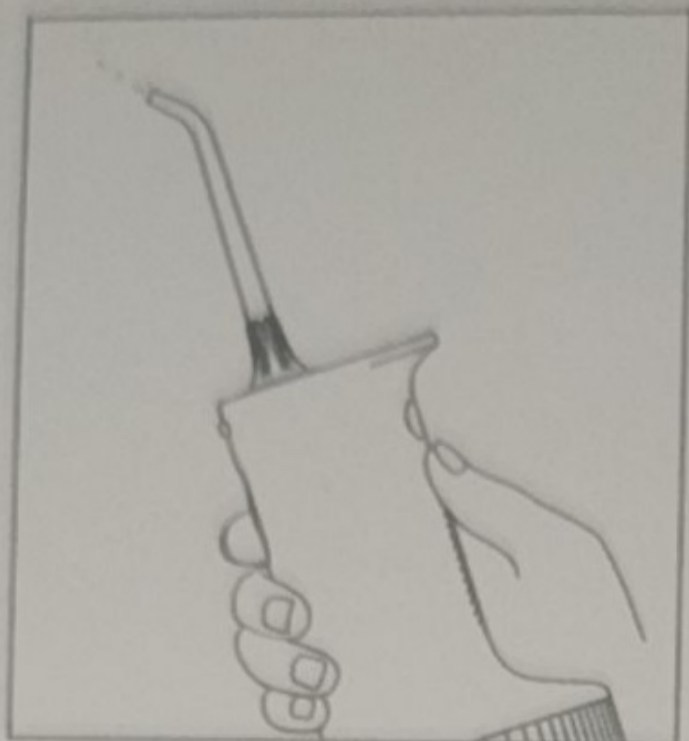


① Після використання увімкніть машину та дайте їй попрацювати кілька секунд на холостому ході, щоб злити воду, що залишилася всередині.

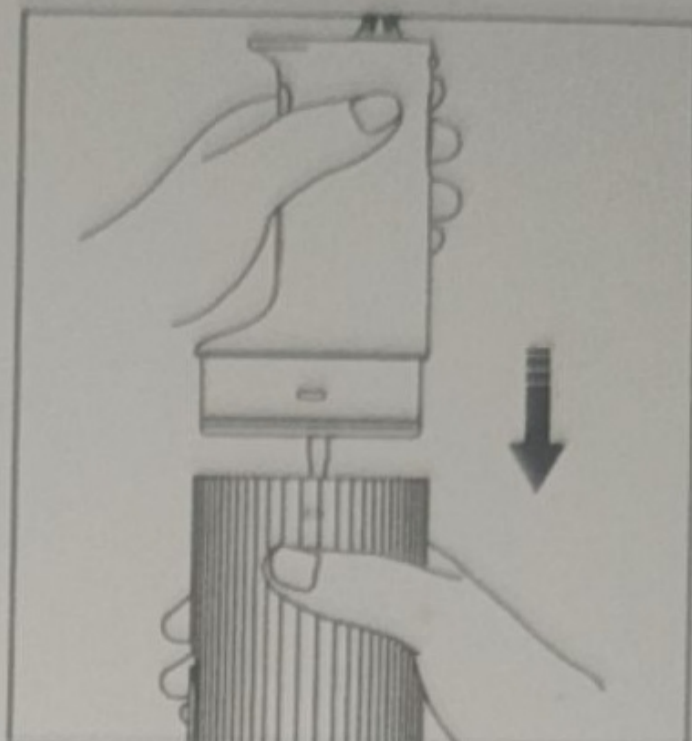


② Тримайте корпус машини однією рукою, а іншою потягніть резервуар для води вниз.




③ Промийте резервуар для води чистою водою або очистіть його вологою ганчіркою чи щіткою. Примітка: Температура води не повинна перевищувати 40°C під час очищення. Не використовуйте для очищення агресивні рідини, розчинники, спирт тощо.

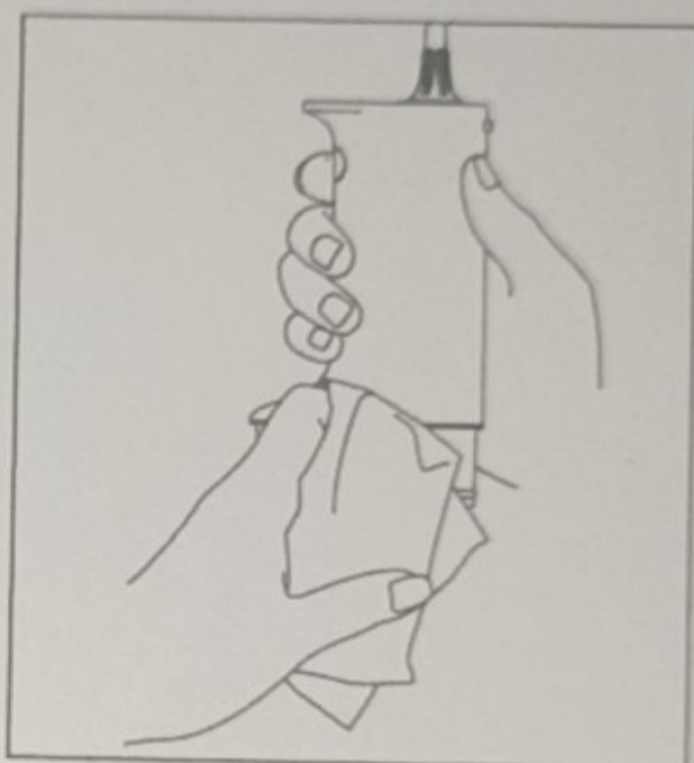

④ Після очищення витріть корпус машини та резервуар для води насухо та поставте їх у прохолодне місце для висихання на повітрі.

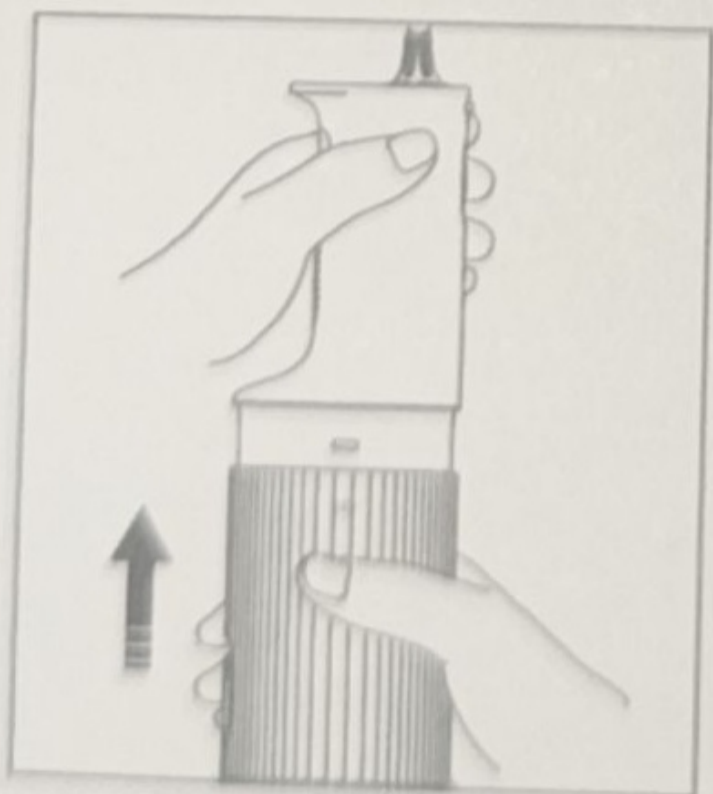

⑤ Після висихання встановіть резервуар для води назад на корпус машини.

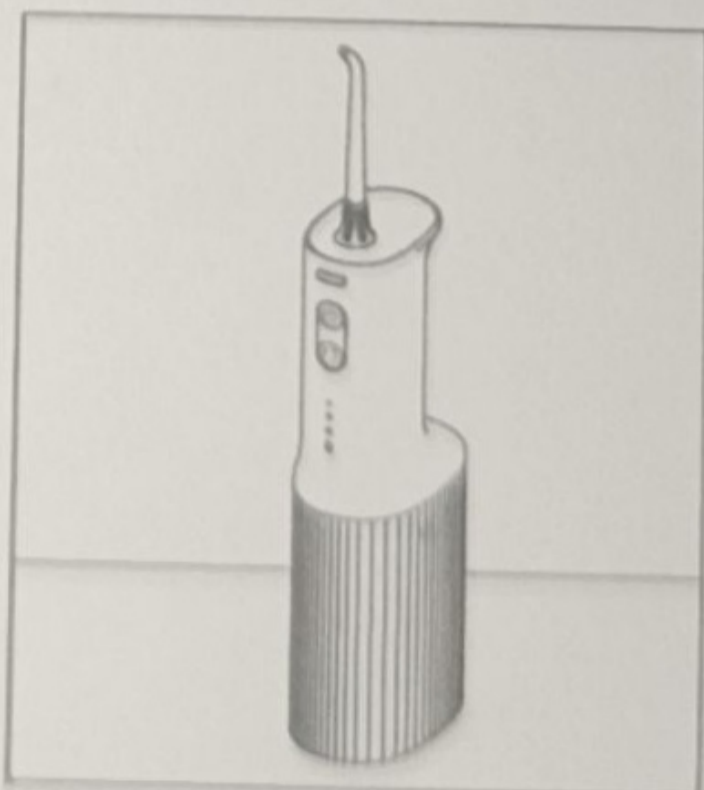

⑥ Помістіть виріб у добре провітрюване місце, щоб він залишався сухим та зменшував такі проблеми, як ріст бактерій та запах, спричинені вологою.