


SKG

Waist Massager
VS500



КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

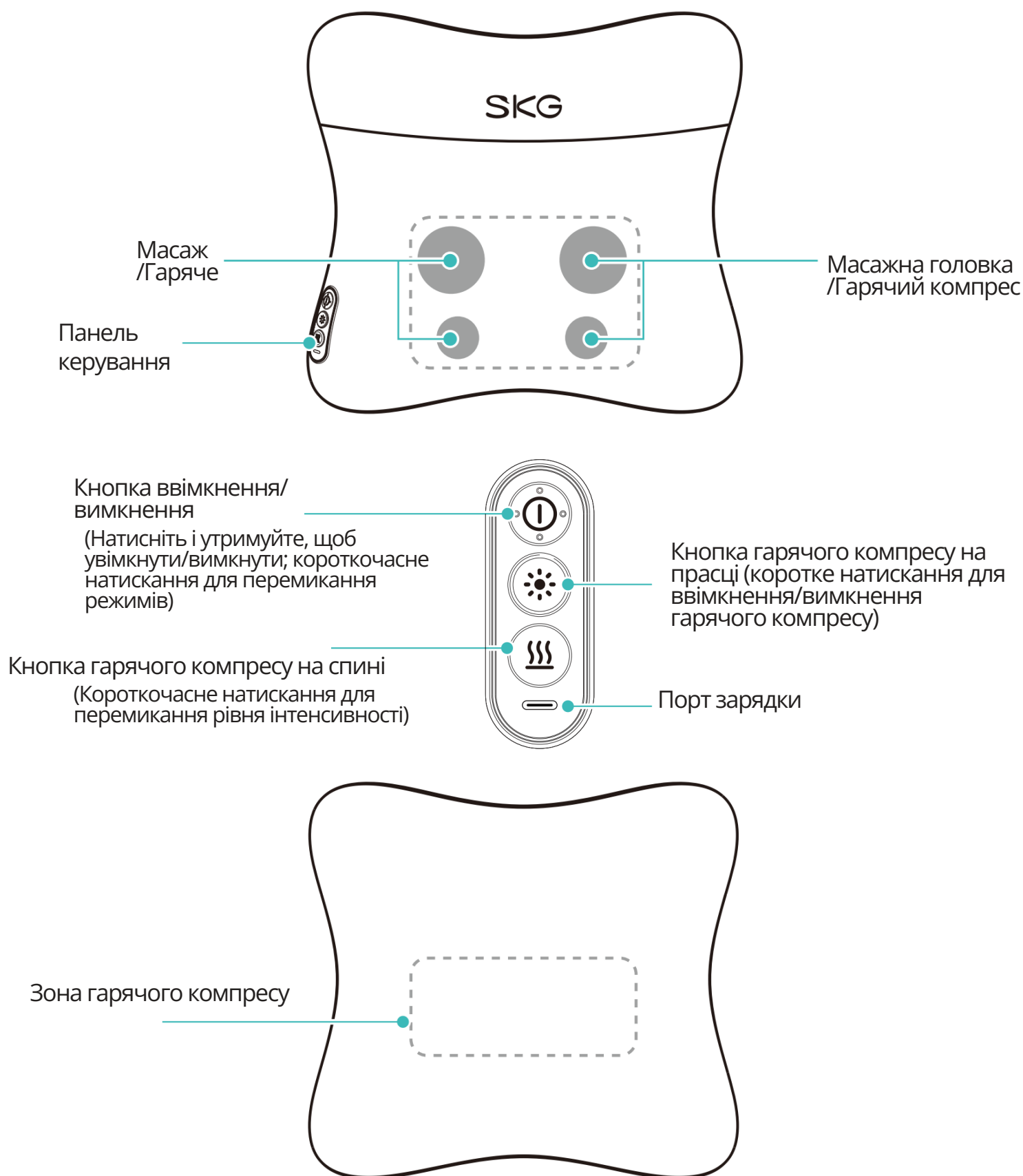

(Схема вище наведена лише для ілюстрації функцій і може відрізнятися за зовнішнім виглядом від фактичного вигляду виробу)
Примітка: Не масажуйте одну й ту саму ділянку занадто довго.

1. Цей виріб має зону для масажу та гарячого компресу з одного боку, а також зону для гарячого компресу з іншого, на яку можна спиратися.
2. Всі кнопки керування розташовані на панелі керування масажера. Щоб увімкнути або вимкнути живлення, натисніть і утримуйте кнопку живлення на панелі керування протягом 3 секунд, доки масажна головка не почне працювати; щоб перемикатися між режимами масажу, коротко натисніть кнопку живлення; щоб увімкнути або вимкнути функцію гарячого компресу, коротко натисніть кнопку гарячого компресу спереду; щоб активувати функцію гарячого компресу ззаду, коротко натисніть кнопку гарячого компресу ззаду та натисніть її ще раз, щоб перемикатися між рівнями інтенсивності, або натисніть її втретє, щоб вимкнути функцію гарячого компресу.
3. Постійне зелене світло індикатора живлення означає, що акумулятор повністю заряджений, тоді як миготіння помаранчевого світла вказує на те, що акумулятор ось-ось розрядиться. Коли виріб розряджений, його можна зарядити за допомогою зарядного порту Type-C. Індикатор на зарядному порту показуватиме різні стани заряджання: помаранчевий індикатор свідчить про те, що пристрій заряджається, а зелений індикатор свідчить про те, що акумулятор повністю заряджений.
4. Щоб завершити масаж, натисніть і утримуйте кнопку живлення на панелі керування протягом 3 секунд, щоб вимкнути функцію масажу.

Основні параметри

Назва продукту	Масажер для талії		
Модель	VS500	Номінальна вхідна напруга	5 В ---
Ємність акумулятора	3200 мАг/23,68 Вт·год	Номінальна вхідна потужність	10 Вт

Цей продукт можна перезаряджати, і користувачам слід заряджати його за допомогою зарядного кабелю Type-C. Вихідна потужність зарядних пристроїв не повинна перевищувати 15 Вт



- Будь ласка, ніколи не використовуйте цей пристрій із такими медичними електронними пристроями: імплантовані медичні електронні пристрої, такі як кардіостимулятори, медичні електронні пристрої для підтримки життя, такі як апарат штучного кровообігу, медичні електронні пристрої, такі як електрокардіограф
- Цей продукт є масажером для особистої гігієни та не призначений для заміни фармацевтичних препаратів та медичних виробів.
- Вагітним жінкам та жінкам у період пологів слід використовувати цей продукт з обережністю та лише за призначенням та дозволом лікаря.
- Люди з чутливою шкірою повинні використовувати цей продукт лише за схваленням та під наглядом лікаря.
- Цей виріб містить літієву батарею. Не розбирайте та не модифікуйте виріб, не занурюйте його у воду та не кидайте у вогонь.
- Під час використання виробу масажна головка не повинна контактувати з такими ділянками: рани та шрами на попереку, ділянки з внутрішніми злоякісними пухлинами, ділянки з внутрішніми металевими імплантатами та ділянки гострого гнійного запалення.
- Заборонено використовувати цей продукт таким особам: особам з порушеннями згортання крові, спастичним паралічем, спастичною фазою після інсульту, тяжкими когнітивними порушеннями, нервовою збудливістю, контрактурами або деформаціями суглобів, немовлятам та дітям, які втратили всю або частину свідомості.
- Наступні особи повинні проконсультуватися з лікарем перед використанням продукту: пацієнти, які перебувають на лікуванні та почуваються погано, пацієнти з інфекційними захворюваннями, пацієнти з температурою тіла понад 38 градусів Цельсія (лихоманка), пацієнти з порушенням артеріального тиску, пацієнти із серцевими або неврологічними порушеннями, пацієнти з сенсорними порушеннями (Вставити тег (Alt+2)), пацієнти, які не можуть вільно висловлювати свою волю, пацієнти з остеопорозом та пацієнти з переломами хребта.
- У разі виникнення будь-якого дискомфорту під час використання, будь ласка, негайно припиніть використання продукту.
- Рівень заряду батареї може швидко розрядитися під час першого використання або після тривалого перерви у використанні виробу. Будь ласка, заряджайте акумулятор, дотримуючись інструкцій у посібнику користувача, щоб забезпечити його нормальну роботу.
- Не підключайте та не відключайте зарядний пристрій мокрими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або нещасних випадків.
- Рекомендовано для використання особами віком від 16 років.
- Якщо масажер не використовується протягом тривалого часу, рекомендується заряджати його раз на місяць, щоб рівень заряду батареї залишався вище 20%.

Будь ласка, підтримайте переробку акумуляторних батарей (літій-іонних батарей)

 Небезпека	Батарейка, що використовується в цьому виробі, є спеціальною акумуляторною батареєю, яку не слід використовувати в інших виробках. Не заряджайте вийнятий акумулятор. • Не перегрівайте акумулятор, кидаючи його у вогонь. • Не проколуйте цвяхами, не ударяйте під дією сили тяжіння та не розбирайте та не модифікуйте. • Не з'єднуйте катод та анод акумулятора безпосередньо з металом. • Не зберігайте його разом з намистом, шпильками для волосся тощо. • Не заряджайте, не використовуйте та не кладіть акумулятор у гаряче місце, наприклад, біля каміна або під палючим сонцем. Вищезазначені ситуації можуть призвести до нагрівання, займання та заземлення.
 Небезпека	Будь ласка, зберігайте вийнятий акумулятор у недоступному для немовлят та дітей молодшого віку місці, щоб запобігти випадковому проковтуванню. • У разі проковтування негайно зверніться за медичною допомогою. • У разі витікання батареї не торкайтеся рідини голими руками та дотримуйтесь наступних інструкцій. • Потрапляння рідини з акумулятора в очі може призвести до сліпоти. Не тріть очі безпосередньо руками, а негайно промийте їх чистою водою та зверніться за медичною допомогою. Контакт рідини з акумулятора зі шкірою або одягом може спричинити запалення або травму шкіри. Будь ласка, промийте чистою водою та негайно зверніться за медичною допомогою, якщо ви відчуваєте нездужання. Розбирання виробу дозволяється лише під час його утилізації. Недотримання цих вимог може призвести до нещасних випадків, таких як пожежі, ураження електричним струмом або травми. Якщо потрібен ремонт (за винятком заміни батареї), зверніться до магазину, де ви придбали виріб.

Літій-іонний акумулятор, що використовується в цьому виробі, є цінним ресурсом, що підлягає переробці. Тому, будь ласка, передайте його професійній організації, яка може провести переробку та регенерацію акумуляторних батарей, коли термін їхньої служби закінчиться, і вони будуть утилізовані. Перед утилізацією масажера необхідно вийняти батарейку. Масажер необхідно вимкнути, перш ніж виймати батарею. Батарейку слід утилізувати безпечно.

Кроки для видалення акумулятора:

1. Переконайтеся, що виріб вимкнено
2. Відкрийте блискавку тканинного чохла.
3. Послабте гвинти на кришці картера редуктора.
4. Від'єднайте клеми вихідного дроту акумулятора.
5. Зніміть пристрій.
6. Зніміть банери.

ПРИМІТКА. Це обладнання було протестовано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В, згідно з Частиною 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Дане обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлено і використовується не відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає ніякої гарантії, що при конкретній установці не виникнуть перешкоди.

Якщо дане обладнання дійсно створює шкідливі перешкоди прийому радіо - або телевізійних сигналів, що можна визначити шляхом виключення і включення

обладнання, Користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди за допомогою однієї або декількох з наступних заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, що знаходиться в колі живлення, відмінному від того, до якого підключено приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого фахівця по радіо / телебаченню.



Цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви (ЄС) 2023/988. УВАГА: РИЗИК ВИБУХУ ПРИ ЗАМІНІ БАТАРЕЇ НЕПРАВИЛЬНИМ ТИПОМ. УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЙКИ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ.

Заява про відповідність вимогам ЄС:

SKG Health technology Co., Ltd. Цим заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви (ЄС) 2023/988.

Копія Декларації про відповідність ЄС доступна онлайн за адресою

<https://www.skg.com/pag-http://www.skg.com/pag-es/skg-declaration-of-conformity>.



Старі електроприлади не можна викидати разом із залишковими відходами, а потрібно утилізувати окремо. Утилізація в комунальному пункті збору відходів

приватними особами є безкоштовною. Власник старих приладів

зобов'язаний доставляти їх до цих або аналогічних пунктів збору. Цими невеликими особистими зусиллями ви робите свій внесок у переробку цінної сировини та очищення від токсичних речовин.



FR

**Cet appareil
et sa batterie
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

**DÉPLIANT
+ BARQUETTE
+ ÉTUI**

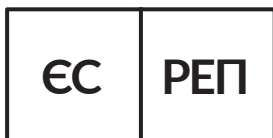

Кур'єр "Успіх" SL

OFICINA 3, Фуенлабрада, Мадрид, 28947, Іспанія

OST EU 20230214000009

6UCC6s6Service2@hotmail.com