


МАСАЖЕР ДЛЯ ШИЇ SKG 8511 Presso



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

SKG

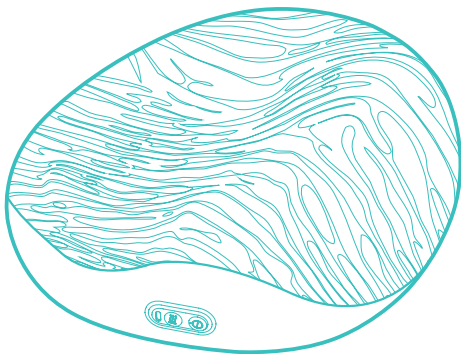

Відскануйте QR-код, щоб отримати інструкції підтримуваними мовами (рекомендовано Google).

ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИСТРОЇВ, ОСОБЛИВО КОЛИ ПОРУЧ Є ДІТИ, НЕОБХІДНО ЗАВЖДИ ДОТРИМУВАТИСЯ ОСНОВНИХ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ НАСТУПНЕ:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

НЕБЕЗПЕКА – ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Завжди відключайте пристрій від електромережі одразу після використання та перед чищенням

- Завжди відключайте пристрій від електромережі одразу після використання та перед очищенням.
- НЕ торкайтеся пристрою, якщо він впав у воду. негайно відключіть його від мережі.
- НЕ використовуйте пристрій під час купання або душу.
- НЕ розміщуйте і не зберігайте пристрій там, де він може впасти у раковину чи ванну.
- НЕ занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину.
- НЕ підключайте і не відключайте кабель зарядки мокрими руками.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ — ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ОПІКІВ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПОЖЕЖІ АБО ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ:

- Пристрій НІКОЛИ не слід залишати без нагляду, коли він підключений до електромережі. Відключайте його, коли не використовується, а також перед встановленням або зняттям деталей чи насадок.
- Потрібен ретельний нагляд, коли пристрій використовується дітьми, людьми з обмеженими можливостями або поруч із ними.
- Дітям заборонено користуватися цим пристроєм.
- Використовуйте пристрій лише за призначенням, як описано в цій інструкції. НЕ використовуйте насадки, не рекомендовані SKG, зокрема ті, що не входять до комплекту.
- НІКОЛИ не використовуйте пристрій, якщо кнопка живлення пошкоджена, він працює неправильно, був пошкоджений або впав у воду.
- НІКОЛИ не кидайте і не вставляйте сторонні предмети в отвори пристрою.
- НЕ використовуйте пристрій у місцях, де застосовуються аерозолі (спреї) або подається кисень.
- НЕ використовуйте пристрій під ковдрою або подушкою. Ніколи не накривайте його під час роботи, оскільки це може спричинити перегрів, пожежу, ураження електричним струмом або травми.
- Для відключення переведіть усі перемикачі в положення «вимкнено».
- НІКОЛИ не використовуйте пристрій із заблокованими вентиляційними отворами. Слідкуйте, щоб вони були чистими від пилу, волосся тощо.
- НІКОЛИ не використовуйте пристрій на м'яких поверхнях, таких як ліжко чи диван, де вентиляційні отвори можуть бути перекриті.
- Обережно використовуйте нагрівальні поверхні. НЕ застосовуйте на ділянках шкіри зі зниженою чутливістю або при порушенні кровообігу. Використання нагрівального пристрою без нагляду дітьми або людьми з обмеженими можливостями може бути небезпечним.
- НЕ використовуйте масажер поруч із вільним одягом, прикрасами або довгим волоссям.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

УВАГА — УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

- Цей виріб не призначений для медичного використання. Він призначений виключно для забезпечення комфортного масажу.

- Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви вагітні, маєте кардіостимулятор або маєте будь-які застереження щодо стану здоров'я.
- Не рекомендується використовувати цей виріб людям із діабетом.
- НІКОЛИ не залишайте пристрій без нагляду, особливо коли поруч є діти.
- НЕ використовуйте цей виріб довше ніж 15 хвилин за один раз.
- НІКОЛИ не застосовуйте пристрій безпосередньо на набряклих або запалених ділянках, а також на шкірі з висипами.
- НЕ використовуйте цей виріб як заміну медичної допомоги.
- НІКОЛИ не використовуйте цей виріб лежачи або в ліжку.
- НІКОЛИ не використовуйте цей виріб із прикрасами (ланцюжками) на шиї.
- Цей виріб НІКОЛИ не повинен використовуватися особами з фізичними обмеженнями, які не дозволяють безпечно керувати пристроєм.
- Дітям та особам з обмеженими можливостями заборонено користуватися пристроєм без нагляду дорослих.
- Цей виріб не призначений для використання в автомобілі.
- Призначений лише для побутового використання.

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ПРИСТРОЮ

UA

Модель: 8511 Presso

Назва продукту: Масажер для шиї

Розмір: 365 × 285 × 135 мм

Вага нетто: 1,68 кг

Номінальна потужність: 10 Вт

Номінальна напруга: 5В —

Ємність акумулятора: 2000 мА·год / 14,8 Вт·год

Комплектація: Масажер *1, Інструкція *1, Кабель зарядки *1

Умови експлуатації

Температура: від 0°C до 40°C

Відносна вологість: <80% (без конденсації)



Атмосферний тиск: 50–106 кПа

Умови зберігання та транспортування

Температура: від -20°C до 55°C

Відносна вологість: <95% (без конденсації)

Атмосферний тиск: 50–106 кПа

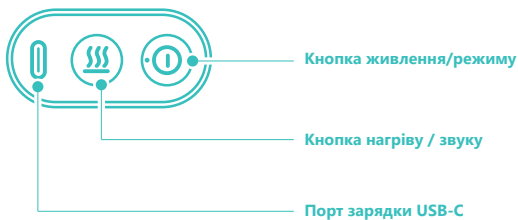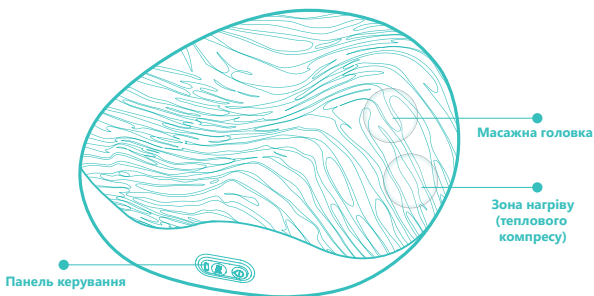

Примітка: Зображення наведені лише для ознайомлення. Фактичний вигляд виробу може відрізнятися.

Кнопка живлення/режиму

- Увімкнення/вимкнення: натисніть і утримуйте кнопку протягом 1,5 секунди.
- Перемикання режимів: коротке натискання перемикає між 4 автоматичними режимами масажу.
- Під час вимкнення масажні головки повертаються у вихідне положення.

Кнопка нагріву / звуку

- Регулювання рівня нагріву: коротке натискання перемикає 4 рівні: низький → середній → високий → вимкнено.
- Увімкнення/вимкнення голосових підказок: тривале натискання активує або деактивує голосові підказки. Налаштування зберігається для наступного використання.

Індикатор

Індикатор	Колір і стан світла	Опис
Кнопка живлення (акумулятор)	Постійне зелене світло	Рівень заряду > 25%
	Постійне помаранчеве світло	Рівень заряду 10%–25%
	Помаранчеве світло блимає (5 разів), потім гасне	Рівень заряду < 10%, пристрій вимкнеться
Кнопка живлення (зарядка)	Пульсуюче помаранчеве світло	Триває заряджання
	Пульсуюче зелене світло	Повністю заряджено

Індикатор	Колір і стан світла	Опис
Кнопка нагріву	Світло вимкнене	Нагрів вимкнено
	Червоне світло (60% яскравості)	Низький рівень
	Червоне світло (80% яскравості)	Середній рівень
	Червоне світло (100% яскравості)	Високий рівень

Режим запуску

За замовчуванням: комплексний режим із увімкненим високим рівнем нагріву. Пристрій відновлює останній використаний режим і рівень нагріву.

Автоматичне вимкнення

Режим масажу: вимикається (індикатори гаснуть) через 10 хвилин ± 30 секунд.
 Режим лише нагріву (без масажу): вимикається через 2 хвилини ± 5 секунд.

Заряджання

1. Перед заряджанням переконайтеся, що пристрій вимкнений. Використовуйте комплектний кабель USB-C для підключення до джерела живлення.
2. Повного заряду достатньо приблизно для 6 сеансів масажу (фактична тривалість залежить від обраного рівня нагріву та режиму масажу).

Примітка: якщо використовується сторонній зарядний пристрій, переконайтеся, що він сертифікований і справний.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

UA

Очищення

Цей виріб має герметичну конструкцію і не підлягає розбиранню. Для очищення поверхні обережно протирайте її злегка вологою м'якою тканиною. Не допускайте потрапляння рідини всередину пристрою, не використовуйте хімічні засоби та не занурюйте пристрій у воду.

Зберігання

1. Зберігайте виріб в оригінальній упаковці або в безпечному, сухому, прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів.
2. Уникайте контакту з гострими предметами, щоб не пошкодити поверхню тканини
3. Зберігайте пристрій у недоступному для немовлят, дітей та осіб з обмеженими можливостями місці, щоб запобігти нещасним випадкам.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

UA

Якщо пристрій працює некоректно, скористайтесь наведеною нижче інформацією. Якщо проблему не вдається вирішити, зверніться до продавця або сервісного центру.

Проблема	Можлива причина	Рішення
Не вмикається	Низький рівень заряду	Зарядіть пристрій
	Пристрій вимкнений	Натисніть і утримуйте кнопку живлення для увімкнення
Раптово вимикається	Спрацював захист двигуна	Вимкніть пристрій і перезапустіть його
Не заряджається / не світиться індикатор зарядки	Поганий контакт кабелю	Перепідключіть кабель зарядки
	Несправний або несумісний кабель	Використовуйте комплектний кабель Type-C

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не модифікуйте цей пристрій без дозволу виробника.
- Будь-які несанкціоновані зміни можуть призвести до втрати гарантії та зниження безпеки
- Лише виробник має право виконувати модифікації після належної перевірки та тестування.

НЕБЕЗПЕКА

Перед утилізацією акумулятора (літій-іонного) дотримуйтесь наступного:

- Акумулятор призначений лише для цього пристрою.
- НЕ розбирайте пристрій, щоб дістати акумулятор.
- НЕ кидайте у вогонь і не піддавайте високим температурам.
- НЕ проколюйте, не стискайте і не розбирайте акумулятор.
- НЕ допускайте контакту контактів батареї з металевими предметами.
- НЕ зберігайте разом із металевими предметами (ключі, шпильки тощо).
- НЕ заряджайте, не використовуйте і не зберігайте поблизу джерел тепла (вогонь, пряме сонячне світло).
- Це може спричинити нагрівання, пожежу або пошкодження.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Тримайте вийняті акумулятори поза досяжністю дітей, щоб уникнути випадкового проковтування.

Якщо акумулятор проковтнуто, негайно зверніться до лікаря.

У разі витоку рідини з акумулятора уникайте контакту з нею та дотримуйтесь правил безпеки.

• Якщо електроліт потрапив в очі, промийте їх чистою водою та зверніться за медичною допомогою, не тріть очі.

• Якщо електроліт контактує зі шкірою, промийте уражене місце водою та зверніться за медичною допомогою за потреби.

Розбирайте лише списані пристрої, щоб уникнути нещасних випадків, таких як пожежа або ураження електричним струмом.

Для ремонту акумулятора звертайтеся до продавця, у якого придбали продукт. Це не включає заміну акумулятора.

Літій-іонний акумулятор цього пристрою підлягає переробці і не повинен замінюватися; передайте його професійній компанії з переробки при утилізації пристрою.

Завжди вимикайте пристрій перед вилученням акумулятора для утилізації.

Щоб безпечно утилізувати акумулятор, дотримуйтесь таких кроків:

Використовуйте спеціалізовані інструменти, щоб відкрити корпус пристрою.

Вийміть внутрішню плату та мотор.

Вийміть акумулятор, перережте його дроти плоскогубцями та повністю видаліть.



Примітка: Цей продукт був протестований і відповідає обмеженням для цифрового пристрою класу В відповідно до Частини 15 правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житловому середовищі.

Цей продукт генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо не встановлений та не використаний відповідно до інструкцій, може спричинити шкідливі перешкоди у радіозв'язку. Проте немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретній установці.

Якщо цей продукт спричиняє шкідливі перешкоди у прийомі радіо або телебачення, що можна визначити шляхом вмикання та вимикання пристрою, користувачу рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наступних способів:

- Змінити орієнтацію або місце розташування приймальної антени.
- Збільшити відстань між пристроєм і приймачем.
- Підключити пристрій до розетки на іншому колі, ніж той, до якого підключено приймач.
- Звернутися до продавця або досвідченого радіо-/техніка телевізора за допомогою.



Цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви (ЄС) 2023/988.

УВАГА: Існує ризик вибуху, якщо акумулятор замінено на неправильний тип.
ВИКОРИСТАНІ АКУМУЛЯТОРИ УТИЛІЗУЙТЕ ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ.

Декларація відповідності ЄС:

SKG Health Technologies Co., Ltd. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви (ЄС) 2023/988.

Копія Декларації відповідності ЄС доступна онлайн за адресою:

<https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Старі електричні прилади не можна викидати разом із побутовими відходами; їх потрібно утилізувати окремо. Утилізація у публічних пунктах збору є безкоштовною для приватних осіб. Власник старих пристроїв несе відповідальність за доставку їх до таких пунктів збору або аналогічних установ. Завдяки цьому невеликому особистому зусиллю ви сприяєте переробці цінної сировини та правильній обробці токсичних речовин.

Зареєструйте свій продукт SKG, написавши на support@skg.com, щоб отримати максимальну підтримку, та відвідайте <https://www.skg.com/> для експертних порад, інструкцій і відповідей на поширені запитання, щоб оптимізувати використання пристрою.

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Адреса: 23A поверх, будівля 3, Zhongke R&D Park, №009,
Gaoxin South 1st Road, спільнота High-tech Zone, вулиця Yuehai,
район Наньшань, Шеньчжень, провінція Гуандун, Китай.

Вебсайт: <https://www.skg.com/>



Зроблено в Китаї