




Керівництво користувача

P12

Іригатор для зубів Infly

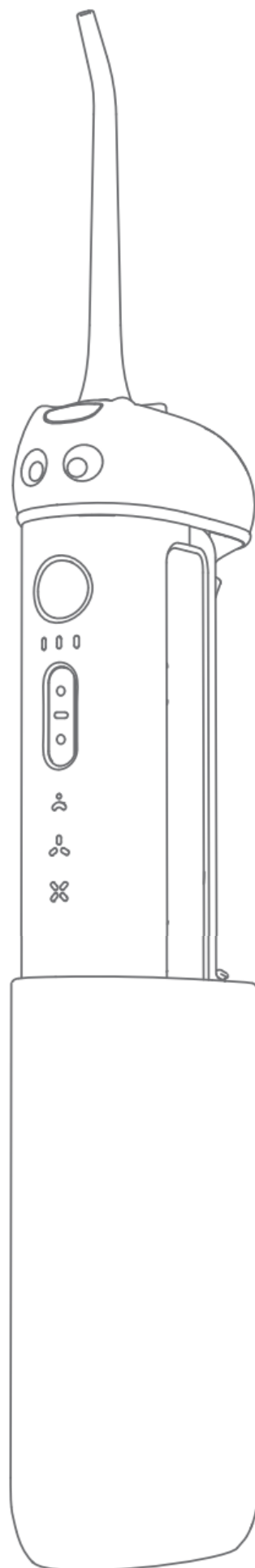


Дякуємо, що вибрали продукцію infl, будь ласка, ознайомтеся з усіма інструкціями та перевірте комплектність упаковки перед використанням. І дотримуйтесь інструкцій з експлуатації, щоб завершити збірку та розпочати використання.




Веб-сайт infl


Вміст упаковки

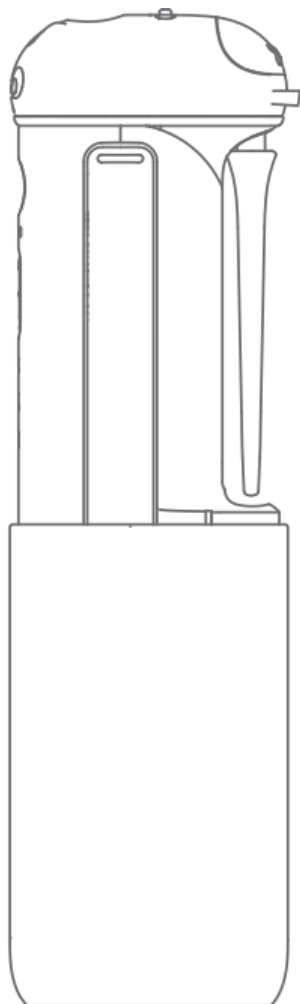

Ручка

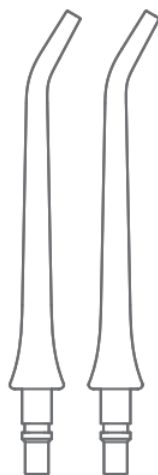


Сопло

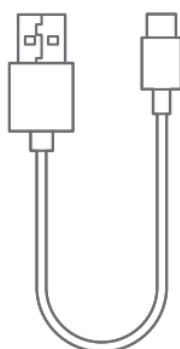


Кабель типу C



Міні-резервуар
для води

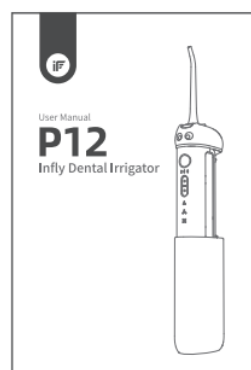

Керівництво
користувача

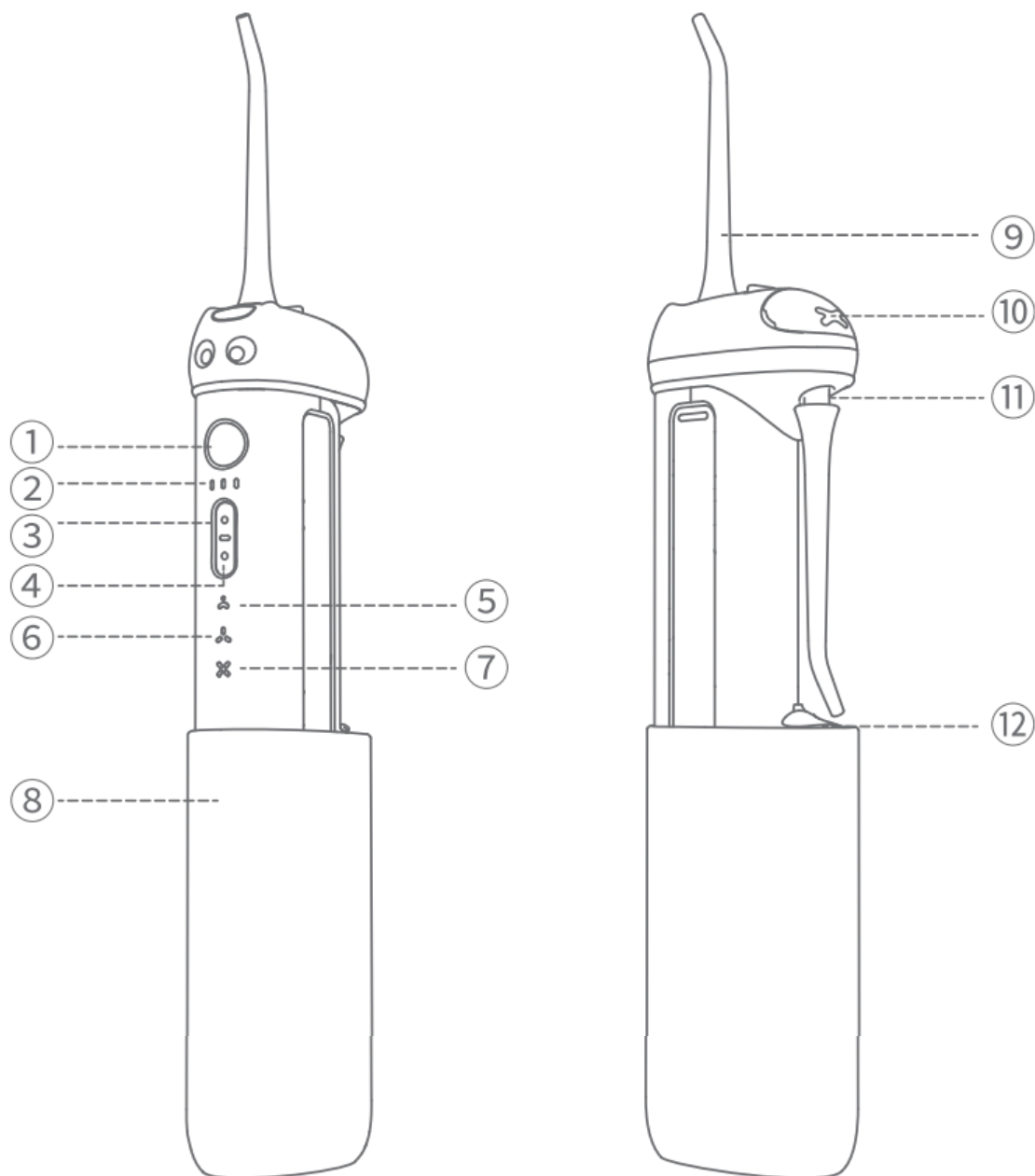

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Включення/вимикання | 7. Режим пробіжки підтюпцем |
| 2. Світловий індикатор інтенсивності | 8. Резервуар для води |
| 3. Налаштування тиску | 9. Насадка |
| 4. Налаштування режиму | 10. Порт для зарядки |
| 5. Стандартний режим | 11. Отвір для зберігання сопла |
| 6. Імпульсний режим | 12. Отвір для нагнітання води |


1. Встановіть наконечник на ручку.
2. Заповнення резервуара
3. Виберіть режим.
4. Покладіть наконечник у рот і направте його в щілину між зубами або яснами, а потім натисніть кнопку живлення, щоб розпочати Чищення.

Примітка:

- Не розпилюйте воду безпосередньо на пародонтальні кишені, це може викликати кровоточивість ясен.
- Тим, хто використовує його вперше або у кого чутливі ясна, рекомендується почати з щадного режиму, а потім, після звикання, використовувати інші режими або насадки.
- Якщо ваші ясна сильно кровоточать після використання цього продукту або продовжують кровоточити після 1 тижня лікування кишень, борозенок і гінгівіту. негайно нанесіть засіб і проконсультуйтеся зі своїм стоматологом.


Інструкція По Розбиранню Резервуара Для Води

Візьміться однією рукою за корпус, а іншою-за резервуар для води і обережно потягніть, щоб вийняти резервуар для води

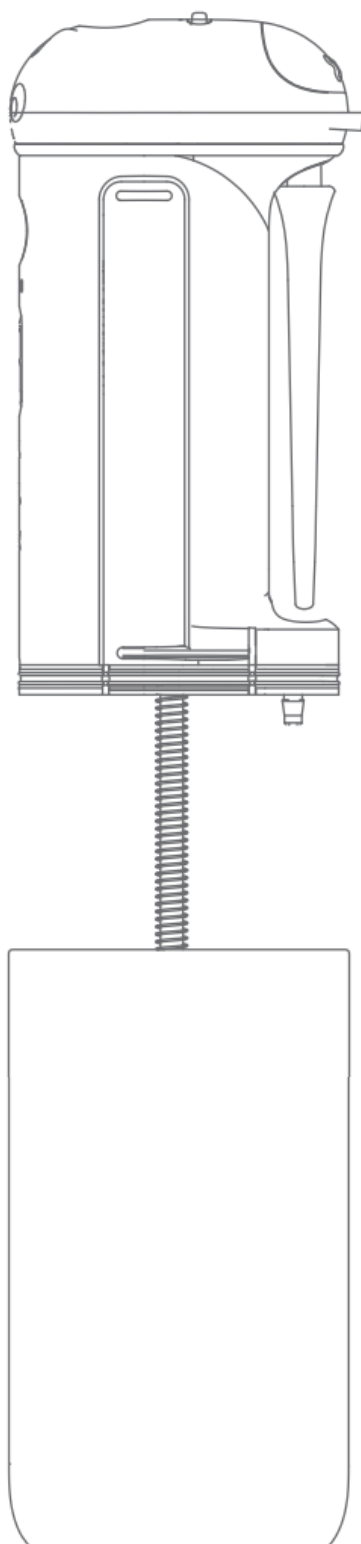

Заповнення резервуара

Спосіб 2. Підніміть кришку резервуара і наповніть його теплою водою.

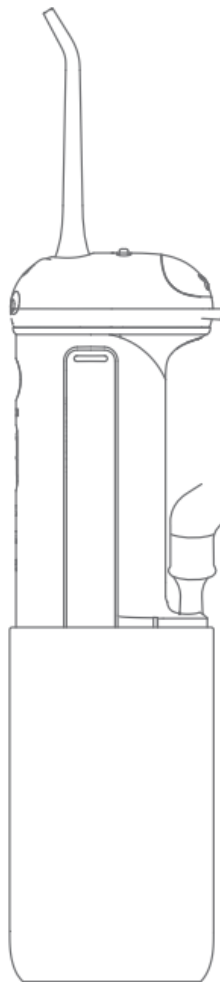


Примітка:

Рекомендується використовувати теплу воду температурою нижче 40°C або мінеральну воду (рекомендується очищена вода).

Додайте відповідну кількість рідини для полоскання рота, щоб зберегти свіжість у роті;

Не вводьте хімічні речовини, такі як зубна паста або інші тверді речовини, щоб уникнути засмічення водопровідних труб або пошкодження резервуара для води.



Установка і витяг наконечника

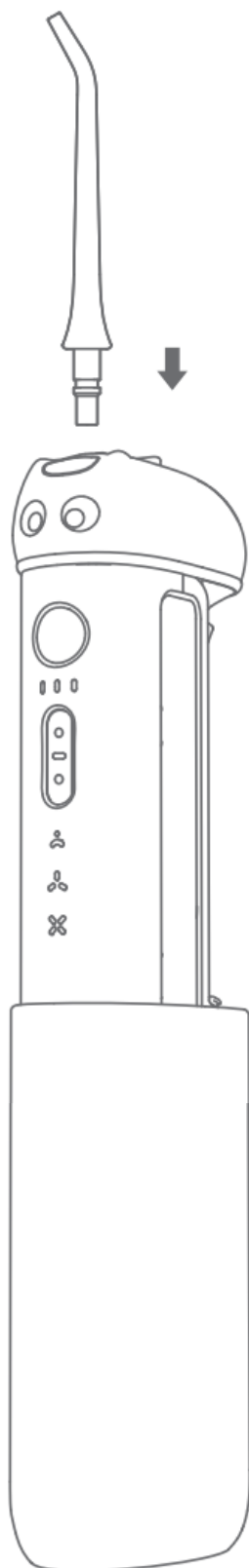


- Вставте наконечник в отвір для наконечника у верхній частині ручки іригатора до тих пір, поки наконечник не зафіксується на ручці.
Щоб вийняти наконечник з ручки, натисніть кнопку виймання наконечника і витягніть наконечник з ручки.

Примітка:

- Не натискайте кнопку наконечника і не замінюйте наконечник під час зарядки або під час роботи іригатора.

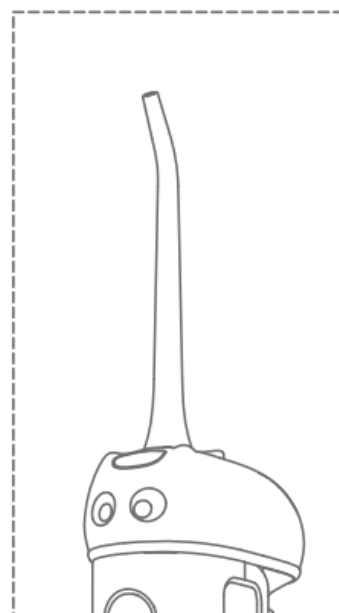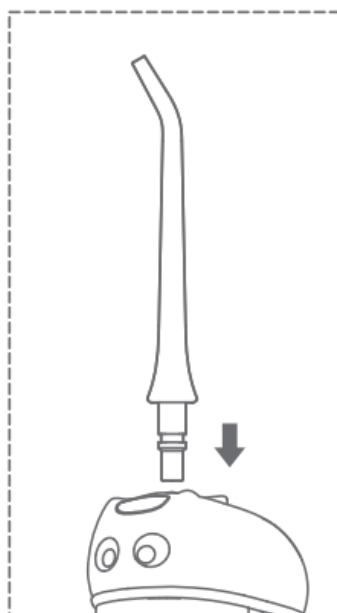

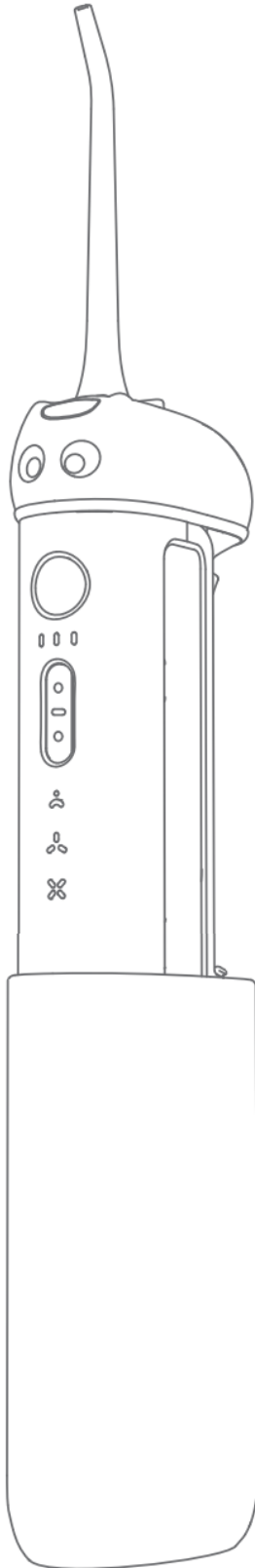

Включення живлення:
Натисніть кнопку включення живлення один раз.

Відключення живлення:
1. Закінчення робочого циклу;
2. Під час роботи один раз натисніть на кнопку включення живлення;
3. Переключіть режим і інтенсивність освітлення коли апарат вимкнений, індикатор згасне через 5 секунд без будь-яких дій.



Налаштування режиму / тиску



У вимкненому / увімкненому стані натисніть кнопку Налаштування режиму, щоб вибрати режим.

У вимкненому / увімкненому стані натисніть кнопку Налаштування тиску, щоб вибрати тиск.

У режимі пробіжки іригатор буде продовжувати працювати при натисканні кнопки включення живлення і перестане працювати в іншому випадку.

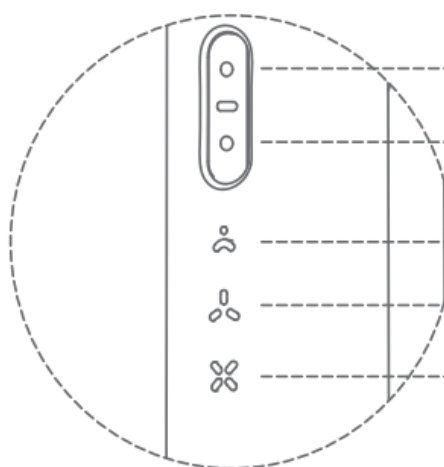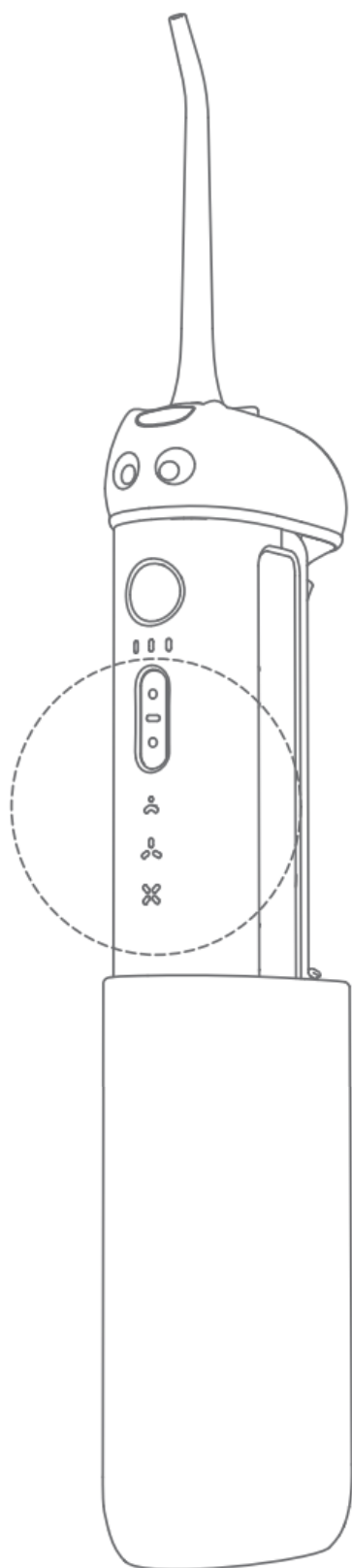


Налаштування тиску

Налаштування режиму

Стандартний режим

Імпульсний режим


Режим пробіжки підтюпцем

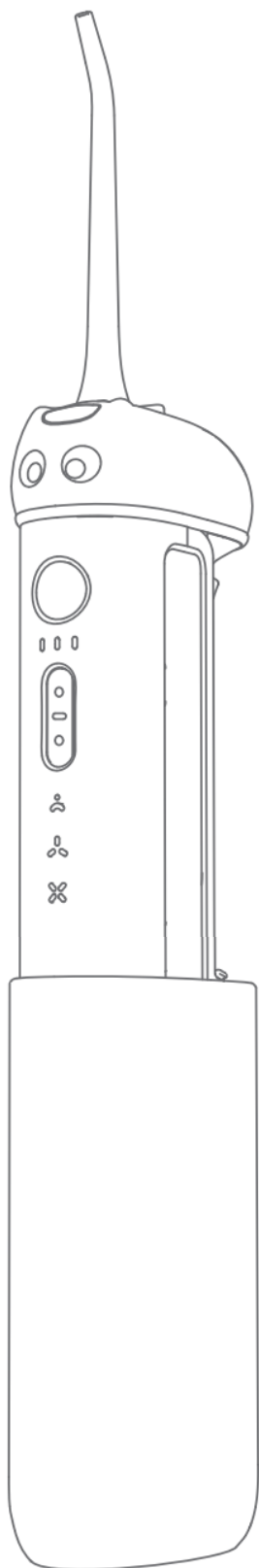

- Перед зарядкою переконайтеся, що зарядний порт сухий. Підключіть зарядний кабель і підключіть до джерела живлення. Час повної зарядки становить близько 4 годин.
- Після зарядки обов'язково щільно закрийте кришку зарядного пристрою.

※ Якщо іригатор не заряджався протягом тривалого часу, батарея знаходиться в стані низького заряду, індикатор може не горіти на початку зарядки. Будь ласка, зберігайте режим зарядки.

Стан іригатора	Стан світлового індикатора	Ілюструвати
Стан включення живлення	легкий, твердий на	Працюючий
	спалахи світла	Батарея розряджена
Стан зарядки	світло повільно блимає	Зарядка
	легкий, твердий на	Повністю заряджений

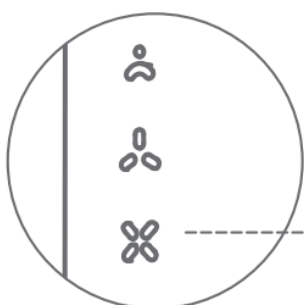

Червоний індикатор блимає, попереджаючи про низький заряд батареї

Щоденне технічне обслуговування

- Відкрийте кришку резервуара і вилийте воду, що залишилася після використання.
- Увімкніть іригатор, щоб автоматично злити воду, що залишилася, з механізму та резервуара.
- Зніміть наконечник, витріть наконечник і іригатор серветкою, зберігайте в сухому місці.

Щоденне прибирання

- очистіть резервуар, акуратно вийміть резервуар і корпус, протріть внутрішню поверхню резервуара м'якою щіткою, змоченою чистою водою або нейтральним миючим засобом.
- Щоб уникнути пошкодження іригатора не використовуйте для чищення теплу воду температурою вище 40°C, агресивні рідини або спирт.

Примітка:

- Рекомендується замінювати наконечник кожні 6 місяців; чистіть та підтримуйте резервуар для води принаймні 1-2 рази на 3 місяці, щоб забезпечити найкращу роботу зрошувача;
- Своєчасно замінюйте резервуар, якщо на ньому з'являться ознаки розтріскування.

- Перед утилізацією виробу необхідно витягти акумулятор; перед витяганням акумулятора необхідно від'єднати кабель живлення;
- Перш ніж виймати, переконайтеся, що заряд акумулятора повністю розряджений, і передайте акумулятор для утилізації до місцевого спеціалізованого центру з переробки відходів;
- Спочатку зніміть резервуар, за допомогою викрутки відкрутіть гвинти в нижній частині корпусу;
- За допомогою інструменту вийміть кронштейн механізму з корпусу і переріжте кабель акумулятора;

Попередження

- Не підключайте пристрій до джерела живлення після виймання акумулятора
- Не піддавайте батарею впливу вогню і не розміщуйте її в місцях з високою температурою, щоб запобігти вибуху батареї або виділенню токсичних і шкідливих речовин.

Важливе нагадування про техніку безпеки



Важливо

- Цей виріб відповідає стандартам безпеки для електромагнітного обладнання. з будь-яких питань, пов'язаних з кардіостимуляторами або іншими імплантуються пристроями, будь ласка, проконсультуйтеся з вашим лікарем або виробником імплантується пристрою перед використанням виробу;
- Будь ласка, використовуйте вказаний адаптер для зарядки даного пристрою;
- Не розміщуйте виріб в місця з високою температурою або вологістю і уникайте попадання прямих сонячних променів;
- Цей виріб не є іграшкою і при використанні неповнолітніми має перебувати під наглядом дорослих;
- Категорично забороняється самостійно ремонтувати, розбирати або модифікувати пристрій. Будь ласка, зверніться до спеціально відведеного для цього підрозділу післяпродажного обслуговування.

Важливе нагадування про техніку безпеки



Попередження

- Цей продукт використовується замість традиційної зубної нитки для очищення проміжків між зубами, яснами та язиком, а не для будь-яких інших цілей;
- Якщо під час використання виникне будь-який дискомфорт або біль, будь ласка, негайно припиніть використання даного продукту і своєчасно зверніться до лікаря;
- Не наливайте в ємність для води окріп температурою вище 40°C і не чистіть рот, щоб уникнути опіків;
- Будь ласка, переконайтеся, що інтерфейс мережевої вилки повністю висох під час зарядки;
- Якщо ви перенесли операцію на ротовій порожнині або яснах протягом попередніх 2 місяців, проконсультуйтеся зі своїм стоматологом перед використанням цього продукту.



Модель: P12

Назва продукту: Електричний стоматологічний іригатор

Виробник: Dongguan Infly Life Technology Co., Ltd

Адреса: кімната 202, корпус 1, вулиця Кайсінь, 36, місто Даоцзяо, Дунгуань, провінція Гуандун, Китай.

Умови несправності	Можлива причина	Рішення
Не вдається завантажитися, індикатор не загоряється при натисканні кнопки включення	низький заряд батареї	зарядіть пристрій
Короткий час автономної роботи після зарядки	Недостатній час автономної роботи або зменшений час автономної роботи	Зарядіть пристрій і зверніться в службу підтримки клієнтів
Індикатор не загоряється при зарядці m	Відключення джерела живлення	Знову підключіть джерело живлення та замініть зарядний кабель
Занадто низький тиск води	Пошкоджений засмічення в наконечнику, розряджений акумулятор	Замініть наконечник і зарядіть пристрій

Дякуємо Вам за те, що вибрали нашу продукцію. Ми надаємо річну безкоштовну гарантію на рукоятку і нерозпечатані наконечники, щоб ефективно захистити право споживачів користуватися нашою високоякісною продукцією з упевненістю і задоволенням.

У разі виявлення будь-якої несправності протягом 12 місяців з дати покупки, якщо вона буде підтверджена нашим центром післяпродажного обслуговування як проблема якості, Вам буде надано безкоштовний ремонт.

Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або дефекти, які не пов'язані з якістю продукції, включаючи, але не обмежуючись ними:

1. Поломка або пошкодження, спричинені стихійними лихами, землетрусами, ударами блискавки, аномальним напруженням та факторами навколишнього середовища;
2. розбирання, модифікація або заміна неоригінальних деталей проводиться самостійно або виробником, який не уповноважений оригінальним виробником.;
3. недотримання вимог інструкції з експлуатації або пошкодження, викликані неправильним використанням, наприклад, неправильним струмом і напругою, підключенням пристрою до невідповідної розетки або іншими техногенними пошкодженнями.
4. Якщо вам потрібен ремонт в рамках гарантії, будь ласка, заповніть гарантійний талон. Якщо ми не зможемо виконати зобов'язання з безкоштовного гарантійного обслуговування через неточну інформацію, відповідальність за це будете нести ви.
5. Для отримання детальної інформації про сервісне обслуговування та гарантії, будь ласка, відвідайте наш офіційний веб-сайт.

Гарантійний талон



Дякуємо Вам за те, що вибрали наш продукт. Ми надамо вам 12 місяців післяпродажного обслуговування. У разі виникнення будь-яких пошкоджень, не пов'язаних з діяльністю людини, протягом цього періоду ми забезпечимо заміну, а не ремонт.

Будь ласка, заповніть наступну форму та надішліть несправний товар назад продавцю.

Ми сподіваємось, що ви ніколи не скористаетесь цією картою.

Причина збою	
Ім'я	
Контактна інформація	
Адреса для повернення або заміни	
Канал покупки	
Номер замовлення.	