



Керівництво
користувача


зубна щітка Infly
T20040BIN/T04

Привіт, я дитина-Джин.

Мені подобається грати з дітьми.


Перед використанням, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію і запобіжні заходи, перевірте комплектність пакувальних приладдя.

Щоб отримати найновішу інформацію про мене, будь ласка, слідкуйте за моїм публічним обліковим записом WeChat.

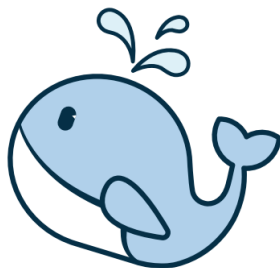



Прикріплення зубної щітки

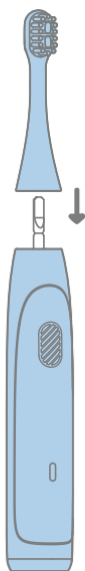

1

Вийміть ручку
зубної щітки та
головку щітки



2

Міцно притисніть
головку щітки до
ручки




3

Переконайтеся, що
напрямок вигину
головки щітки
відповідає напрямку
рукоятки




Опис зубної щітки

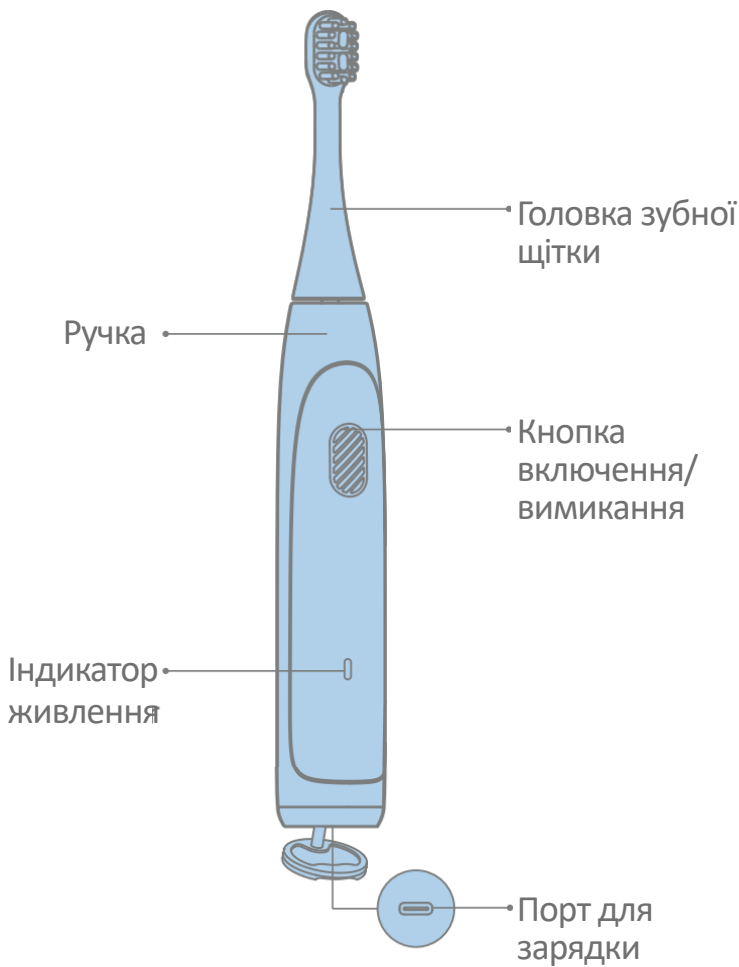





Вміст упаковки

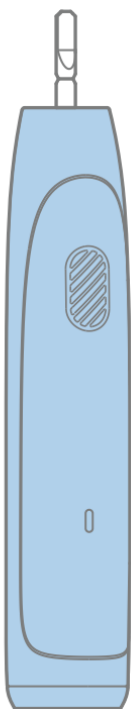

Ручка зубної
щітки

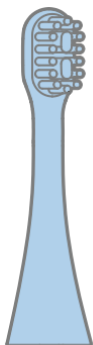

Головка зубної
щітки

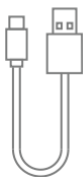

Кабель типу C



Керівництво
користувача



Інструкції з експлуатації



Включення живлення

Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення, щоб увімкнути живлення.
Безперервно натискайте на кнопку, щоб переключити режим чищення.



Відключення живлення

1. Після послідовного перемикання всіх режимів ще раз натисніть кнопку для виключення живлення.
2. Після вибору режиму протягом 5 секунд натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути живлення.
3. Автоматичне відключення живлення через 2 хвилини.



Зарядка

1. Увімкніть електричну зубну щітку, якщо індикатор блимає (з вібрацією) 3 рази, її необхідно зарядити.

Будь ласка, перед зарядкою переконайтеся, що ручка зубної щітки чиста і суха.

Підключіть ручку зубної щітки до електричної розетки за допомогою зарядного кабелю Type-C.

Будь ласка, від'єднайте зарядний кабель і щільно закрийте нижню кришку після зарядки.

2. Індикатор повільно блимає під час зарядки і не гасне при повній зарядці.

Модель: T20040BIN

Назва продукту: дитяча електрична зубна щітка

Виробник: Dongguan Infly Life Technology Co., Ltd.

Адреса: кімната 202, корпус 1, вулиця Кайсінь, 36,
місто Даоцзяо, Дунгуань,
провінція Гуандун, Китай.



RoHS IPX7  ЗРОБЛЕНО В КИТАЇ 



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Cancer-www.P65Warnings.ca.gov .



Зарядка

Ця зубна щітка оснащена захистом від надлишкового тиску.

Коли тиск стає занадто високим, індикатор двічі блимає (з вібрацією), потім потужність двигуна автоматично знижується для захисту зубів, а після відновлення тиску вона нормалізується.



Поширені запитання

1. Чому зубна щітка не включається?

Перевірте, чи повністю заряджена зубна щітка.
Перед повторною спробою повністю зарядіть зубну щітку.



2. Чому вібрація слабшає і в процесі чищення виникає коротка пауза? Ця зубна щітка оснащена захистом від надлишкового тиску.

Коли тиск стає занадто високим, потужність двигуна автоматично знижується для захисту зубів, що відповідно послаблює вібрацію.
І незабаром зубна щітка двічі зупиниться, щоб нагадати дітям про це. Після відновлення тиску воно стане нормальним.



Важливе зауваження з техніки безпеки

1. Перш ніж викинути зубну щітку, необхідно витягти батарею;
2. Акумулятор повинен бути витягнутий при вимкненому живленні;
3. Акумулятор слід безпечно утилізувати;
4. Розбирання повинна проводитися тільки професіоналами.



Етапи вилучення батареї:

1. Зніміть нижню кришку;
2. Зніміть вузол опори переміщення з корпусу;
3. Нагрійте контакти акумулятора електричним ферохромом, щоб вийняти акумулятор.



Підтримка

- Вимийте головку щітки і щетинки після використання і дайте їм висохнути природним шляхом.
- Будь ласка, не тягніть за щетину, інакше вона легко деформується, що може призвести до її випадання.
- Не занурюйте ручку у воду на тривалий час.
- Не чистіть зубну щітку водою вище 40°C або кислим розчином для чищення.
- Протріть вилку сухою тканиною, щоб уникнути короткого замикання.
- Рекомендується замінювати головку щітки кожні 3 місяці.
- При першому використанні, будь ласка, витратьте залишився заряд акумулятора перед зарядкою.
- Якщо ви не користувалися зубною щіткою протягом 6 місяців, будь ласка, зарядіть її на 3-5 годин перед повторним використанням.
- Під час використання, якщо індикатор зарядки блимає протягом декількох секунд, а потім гасне, це означає Низький заряд батареї.
- Підключіть ручку зубної щітки до зарядного кабелю та переконайтеся, що кабель підключений до джерела живлення.
- Індикатор повільно блимає під час зарядки і продовжує горіти при повній зарядці. Якщо він не заряджався протягом 6 місяців, індикатор не буде блимати до тих пір, поки він не буде заряджений протягом 6-10 хвилин.





Політика післяпродажного обслуговування

Дякуємо Вам за те, що вибрали нашу продукцію. Ми надаємо річну безкоштовну гарантію на виріб і нерозпечатану головку, щоб ефективно захистити право споживачів користуватися нашою високоякісною продукцією з упевненістю і задоволенням.

У разі виявлення будь-якої несправності протягом 12 місяців з дати покупки, якщо вона буде підтверджена нашим центром післяпродажного обслуговування як проблема якості, Вам буде надано безкоштовний ремонт.

Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або дефекти, які не пов'язані з якістю продукції, включаючи, але не обмежуючись ними:

1. Поломка або пошкодження, спричинені стихійними лихами;
2. Непрофесійне розбирання, модифікація або заміна неоригінальних деталей самостійно або неавторизованою третьою стороною;
3. Недотримання вимог керівництва по експлуатації або пошкодження, викликані неправильним використанням, включаючи неправильний струм / напруга, невідповідну розетку або інші штучні пошкодження і т. д.
4. Для проведення ремонту в рамках гарантії, будь ласка, заповніть гарантійний талон. Безкоштовне гарантійне обслуговування надається тільки на підставі точної інформації.

Для отримання детальної інформації про сервісне обслуговування та гарантії, будь ласка, відвідайте наш офіційний веб - сайт або зателефонуйте за номером 400-026-8026



Гарантійний талон

Дякую, що відвезли мене додому!

Ми надамо вам післяпродажне обслуговування протягом 12 місяців. У разі виникнення будь-яких пошкоджень, не пов'язаних з діяльністю людини, протягом цього періоду ми забезпечимо заміну, а не ремонт.

Ми сподіваємось, що ви ніколи не скористаетесь цією картою.



Причина збою	
Ім'я	
Контактна інформація	
Адреса для повернення або заміни	
Канал покупки	
Номер замовлення.	