


SKG


Масажер для тіла F3 LITE

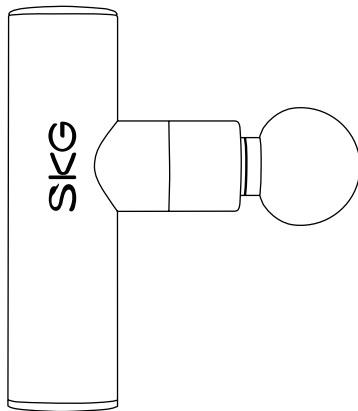

Початок роботи та випробування

Основний корпус

Головка масажера
(чотири заміни)

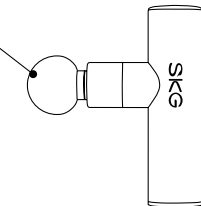


Кнопка потужності/ рівня інтенсивності

Натисніть та утримуйте впродовж 2 секунд: Потужність /Вимкн.; Здійсніть коротке натискання для увімкнення рівня інтенсивності

Індикатор рівня інтенсивності
Вказує рівень інтенсивності масажера для тіла. Початковим рівнем є рівень 1 під час увімкнення. Здійсніть коротке натискання кнопки потужності/рівня інтенсивності, щоб переключити інтенсивність з рівня 1 до рівня 4.

Частина для заряджання

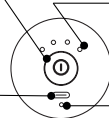

Індикатор заряджання

* Натисніть та утримуйте впродовж 2 секунд нижню кнопку Потужності/рівня інтенсивності, щоб почати роботу пристрою. Здійсніть коротке натискання кнопки потужності/рівня інтенсивності, щоб переключити інтенсивність рівня. Перемикання відбувається назад і вперед від рівня 1 до рівня 4. За нормального рівня потужності індикатор рівня інтенсивності світитися по порядку.


* Коли потужність низька, індикатори блимають при поточному рівні інтенсивності. Пристрій вимикається, коли закінчується заряд.

* Режим заряджання: підключіть зарядний кабель Type-C. Червоний індикатор горить, коли починається зарядка, і зелений, коли пристрій повністю заряджений.

* Цей продукт має функцію таймеру, яка автоматично припиняє роботу після запуску протягом 10 хвилин.

* Час автономної роботи на максимальному рівні інтенсивності становить близько 2,5 годин, а на мінімальному - 4 години. Термін служби батареї залежить від різних рівнів інтенсивності.

* Перед першим використанням рекомендується повністю зарядити акумулятор.

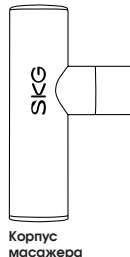

Корпус масажера



Кулеподібна
масажна голівка
Для великих груп
м'язів



U-подібна
масажна голівка
Для області хребта



Плоска
масажна голівка
Для усіх частин
тіла



Циліндрична
масажна голівка
Для області суглобів



Зарядний кабель Type-C

Технічні параметри

Назва виробу	Масажер для тіла	Номінальна вхідна потужність	10W
Модель	S4137HA	Номінальна вхідна напруга	5V $\pm$
Ємність акумулятора	650mAh/4.81Wh		

* Примітка: Виріб підлягає повторному заряджанню. Будь-ласка, заряджайте його за допомогою інтерфейсу Type-C. Користувачі повинні використовувати стандартний зарядний пристрій з вихідною напругою 5V $\pm$ 2A.

Застереження щодо утилізації продукту

Будь ласка, підтримайте переробку акумуляторних батарей (літій-іонних батарей).



Небезпека

Батарея, яка використовується в цьому продукті, є спеціальною акумуляторною батареєю, яку заборонено використовувати в інших продуктах. Не намагайтеся заряджати батарею, якщо вона вийнята з приладу.

- Не перегрівайте батарею, кидаючи її у вогонь
 - Не проколюйте батарею цвяхами, уникайте впливу на неї під дією сили тяжіння та не розбирайте батарею для модифікації
 - Не з'єднуйте позитивний і негативний полюси акумулятора безпосередньо з металом
 - Не зберігайте батарею разом з намистом, шпильками для волосся та ін.
 - Не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте батарею у місцях з високою температурою повітря, як наприклад, каміни або під печучим сонцем
- Усе вищенаведене може спричинити перенагрів, займання, розрив та ін.

 Увага	З метою запобігання випадковому ковтанню, будь-ласка, зберігайте вийняту батарею у недоступних для дітей місцях. - У разі випадкового проковтування негайно зверніться до лікаря - У разі витікання з батареї рідини, просимо не торкатися рідини голими руками - При потрапленні рідини батареї в очі, існує ризик виникнення сліпоті. Не тріть очі безпосередньо руками, а негайно промийте їх чистою водою та зверніться до лікаря. - Якщо ваше тіло або одяг забруднені електродом акумулятора, це може спричинити запалення або травму шкіри. Будь ласка, змийте водою. Якщо ви все ще відчуваєте дискомфорт, негайно зверніться до лікаря. - Під час утилізації можна розібрати лише виріб. Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травм та інших нещасних випадків. Якщо виникла потреба у ремонті (за винятком заміни батареї), зверніться до магазину, де ви придбали продукт.
---	--

Літєва батарея, яка використовується в цьому продукті, є цінним ресурсом, який можна переробити. Тому, будь ласка, витягніть літій-іонну батарею, коли пристрій буде утилізовано, і передайте її до професійної організації, яка займається переробкою акумуляторних батарей для утилізації.

- Перш ніж викинути пристрій, з нього необхідно витягнути батарею;

- Пристрій необхідно вимкнути перед вийманням батареї;

- Батареї слід утилізувати безпечним шляхом.

Кроки при вийманні батареї:

1. Використовуйте інструмент, щоб відкрити оболонку
2. Використовуйте ножиці, щоб окремо відрізати кабелі акумулятора
3. Виберіть батарею.

Технічне обслуговування



Не зберігайте пристрій під прямими сонячними променями



Не зберігайте пристрій при високій температурі та при високій вологості повітря



Не зберігайте пристрій поблизу джерел диму та вогню



Не зберігайте пристрій у середовищі з надмірним пилом.

* Тримайте пристрій подалі від твердих предметів, уникайте ударів і подрапин.

* Щоб очистити зовнішню поверхню пристрою, протріть його м'якою тканиною, змоченою у відповідній кількості спирту.

* Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, рекомендується заряджати його раз на місяць, щоб підтримувати рівень заряду батареї вище 20%.

Інструкції з техніки безпеки

- З метою уникнення завдання шкоди, не рекомендується масажувати цим виробом безпосередньо поверхню шкіри. Одягайте сухий та чистий одяг або відкрийте зону масажу чистим та сухим рушником, після цього обережно натисніть та рухайте масажний пістолет
- Використовуйте високу швидкість і сильний тиск на м'яких частинах тіла лише тоді, коли не відчуваєте болю та дискомфорту, та не використовуйте високу швидкість та сильний тиск на голову та будь-які кісткові частини тіла
- Часте застосування високої швидкості або високого тиску на ту саму частину може спричинити потертості, тому негайно припиніть масаж, якщо виникне біль чи дискомфорт
- З метою уникнення виникнення болю або травм, слідкуйте, щоб ваші пальці, волосся або будь-яка частина тіла не потрапила до висувної частини пристрою.
- Не викидайте та не використовуйте виріб не за цільовим призначенням

- Не намагайтеся здійснити будь-які несанкціоновані зміни виробу
- Не залишайте без нагляду виріб, що використовується або заряджається
- Даний виріб призначений тільки для використання дорослими
- Особи, що мають протипоказання повинні використовувати даний виріб, отримавши для цього дозвіл лікаря

Примітки

- Перш ніж увімкнути виріб, будь-ласка, переконайтеся, що перед масажною головою відсутні будь-які перешкоди. Якщо вона заблокована зовнішньою силою, призупиніть незадовго до повторного запуску
- Цей виріб не є водонепроникним. Будь-ласка, не занурюйте його у воду або інші рідини
- Не розбирайте виріб. Якщо ж виріб помилково все ж був розібраний та працює неналежним чином, то будь-ласка, поверніть його для введення в експлуатацію. Усі пов'язані з цим витрати сплачує користувач.
- Довготривала безперебійна робота пристрою може привести до нагрівання поверхні мотору. Будь-ласка, будьте обережні при використанні виробу.
- Не кидайте виріб та піддавайте його дії ударів, у протилежному випадку він може пошкодитися та працювати неналежним чином. Якщо виріб не працює внаслідок падіння або удару, вчасно зв'яжіться зі службою післяпродажного обслуговування.

Застереження

Протипоказання

- Виріб заборонено використовувати людям, хворим на рак
- Виріб заборонено використовувати людям, що мають внутрішню фіксацію за допомогою спікул (заборонено використовувати виріб безпосередньо на місці перелому)
- Виріб заборонено використовувати людям, що хворіють на остеопороз
- Виріб заборонено використовувати людям, що хворіють на венозний тромбоз та пульсацію

- Виріб заборонено використовувати людям, що страждають на серцеву недостатність та високий кров'яний тиск
- Вагітні жінки повинні використовувати виріб з особливою обережністю (при використанні уникати зони поблизу живота)
- Люди, що мають камені у нирках повинні використовувати виріб з особливою обережністю (при використанні уникати зони поблизу нирок)
- Виріб заборонено використовувати людям, що страждають на вазодилатацію
- Виріб заборонено використовувати людям, що страждають на гостре запалення
- Не використовувати виріб для масажу колінної чашечки, великогомілкової кістки, плеснової та інших частин кісток
- Не використовувати виріб для масажу безпосередньо хребта
- Не використовувати виріб для масажу безпосередньо шийного відділу хребта
- Не використовувати виріб для масажу безпосередньо лицевих м'язів
- Виріб заборонено використовувати людям, що мають у тілі медичні електронні імпланти, наприклад, кардіостимулятори
- Не використовувати у стані голоду, переїдання та алкогольного сп'яніння.
- Не масажуйте ту саму зону понад 4-5 хвилин
- Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати пристрій для людей, що страждають на шийний і поперековий спонділоз
- Протягом використання або при увімкненні не кладіть пальці у отвір масажної головки, щоб уникнути травм.

Додатки

- Розслаблення до та після фізичного тренування
- Реабілітаційне тренування
- Зняття болю м'язів та втоми фасції
- Допомога при фізичних тренуваннях
- Розслаблення м'язової фасції та м'яких тканин



Небезпечно!

- Не використовувати під час заряджання