

OneGloss M

MOUNTED

Финиры и полиры One-step
для композитов и эмали



Финирирование и полировка

Силиконовые полиры One-step с оксидом алюминия обеспечивают идеальную финишную обработку композитных реставраций – путем простой регулировки контактного давления во время рабочего процесса от обработки до полировки.

- Полиры OneGloss M смонтированы на хвостовике углового наконечника из высококачественной стали, их можно стерилизовать
- Обработка с высоким давлением прижима (около 1,0 Н)
- Полировка со слабым давлением прижима (около 0,3 Н)
- Удаление лишнего композита или цемента и полировка эмали с давлением от умеренного до слабого
- Полировка эмали после удаления брекетов и зубного камня или для устранения окрашивания лишь со слабым давлением прижима
- Рекомендуемый диапазон числа оборотов от 3.000 мин.⁻¹ до 10.000 мин.⁻¹ с периодическим включением водяного спрея; не превышать максимально допустимое число оборотов 15.000 мин.⁻¹



ОДНИМ ИНСТРУМЕНТОМ

Выбор формы

Ассортимент включает четыре формы, которые оптимально соответствуют обрабатываемым поверхностям зубов.


Чаша

для бугорков, режущего края, области окклюзии



Конус Midi

для лабиальных, лингвальных, буккальных, окклюзионных областей

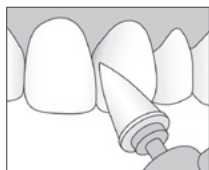


Конус Mini

для фиссур, пришеечной области



IC

для лабиальных, лингвальных, буккальных, межзубных областей

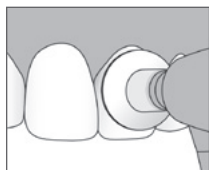

Информация для заказа

OneGloss M

с хвостовиком углового наконечника, 12 шт. в упаковке



Форма: конус Mini

Номер 0186



Форма: чаша

Номер 0187



Форма: конус Midi

Номер 0188



Форма: IC

Номер 0189



Manufacturer
SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho,
Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japan

[EC] [REP] SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany

www.shofu.de