



## Інструкція по застосуванню

### Накладання двома руками

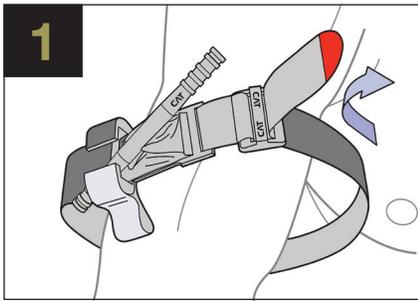


1  
Обгорніть стрічку турнікету навколо кінцівки, проведіть червоний кінець через отвір в пряжці. Розмістіть турнікет на 5-7см вище рани, та не опосередковано на шкіру\*

### Накладання однією рукою

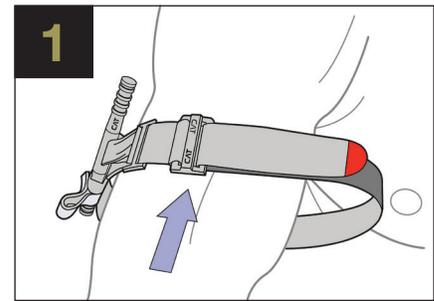


1  
Просуньте руку у петлю, розмістіть турнікет на 5-7см вище рани та не опосередковано на шкіру\*


АБО

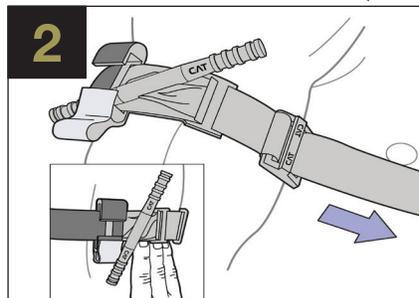


2  
Максимально міцно затягніть турнікет різко потягнувши за вільний кінець та закріпіть кінець до клейкої стрічки так, щоб він перекривав фіксатор. Турнікет повинен бути затягнутий так, щоб кінчики трьох пальців не можна було просунути під стрічкою.

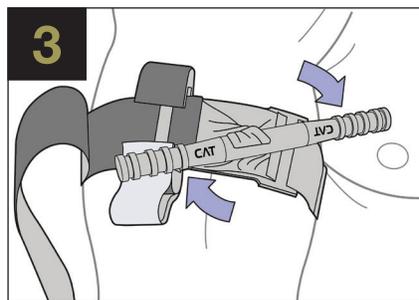

3  
Обертайте важіль до повної зупинки кровотечі.

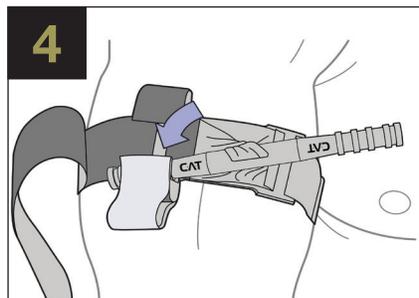

4  
Зафіксуйте важіль у фіксатор. Перевірте відсутність пульсу нижче місця накладення турнікету та впевніться що кровотеча зупинена. При невиконанні будь якої з цих двох умов затягніть турнікет міцніше або розгляньте накладення другого турнікету одразу вище попереднього. Після успішного накладення чи перетискання ще раз перевірте ефективність.

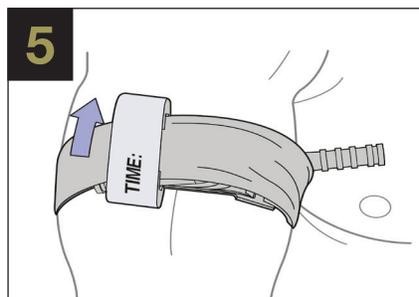


5  
Зафіксуйте важіль - проведіть вільний кінець стрічки між фіксаторами притискаючи важіль, та закріпіть стрічку на клейку стрічку. Зафіксуйте стрічку. Закріпіть стрічку для вказування часу "TIME". Напишіть час накладення.


\* У разі якщо немає часу чи можливості знайти точне місце кровотечі, джгут може бути накладено вище. Турнікет не можна накладати на тверді частини одягу ( гудзики, і т.д.). При першій же можливості кінцівку необхідно оглянути, знайти джерело кровотечі та накласти турнікет на 5-7см вище рани.




## Зберігання джгута у бойовій позиції

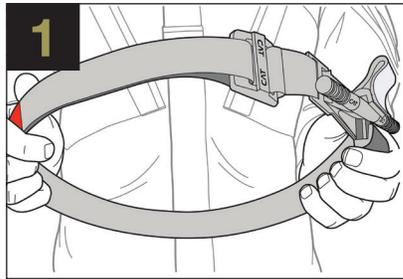

Протягніть червоний кінець стрічки через отвір у пряжці приблизно на 20 см та закріпіть на клейку стрічку

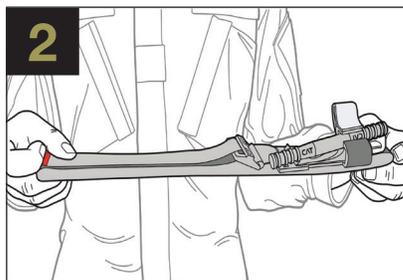

Потягніть за протилежні кінці утвореної петлі так щоб пряжка опинилась посередині.

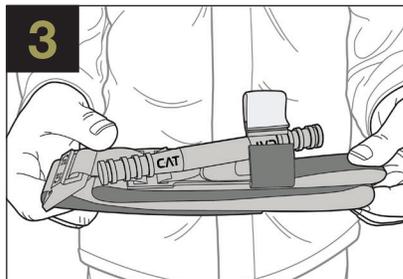

Тепер **CAT** готовий для збереження у вашій аптечці.

### LIMITATION OF LIABILITY:

C-A-T Resources, LLC, its parent company Composite Resources, Inc., its employees, agents, contractors, suppliers, and distributors shall assume no liability for injury or damages arising from the application or use of the Combat Application Tourniquet® (**CAT**). The user assumes all risk of liability. The **CAT** should only be used as directed by user's military service component guidelines, EMS authority, or under the supervision of a physician, and in strict compliance with these Instructions for Use.

### STANDARD USE GUIDELINES

When applied in accordance with directions, the Combat Application Tourniquet® (**CAT**) is a safe and effective device for controlling life-threatening extremity bleeding. The **CAT** has a Maximum Operating Circumference of 35in (88.9cm). The use of any tourniquet for longer than 2 hours may lead to permanent neurological or muscular damage. If you cannot be sure or cannot take the additional time to examine where the bleeding is coming from based on the situation, the **CAT** can be effectively applied over clothing as high on the arm or leg as possible. The **CAT** must NOT be applied over solid objects within the clothing. As soon as the situation permits, the injured limb should be evaluated and the **CAT** re-positioned 2"-3" above the injury directly to the skin. The **CAT** should be stored in a cool, dry place away from direct sunlight. Re-use of this single use device may introduce risk of infection. Dispose of used **CAT** in accordance with local regulations for biomedical waste. Please report all serious incidents in relation to the **CAT** to the manufacturer and appropriate regulatory authority.

Combat Application Tourniquet® and **CAT** are trademarks registered in the United States and certain other countries.

U.S. Patent Nos. 7,842,067; 7,892,253; 8,888,807; 10,016,203;  
Canada Patent No. 2,569,550;  
EU Patent Nos. 1,753,344; 2,425,786;  
Israel Patent No. 179769;  
Hong Kong Patent No. 1,163,479;  
Other Patents Pending

Manufactured by C-A-T Resources, LLC  
483 Lakeshore Pkwy, Rock Hill, SC 29730  
United States of America  
803.325.9300



NSN 6515-01-521-7976



PN 30-0001

Tactical Black



INST-001 REV02



Exclusive distribution in the U.S. by:  
North American Rescue®, LLC  
1-888-689-6277  
www.NARescue.com  
info@NARescue.com

Зберігати в сухому, прохолодному місці, уникати потрапляння прямих сонячних променів.



TACTICAL BLACK  
NSN 6515-01-521-7976



TRAINER BLUE  
NSN 6910-01-560-2972



EMS ORANGE  
NSN 6515-01-612-7129