

Знайомство з Sinocare Heaco iCan CGM

2025

Зміст


- **Що таке CGM**
- **Sinocare Heaco iCan CGM**
- **Огляд ПО**



Що таке CGM?

● Принцип роботи CGM

Система безперервного моніторингу глюкози (CGM или БМГ) вимірює рівень глюкози **в інтерстиціальній рідині** з допомогою засобу, який кріпиться на тілі.

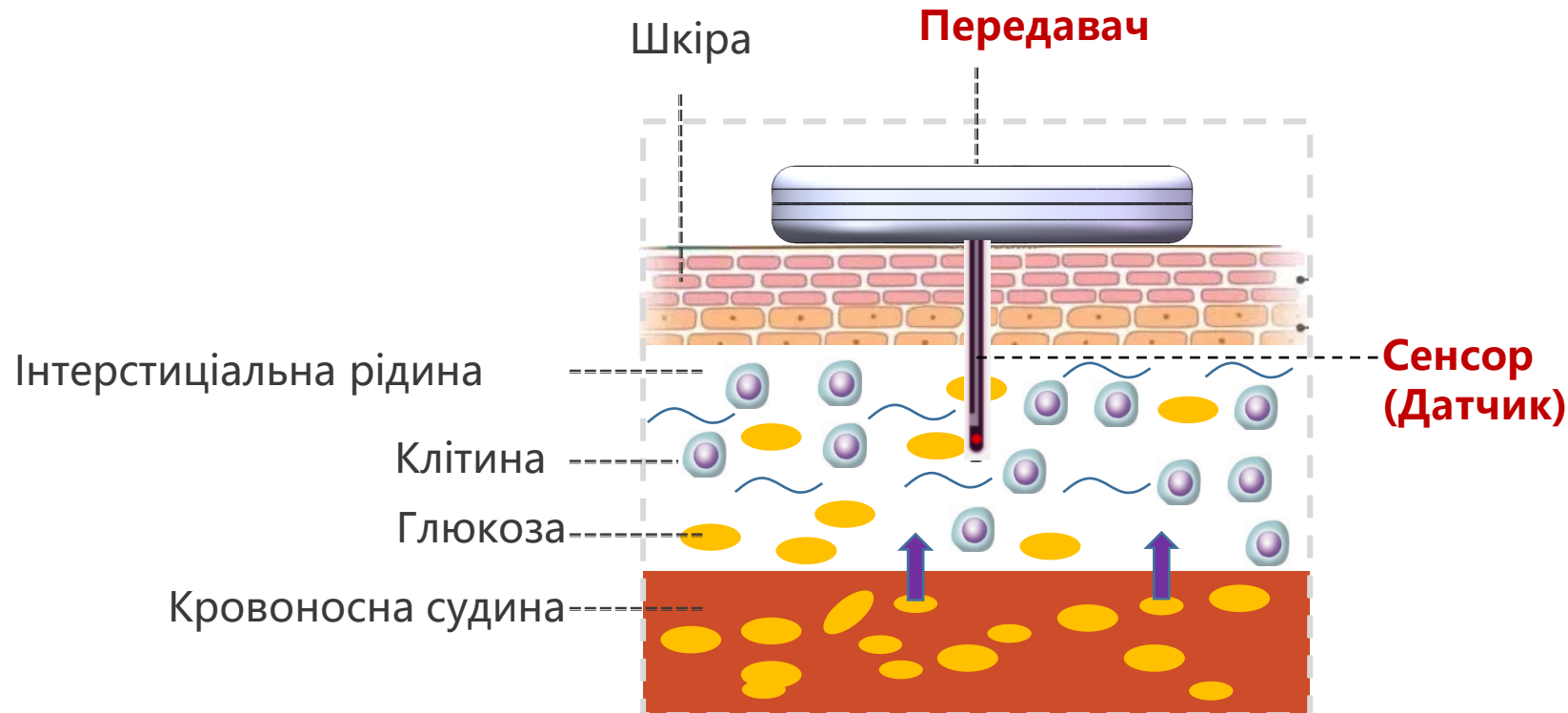

Технології для моніторингу рівня глюкози в крові

SMBG

Самоконтроль рівня глюкози в крові (SMBG)

При методах SMBG для отримання зразка крові використовується прокол пальця, який потім аналізується за допомогою глюкометрів.



CGM

Безперервний моніторинг глюкози (CGM)

CGM використовує сенсор, який вставляється під шкіру і знімає показання не з крові, а з інтерстиціальної рідини (рідина між кровоносними судинами і клітинами).



HbA1c



Глікований гемоглобін

Аналіз HbA1c - це аналіз крові, який використовується для діагностики діабету 2 типу. Цей показник також використовується для контролю рівня глюкози в крові у людей з діабетом.




Різниця в технологіях

CGM може відобразити інформацію про глюкозу крові **більш детальноше і вичерпніше**, ніж BGM і HbA1c

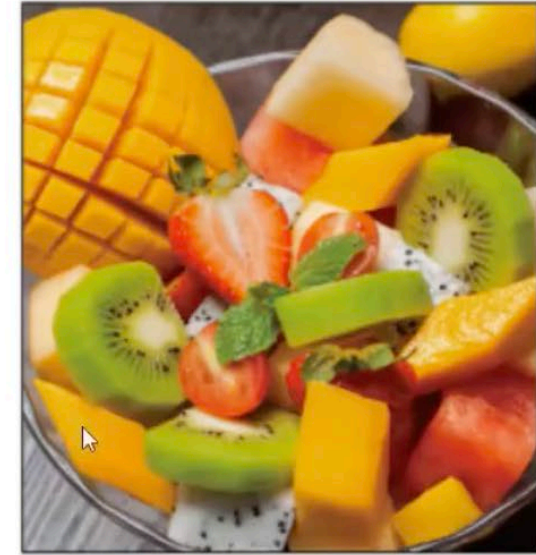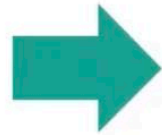

CGM

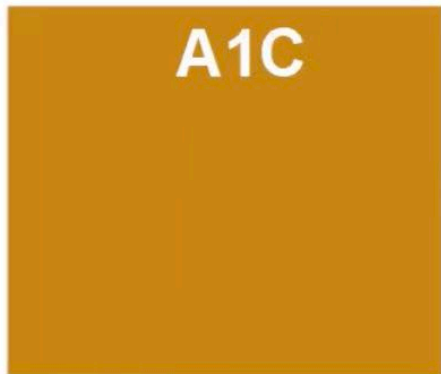

Система CGM

CGM складається з трьох компонентів: сенсор для виявлення глюкози, передавач для передачі даних і програмне забезпечення для аналізу даних.

Виявлення



Маленький сенсор

Вставляється під шкіру,
кріпиться за допомогою
липкого пластиру

Передавання даних




Передавач

Безпроводний

дані

Відображення інформації

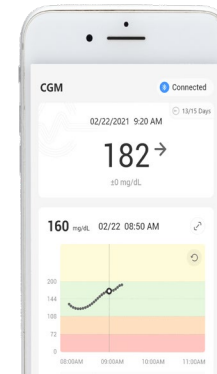


Пристрій

На смартфоні, інсуліновій
помпі або окремому
пристрої (reader)

Чому рівні глюкози в IP можуть використовуватися як індикатори глюкози в крові.

- CGM вимірює рівень глюкози в інтерстиціальній рідині (рідина між клітинами організму).
- Підтверджено, що рівні глюкози в інтерстиціальній рідині є надійним індикатором глюкози в крові, тому що глюкоза вільно дифузує з капілярів в інтерстиціальну рідину.
- Продемонстровано, що існує затримка в часі приблизно на 4-15 хвилин дифузії глюкози від капілярів в інтерстиціальну рідину.

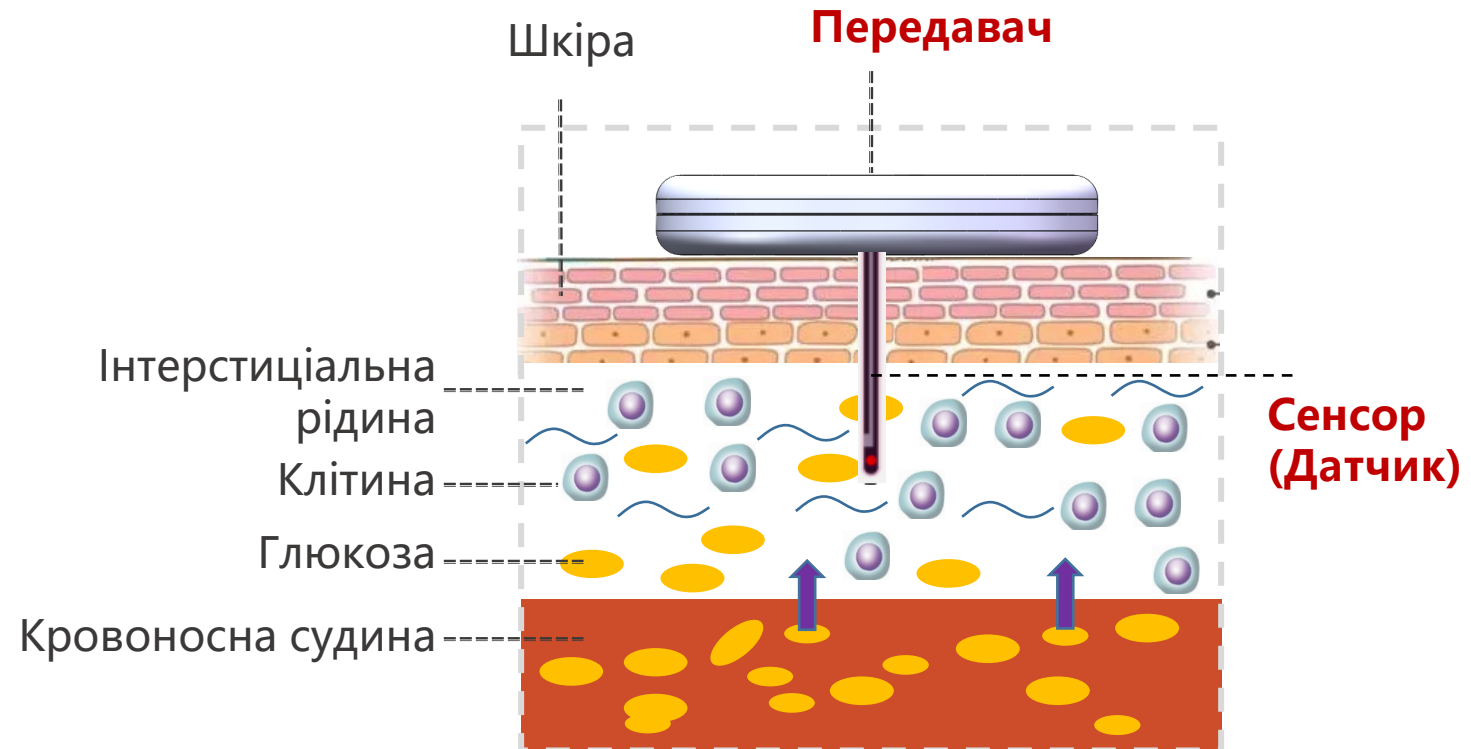


Об'єкт вимірювання CGM та BGM

BGM

Глюкометр

Капілярна кров

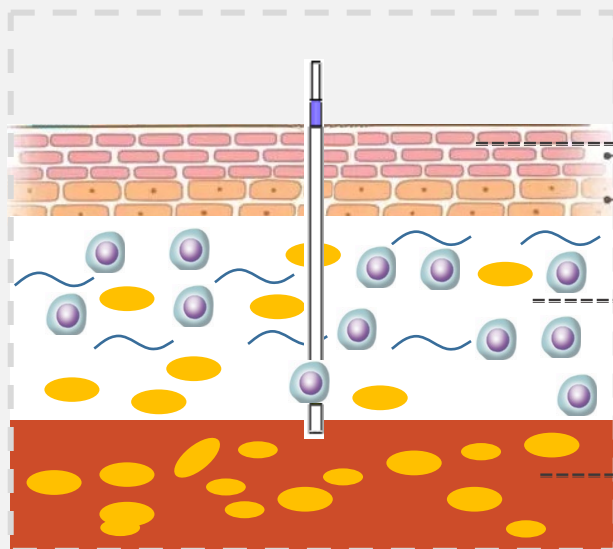

Клітина

Глюкоза

Шкіра

Інтерстиціальна рідина

Кровоносна судина


Рівень глюкози в крові легко **змішується з інтерстиціальною рідиною** і клітинним матеріалом при вимірюванні.

Фактори впливу

CGM

Безперервний моніторинг глюкози

Інтерстиціальна рідина

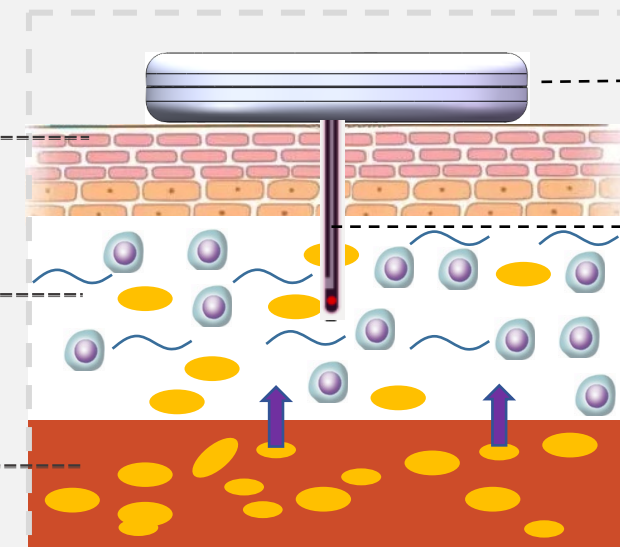

Передавач

Сенсор

Існує **часова затримка** орієнтовно **4 – 15 хв**[1] при дифузії глюкози з капілярів в інтерстиціальну рідину.


Переваги CGM порівняно з BGM

Болючі проколи пальців

Не завжди зручна експлуатація

Неповна картина даних

BGM

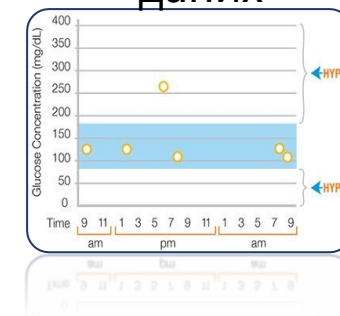


CGM



Без проколів пальця
Без калібрування

Перевіряйте рівень глюкози в будь-який час і в будь-якому місці

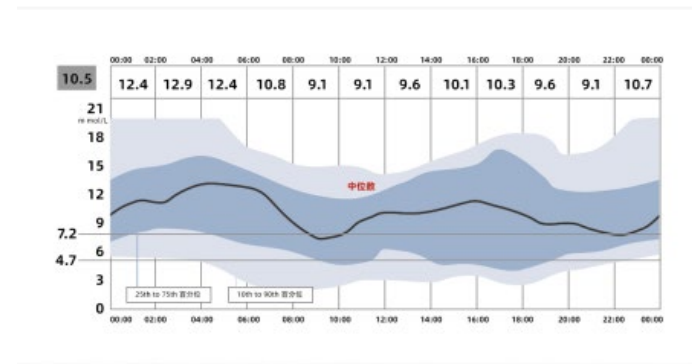

Графік аналізу рівня глюкози. Попередження тенденції рівня глюкози в реальному часі (Сповідення)

Хто може використовувати CGM?

01

Люди з діабетом

Допомагає краще зрозуміти, як розпізнати випадки високого або низького рівня глюкози, як частина більш здорового образу життя.

02

Групи, які займаються фітнесом

Допомагає підвищити продуктивність і загальний рівень фізичної підготовки.

03


Ті, хто сидить на дієті

Допомагає сформувати більш здорові звички в харчуванні, які здатні контролювати за вагою.

04

Інші користувачі

Допомагає розвивати більш здорові звички, що підтримують регуляцію рівня глюкози (людей з преддіабетом і метаболічним синдромом)

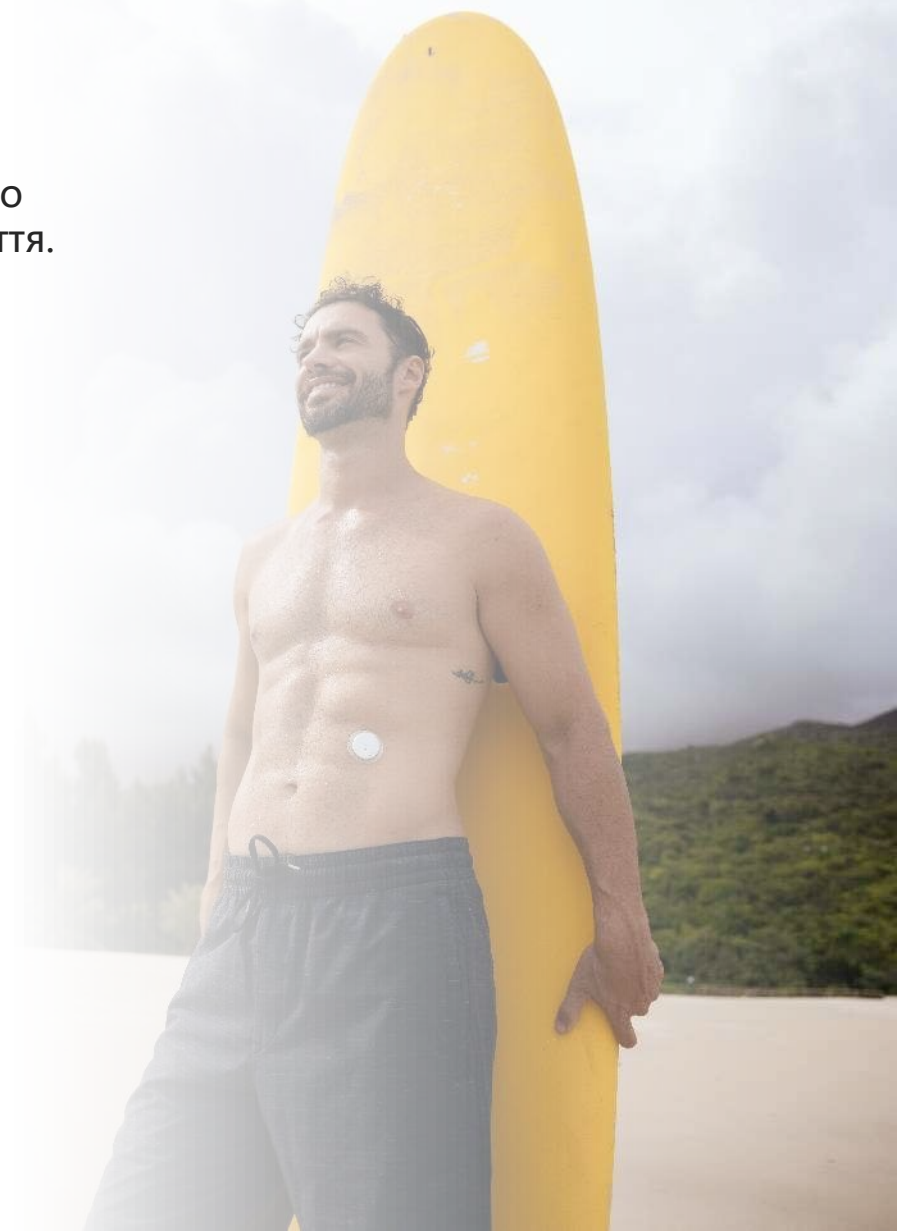


Функції CGM

CGM - Безперервний Моніторинг Глюкози.



Моніторинг глюкози в реальному часі

Оновлення даних кожні 3–15 хвилин

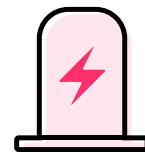

Налаштовувані сповіщення та сигнали тривоги

Можуть попередити користувачів про наближену гіперглікемію або гіпоглікемію, дозволяючи тимчасово прийняти заходи



Аналіз тенденцій

Допомагає зрозуміти вплив їжі, фізичної активності, ліків та інших факторів на рівень глюкози



Калібрування і точність

Заводське калібрування, не потребує ручного калібрування



Класифікація CGM

FGM

- Передача NFC
- Вимагає від користувачів активного датчика сканування для отримання поточних даних про глюкозу.



Abbott Freestyle Libre 1 & 2

CGM реального часу

- Передача по Bluetooth
- Автоматично зберігає дані про глюкозу в крові без додаткового сканування
- Сповіщення про гіперглікемію та гіпоглікемію (високі та низкі цукри)

Один цикл використання

- Проста установка, зручний в експлуатації
- Знижує ризик перехресної інфекції
- Компактний та зручний (у використанні)

Передавач повторного використання

- Складніше для користувача в експлуатації
- Передавач необхідно заряджати.
- Більше роботи для дезінфекції при носінні та установці
- Більший розмір




Dexcom G6

Найкращий досвід для реального часу CGM з одним циклом використання!

Як вибрати CGM?

Реальний час CGM

- Передача по Bluetooth
- Автоматичне зберігання даних про глюкозу
- Сповіщення про гіперглікемію і гіпоглікемію

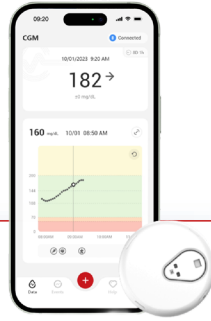

Інтервальні скановані CGM

- Передача NFC
- Вимагає від користувачів активного сканування датчика для отримання поточних даних про глюкозу.




Вибір реального часу CGM

З доступністю повідомлень/сигналів тривоги та можливістю доступу та архівування даних.




Sinocare Heaco iCan i3 CGM

Компоненти Sinocare Heaco iCan i3 CGM

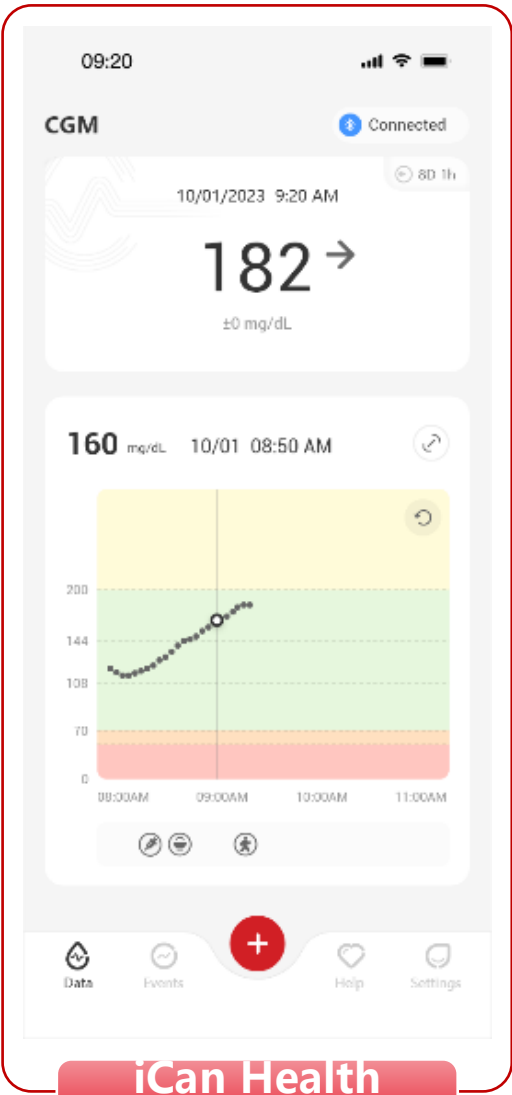

**iCan Health
Додаток**

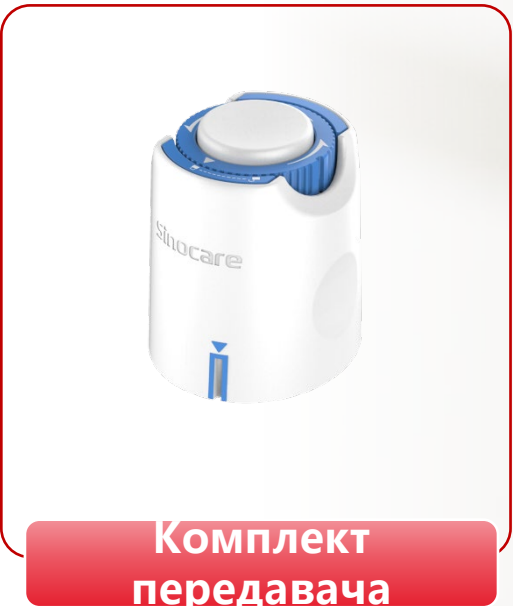


**Комплект
передавача**



**Комплект
сенсора**



Кроки установки


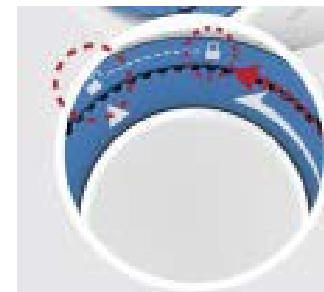


Захист від випадкового встановлення (активації)

Дістаньте сенсор та передавач з упаковок, зберіть їх разом

Передавач активується після від'єднання від магніту монтажного вузла

2-х годинна підготовка сенсора

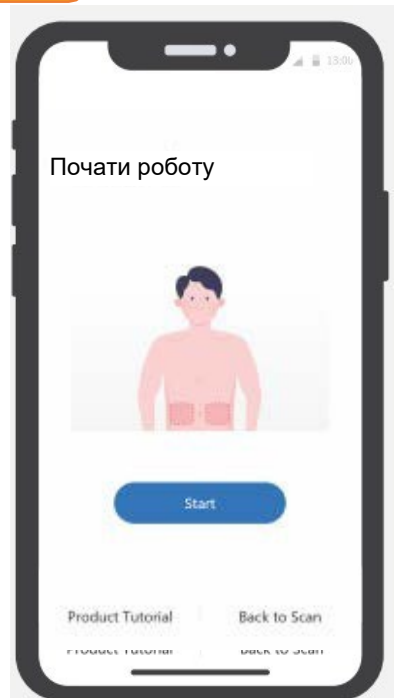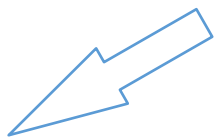

● Рекомендації з безпечного використання




Складання

Щільно втисніть аплікатор сенсора в лоток до **клацання** і повної зупинки.



Розблокування

Обережно поверніть запобіжний перемикач з іконки «Заблоковано» на іконку «Розблоковано» до **клацання**, після чого обертання стане неможливим.

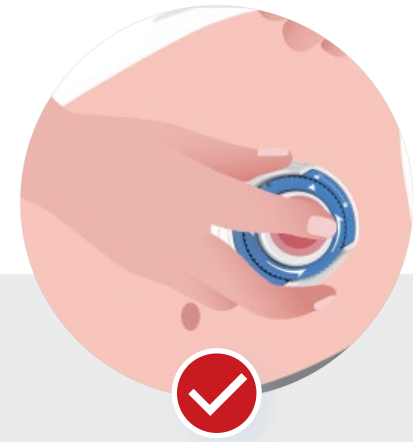

Встановлення

Виберіть місце аплікації (встановлення) і **не рухайте аплікатор**. Нажміть білу кнопку посередині.

Параметри Sinocare Heaco iCan i3 CGM

Виробник

Sinocare

Фото продукту



Модель

iCan i3

Рекомендований вік

Від 2 років

Час моніторингу

15 днів

Місце моніторингу

Живіт/Верхня частина руки

Діапазон вимірювань

2-25 ммоль/л

Спосіб передачі даних

Bluetooth в реальному часі

Робочий ресурс передавача

Один цикл використання

Калібрування

Заводське калібрування

Термін придатності сенсора

18 місяців

Час ініціалізації

120 хвилин

Значення MARD

8,71%

Пристрій для отримання даних

IOS, Android, додаток Google play

Частота передачі даних

3 хвилини

Рівень водонепроникності

IP28 — водонепроникність на глибині 2,5 метра на протязі 2 годин

Вага

6г

Розмір

32*5.7 мм



Параметри Sinocare Heaco iCan i6 CGM(новинка)

Виробник	Sinocare
Модель	iCan i6
Рекомендований вік	Від 2 років
Час моніторингу	15 днів
Місце моніторингу	Живіт/Верхня частина руки
Діапазон вимірювань	2-25 ммоль/л
Спосіб передачі даних	Bluetooth в реальному часі
Робочий ресурс передавача	Один цикл використання
Калібрування	Заводське калібрування
Термін придатності сенсора	18 місяців
Час ініціалізації	30 хвилин
Значення MARD	8,71%
Пристрій для отримання даних	IOS, Android, додаток Google play
Частота передачі даних	3 хвилини
Рівень водонепроникності	IP28 — водонепроникність на глибині 2,5 метри протягом 2 годин
Вага	~2г (~6г для i3)
Розмір	23*3.75 мм (32*5.7 мм для i3)

Незабаром у продажу



8,71%



Значення MARD

15 днів

моніторинг 

Анти-інтерференція
Вітамін С та Ацетамінофен(знеболюючий і жарознижуючий засіб)

Водонепроникність


IP28

2,5 м 2 год

iCan
CGM System




ПЗ

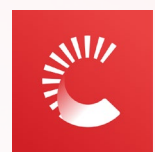

iCan Health
Для Пацієнтів




iCan Review
Для Лікарів

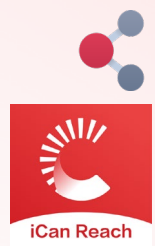

iCan Reach
Для Близьких

AGP 5.0 Звіт

(з TIR) для контролю діабетичних ускладень

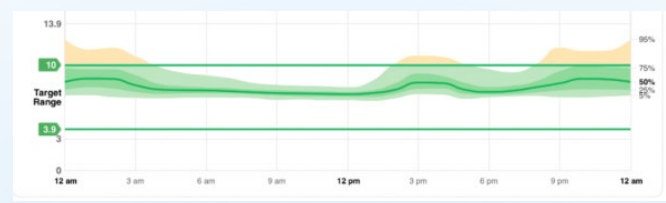

Термін придатності

18 міс.

NO

Калібрування

3 хв.

Частота

Перший в світі CGM з 15-денним терміном використання

● Ключові особливості iCap



15-днів



**Легкий в
використанні**



Точний



Доступний

● Довгий термін носіння

15 днів

Довготривале носіння

**Один
сенсор**

7160 результатів

Medtronic - 7 днів

Dexcom G6&G7 - 10 днів

Abbott Freestyle Libre 1&2&3 - 14 днів

Sibionics - 14 днів

Легкий в використанні



Без проколів пальця

Виключення болю і незручності від проколів пальця

Без сканування

Підключення через Bluetooth, ефективна відстань передачі — 6 метрів.



Без додаткових приладів для підключення даних

Без калібрування

Калібрування на виробництві



Оповіщення про гіпоглікемію/гіперглікемію в реальному часі

Класифікація технології сенсора CGM

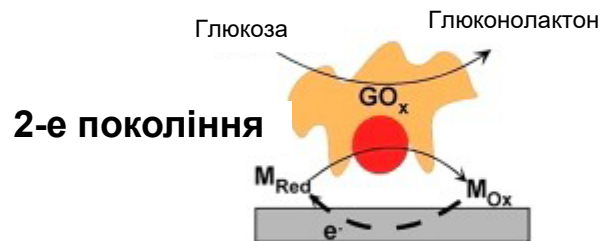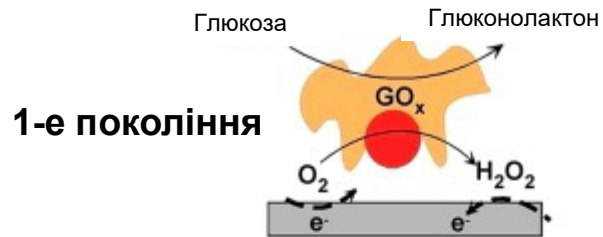

	1-е покоління	2-е покоління	3-е покоління
Реакція	Окислювально-відновлювальна реакція O ₂ / H ₂ O ₂	Медіаторна окисно-відновна дія	Прямий переніс електронів
Субстрат	O ₂	Окислені медіатори	Ні
Продукт	H ₂ O ₂	Відновлені медіатори	Ні
Редокс-потенціал (окислення медіатора)	500 до 700 мВ	50mВ	-50mВ to 100mВ
Фермент	GOx	GOx	GDH
Інтерференти	Парацетамол, O ₂	Аскорбінова кислота, O ₂	Ні
Електрод	Золото, платина чи інші дорогоцінні метали	Вуглець	Вуглець
Виробник CGM	Dexcom, Medtronic	Abbott	Sinocare

Класифікація технології сенсора CGM

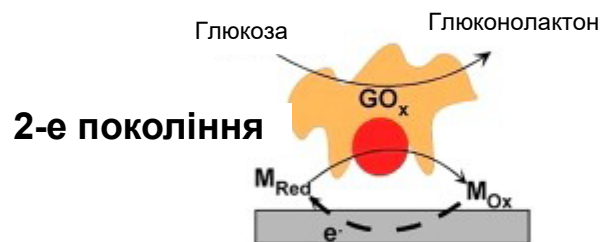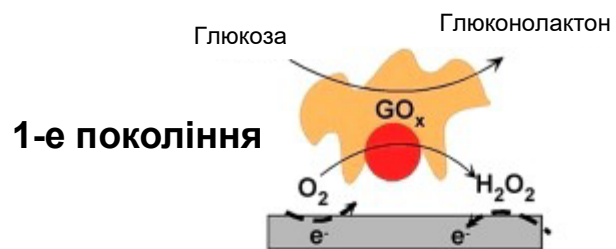

Переваги 3-го покоління

- Висока стійкість до впливу сторонніх чинників
- Більш економна вартість, враховуючи переваги
- Підвищена чутливість сенсора до змін в концентрації глюкози

Точний


Середнє абсолютне відносне відхилення (MARD): обчислення середнього відхилення між результатами тестування обладнання та еталонними значеннями (для оцінки точності CGM)

Клінічні дані показують, що iCan стабільно підтримує відмінну точність тестування **протягом усього терміну служби** пристрою

Маркетинговий стандарт для CGM:
MARD < 15%

	Стадія	Sinocare	Бренд А	Бренд В	Бренд С
MARD	Початкова стадія	9,3%	8,73%	9,53%	11,9%
	Середня стадія	7,3%	8,5%	8,26%	10,8%
	Кінцева стадія	9,6%	11,86%	9,42%	10,8%
Общий MARD		8,71%	8,83%	9,08%	11,4%

Sensor Stability (MARD over Time)

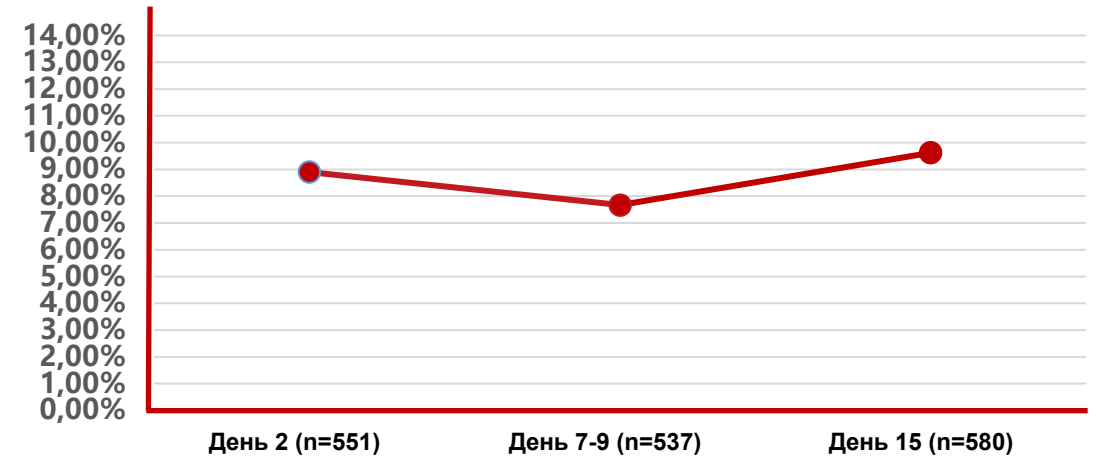

Система iCan CGM продемонструвала одноцифрове значення MARD (<10%) протягом всього терміну служби пристрою

* Дані отримані із загальнодоступних клінічних звітів про оцінку кожного продукту

Винятковий захист від перешкод

Немає впливу звичайних ліків та аномальних метаболічних маркерів в організмі людини, включаючи аскорбінову кислоту.

Класифікація	Назва	Концентрація (мг/дл)	Класифікація	Назва	Концентрація (мг/дл)
Ліки	Парацетамол	20	Метаболіти	Тригліцериди	1500
	Ібупрофен	50		Сечова кислота	23,5
	Леводопа	0,75		Білірубін	40
	Тетрациклін	1,51		Холестерин	500
	Толбутамід	72		Креатинін	15
	Ацетилсаліцилова кислота	65,16		Гемоглобін	1000
	Пептид глутаміну	4,6		Гентизинова кислота	1,8
	Манітол	1800	Їжа	Етанол	399,89
	Метилдопа	2		Мальтитол	0,09
	Метилсульфонамід	9		Ксиліт	0,09
	Аскорбінова кислота	6	Антикоагулянт	Етилендіамінтетраоцтова кислота(ЕДТА)	0,1
	Альбумін людини	41,98		Гепарин	300U/dL
			Консервант	Саліцилова кислота	60

* Звіт про перешкоди отримано зі звіту про тестування Хунаньського інституту метрології та інспекції

Аскорбінова кислота: один із найчастіше використовуваних безрецептурних вітамінів; потужний антиоксидант, який може окислюватись на поверхні електрохімічних смужок/сенсорів.

Показники Abbott Libre збільшуються під впливом аскорбінової кислоти.

Речовини, що можуть впливати на показники

Sinocare

	Ацетамінофен	Аспірин	Вітамін С	Гідроксисечовина	Тетрациклін
Dexcom G5 ^{1,2}	Збільшення			Збільшення	
Dexcom G6/7 ^{1,2}	Збільшення			Збільшення	
Medtronic G3 ^{1,3}	Збільшення			Збільшення	
Medtronic G4 ^{1,3}	Збільшення			Збільшення	
Abbott Libre 1 ⁴		Зменшення	Збільшення		
Abbott Libre 2 ^{1,5}		Зменшення	Збільшення		
Abbott Libre 3 ^{1,5}		Зменшення	Збільшення		
Eversense ^{6,7}					Зменшення
SIBIONICS GS1 ⁸		Зменшення	Збільшення		

1. Heinemann L, et al. J Diabetes Sci Technol. 2022; 16(2): 271–274.

2. Dexcom G7 CGM User Guide.

3. Minimed 780G system user guide US; Minimed 640G system user guide US; Medtronic Patient Letter 03/2021

4. Freestyle Libre 1 User Manual

5. Freestyle Libre 2/3 safety information. <https://www.abbott.com/corpnewsroom/diabetes-care/how-good-is-FreeStyle-Libre-3-they-are-here-to-testify.html> (accessed 18/09/2023)

6. Lorenz C, et al. Diabetes Technol Ther. 2018; 20(5): 344-352.

7. Eversense safety information <https://global.eversenseddiabetes.com/safety-info/#toggle-id-1> (accessed 22/09/2023)

8. SIBIONICS GS1 CGM User Guide



Демонстрація
програмного
забезпечення

iCan ПЗ



iCan Health
Додаток для пацієнтів



iCan Reach

iCan Reach
Додаток для
батьків/опікунів




iCan Review
Веб-платформа для
лікарів

iCan Health

Додаток iCan Health

Додаток iCan Health напряму підключається до пристрою CGM для отримання переданих даних.

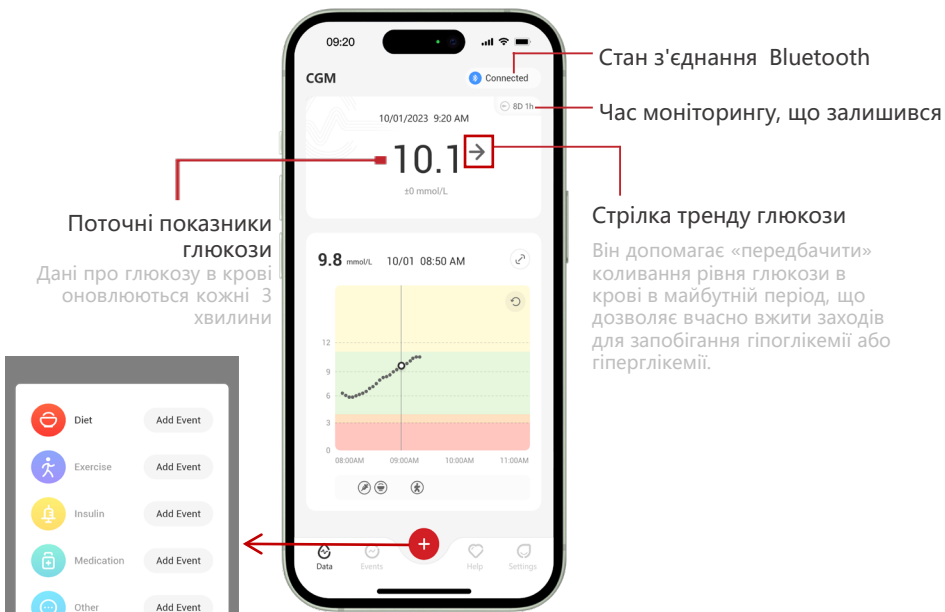

Поточні показники глюкози
Дані про глюкозу в крові оновлюються кожні 3 хвилини


Стан з'єднання Bluetooth

Час моніторингу, що залишився


Стрілка тренду глюкози

Він допомагає «передбачити» коливання рівня глюкози в крові в майбутній період, що дозволяє вчасно вжити заходів для запобігання гіпоглікемії або гіперглікемії.



Головна сторінка

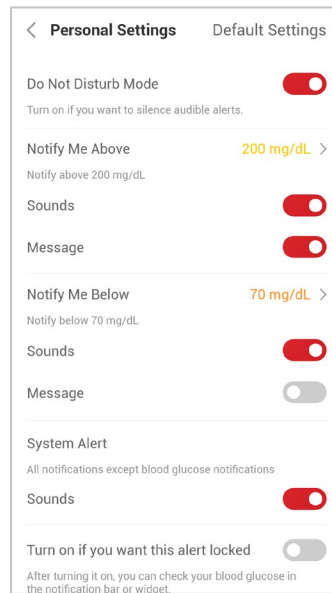

Налаштування оповіщень

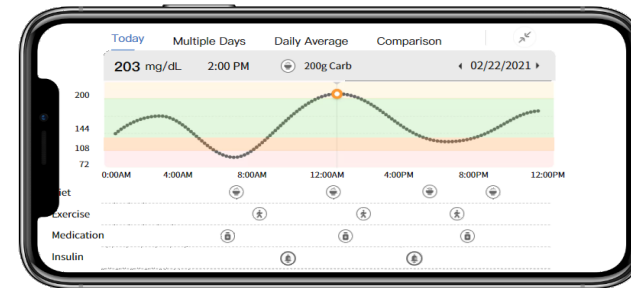

Карта глюкози

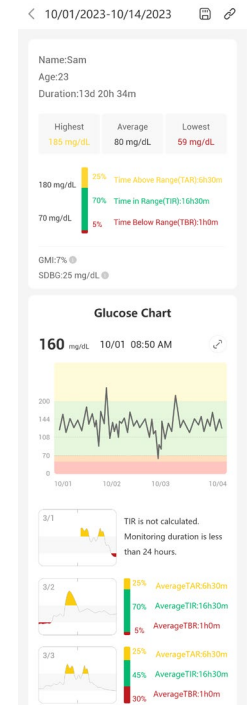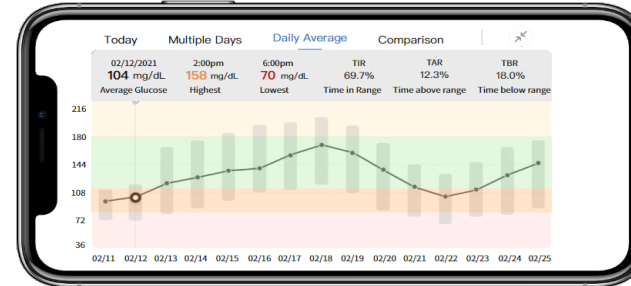

Перегляд історії

Запис подій

Інтерфейс додатку iCan Health



→ **Стрілка тренду(тенденції): Стабільно**
Рівень глюкози змінюється, але менше, ніж на 1 мг/дл (0,05 ммоль/л) в хвилину.


↗↘ **Стрілка тренду: Повільно підвищується чи понижується**
Глюкоза змінюється повільно, 1 - 2 мг/дл (0,05 - 0,10 ммоль/л) в хвилину чи до 60 мг/дл за 30 хвилин.

↗↘ **Стрілка тренду: Швидко підвищується чи понижується**
Глюкоза змінюється швидко, 2 - 3 мг/дл (0,10 - 0,17 ммоль/л) в хвилину чи до 90 мг/дл за 30 хвилин.


↗↘ **Стрілка тренду: Дуже швидко підвищується чи понижується**
Глюкоза дуже швидко змінюється, більше 3 мг/дл (0,17 ммоль/л) в хвилину чи більше 90 мг/дл за 30 хвилин.

Горизонтальний вигляд

- Динаміка рівня глюкози протягом 24 годин протягом останніх днів

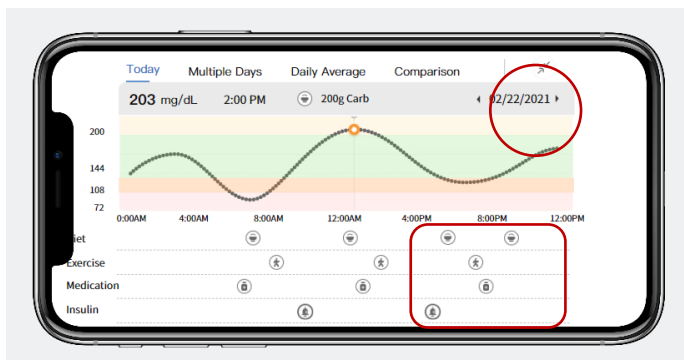


- Середньодобовий рівень глюкози та ін.

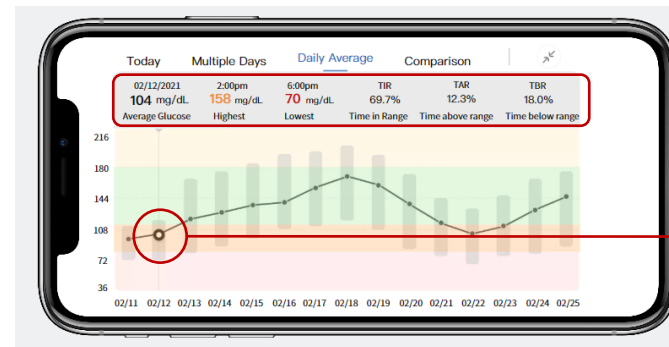


вкладка для вибору дати

- Динаміка глюкози за декілька днів

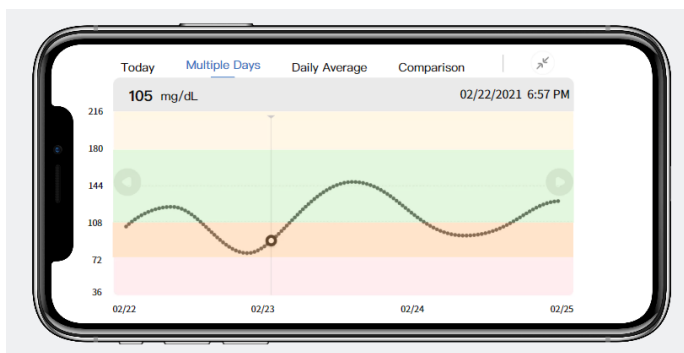





- Порівняння динаміки глюкози між вибраними 2 днями

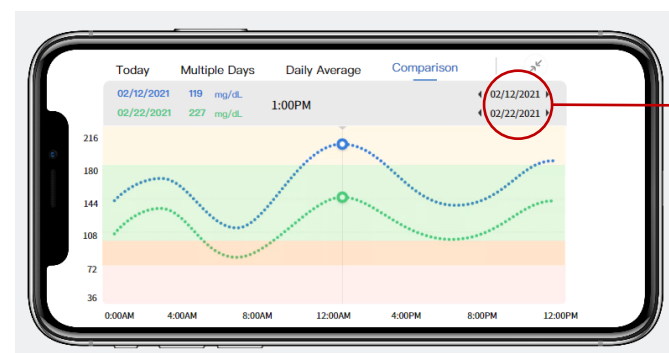

вкладка для вибору дати


Додати події

- Переглядайте та редагуйте події своєї історії на сторінці подій.

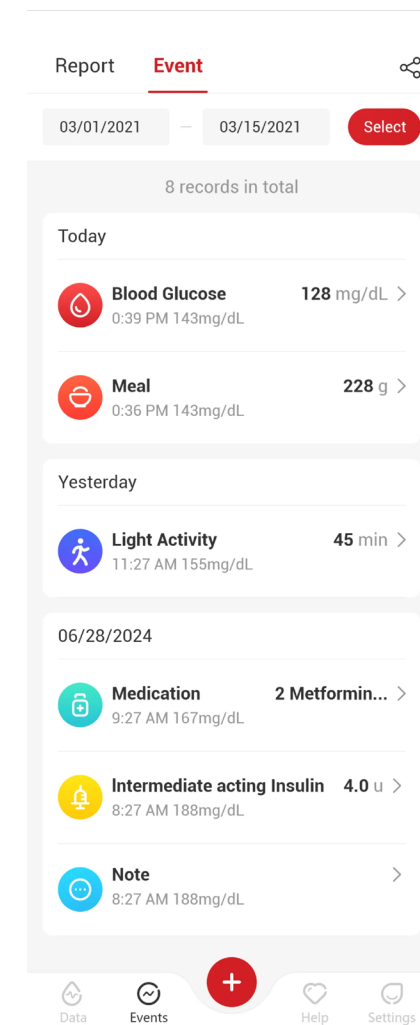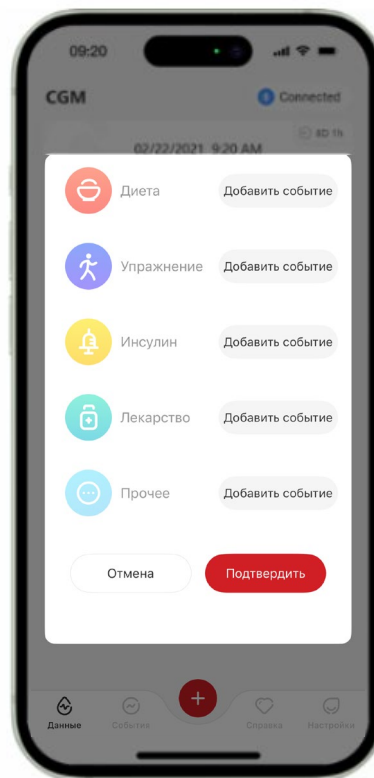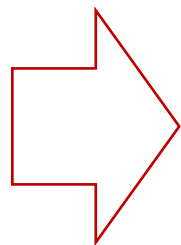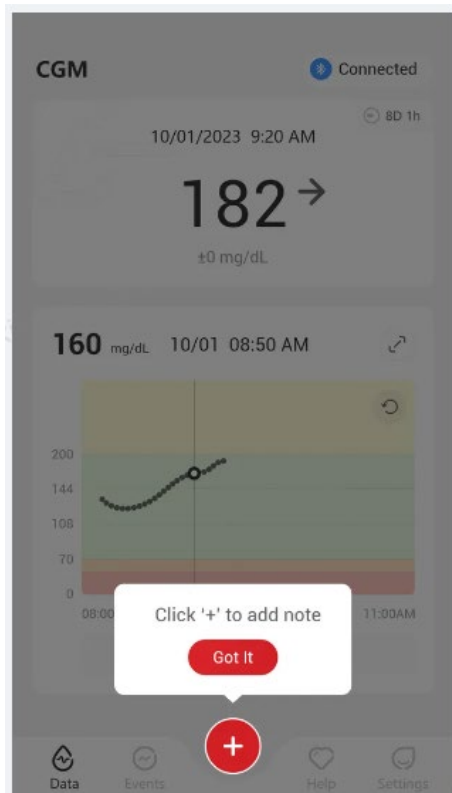


Звіт по глюкозі

- Звіт про глюкозу автоматично формується після закінчення сеансу моніторингу. У ньому відображаються попередні дані про глюкозу, аж до останніх 15 днів.

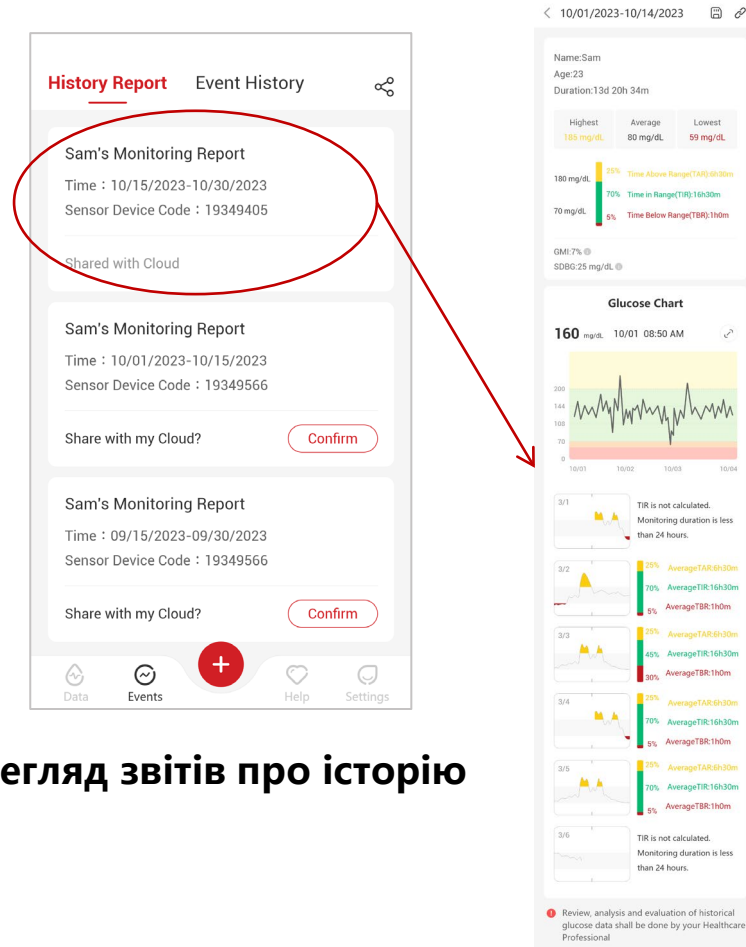

Перегляд звітів про історію

- Нажавши на значок  , ви можете поділитися показниками глюкози чи звітом AGP. Ви можете експортувати і поділитися звітом AGP за період від 5 днів до 3 місяців.

History Report Event History

Sam's Monitoring Report
Time : 10/15/2023-10/30/2023
Sensor Device Code : 19349405

Shared with Cloud

Sam's Monitoring Report
Time : 10/01/2023-10/15/2023
Sensor Device Code : 19349566

Share with my Cloud?

Sam's Monitoring Report
Time : 09/15/2023-09/30/2023
Sensor Device Code : 19349566

Share with my Cloud?

Share my Report

Send the selected reports to:

Enter email address

Share my Report

Share my glucose readings

Share my AGP report

Share AGP Report

You can select the data range from 15 days to 3 months and send the AGP report to your designated email address.



03/01/2021 - 03/15/2021

Enter email address

Завантажуйте звіти та діліться ними

📌 Налаштування системи


У розділі «Установки системи» користувач може змінити **одиниці виміру глюкози, формат дати, мову, пароль, адресу електронної пошти, дозвіл на обробку даних, блокування пристрою тощо.**

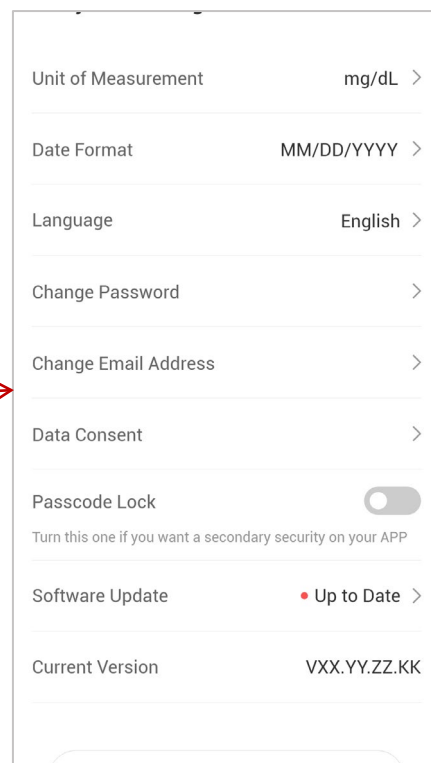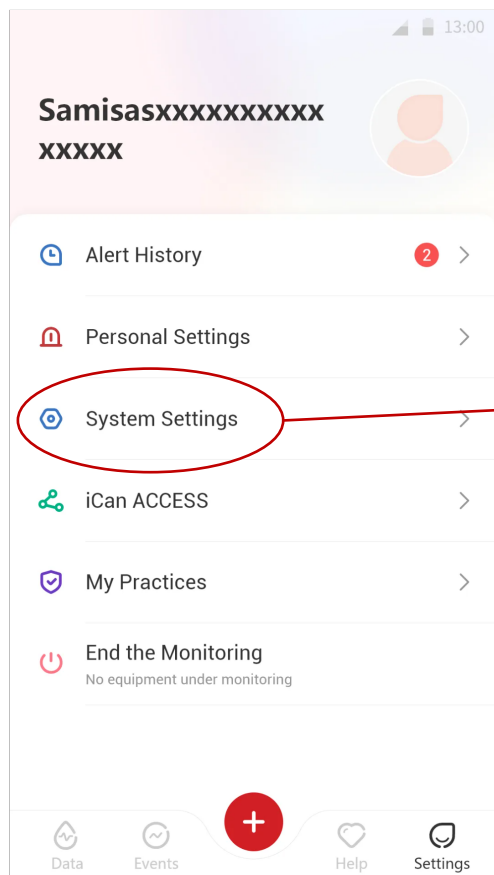


Налаштування системи



Код доступу

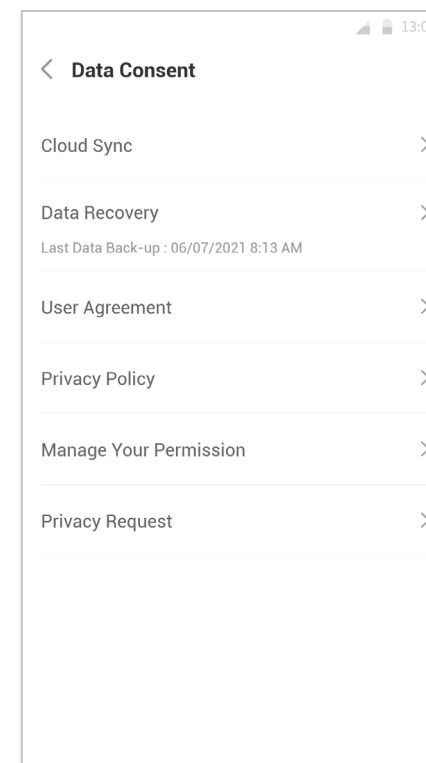

Дозвіл на обробку даних

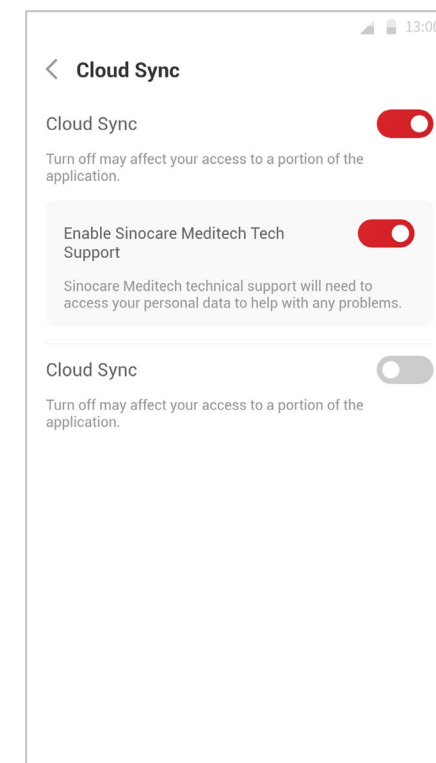


Хмарна синхронізація


iCan Reach

Додаток iCan Reach


Додаток iCan Reach APP призначений для віддаленого обміну персональними даними з партнерами по догляду

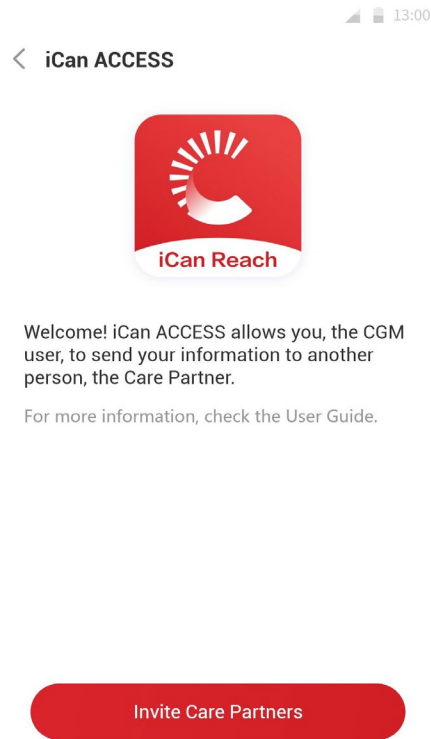

Запросити
партнерів з догляду

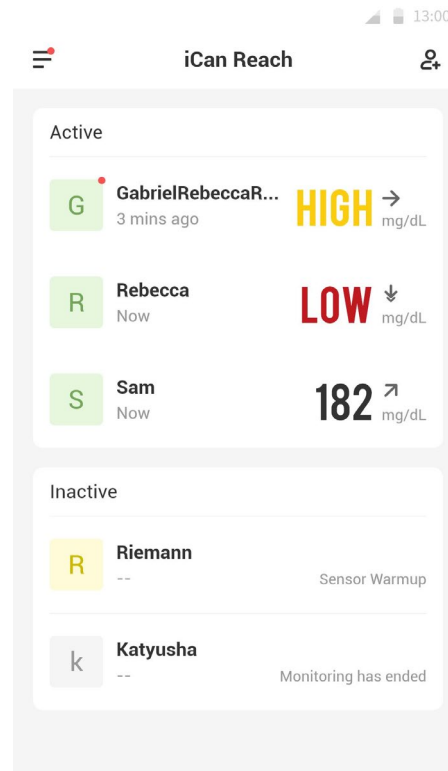

Головна
сторінка

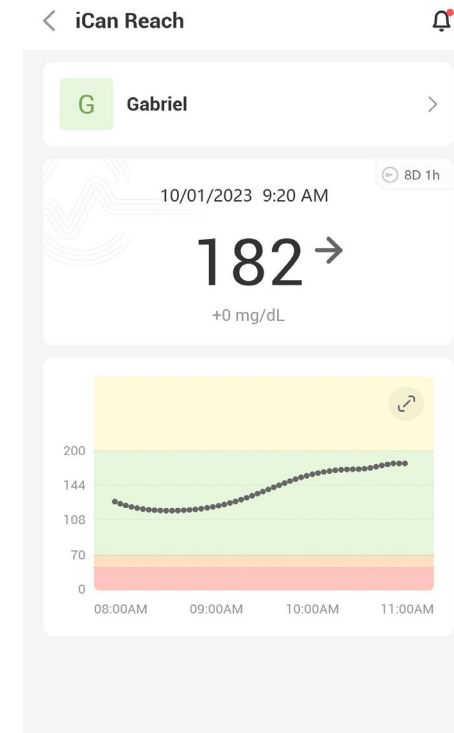



Перегляд
даних



Надає доступ **10** партнерам по догляду!

📌 Перегляд даних

- Нажміть на відповідний CGM користувача, щоб переглянути детальні дані:
- Дані відображаються в вертикальній орієнтації: **глюкоза в реальному часі, різниця глюкози, тенденції глюкози і час моніторингу, що залишився;**
- Дані відображаються в горизонтальній орієнтації : **графік глюкози з останніми даними за 1 год/3 год/6 год/12 год/24 годин.**

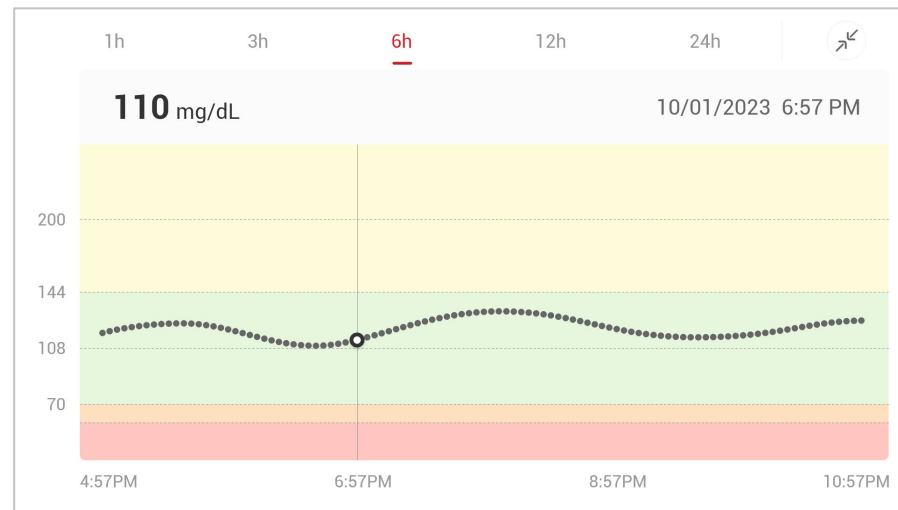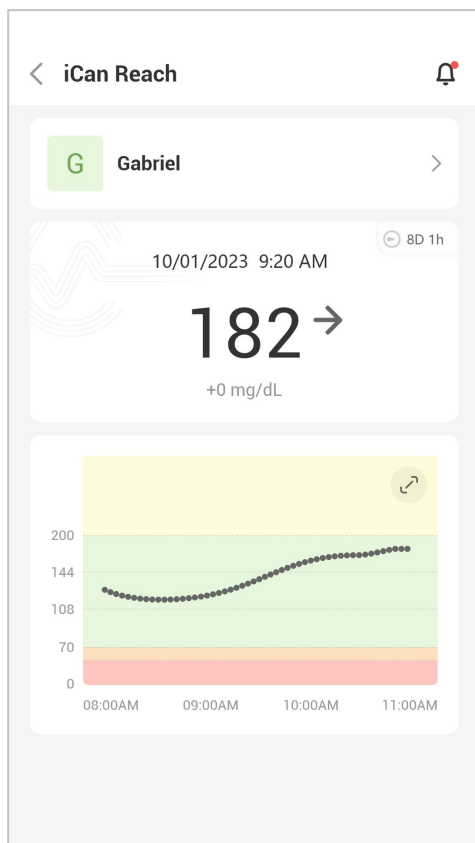


iCan Review

Система управління медичними послугами

Система управління медичними послугами iCan Review призначена для лікарів.

Це допоможе фахівцям переглядати, аналізувати та оцінювати дані про вміст глюкози у крові пацієнтів для більш ефективного лікування діабету.

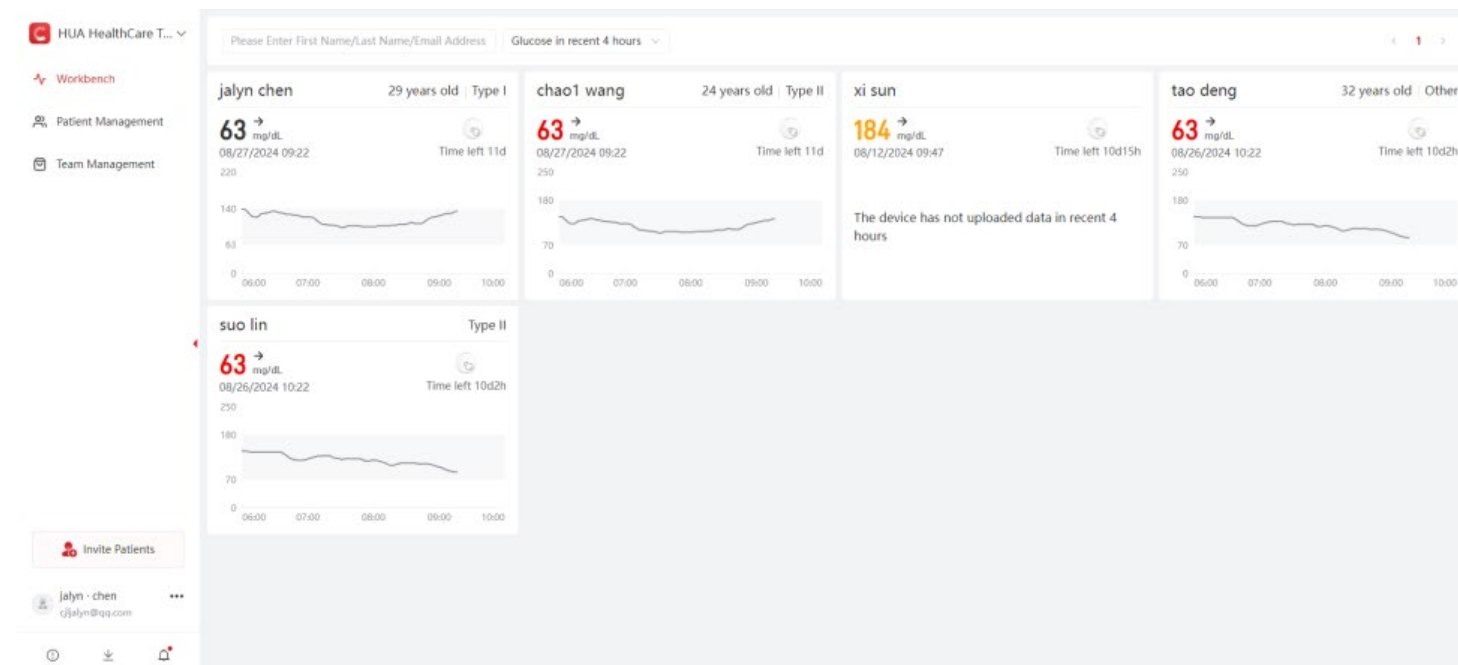

Платформа для управління пацієнтами

The screenshot displays a user interface for a patient management platform. On the left is a sidebar with navigation options: 'Рабочая панель', 'Управление данными ...', 'Персональные данные', and 'Пригласить пациентов'. The main area shows two patient cards. The first card, for George Chen, is highlighted with a red border and shows a glucose level of 119 mg/dL with an upward arrow, a 'Bluetooth откл...' status, and a high glucose alert for 03-16 16:24. The second card, for Natasha S, shows a glucose level of 104 mg/dL with a rightward arrow. Both cards include a line graph of glucose levels from 06:00 to 10:00. At the top right of the main area, there is a search bar and a dropdown menu for 'Уровень глюкозы за по...'. A notification bell icon with the number '1' is also visible.

Введите имя/адрес электронной почты

Уровень глюкозы за по... < 1 >

George Chen

119 [↑] mg/dL Bluetooth откл... >

03/17/2025 07:15 Оставшееся время 11д5ч

03-16 16:24 Высокий уровень глюкозы...

250

180

70

0

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00

Natasha S

104 [→] mg/dL

03/17/2025 09:32 Оставшееся время 1д

250

180

70

0

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00


Пригласить пациентов

Joey · Z
594109990@qq.com

🕒 ⏴ 📄 🔔

Кількість пацієнтів не обмежена.

Добовий профіль рівня глюкози

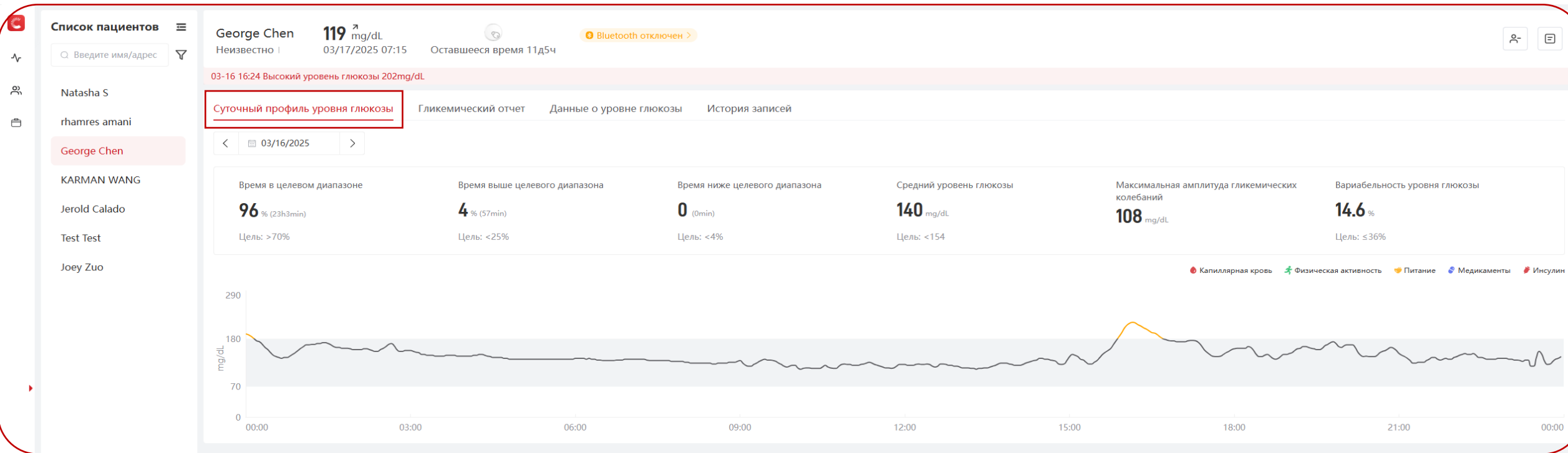


Щоденний аналіз
показників

Записи рівня глюкози


Записи подій

Глікемічний звіт

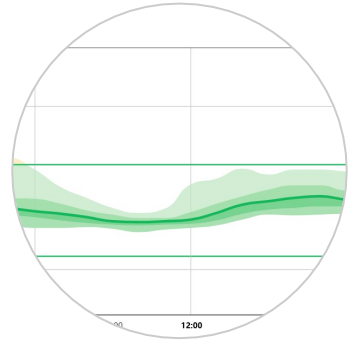


1

Амбулаторний
профіль глюкози

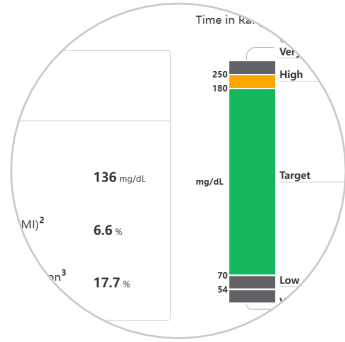


2

Огляд глюкози

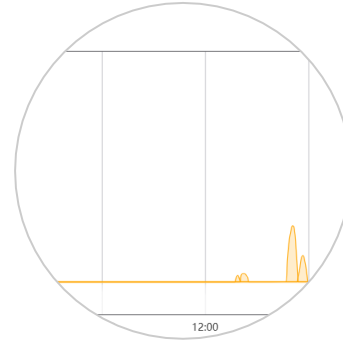


3

Стан
підвищеної/пониж
еної глюкози

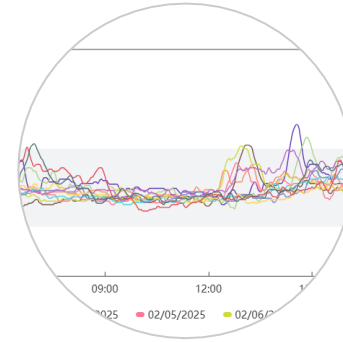


4

Багатоденна
інформація про
глюкозу

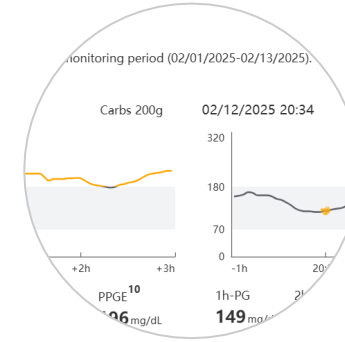



5

Дані про
постпрандіальну
глюкозу

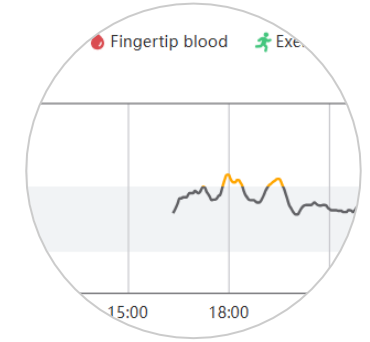


6

Добові профілі
глюкози

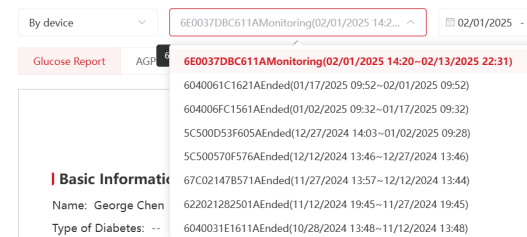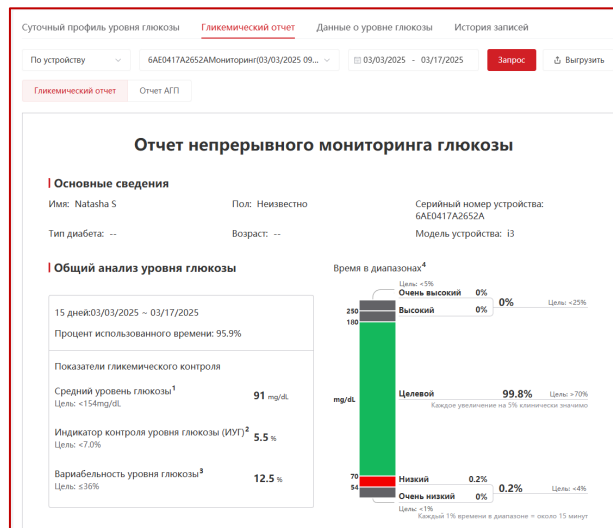

По приладу

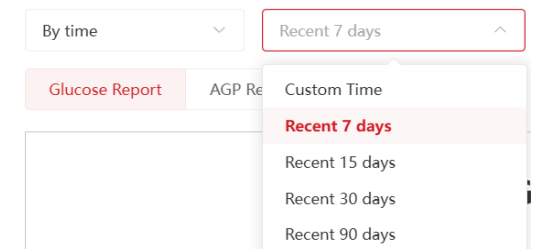

По часу

Звіт АГП (AGP) Ambulatory Glucose Profile

Суточный профиль уровня глюкозы **Гликемический отчет** Данные о уровне глюкозы История записей

По устройству 6AE0417A2652AMониторинг(03/03/2025 09... 03/03/2025 - 03/17/2025 **Запрос** Выгрузить

Гликемический отчет **Отчет АГП**

Отчет АГП: Непрерывный мониторинг глюкозы

Цели для диабета 1 и 2 типа

Цель: <5.0%	Очень высокий	0%	0%	Цель: <25.0%
Высокий	0%			
Целевой		99.8%	Цель: >70.0%	
Каждое увеличение на 5% клинически значимо				
Ниже	0.2%			
Очень низкий	0%	0.2%	Цель: <4%	
Каждый 1% времени в диапазоне < около 15 минут				

Имя: Natasha S
15 дней: 03/03/2025 ~ 03/17/2025
Время активности НМГ: 95.9%

Показатели гликемического контроля

Средний уровень глюкозы	91 mg/dL
Цель: <154mg/dL	
Индикатор контроля уровня глюкозы (ИУГ)	5.5 %
Цель: <7.0%	
Вариабельность уровня глюкозы	12.5 %
Вариабельность уровня глюкозы	Цель: <3%

Отчет АГП: Непрерывный мониторинг глюкозы

Цели для диабета 1 и 2 типа

Цель: <5.0%	Очень высокий	0%	0%	Цель: <25.0%
Высокий	0%			
Целевой		99.8%	Цель: >70.0%	
Каждое увеличение на 5% клинически значимо				
Ниже	0.2%			
Очень низкий	0%	0.2%	Цель: <4%	
Каждый 1% времени в диапазоне < около 15 минут				

Имя: Natasha S
15 дней: 03/03/2025 ~ 03/17/2025
Время активности НМГ: 95.9%

Показатели гликемического контроля

Средний уровень глюкозы	91 mg/dL
Цель: <154mg/dL	
Индикатор контроля уровня глюкозы (ИУГ)	5.5 %
Цель: <7.0%	
Вариабельность уровня глюкозы	12.5 %
Вариабельность уровня глюкозы	Цель: <3%

Амбулаторный гликемический профиль (АГП)

АГП представляет собой среднюю значимую уровень глюкозы за отчетный период, где медiana (50%) и другие процентили показаны так, как если бы они проходили в течение одного дня.

Patent pending — HealthPartners Institute of Diabetes International Diabetes Center - All Rights Reserved. ©2022

captirAGPTM

Суточные профили уровня глюкозы

Каждый суточный профиль представляет период от полуночи до полуночи.

Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
03/03	03/04	03/05	03/06	03/07	03/08	03/09
03/10	03/11	03/12	03/13	03/14	03/15	03/16
03/17	03/18	03/19	03/20	03/21	03/22	03/23

Дані про рівень глюкози

Суточный профиль уровня глюкозы Гликемический отчет Данные о уровне глюкозы История записей

По устройству

6AE0417A2652AMониторинг(03/03/...

Каждые 3 минут

Поиск

Выгрузить

С/Н	Период мониторинга	Значение мониторинга	Единицы измерения
1	03/03/2025 11:47	86	mg/dL
2	03/03/2025 11:50	88	mg/dL
3	03/03/2025 11:53	90	mg/dL
4	03/03/2025 11:56	92	mg/dL
5	03/03/2025 11:59	95	mg/dL
6	03/03/2025 12:02	101	mg/dL
7	03/03/2025 12:05	103	mg/dL
8	03/03/2025 12:08	103	mg/dL
9	03/03/2025 12:11	99	mg/dL
10	03/03/2025 12:14	97	mg/dL

Всего 6681

10 на стра...

< 1 2 3 4 5 6 ... 669 >

Экспорт даних для аналізу чи досліджень

Дякуємо!