

**Відбитковий матеріал PERFIL Kit(набір), VIGODENT,
Putty+Light Body+Catalyst
Стосується каталожних номерів:
135342; 54505; 54509; 54510**

Опис:

Perfil — це продукт на основі конденсаційного С- силікону, призначений для точних відбитків зубів або беззубих дуг, призначений для розробки моделей зубів повних або часткових протезів. Perfil складається з: Putty (базова маса), Light Body (коригуюча) і Catalyst (каталізатор).

Показання:

Техніка подвійного відбитку. Однокрокова техніка. Техніка з мідним кільцем. Відбитки для навчальних моделей, ортодонтичних моделей, матриць, захисної ізоляції зубів під час припасування протезів.

Склад:

Putty Perfil: силікон, мінеральне масло, тальк, діоксид кремнію, кукурудзяний крохмаль, пірогенний кремнезем і аромат.

Perfil Light Body: силікон, діатоміт, кристобаліт, діоксид кремнію, барвник Fluid Profile, м'ятний аромат.

Catalyst Perfil: затверджувач для конденсаційного силікону, біс [(2-етил-1-оксогексил)-окси] діоктилстаннат, мінеральне масло, вазелін, діоксид кремнію та пігмент.

Пакування:

Putty Perfil:

01 банка Perfil Putty 1 кг

01 мірна ложка

01 інструкція по застосуванню

Perfil Light Body:

01 тюбик Perfil Light Body 120 гр

01 інструкція по застосуванню

Perfil Catalyst:

01 тюбик Perfil Catalyst з 50 гр

01 інструкція по застосуванню

Аромат: ментол.

Інструкція по використанню:

1. Виберіть жорстку ложку, здатну забезпечити 3-4 мм товщини відбиткового матеріалу.

2. Очистіть і висушіть поле де буде зніматись відбиток.

3. За допомогою мірної ложки наберіть потрібну кількість Perfil Putty з банки, переконавшись, що мірна ложка заповнена належним чином без порожніх місць або надлишку матеріалу.

4. Притисніть Perfil Putty до долоні та позначте діаметр мірної ложки на Perfil Putty.

5. На кожному ложку Putty розподіліть каталізатор (Perfil Catalyst) у пропорції, еквівалентній вказаному діаметру ложки.

6. Змішайте Putty Perfil і Catalyst Perfil кінчиками пальців до однорідного забарвлення. Час, необхідний для виконання повної гомогенізації, становить 30 секунд.

7. Помістіть суміш у відбиткову ложку і розмістіть ложку на потрібну ділянку, злегка притиснувши протягом 4-5 секунд та залишити в порожнині рота на 3 хвилини.

8. Вийняти ложку з ротової порожнини.

9. Нанесіть на блок для замішування необхідну кількість Perfil Light Body, обережно, щоб матеріал розподілявся по прямій лінії.

10. На блок розподіліть однакову кількість Perfil Catalyst. Використання більшої кількості каталізатора прискорює час схоплювання.

11. Енергійно перемішайте компоненти між собою шпателем, щоб гомогенізувати весь матеріал за 30 секунд.

12. Відбитковим шприцом відібрати частину матеріалу та розподілити на препаровану ділянку. Залишок матеріалу необхідно розподілити всередині попереднього відбитка Putty.

13. Розташуйте ложку у потрібному місці, тиснувши на нього 4-5 секунд і тримайте його ще 4 хвилини, перш ніж вийняти його з ротової порожнини.

14. Після зняття відбитка промийте його водою та продезінфікуйте перед заливкою моделі.

Одночасне формування

1. Виберіть жорстку ложку, здатну забезпечити 3-4 мм товщини відбиткового матеріалу.

2. Очистіть і висушіть поле.

3. За допомогою мірної ложки вийміть потрібну кількість Perfil Putty з банки, переконавшись, що мірна ложка заповнена належним чином без порожніх місць або надлишку матеріалу.

4. Притисніть Perfil Putty до долоні та позначте діаметр мірної ложки на Perfil Putty.

5. На кожному ложку Putty розподіліть каталізатор (Perfil Catalyst) у пропорції, еквівалентній вказаному діаметру.

6. Нанесіть на блок необхідну кількість Perfil Light Body, обережно, щоб матеріал розподілявся по прямій лінії.

7. На кожному позначку Perfil Light Body розподіліть однакову кількість Perfil Catalyst. Використання більшої кількості каталізатора прискорює час схоплювання.

8. Змішайте Perfil Putty і Perfil Catalyst кінчиками пальців до однорідного забарвлення. Час, необхідний для виконання повної гомогенізації, становить 30 секунд.

9. Викладіть суміш у ложку.

10. Одночасно асистент повинен розпочати змішування Perfil Light Body з Perfil Catalyst, енергійно перемішуючи шпателем, щоб гомогенізувати весь матеріал щонайбільше за 30 секунд.

11. За допомогою відбиткового шприца введіть суміш навколо препарування порожнини.

12. Розташуйте ложку у потрібному місці, тиснучи на нього на 4-5 секунд і тримайте її ще 4 хвилини, перш ніж вийняти його з ротової порожнини.

13. Після зняття відбитка промийте його водою та продезінфікуйте перед заливкою моделі.

Тип	Perfil Putty	Perfil Light Body
Час змішування	30 с	30 с
Час роботи	1 хв 30 с	1 хв 30 с
Час у роті	3 хв	4 хв
Час встановлення	4 хв 30 с	5 хв 30 с

Примітка: через склад матеріалу, що містить натуральну сировину мінерального та рослинного походження, можуть виникнути зміни в кольорі без жодних змін у якості та/або ефективності продукту для використання за призначенням.

Дезінфекція:

Після змивання відбитка водою будь-якою, можна використовувати хімічний розчин для дезінфекції зубів.

Запобіжні заходи:

Матеріал можуть використовувати лише стоматологи та авторизовані зуботехнічні лабораторії. Час схоплювання враховано для температури 23°C. Підвищення температури прискорює час схоплювання, а зниження температури скорочує час схоплювання. Збільшена кількість Perfil Catalyst скорочує робочий час. Уникайте контакту з очима. Рекомендується використовувати захисні окуляри для пацієнтів, асистентів і спеціалістів під час усіх клінічних процедур. Тримайте продукт подалі від дітей. Одноразове використання. Під час зняття відбитку рекомендовано, щоб пацієнт сидів, а не лежав.

Протипоказання:

Уникайте використання продукту пацієнтами з алергією на один або кілька компонентів продукту. Рухливість зубів.

Термін придатності:

36 місяців від дати виробництва, не використовувати після закінчення терміну придатності.

Термін придатності, зазначений на упаковці, є максимальним терміном використання продукту.

Неналежні умови зберігання можуть погіршити характеристики продукту.

Зберігання:

Зберігати при кімнатній температурі (15°C-30°C), у сухому та захищеному від світла та тепла місці. Після використання щільно закрийте кришку. Невідповідні умови зберігання скоротять термін придатності та можуть призвести до порушення властивостей продукту.

Утилізація:

Утилізуйте відповідно до чинних вимог утилізації медичних відходів відповідно законодавству України. Можна утилізувати разом із побутовими відходами відповідно до офіційних правил та погодження з уповноваженими компаніями утилізації відходів та уповноваженими органами. Утилізувати тільки повністю випорожнені упаковки.



VIGODENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Pesqueira, 26 – Bonsucesso 21041-150, Rio de Janeiro, Brazil

VIГOДEHT ИНДACTPIA E COMEPCIO ЛTДА

Рyа Пескейра, 26 – Бонсуцессо 21041-150, Рио-де-Жанейро, Бразилія



Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «МЕДРИНОК»

43020, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Зв'язківців, буд. 6
medrynok.pro
medrynok.corp@gmail.com
тел. +380 50 157 42 07

Пояснення символів



Дата виготовлення



Захищати від сонячного світла




Виробник



Зберігати в сухому місці



Використати до

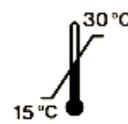

Температурне обмеження 15°C-30°C



Код партії



Ознайомлення з інструкціями для застосування



Номер за каталогом

Версія: 1.0

Дата останнього перегляду: 01.05.2025