



ПРИЗНАЧЕННЯ

ДОСТУП ДЛЯ
ВВЕДЕННЯ

РОЗВЕДЕННЯ
МЕДИКАМЕНТІВ


ІНФУЗІЯ

ІНФУЗІЯ В
АМБУЛАТОРНИХ
УМОВАХ

compact^{plus} З турботою про Вас

Infusomat® та Perfusor® compact^{plus}

З турботою про Вас

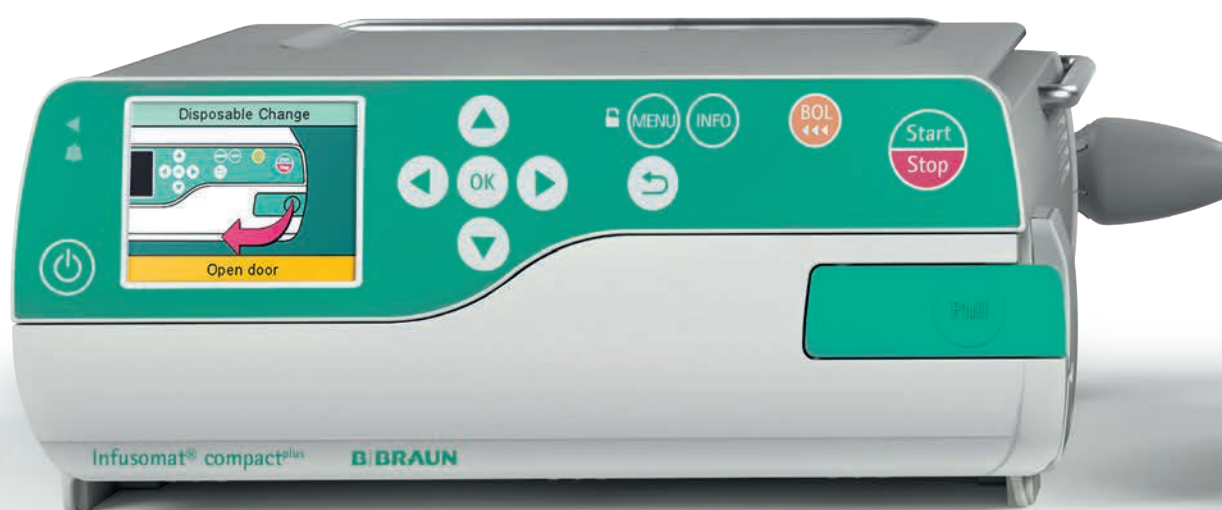

**ШВИДКЕ
НАВЧАННЯ**



**ШВИДКИЙ
ЗАПУСК**



**ВИСОКА
ТОЧНІСТЬ**



**LI-ION-
БАТАРЕЯ**




**КОЛЬОРОВИЙ
ДИСПЛЕЙ**




**ПОКРОКОВЕ
ВВЕДЕННЯ
ДАНИХ**



**ІНТУІТИВНЕ
ВВЕДЕННЯ
ПАРАМЕТРІВ**

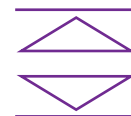

**B. BRAUN
ПОМІЧНИК
ДОЗУВАННЯ™**

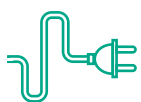

**ІНТЕГРОВАНИЙ
БЛОК
ЖИВЛЕННЯ**



**ВБУДОВАНА
РУЧКА**




**МІЦНА
КОНСТРУКЦІЯ**



**IP34 КЛАС
ВОЛОГО-
СТІЙКОСТІ**




Perfusor® compact^{plus}


ДОГЛЯД ВИПЕРЕДЖАЮЧИЙ ЧАС

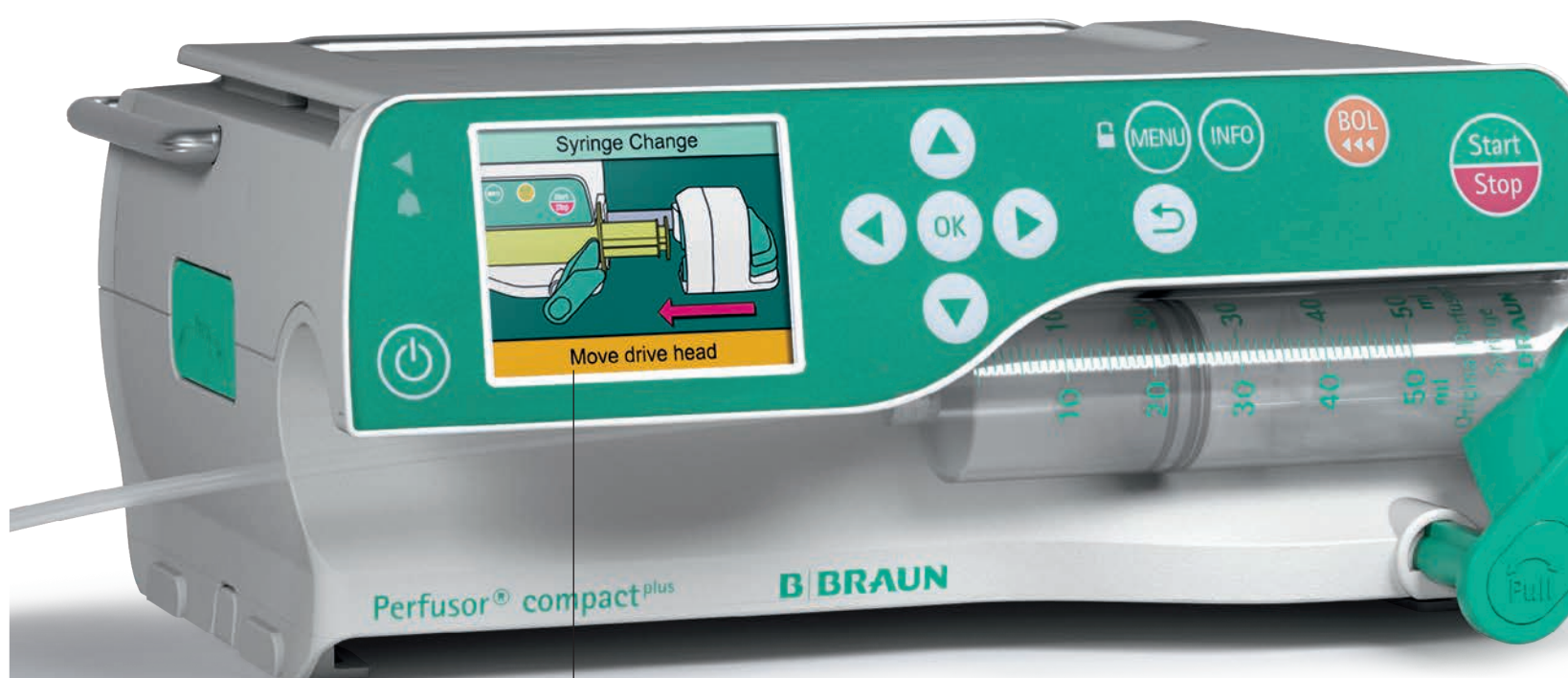

ГРАФІЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Інтуїтивна робота та кероване завантаження параметрів зменшують потребу тривалого навчання

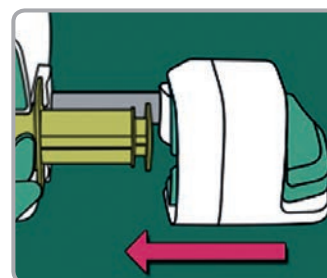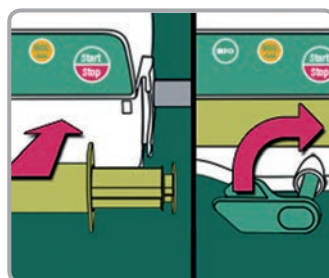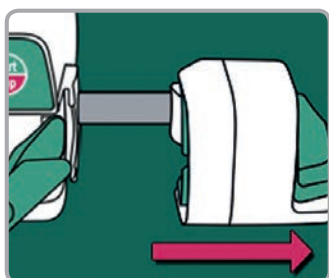

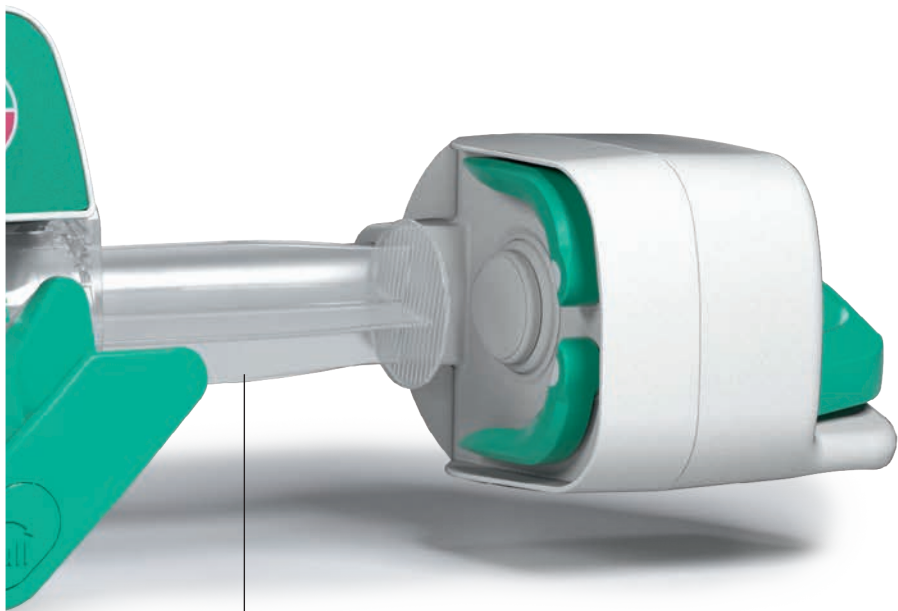

ЗАВАНТАЖЕННЯ ШПРИЦА

Швидке завантаження та запуск з покращеною безпекою завдяки напівавтоматичному приводу.



ГНУЧКІСТЬ

Модульна система для передового та легкого транспортування.



КОЛЬОРОВИЙ
ДИСПЛЕЙ



ПОКРОКОВЕ
ВВЕДЕННЯ
ДАНИХ



ІНТУІТИВНЕ
ВВЕДЕННЯ
ПАРАМЕТРІВ

Infusomat[®] compact^{plus}

ДОГЛЯД ВИПЕРЕДЖАЮЧИЙ ЧАС





ЗАЖИМ ВІД ВІЛЬНОГО ПОТОКУ

Зажим проти вільного потоку автоматично перекриває лінію, щоб запобігти ризику вільного потоку, коли дверцята відкриті.

ЛІНІЯ INFUSOMAT plus

Забарвлення та форми дозволяють легко вставити лінію. Вбудований матеріал для насосної частини забезпечує постійну точність протягом тривалого часу (96 годин).

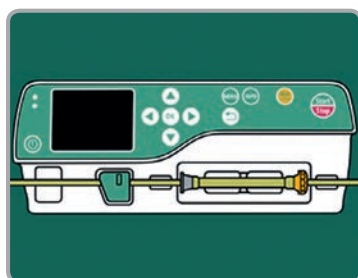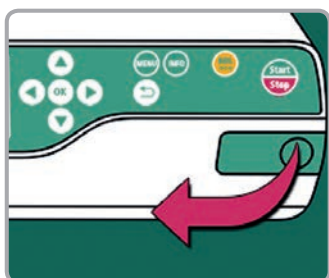

НУТРИТИВНА ПІДТРИМКА



AirStop

Гідрофільна мембрана зупинить інфузію при спустошенні крапельної камери. Це знижує ризик повітряної емболії та бактеріального забруднення



PrimeStop

Захисний ковпачок з гідрофобною мембраною для захисту від хімічного забруднення і автоматичного заправлення системи для інфузії



**СИСТЕМА
INFUSOMAT^{PLUS}
SAFESET**



**КОЛЬОРОВИЙ
ДИСПЛЕЙ**



**ПОКРОКОВЕ
ВВЕДЕННЯ
ДАНИХ**



**ІНТУЇТИВНЕ
ВВЕДЕННЯ
ПАРАМЕТРІВ**

ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

ДОГЛЯД ВИПЕРЕДЖАЮЧИЙ ЧАС



ГНІЗДО ЖИВЛЕННЯ

Живить насос тільки при підключенні. Полегшує дезінфекцію та покращує безпеку.

ЗБИРАЄТЬСЯ БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ

Станцію зібрати легше простого: лише приєднайте та зафіксуйте!



ЛОТОК НАСОСА


Направляючий лоток дозволяє легко приєднати насос до станції



НАПРАВЛЯЮЧІ
СТИКУВАННЯ
ЗІ СТАНЦІЄЮ



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ
ЖИВЛЕННЯ

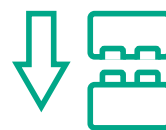

ЗБИРАЄТЬСЯ
БЕЗ
ІНСТРУМЕНТІВ





18 ГНУЧКА КОНФІГУРАЦІЯ
До 18 насосів / 6 стійок
стикуються в
однорежимну станцію
для інфузії

МОДУЛЬ ДАНИХ СОМРАСТ^{plus}
Гнучка та прогресивна інтеграція в
лікарняні мережі. Включаючи Wi-Fi
підключення.



**З'ЄДНАННЯ З
ЛОКАЛЬНОЮ
МЕРЕЖЕЮ**

СИСТЕМА ЗНИЖЕННЯ ПОХИБОК ДОЗУВАННЯ З турботою про Вас

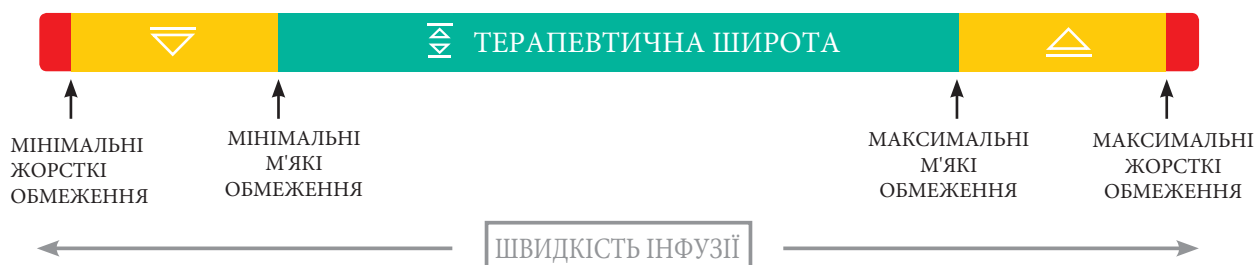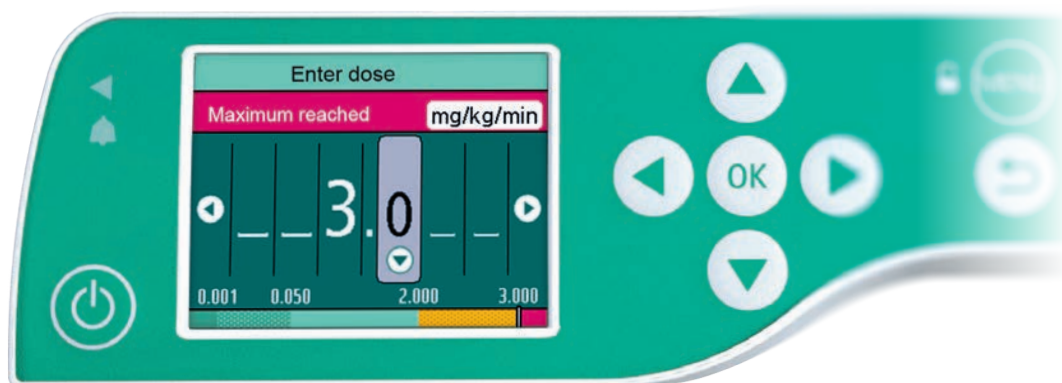

В. Braun DoseGuard™ – СИСТЕМА ЗНИЖЕННЯ ПОХИБОК ДОЗУВАННЯ (DERS)


- Бібліотека з понад 3000 препаратів
- Розподілення медикаментів на групи
- Дозування залежно від ваги тіла



В. BRAUN
ПОМІЧНИК ДОЗУВАННЯ™


B. Braun OnlineSuite

ДЛЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

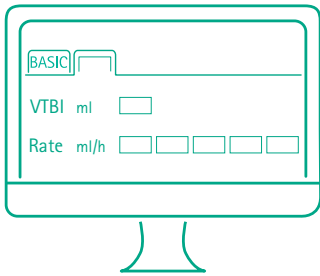


БІБЛІОТЕКА МЕДИКАМЕНТІВ

Центральне керування параметрів інфузії

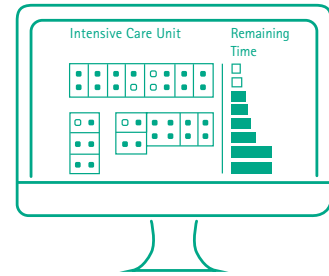


ОДИН ПОГЛЯД

Підвищення ефективності завдяки аналізу даних центрального призначення

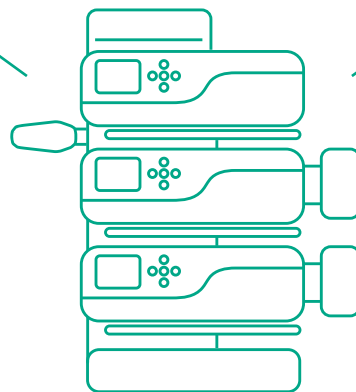

OnlineSuite – ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ

- Одна платформа, що пропонує кілька додатків
- Легко інтегруватися в лікарняні мережі
- Бібліотека лікарень завжди оновлюється:
- Оновлення за секунди через локальну мережу чи Wi-Fi
- Оновлення через USB

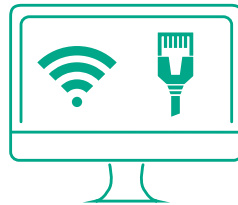


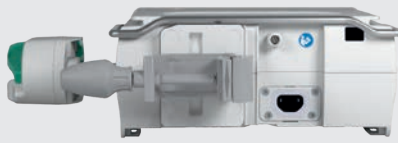
МЕНЕДЖЕР ЗАВАНТАЖЕНЬ

Централізоване завантаження через локальну мережу клініки дозволяє завжди оновлювати бібліотеку ліків і конфігурацію пристрою.





B. BRAUN
ONLINESUITE

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Perfusor® compact ^{plus}	ОПИС	
Тип	Інфузійний шприцевий насос	 
Габарити	290 x 98 x 220 мм (Ш x В x Г)	
Вага	2,3 кг	
Вологостійкість	IP34 (захист від бризок у будь-якому напрямку)	
Дисплей	Кольорова матриця 2.4" TFT, 240 x 320 пікселів, 262k кольорів, кут огляду: до 80°	
Батарея	Перезаряджувана Літій-Іонна батарея Час роботи: прибіл. 12 годин при 25 мл/год Час повної перезарядки: прибіл. 4 години	
Основна швидкість	0,1-200 мл/год	
Точність	± 2% відповідно до IEC/EN 60601-2-24	
Швидкість болюсу	залежно від об'єму шприца 1 - 1,800 мл/год	
Підтримуємий виробник шприців	B. Braun Original Perfusor® Syringe, Omnifix®, BD, Terumo, Monoject Об'ємом: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл	
Бібліотека меликаментів	до 3 000 меликаментів, зібраних у 15 категорій	
Каталожний №. (REF)	8717030	

ОПИС	ЦИЛІНДР	шт/упак	Катал№. (REF)
Шприц Original Perfusor® 50 мл	прозорий	100	8728844F-06
Шприц Original Perfusor® 50 мл, з аспіраційною канюлею	прозорий	100	8728810F-06
Шприц Original Perfusor® 50 мл, з аспіраційною канюлею, 15 мкм	прозорий	100	8728852F-06
Шприц Original Perfusor® 50 мл, світлозахисний з аспіраційною канюлею, 15 мкм	Помаранчевий	100	8728861F-06

Infusomat® compact ^{plus}	ОПИС
Тип	Волюметричний інфузійний насос
Габарити	229x98x220 мм (Ш x В x Г)
Вага	1,9 кг
Вологостійкість	IP34 (захист від бризок у будь-якому напрямку)
Дисплей	Кольорова матриця 2.4" TFT, 240 x 320 пікселів, 262k кольорів, кут огляду: до 80°
Батарея	Перезаряджувана Літій-Іонна батарея Час роботи: прибіл. 9 годин при 100 мл/год Час повної перезарядки: прибіл. 4 години
Основна швидкість	0,1-1200 мл/год
Точність	± 5% протягом 96 годин
Швидкість болюсу	регульоване введення 1 - 1,200 мл/год
Підтримуються системи	Системи Infusomat ^{plus} Line
Бібліотека меликаментів	до 3 000 меликаментів, зібраних у 15 категорій
Каталожний №. (REF)	8717050

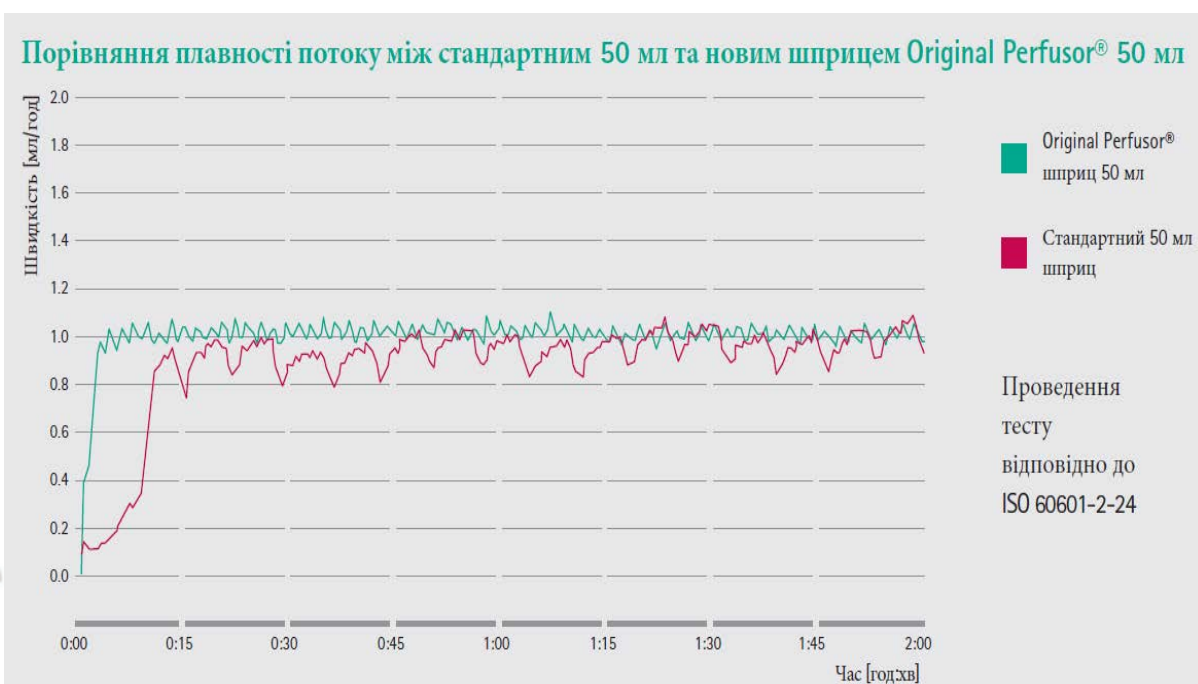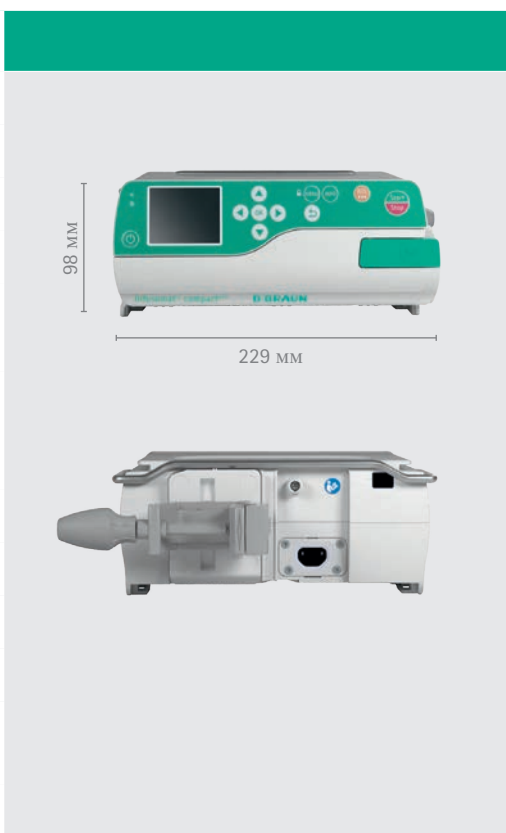

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Station compact ^{plus} Com	ОПИС	
Тип	Станція для об'єднання до 3-х насосів compact ^{plus}	
Габарити	305x375x202 мм (В x Ш x Г)	
Вага	3,3 кг	
Вологостійкість	IP34 (захист від бризок у будь-якому напрямку)	
Співвідношення складових	Збирається без інструментів до 6 станцій компакт ^{плюс} (макс. 18 інфузійних насосів) однією чи двома стійками.	
Тип інтерфейсу	- Інфрачервоний - Виклик персоналу	
Додатково	Фіксація до настінних рейок	
Кронштейн фіксації	Для вертикального монтажу гвинтовим зажимом	
Каталожний №. (REF)	8717141	
Cover compact ^{plus}	ОПИС	
Тип	Кришка станції compact ^{plus}	
Габарити	128x44x124 мм (В x Ш x Г)	
Вага	0,25 кг	
Вологостійкість	IP34 (захист від бризок у будь-якому напрямку)	
Каталожний №. (REF)	8717145	
Data module compact ^{plus}	ОПИС	
Тип	Модуль з'єднання compact ^{plus}	
Габарити	243x92x235 мм (В x Ш x Г)	
Вага	1,1 кг	
Вологостійкість	IP34 (захист від бризок у будь-якому напрямку)	
Тип інтерфейсу	Передача даних може бути додатково інтегрованою у станцію компактплюс and і дозволяє передавати дані до 18 насосів. Інтерфейс: Ethernet, 2 x USB, WiFi, HDMI.	
Каталожний №. (REF)	8717160	

Допоміжні вироби

ВИРІБ	ОПИС	Катал. №. (REF)
Universal Station Clamp	Затискач для фіксації на настінних рейках та штативі	8717142
Connection lead 12V	Бортовий блок живлення на 12 V	8718020
Staff call cable compact ^{plus}	Кабель для підключення окремих насосів до виклику персоналу	8718030
Staff call cable	Кабель для підключення станції до виклику персоналу	8718031
Pillar connection cable 60 cm	Кабель для підключення двох станцій компакт ^{плюс} довжиною 60 см	8718060
Pillar connection cable 120 cm	Кабель для підключення двох станцій компакт ^{плюс} довжиною 120 см	8718061
Pillar connection cable 1,000 cm	Кабель для підключення двох станцій компакт ^{плюс} довжиною 1000 см	8718062

Мелісептол Рарід – швидкодіючий дезінфекційний засіб для обробки сильно забруднених поверхонь та важкодоступних місць



Ефект досягається за 1 хвилину;
 Не містить альдегідів;
 Не залишає слідів;
 Має відмінні миючі властивості за рахунок вмісту ПАР.

Спектр антимікробної дії:
 має бактерицидні, (включаючи збудників туберкульозу), віруліцидні, (включаючи збудників гепатитів В і С, ВІЛ, адено-, ротавіруси), фунгіцидні (щодо грибів родів *Candida* і патогенних дерматофітів) властивості.

Склад засобу (%):

1-пропанол	50,00
дидецилдиметиламоніум хлорид	0,075
допоміжні речовини та вода	до 100 мл

Ми розробили концепцію процесу для оптимізації робочих процесів та підвищення прозорості. Ми визначили п'ять конструктивних стадій інфузії і ми пропонуємо продукти та послуги, які узгоджуються з кожним кроком процесу. Оскільки всі вони походять з одного джерела, вони оптимізовані один для одного. Таким чином, ми створюємо передові системні рішення на кожному кроці. Приєднуйтеся до нас у підвищенні планки проведення інфузійної терапії.



ПРИЗНАЧЕННЯ

ДОСТУП ДЛЯ
ВВЕДЕННЯ

РОЗВЕДЕННЯ
МЕДИКАМЕНТІВ

ІНФУЗІЯ
МЕДИКАМЕНТІВ

ІНФУЗІЯ В
АМБУЛАТОРНИХ
УМОВАХ

ТОВ «Б.Браун Медікал Україна»
м. Київ, 03067, бул. В. Гавела, 4, БЦ «Сільвер Центр»
тел./факс (044) 351-11-30
e-mail: info.bbmu@bbraun.com
www.bbmun.ua

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE