



ЛАБОРАТОРНІ МЕБЛІ



У К Р О Р Г С И Н Т Е З

Шановні колеги та партнери!

У своїх руках ви тримаєте каталог повного асортименту лабораторних меблів UOSlab. Це результат 15-річного шляху та безперервного вдосконалення нашої компанії у лабораторному меблевому сегменті. Команда наших висококваліфікованих фахівців турбується про надійність і комфорт людей, які працюють в облаштованих нами лабораторіях, як в Україні, так і за її межами

У нашому каталозі кожний фахівець знайде для себе те, що йому потрібно, тому що асортимент лабораторних меблів UOSlab враховує як потреби та побажання наших клієнтів, так і максимальний баланс вартості та якості на всі представлені товарні позиції

Нашій компанії важливо бути для Вас надійним партнером, з яким Ви можете вчасно вирішити різні питання в оснащенні і облаштування своєї лабораторії

З повагою
Директор ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ»
Довгополий С.І.

Зміст:

Передмова	2
Інформація споживачам	4
Матеріали стільниць	6
Шафи витяжні	8
Столи лабораторні	20
Серія «ЄВРО»	22
Серія «СТАНДАРТ»	26
Тумби лабораторні	30
Тумби підвісні	32
Тумби мобільні	33
Тумби стаціонарні	34
Надбудови сервісні	36
Надбудови титровальні	36
Столи вагові	38
Столи лабораторні для приладів	38
Шафи для зберігання	40
Шафи для реактивів	42
Шафи для кислот та лугів	42
Шафи для безпечного зберігання	43
Шафи металеві	43
Шафи для одягу	44
Шафи для газових балонів	44
Шафи лабораторні	45
Стелажі	46
Комплектуючі та аксесуари	48
Додаткове обладнання	50
Меблі для персоналу	54
Стільці лабораторні	62
Таблиця стійкості матеріалів стільниць	64

Лабораторія майбутнього

Лабораторна система UOSlab – результат творчості й майстерності наших кваліфікованих фахівців. Високотехнологічні рішення під час проектування меблів забезпечують широкі можливості для нових відкриттів та досягнення вагомих результатів

Комплексне рішення

Після того, як Ви прийняли рішення придбати лабораторні меблі системи UOSlab, управління проектом переходить під наш контроль. Цей процес включає у себе консультацію на стадіях планування, ведення проекту, виробництво, доставку і встановлення робочої лабораторії

Різноманітна комплектація

Індивідуальний вибір столів, шаф і робочих поверхонь (стілниць) формує основу Вашої лабораторії. Оснащена додатковими елементами, наприклад, мийками і раковинами, сервісними надбудовами і приладдям, Ваша лабораторія є високоефективним робочим модулем. Що б Ви не обрали – лабораторна система UOSlab забезпечує високу гнучкість і можливості для підвищення ефективності робочих процесів

UOSlab: метал або ДСП

Металеві меблі, як і меблі із ДСП, відрізняються своєю різноманітністю. Вони можуть бути виготовлені за стандартними розмірами з різними варіантами виконання. Наші меблі завжди відповідають усім Вашим вимогам. Металеві меблі і меблі з ДСП легко об'єднуються з іншими елементами, наприклад, із сервісними системами для формування робочої лабораторії

Лабораторна мебельна система UOSlab – сучасна, універсальна і зручна. Якість і надійність меблів підтверджено сертифікатами відповідності

Виставкова зала лабораторних меблів

Виставкова зала лабораторних меблів UOSlab знаходиться за адресою:

м.Київ, вул.Червоноткацька,61.

Ознайомитися з лабораторними меблями Ви можете також на нашому сайті:

labmebli.com.ua відвідавши розділ «Галерея»

Строки виготовлення, доставка, монтаж

Строки виготовлення меблів складають від 15 до 30 робочих днів. Можливе відвантаження зі складу готових, стандартних виробів. Доставка меблів здійснюється власним транспортом або транспортом експедиторської компанії. Вартість і спосіб доставки обумовлюються індивідуально

Оформлення замовлень

Замовлення приймаються по телефону або електронною поштою. Наші фахівці допоможуть підібрати меблі для Вашої лабораторії, проконсультують по технічних питаннях, зорієнтують щодо цін, розрахують вартість доставки до Вашого місця розташування. Можливий виїзд фахівця і консультація на місці. Вказана послуга є безкоштовною. Платежі від юридичних осіб приймаються лише по безготівковому розрахунку. Для фізичних осіб можлива оплата через відділення будь-якого банку

Гарантія якості

Лабораторні меблі UOSlab відрізняються високою якістю, надійністю, безпечністю і довговічністю, що підтверджується відповідними сертифікатами:

- Сертифікат відповідності УкрСЕПРО;
- Заключення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
- Виробництво сертифіковано за системою управління якістю ISO 9001;



Дотримуючись правил експлуатації, лабораторні меблі прослужать Вам тривалий час. Офіційна гарантія на меблі торгової марки UOSlab® становить 18 місяців.

Матеріали стільниць



Нержавіюча сталь (код 03)

- Стійкість:** Луги, розчинники, барвники, нафтопродукти
- Переваги:** Міцність, рівна поверхня без стиків, висока фізична термостійкість, легко дезенфікується
- Застосування:** Лабораторії біології і мікробіології, фармація, радіоактивні зони, патологічна анатомія і медицина
- Опис:** Нержавіюча сталь AISI 304 шліфована
- Недоліки:** Нестійкість до кислот ,що містять хлор і бром



Вологостійка ламінована фанера (код 04)

- Стійкість:** Неагресивні хімічні реагенти
- Переваги:** Вологостійкість, рівна поверхня
- Застосування:** Пересувні та приставні столи у вологій зоні
- Опис:** Ламінована вологостійка фанера 18 мм світло-сірого кольору, торцована кромкою ПВХ 2 мм
- Недоліки:** Хімічна стійкість-середня, нестійкість до довготривалих механічних впливів



Керамогранитна плита 300x300 мм (код 05)

- Стійкість:** Концентровані кислоти, луги, розчинники
- Переваги:** Найкраща стійкість до впливу хімічних речовин і механічних впливів, тривалий вплив високих температур
- Застосування:** Зони з високим хімічним і механічним впливом
- Опис:** Керамогранитна плитка 300x300 мм, наклеєна на вологостійку підложку товщиною 18 мм з бортиком з нержавіючої сталі або алюмінію
- Недоліки:** Наявність швів, нерівна поверхня, обмежене застосування при високих динамічних перевантаженнях



Керамогранитна плита 800x800 мм (код 06)

- Стійкість:** Концентровані кислоти, луги, розчинники
- Переваги:** Довготривалий вплив високих температур, рівна поверхня,практично непомітний шов при стикуванні плит
- Застосування:** Зони з високим хімічним і механічним впливами
- Опис:** Керамогранитна плитка 800x800 мм, наклеєна на вологостійку підложку товщиною 18 мм з бортиком з нержавіючої сталі або алюмінія
- Недоліки:** Нестійкість до плавикової кислоти



Ламінат високого тиску (код 07, 08)

- Стійкість:** Концентровані кислоти, луги, розчинники
- Переваги:** Високощільна структура поверхні, висока стійкість хімічному впливу, вологостійкість, рівна поверхня без стиків
- Застосування:** Хімічна лабораторія, мікробіологічна лабораторія, столи із середнім ступенем навантаження
- Опис:** Вологостійка фанера 18 мм,облицьована HPL пластиком 1 мм, торцована кромкою ПВХ 2 мм
- Недоліки:** Тонкий шар декоративного ламінату, торцовка

Стійкість покриттів при короточасному впливі хімічних реактивів, вологи і високих температур приведена в таблиці 1 на стор 66

Матеріали стільниць



Суцільний, ламінований HPL пластик (код 09)

- Стійкість:** Концентровані кислоти, луги, розчинники
- Переваги:** Високощільна структура поверхні, висока стійкість хімічному впливу, вологостійкість, рівна поверхня без стиків
- Застосування:** Лабораторії вологої хімії, фізична лабораторія, столи зі спеціальними гігієнічними вимогами
- Опис:** Суцільний HPL 18 мм з ламінацією
- Недоліки:** Температурний режим -60 °C...+180 °C



Постформинг (код 10)

- Стійкість:** Неагресивні хімічні реагенти
- Переваги:** Рівна поверхня, вартість
- Застосування:** Пересувні та приставні столи у сухій зоні
- Опис:** Постформований HPL пластик, наклеєний на деревно-стружкову плиту товщиною 28 мм
- Недоліки:** Стиги сприйнятливі до дії вологи, хімічна стійкість середня



Полімерний композит на основі епоксидних смол «DURCON» (код 11)

- Стійкість:** Агресивні хімічні сполуки
- Переваги:** Ідеально гладка поверхня без швів, мають монолітну структуру
- Застосування:** У лабораторіях різного профілю
- Опис:** Витримує вплив температур до 300 °C. Поверхня може обрамлятись бортиком з такого ж самого матеріалу
- Недоліки:** Вартість



Штучне кварцеве каміння (код 13)

- Стійкість:** Агресивні хімічні сполуки
- Переваги:** Термостійкість, за міцністю не поступається каменю, відсутність пористості, гігроскопічність
- Застосування:** Лабораторні столи усіх видів для роботи у зоні високої концентрації хімічних речовин
- Опис:** Штучне кварцеве каміння (матеріал містить 95% кварца і 5% поліефірних смол) товщина 20 мм
- Недоліки:** Нестійкість до плавикової кислоти. Вартість




Поліпропі лен листовий (код 14)

- Стійкість:** Концентровані кислоти, луги, розчинники
- Переваги:** Найкраща стійкість до впливу хімічних речовин, нейтральний до всіх реактивів
- Застосування:** Зони із високим хімічним впливом
- Опис:** Термопластичний полімер пропілену
- Недоліки:** Обмежене використання в умовах високих температур і динамічних навантажень

Стійкість покриттів при короточасному впливі хімічних реактивів, вологи і високих температур приведена в таблиці 1 на стор 66

ШАФИ ВИТЯЖНІ ЛАБОРАТОРНІ

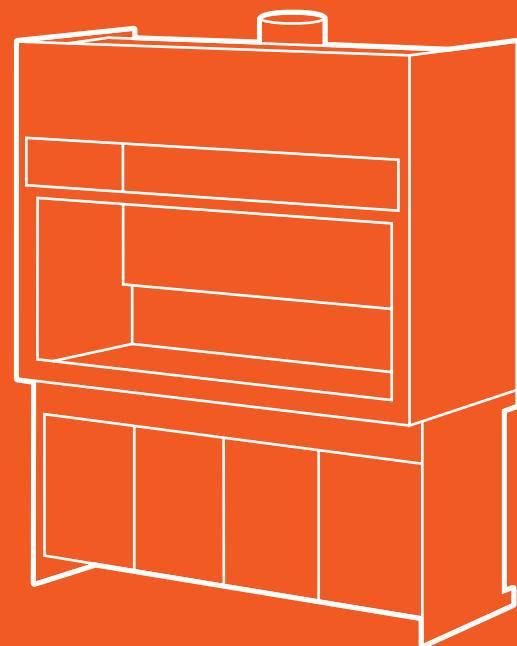

Витяжні шафи призначені для захисту персоналу від шкідливого впливу хімічних агресивних, летючих та токсичних речовин у лабораторних умовах.

Широкий асортимент, а також функціональні і конструктивні особливості витяжних шаф ТМ UOSlab дозволяють ефективно вирішувати завдання різної складності.

Кожна витяжна шафа має в основі металевий каркас, який оснащений захисним екраном і вентиляційними панелями, що забезпечують ефективний повітрообмін. У залежності від завдань лабораторних досліджень, а також характеру і агресивності реагентів, з якими потрібно буде працювати, ми можемо запропонувати: кислотостійкі, термостійкі шафи і витяжні шафи спеціального призначення.

Можлива додаткова комплектація шаф хімічно стійкою сантехнікою, вентиляційним обладнанням, системою фільтраційного очищення повітря і т.п.

Шафа витяжна ШВЛ-01
(спеціальна)



Спеціальна металева витяжна шафа призначена для роботи з особливо небезпечними середовищами. Робоча камера шафи має спеціальне покриття, стійке до впливу кислот, лугів і розчинників

Габаритні розміри		Розміри робочої зони
ширина (мм)	1200 / 1500 / 1800	800 / 1100 / 1400 / 1700
глибина (мм)	750 / 850 / 950	575 / 675 / 775
висота (мм)	2200 / 2600	1200 / 1600

Стандартна комплектація

- Конструкція шафи: Розбірно-зварна з металевої труби 60х30 мм і листової сталі 08/1,5 мм
- Тип захисту конструкції: Зовнішня та внутрішня антикорозійна обробка металу (фосфатирування) з полімерним покриттям
- Робоча камера: HPL-пластик
- Підйомний захисний екран: Протиударне скло з металевою підставою –ручкою. Фіксується на будь-якій висоті. Висота підйому 670/850 мм
- Стационарний екран: Протиударне скло з металевою основою
- Стільниця: Карамогранитна плитка 300х300 мм з бортиком
- Вентиляційна панель: Для відводу важких випарів. Має знімну конструкцію
- Освітлення: Світильник, розміщений поза зоною впливу агресивних речовин
- Електрична панель: Розміщена під стільницею. Електричні розетки 16А, 250В (2 шт) Вимикач 10А, 250В
- Патрубок: □ 250 мм
- Заповнення: Вентильована тумба у нижній частині шафи (двері, полиця)

Додаткова комплектація

- стільниця з керамограніту 800х800 мм, нержавіючої сталі, суцільного HPL пластика (див. «Матеріали стільниць» стр.6-7);
- кран для подачі води, газу, вакууму;
- кран із зовнішнім управлінням для подачі води, газу, вакууму;
- зливна поліпропіленова чаша Ø100 мм;
- хімічно стійкий змішувач TOF (Італія) або побутовий;
- раковина з нержавіючої сталі або поліпропілену;
- каналний вентилятор з регульованою швидкістю обертання;
- робоча камера з керамограніту, поліпропілену або суцільного пластику;
- висувний ящик на електропанелі;
- диференційний автомат двосмуговий 16А 250В;
- патрубок для підключення до системи вентиляції Ø150-250 мм;
- тумба для реактивів з примусовою вентиляцією;
- тумба для реактивів зі спеціальним хімічним стійким покриттям;
- нижня частина без заповнення або з мобільними тумбами;
- штативна стінка.

Шафа витяжна ШВЛ-02
(спеціальна)



Класична модель витяжної шафи, яка призначена для роботи з летючими, органічними речовинами та агресивними реагентами

Габаритні розміри		Розміри робочої зони
ширина (мм)	900 / 1200 / 1500 / 1800	895 / 1195 / 1495 / 1795
глибина (мм)	750 / 800 / 850 / 950	650 / 750 / 850
висота (мм)	2200 / 2600	1200 / 1600

Стандартна комплектація

- Конструкція шафи: Розбірно-зварна з металевої труби 60х30 мм і листової сталі 08/1,5 мм
- Тип захисту конструкції: Зовнішня та внутрішня антикорозійна обробка металу (фосфатирування) з полімерним покриттям
- Робоча камера: Полімерне покриття
- Підйомний захисний екран: Протиударне скло з металевою підставою-ручкою. Фіксується на будь-якій висоті. Висота підйому 670/850 мм
- Стационарний екран: Протиударне скло з металевою основою. Для збільшення оглядовості
- Стільниця: Карамогранитна плитка 300х300 мм з бортиком
- Вентиляційна панель: Для відводу важких випарів. Має знімну конструкцію
- Освітлення: Світильник, розміщений поза зоною впливу агресивних речовин
- Електрична панель: Розміщена під стільницею. Електричні розетки 16А, 250В (2 шт) Вимикач 10А, 250В
- Патрубок: □ 250 мм
- Заповнення: Вентильована тумба у нижній частині шафи (двері, полиця)

Додаткова комплектація

- стільниця з керамограніту 800х800 мм, нержавіючої сталі, суцільного HPL пластика і т.п. (див. «Матеріали стільниць» стр.6-7);
- кран для подачі води, газу, вакууму;
- кран із зовнішнім управлінням для подачі води, газу, вакууму;
- зливна поліпропіленова чаша Ø100мм;
- хімічно стійкий змішувач TOF (Італія) або побутовий;
- раковина з нержавіючої сталі або поліпропілену;
- каналний вентилятор з регульованою швидкістю обертання;
- робоча камера із спеціальним хімічно стійким покриттям;
- висувний ящик на електропанелі;
- диференційний автомат двосмуговий 16А 250В;
- патрубок для підключення до системи вентиляції Ø150-250 мм;
- тумба для реактивів з примусовою вентиляцією;
- тумба для реактивів зі спеціальним хімічним стійким покриттям;
- нижня частина без заповнення або з мобільними тумбами;
- штативна стінка.

Шафа витяжна для габаритних установок ШВЛ-03



Модель витяжної шафи призначена для роботи з крупно-габаритним обладнанням і великими установками

	Габаритні розміри	Розміри робочої зони
ширина (мм)	1200 / 1500 / 1800	1050 / 1350 / 1650
глибина (мм)	750 / 800 / 850 / 950	600 / 700 / 800
висота (мм)	2200 / 2600	2100 / 2500

Стандартна комплектація

- Конструкція шафи: Розбірно-зварна з металевої труби 60х30 мм і листової сталі 08/1,5 мм
- Тип захисту конструкції: Зовнішня та внутрішня антикорозійна обробка металу (фосфатирування) з полімерним покриттям
- Робоча камера: Полімерне покриття
- Підйомний захисний екран: Протиударне скло з металевою підставою-ручкою. Фіксується на будь-якій висоті. Висота підйому 1475 мм
- Стационарний екран: Протиударне скло з металевою основою. Для збільшення оглядовості
- Освітлення: Світильник, розміщений поза зоною впливу агресивних речовин
- Електрична панель: Розміщена під стільницею. Електричні розетки 16А, 250В (2 шт) Вимикач 10А, 250В
- Патрубок: □ 250 мм

Додаткова комплектація

- стільниця з керамограніту 800х800 мм, нержавіючої сталі, суцільного HPL пластика;
- кран для подачі води, газу, вакууму у робочій зоні;
- кран із зовнішнім управлінням для подачі води, газу, вакууму;
- каналний вентилятор з регульованою швидкістю обертання;
- робоча камера із спеціальним хімічно стійким покриттям;
- диференційний автомат двосмуговий 16А 250В;
- розсувні двері;
- патрубок для підключення до системи вентиляції Ø150-250мм;
- виконання шаф великих розмірів.



Шафа витяжна ШВЛ (стандартна)



Стандартна модель витяжної шафи призначена для роботи з летючими, органічними речовинами і агресивними реагентами. Бічна електропанель з двох сторін

	Габаритні розміри	Розміри робочої зони
ширина (мм)	1200 / 1500 / 1800	920 / 1220 / 1520
глибина (мм)	750 / 800 / 850 / 950	650 / 750 / 850
висота (мм)	2200 / 2600	1200 / 1600

Стандартна комплектація

- Конструкція шафи: Розбірно-зварна з металевої труби 60х30 мм і листової сталі 08/1,5 мм
- Тип захисту конструкції: Зовнішня та внутрішня антикорозійна обробка металу (фосфатирування) з полімерним покриттям
- Робоча камера: Спеціальне хімічнестійке покриття
- Підйомний захисний екран: Протиударне скло з металевою підставою-ручкою. Фіксується на будь-якій висоті. Висота підйому 670/850 мм
- Стационарний екран: Протиударне скло з металевою основою. Для збільшення оглядовості
- Стільниця: Карамогранитна плитка 300х300 мм з бортиком
- Вентиляційна панель: Для відводу важких випарів. Має знімну конструкцію
- Освітлення: Світильник, розміщений поза зоною впливу агресивних середовищ
- Електрична панель: Розміщена під стільницею. Електричні розетки 16А, 250В (2 шт) Вимикач 10А, 250В
- Патрубок: □ 250 мм
- Заповнення: Вентильована тумба у нижній частині шафи (двері, полиця)

Додаткова комплектація

- стільниця з керамограніту 800х800 мм, нержавіючої сталі, суцільного HPL пластика (див. «Матеріали стільниць» стр.6-7);
- кран для подачі води, газу, вакууму;
- кран із зовнішнім управлінням для подачі води, газу, вакууму;
- зливна поліпропіленова чаша Ø100 мм;
- хімічно стійкий змішувач TOF (Італія) або побутовий;
- раковина з нержавіючої сталі або поліпропілену;
- каналний вентилятор з регульованою швидкістю обертання;
- робоча камера із спеціальним хімічно стійким покриттям;
- висувний ящик на електропанелі;
- диференційний автомат двосмуговий 16А 250В;
- патрубок для підключення до системи вентиляції Ø150-250 мм;
- тумба для реактивів з примусовою вентиляцією;
- тумба для реактивів зі спеціальним хімічним стійким покриттям;
- нижня частина без заповнення або з мобільними тумбами;
- штативна стінка.



Шафа витяжна ШВЛ-05
(демонстраційний)

Витяжна шафа для демонстрації проведених дослідів у навчальних лабораторіях. Конструкція шафи дозволяє контролювати і спостерігати процеси у робочій камері з усіх боків

Габаритні розміри
ширина (мм) 900 / 1200 / 1500
глибина (мм) 750 / 800 / 850 / 950
висота (мм) 2200

Стандартна комплектація

- Конструкція шафи: Розбірно-зварна з металевої труби 60х30 мм і листової сталі 08/1,5 мм
- Тип захисту конструкції: Зовнішня та внутрішня антикорозійна обробка металу (фосфатування) з полімерним покриттям
- Робоча камера: Полімерне покриття. Скло
- Стільниця: Карамогранитна плитка 300х300 мм з бортиком
- Патрубок: □ 250 мм
- Заповнення: Нижня частина без заповнення

Додаткова комплектація

- стільниця з керамограніту 800х800 мм, нержавіючої сталі, суцільного HPL пластика (див. «Матеріали стільниць» стр.6-7);
- кран для подачі води у робочій зоні;
- зливна поліпропіленова чаша Ø100 мм;
- каналний вентилятор з регульованою швидкістю обертання;
- диференційний автомат двосмуговий 16А 250В;
- електричні розетки 16А, 250В (2шт.)
- світильник і вимикач 10А, 250В;
- патрубок для підключення до системи вентиляції Ø150-250 мм;
- вентилятована тумба у нижній частині шафи (двері, полиця).

Шафа витяжна ШВЛ-06
(універсальна)

Універсальна модель витяжної шафи призначена для роботи з летючими, органічними речовинами і агресивними реагентами. Бічна електропанель з однієї сторони

Габаритні розміри
ширина (мм) 1200 / 1500 / 1800
глибина (мм) 750 / 800 / 850 / 950
висота (мм) 2200 / 2600

Розміри робочої зони
1050 / 1350 / 1650
650 / 750 / 850
1200 / 1600

Стандартна комплектація

- Конструкція шафи: Розбірно-зварна з металевої труби 60х30 мм і листової сталі 08/1,5 мм
- Тип захисту конструкції: Зовнішня та внутрішня антикорозійна обробка металу (фосфатування) з полімерним покриттям
- Робоча камера: Спеціальне хімічне стійке покриття
- Підйомний захисний екран: Протиударне скло з металевою підставою-ручкою. Фіксується на будь-якій висоті. Висота підйому 670/850 мм
- Стационарний екран: Протиударне скло з металевою основою. Для збільшення оглядовості
- Стільниця: Карамогранитна плитка 300х300 мм з бортиком
- Вентиляційна панель: Для відводу важких випарів. Має знімну конструкцію
- Освітлення: Світильник, розміщений поза зоною впливу агресивних середовищ
- Електрична панель: Розміщена під стільницею. Електричні розетки 16А, 250В (2 шт) Вимикач 10А, 250В
- Патрубок: □ 250 мм
- Заповнення: Вентильована тумба у нижній частині шафи (двері, полиця)

Додаткова комплектація

- стільниця з керамограніту 800х800 мм, нержавіючої сталі, суцільного HPL пластика (див. «Матеріали стільниць» стр.6-7);
- кран для подачі води, газу, вакууму у робочій зоні;
- кран із зовнішнім управлінням для подачі води, газу, вакууму;
- зливна поліпропіленова чаша Ø100 мм;
- хімічно стійкий змішувач TOF (Італія) або побутовий;
- раковина з нержавіючої сталі або поліпропілену;
- каналний вентилятор з регульованою швидкістю обертання;
- робоча камера зі спеціальним хімічно стійким покриттям;
- висувний ящик на нижній електропанелі;
- диференційний автомат двосмуговий 16А 250В;
- патрубок для підключення до системи вентиляції Ø150-250 мм;
- тумба для реактивів з примусовою вентиляцією;
- тумба для реактивів зі спеціальним хімічним стійким покриттям;
- нижня частина без заповнення або з мобільними тумбами;
- штативна стінка.

Шафа витяжна ШСШ-01
(для сушильних шаф)

Витяжна шафа призначена для компактного розміщення сушильних шаф




Габаритні розміри		Розміри робочої зони
ширина (мм)	900 / 1200 / 1800	895 / 1195 / 1795
глибина (мм)	750 / 800 / 850 / 950	700 / 800 / 900
висота (мм)	2200 / 2600	1780 / 2180

Стандартна комплектація

- Конструкція шафи: Розбірно-зварна з металевої труби 60х30 мм і листової сталі 08/1,5 мм
- Тип захисту конструкції: Зовнішня та внутрішня антикорозійна обробка металу (фосфатирування) з полімерним покриттям
- Робоча камера: Полімерне покриття
- Захисний екран: Протиударне скло в алюмінієвій рамці. Розсувні двері
- Стільниця: Ламінована фанера
- Електрична панель: Розташована на задній стінці. Електричні розетки 16А, 250В (2шт.)
- Патрубок: □ 250 мм
- Заповнення: Висувний ящик у нижній частині шафи

Додаткова комплектація

- стільниця з керамограніту 800х800 мм, нержавіючої сталі, суцільного HPL пластика (див. «Матеріали стільниць» стр.6-7);
- каналний вентилятор з регульованою швидкістю обертання;
- спеціальне, хімічно стійке покриття робочої камери;
- патрубок для підключення до системи вентиляції Ø150-250 мм;
- без розпашних дверей.

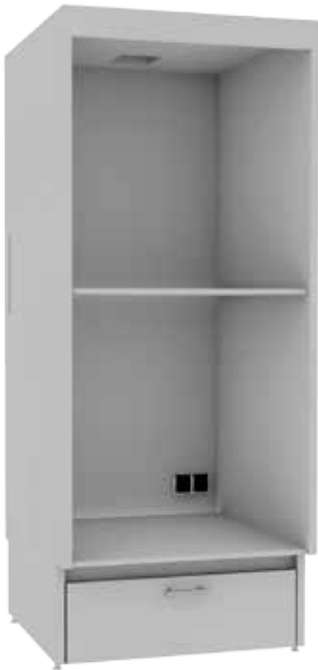

Шафа витяжна ШМП-01
(для муфельних печей)

Термостійка витяжна шафа призначена для встановлення муфельних печей і нагрівального обладнання. Відкрита робоча зона без підйомного захисного екрану



Габаритні розміри		Розміри робочої зони
ширина (мм)	900 / 1200 / 1500 / 1800	895 / 1195 / 1495 / 1795
глибина (мм)	750 / 800 / 850 / 950	730 / 830 / 930
висота (мм)	1950 / 2200	1850 / 2100

Стандартна комплектація


- Конструкція шафи: Розбірно-зварна з металевої труби 60х30 мм і листової сталі 08/1,5 мм
- Тип захисту конструкції: Зовнішня та внутрішня антикорозійна обробка металу (фосфатирування) з полімерним покриттям
- Робоча камера: Полімерне покриття
- Стільниця: Керамогранитна плитка 300х300 мм з бортиком
- Електрична панель: Розположена под столешницею. Электрическая розетка 16А, 250В (1шт.)
- Патрубок: □ 250 мм
- Заповнення: Без заповнення

Додаткова комплектація

- стільниця з керамограніту 800х800 мм, нержавіючої сталі, суцільного HPL пластика (див. «Матеріали стільниць» стр.6-7);
- каналний вентилятор з регульованою швидкістю обертання;
- висувний ящик на електропанелі;
- диференційний автомат двосмуговий 16А 250В;
- патрубок для підключення до системи вентиляції Ø150-250 мм;
- вентилятована тумба у нижній частині шафи (двері, полиця).




Креслення ШВЛ-06

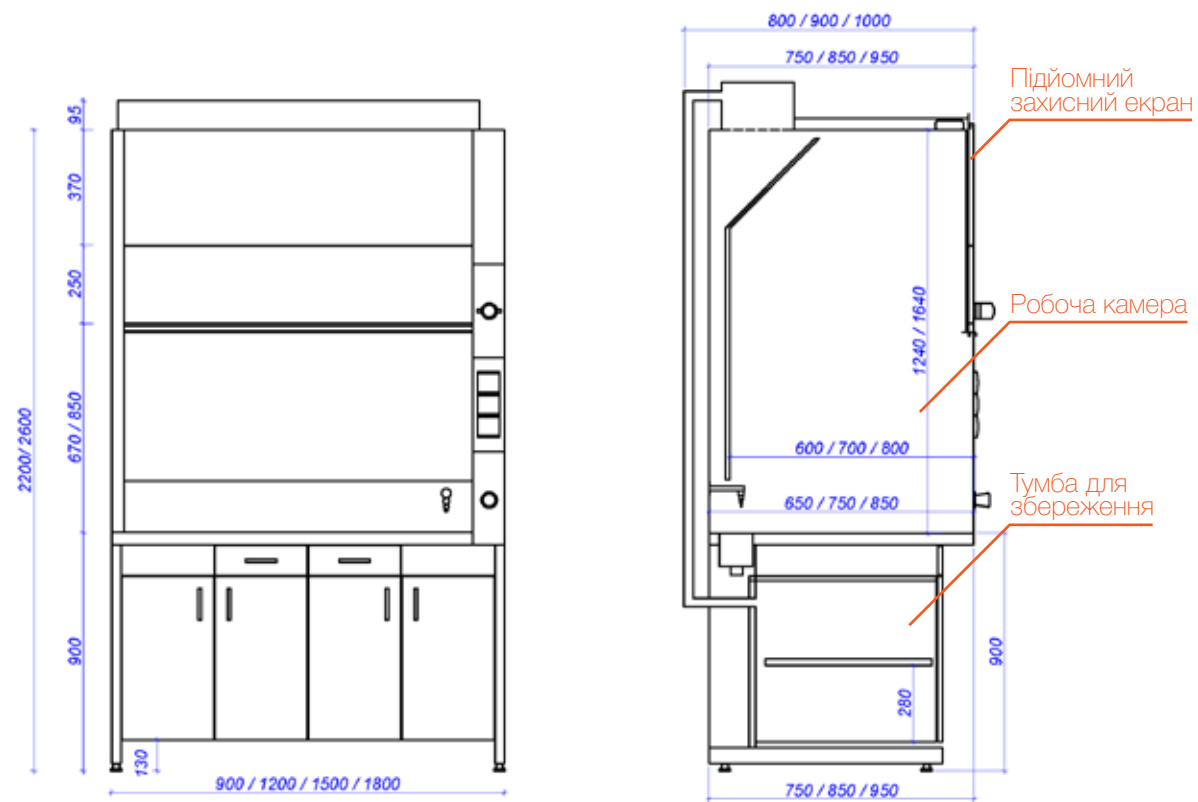

- Лабораторні меблі UOSlab – ретельно продумані для потреб персоналу і забезпечення комфортних робочих місць
- Мають ергономічний дизайн, усі елементи меблів практичні і зручні у користуванні
- 3D візуалізація дозволяє побачити Вашу лабораторію і ефективно продумати усі можливі варіанти планування

Схема розподілу повітряних потоків у витяжній шафі

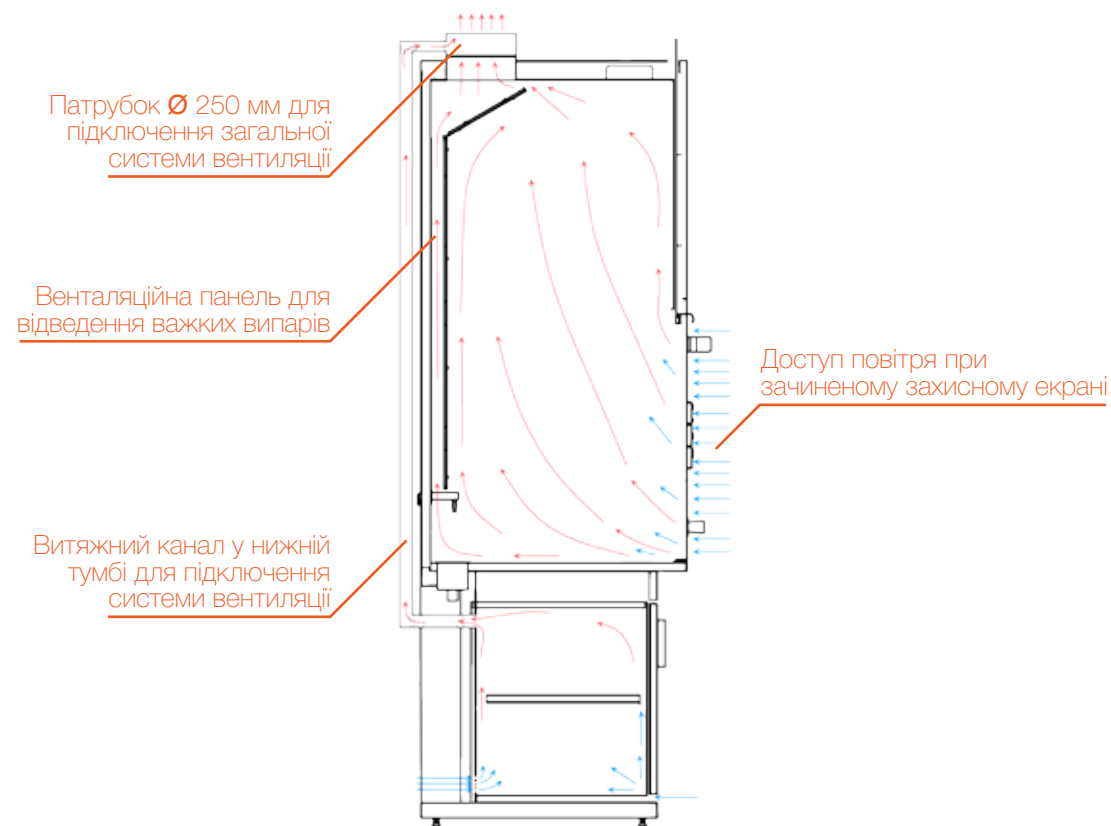

СТОЛИ ЛАБОРАТОРНІ



Столи призначені для встановлення лабораторного обладнання і проведення необхідних робіт лабораторного призначення. Конструкція стола включає у себе стільницю, встановлену на розбірно-зварювальний металевий каркас або подіум з доповненням з підвісних або мобільних тумб. Різні комбінації доповнень у поєднанні з надбудовами дозволяють формувати пристінні і острівні робочі комплекси

Серія «Євро»

В основі – розбірний металевий каркас з труби 60х30 мм або 50х25 мм з полімерним покриттям

Серія «Стандарт»

В основі – суцільнозварний металевий каркас з труби 25х25 мм з полімерним покриттям



Серія ЄВРО



СТОЛИ ЛАБОРАТОРНІ ПРИСТІННІ СЛП-3

Столи пристінні призначені для встановлення лабораторного обладнання і проведення необхідних робіт лабораторного призначення. Столи складаються з міцного металевого каркаса з полімерним покриттям, заповнення з тумб підвісних або мобільних і стільниці

Матеріал робочої поверхні підбирається індивідуально для кожного виду завдань. (див. «Матеріали стільниць» стр.6-7) Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню стола - до 350 кг/см², для посиленних столів - до 500 кг/см². Для компенсації нерівностей підлоги використовуються регульовані опори

ширина (мм) 600 / 800 / 900 / 1200 / 1500 / 1800
глибина (мм) 600 / 700 / 750 / 900
висота (мм) 800 / 900

СЛП – 3.091.05



СЛП – 3.000.05



СЛП – 3.011.05



СЛП – 3.021.05



СЛП – 3.031.05



СЛП – 3.041.05



СЛП – 3.051.05



СЛП – 3.061.05



СЛП – 3.071.05



СЛП – 3.081.05



СЛП – 3.091.05



СЛП – 3.101.05



СЛП-3.111.05



СТОЛИ ЛАБОРАТОРНІ ОСТРІВНІ СЛО-3

СЛО – 3.091.05



Столи острівні – найкращий варіант організації робочої зони в лабораторії. Призначені для встановлення лабораторного обладнання і проведення необхідних робіт лабораторного призначення, встановлюються у вигляді «острівця» у центрі приміщення. Стіл складається з міцного металевого каркаса з полімерним покриттям,заповненого підвісними або мобільними тумбами і стільницею

Допустиме розподільне навантаження на робочу поверхню стола складає до – до 350 кг/см², для посилених столів до 500 кг/см². Для компенсації нерівностей підлоги використовуються регульовані опори

ширина (мм) 800 / 900 / 1200 / 1500 / 1800
глибина (мм) 1200 / 1400 / 1500
висота (мм) 800 / 900

СЛО – 3.000.05



СЛО – 3.061.05



СЛО – 3.041.05



СЛО – 3.081.05



СЛО – 3.021.05



СЛО – 3.111.05



СЛО – 3.031.05



СЛО – 3.051.05



СЛО – 3.091.05



СТОЛИ-МИЙКИ ЛАБОРАТОРНІ СМЛ-3

СМЛ – 3.202.05.0110 *



Столи-мийки призначені для роботи з водою, для миття лабораторного посуду і зливу відпрацьованих реактивів. Столи-мийки можуть розміщуватись окремо або бути функціональним доповненням острівних столів. Вони складаються з раковини та стільниці, встановлених на металевому каркасі з тумбою, раковини підключаються до системи подачі води і відводу рідини та вмонтовуються у стільницю

Мийки комплектуються спеціалізованими лабораторними змішувачами TOF (Італія). Матеріали раковин і стільниць можуть комбінуватись у різних варіантах. Захисні екрани для раковин, змішувачі, а також сушка для посуду доповнюють асортимент запропонованої продукції. Для компенсації нерівностей підлоги використовуються регульовані опори

ширина (мм) 600 / 800 / 900 / 1200 / 1500 / 1800
глибина (мм) 600 / 700 / 750 / 900
висота (мм) 800 / 900

СМЛ – 3.252.05.0110 *



СМЛ – 3.202.05.1111 *



СМЛ – 3.202.05.1111 *



СМЛ – 3.252.05.0220 **



СМЛ – 3.202.05.2222 **



СМЛ – 3.202.05.2222 **



* - Раковина поліпропіленова, хімічно стійкий змішувач TOF

** - Раковина нержавіюча, змішувач побутовий

СТОЛИ ЛАБОРАТОРНІ ТОРЦЕВІ СЛТ-3



Торцеві столи є зручним завершенням острівних столів і в стандартному виконанні представлені трьома моделями з різними комбінаціями робочої поверхні і наповнення. Столи можуть комплектуватися мийками і змішувачами

Основа торцевих столів-розбірний металевий каркас з полімерною покраскою і підвісна тумба. Для компенсації нерівностей підлоги використовуються регульовані опори

ширина (мм) 900 / 1200 / 1400 / 1500
глибина (мм) 700
висота (мм) 800 / 900

СЛТ – 3.000.05



СЛТ – 3.101.05



СЛТ – 3.111.05



Серія СТАНДАРТ



Модульна система «Стандарт» – це ідеальне співвідношення вартості і якості, високоякісні матеріали і ергономічний дизайн, вільний вибір модулів

СТОЛИ ЛАБОРТОРНІ ПРИСТІННІ СЛП-1

Столи складаються з суцільнозварного металевого каркасу з труби 25х25 мм з полімерним покриттям, заповненого підвісними або мобільними тумбами і стільницею

Матеріал робочої поверхні підбирається індивідуально для різних задач. Допустиме розподільне навантаження на робочу поверхню стола – до 300 кг/см²

Для компенсації нерівностей підлоги використовуються регульовані опори

ширина (мм) 600 / 800 / 900 / 1200 / 1500 / 1800
глибина (мм) 600 / 700 / 750
висота (мм) 800 / 900

СЛП – 1.091.05



СЛП – 1.000.05



СЛП – 1.011.05



СЛП – 1.021.05



СЛП – 1.031.05



СЛП – 1.041.05



СЛП – 1.051.05



СЛП – 1.061.05



СЛП – 1.071.05



СЛП – 1.081.05



СЛП – 1.091.05



СЛП – 1.101.05



СЛП – 1.111.05



СТОЛИ ЛАБОРАТОРНІ ОСТРОВНІ СЛО-1

СЛО – 1.091.054



Стіл складається з міцного каркасу з металевої труби 25х25 мм з тумбою, з полімерним покриттям, тумб підвісних або мобільних і стільниці

Допустиме розподільне навантаження на робочу поверхню стола – до 300 кг/см²

Для компенсації нерівностей підлоги використовуються регульовані опори

ширина (мм) 900 / 1200 / 1500 / 1800

глибина (мм) 900 / 1200 / 1400 / 1500

висота (мм) 800 / 900

СЛО – 1.000.05



СЛО – 1.061.05



СЛО – 1.041.05



СЛО – 1.111.05



СЛО – 1.081.05



СЛО – 1.021.05



СЛО – 1.031.05



СЛО – 1.051.05



СЛО – 1.091.05



СТОЛИ-МИЙКИ ЛАБОРАТОРНІ СМЛ-1

СМЛ – 1.202.05.0110 *



Столи-мийки можуть розміщуватись окремо або бути функціональним доповненням острівних столів. Вони складаються з раковини і стільниці, встановлених на металевому каркасі 25х25 мм з тумбою, раковини підключаються до системи подачі води і відводу рідини та вмонтовуються у стільницю. Мийки комплектуються спеціалізованими лабораторними змішувачами

Матеріали раковин і стільниць можуть комбінуватися у різних варіантах. Захисні екрани для раковин, змішувачі, а також сушка для посуду доповнюють асортимент запропонованої продукції. Для компенсації нерівностей підлоги використовуються регульовані опори

ширина (мм) 800 / 900 / 1200 / 1500 / 1800

глибина (мм) 600 / 700 / 750

висота (мм) 800 / 900

СМЛ – 1.252.05.0110 *



СМЛ – 1.202.05.1111 *



СМЛ – 1.202.05.1111 *



СМЛ – 1.252.05.0220 **



СМЛ – 1.202.05.2222 **



СМЛ – 1.202.05.2222 **



* - Раковина поліпропіленова, хімічно стійкий змішувач TOF

** - Раковина нержавіюча, змішувач побутовий

СТОЛИ ЛАБОРАТОРНІ ТОРЦЕВІ СЛТ-1



Торцеві столи є зручним завершенням острівних столів і в стандартному виконанні представлені трьома моделями з різними комбінаціями робочої поверхні і наповнення

Основа торцевих столів – зварний каркас з металевої труби 25х25 мм з полімерним покриттям і тумбою

Для компенсації нерівностей підлоги використовуються регульовані опори

ширина (мм) 900 / 1200 / 1400 / 1500

глибина (мм) 700

висота (мм) 800 / 900

СЛТ – 1.000.05




СЛТ – 1.101.05



СЛТ – 1.111.05



ТУМБИ ЛАБОРАТОРНІ

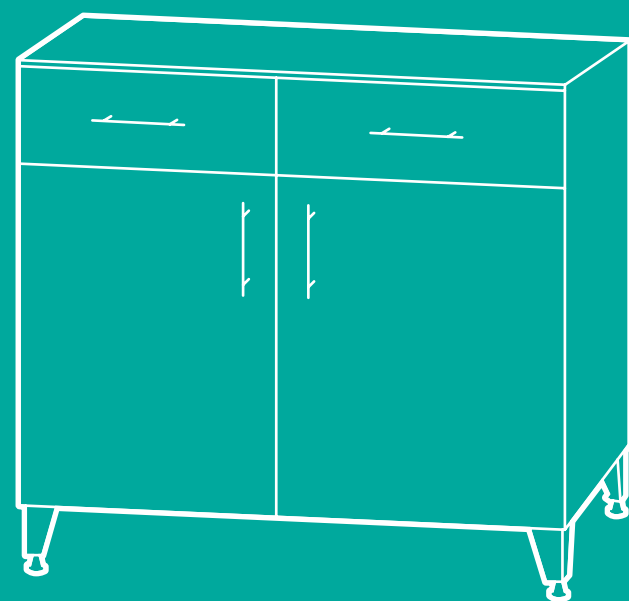

Тумби лабораторні – універсальний і зручний вид меблів, багатофункціональний у різних приміщеннях. Використовується для збереження реактивів, обладнання і документації

Тумби лабораторні бувають стаціонарні, мобільні і підвісні. Виготовляються з металу з полімерним покриттям, ламінованої ДСП або фанери



ТУМБИ ПІДВІСНІ (ТП)

ТП – 3.092



Тумби підвісні представляють собою універсальний елемент меблів, уніфікований до всіх серій острівних і пристінних лабораторних столів. Прикріплюються до каркасів столів і при цьому є легкосмінними. Можливі різні комбінації з висувними ящиками, навісними дверима або полицями з надійними механізмами повного висування.

Виготовляються з металу з полімерним покриттям, ламінованої ДСП або фанери

ширина (мм) серія ЄВРО (код 3)
400 / 450 / 500 / 600 / 800 / 900 / 1000 / 1200
глибина (мм)
435 / 535 / 585 / 735
висота (мм)
175 / 580 / 680

ширина (мм) серія СТАНДАРТ (код 1)
425 / 475 / 500 / 550 / 575 / 725 / 850 / 875 / 950 / 1150
глибина (мм)
495 / 595 / 645 / 795
висота (мм)
615 / 715

ТП – 3.022



ТП – 3.032



ТП – 3.042



ТП – 3.052



ТП – 3.062



ТП – 3.072



ТП – 3.082



ТП – 3.092



ТП – 3.102



ТУМБИ МОБІЛЬНІ (ТМ)

ТМ – 1.031.01



Тумби мобільні дуже зручні у використанні, можуть бути використані як самостійні вироби.

Можливі різні комбінації з висувними ящиками, навісними дверима або полицями з надійними механізмами повного висування.

Виготовляються з металу з полімерним покриттям, ламінованої ДСП або фанери

ширина (мм)
400 / 450 / 500 / 600 / 800
глибина (мм)
420 / 520
висота (мм)
630 / 730

ТМ – 1.031.01



ТМ – 1.041.01



ТМ – 1.051.01



ТМ – 1.061.01



ТМ – 1.071.01



ТМ – 1.091.01



ТУМБИ СТАЦІОНАРНІ (ТС-1)

ТС – 0.031.01



Тумби стаціонарні дуже зручні у використанні, можуть бути використані як самостійні вироби.

Можливі різні комбінації з висувними ящиками, навісними дверима або полицями з надійними механізмами повного висування.

Виготовляються з металу з полімерним покриттям, ламінованої ДСП або фанери

Встановлюються на регульовані металеві опори. Висота 130 мм, регулювання 0-30 мм

ширина (мм)
400 / 450 / 500 / 600 / 800
глибина (мм)
420 / 520 / 600 / 700
висота (мм)
750 / 800 / 900

ТС – 0.031.01



ТС – 0.041.01



ТС – 0.051.01



ТС – 0.061.01



ТС – 0.071.01



ТС – 0.091.01



ТУМБИ СТАЦІОНАРНІ (ТС-2)

ТС – 1.031.10



Тумби стаціонарні ТС-2 можуть використовуватися під час комплектації лабораторії, вони дуже зручні у викорисанні .

Тумби стаціонарні ТС-2 на подіумній конструкції і з стільницею з постформингу.

Виготовляються з металу з полімерним покриттям, ламінованого ДСП або фанери

ширина (мм)
400 / 450 / 500 / 600 / 800
глибина (мм)
600 / 700 / 750
висота (мм)
800 / 900

ТС – 1.031.10



ТС – 1.041.10



ТС – 1.051.10



ТС – 1.061.10




ТС – 1.071.10



ТС – 1.091.10



НАДБУДОВИ ЛАБОРАТОРНІ

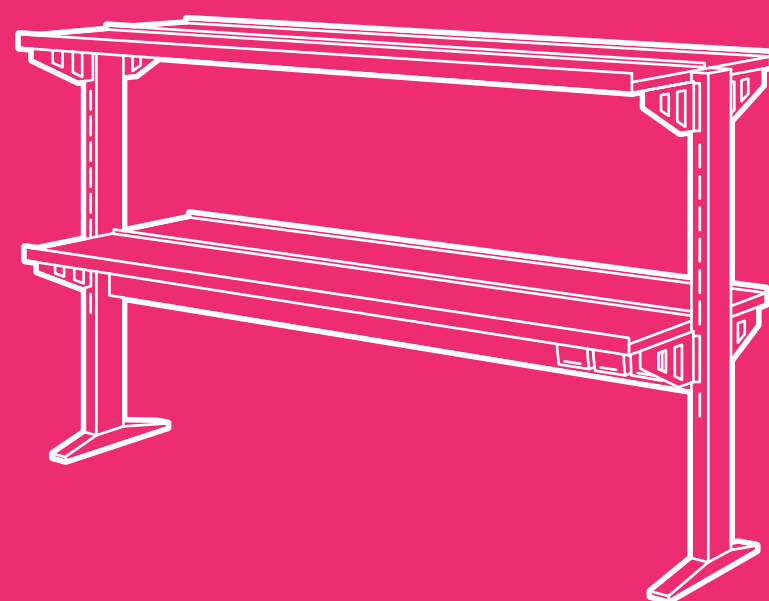

НАДБУДОВИ СЕРВІСНІ (НСП/НСО)

Надбудови сервісні призначені для розширення робочого простору шляхом додавання полиць та шаф над робочим столом. Завдяки надбудові з'являється можливість розміщення сервісних модулів з електричними компонентами і вмонтованих модулів з кранами для води та газу.

Надбудова складається з міцного металевого каркасу з полімерним покриттям, полиць і шаф. Полиці можуть бути виготовлені з ЛДСП, ламінату високого тиску, скла або іншого матеріалу.

ширина (мм) **600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800**
глибина (мм) **270 / 480**
висота (мм) **900**

НСП-1.011.000




НСП-1.011.120



НСО-1.011.240



НСП-2.011.000

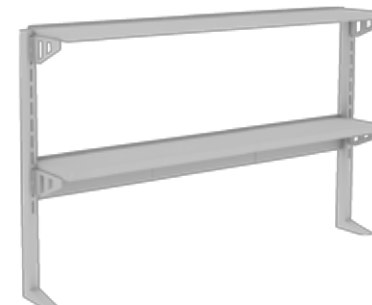

НСП-2.011.120



НСО-2.011.240



НАДБУДОВИ ТИТРУВАЛЬНІ (НСТ)

Титрувальні надбудови встановлюються на столи лабораторні, пристінні і острівні.

Призначені для ефективного і зручного проведення аналізів титриметричним методом. В основі титрувальних надбудов знаходиться металевий каркас з полімерним покриттям. Надбудови обладнані екраном з білого матового скла з LED з підсвічуванням. Штативи виготовлені з нержавіючої сталі і укомплектовані утримувачем для бореток.

ширина (мм) **600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800**
глибина (мм) **270 / 480**
висота (мм) **900**


НСТ-1.311.020



НСТ-1.301.020



СТОЛИ ВАГОВІ, ДЛЯ ПРИЛАДІВ

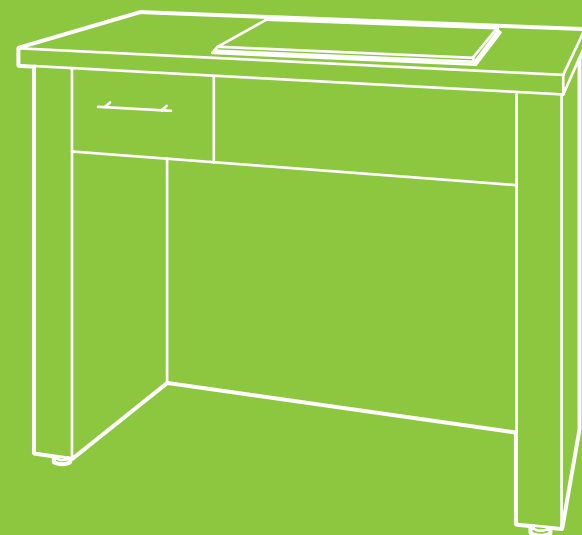

СТОЛИ ВАГОВІ ЛАБОРАТОРНІ (СЛВ)

Столи вагові вібростійкі призначені для установки і експлуатації чутливих аналітичних вагів, які дозволяють виміряти найменше значення мінімальної ваги.

Стіл для вагів має зварний каркас з влаштованою на демпфери гранітною плитою. Столи для аналітичних вагів поділяються на 1-каркасні та 2-каркасні.

У стандартній комплектації стіл для вагів має підсилений металевий каркас, поліровану гранітну плиту і стільницю на вибір замовника. (див. «Матеріали стільниць» стр.6-7)

ширина (мм) **500 / 540 / 600 / 750 / 900 / 1200 / 1500**

глибина (мм) **500 / 540 / 600 / 700 / 750**

висота (мм) **800 / 900**

СЛВ-1.000.00



СЛВ-1.001.00



СЛВ-3.011.05



СЛВ-1.011.05



СЛВ-3.000.05.010



СЛВ-3.000.05.101



СТОЛИ ЛАБОРАТОРНІ ДЛЯ ПРИЛАДІВ (СЛП)

Столи для приладів призначені для установки лабораторного обладнання і роботи з ним.

Виготовляються з міцного металевого каркасу з полімерним покриттям, стільниці, електропанелі з блоком розеток, комплектуються підвісними або мобільними тумбами

СЛП-3.021.05.040




СЛП-3.041.05.040



СЛП-3.101.05.040



ШАФИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

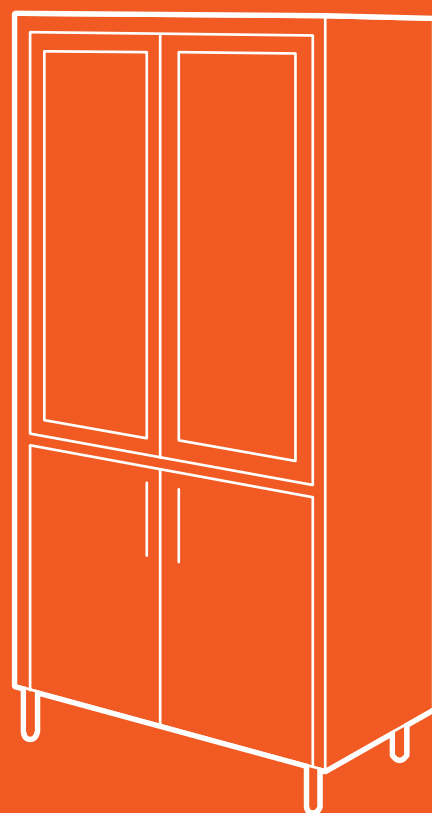

Багато хімічних реактивів, які необхідні для роботи у лабораторії, є небезпечними речовинами. Вони потребують особливих умов використання і зберігання

Невід'ємною одиницею лабораторії є шафи для зберігання

Шафи UOSlab відповідають усім нормам техніки безпеки

У залежності від призначення шафи розподіляються за типами:

- Шафи для реактивів для зберігання токсичних речовин ШР
- Шафи для зберігання кислот та агресивних речовин ШХ хімічно стійких
- Шафи-сейфи ШО з підсиленням металевим каркасом та можливістю прикріплення шаф до підлоги або стін
- Шафи лабораторні для зберігання лабораторного посуду, мілкого та середнього обладнання, засобів першої допомоги ШЛ-з металу або ЛДСП
- Шафи для одягу ШО
- Шафи для безпечного зберігання газових балонів ШБ
- Стелажі

ШАФА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕАКТИВІВ (ШР)



Шафа призначена для безпечного зберігання хімічних реактивів і речовин, які виділяють небезпечні випари

ширина (мм) 600 / 800 / 900
глибина (мм) 600
висота (мм) 1950 (+100)


Стандартна комплектація

- зовнішня та внутрішня антикоррозійна обробка металів (фосфатування) з полімерним покриттям;
- полиці стаціонарні, виготовлені з листової сталі з полімерним покриттям;
- патрубок для підключення до системи вентиляції Ø100 мм;
- замок 2шт;
- регульовані опори 0-30 мм.

Додаткова комплектація

- з'ємні полиці з монолітного хімічно стійкого пластика, поліпропілену або нержавіючої сталі;
- висувний ящик у нижній частині шафи;
- вентилятор каналного типу;
- ригельный замок;
- установка шафи на металеві регульовані ніжки або подіум.

ШАФА СПЕЦІАЛЬНА для зберігання реактивів (ШС)

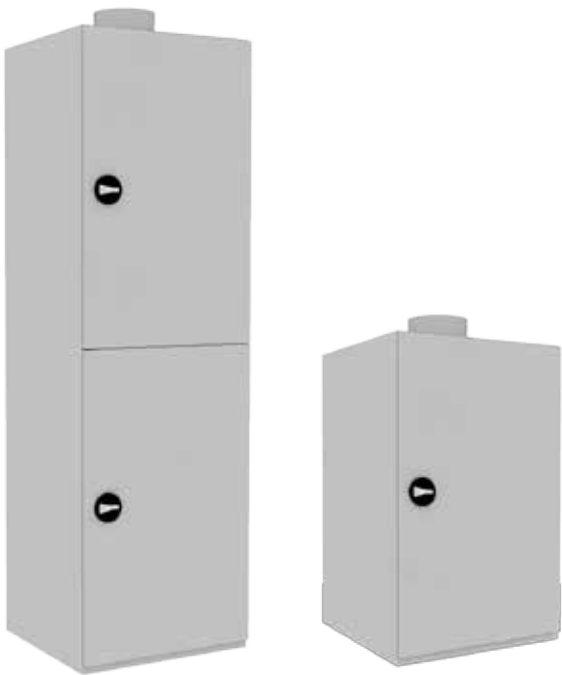

Шафа спеціальна призначена для безпечного зберігання токсичних матеріалів і легкозаймистих речовин, потребуючих зберігання. Шафа може кріпитися до підлоги або стін лабораторії

ширина (мм) 600 / 800 / 900
глибина (мм) 600
висота (мм) 700 / 1950 (+100)

Стандартна комплектація

- зовнішня та внутрішня антикоррозійна обробка металів (фосфатування) з полімерним покриттям;
- подвійні металеві стіни з заповнення з мінеральної вати;
- полиці висувні, виготовлені з нержавіючої сталі
- патрубок для підключення до системи вентиляції Ø100 мм;
- ригельный замок;
- регульовані опори 0-30 мм.

Додаткова комплектація

- з'ємні полиці з монолітного хімічно стійкого пластика, поліпропілену або нержавіючої сталі;
- зона зберігання зі спеціальним хімічно стійким покриттям

ШАФА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ хімічно стійких речовин (ШХ)



Шафа для зберігання хімічно стійких речовин призначена для роздільного і безпечного зберігання кислот і лугів, виділяючих агресивні випари. Зона зберігання зі спеціальним хімічно стійким покриттям

ширина (мм) 600 / 800 / 900
глибина (мм) 600
висота (мм) 1950 (+100)

Стандартна комплектація

- зовнішня та внутрішня антикоррозійна обробка металів (фосфатування) з полімерним покриттям;
- зона зберігання зі спеціальним хімічно стійким покриттям;
- полиці стаціонарні, виготовлені з листової сталі з полімерним покриттям;
- патрубок для підключення до системи вентиляції Ø100 мм;
- регульовані опори 0-30 мм.

Додаткова комплектація

- з'ємні полиці з монолітного хімічно стійкого пластика, поліпропілену або нержавіючої сталі;
- висувний ящик у нижній частині шафи;
- вентилятор каналного типу;
- ригельный замок;
- хімічно стійка капсула з поліпропілену;
- установка шафи на металеві регульовані ніжки або подіум.

ШАФА-КАРГО для зберігання реактивів (ШР)



Шафа-карго призначена для безпечного зберігання реактивів. Полиці у шафах монтуються на висувному каркасі на підсиленних роликах, забезпечуючих легкий доступ з обох сторін шафи

ширина (мм) 240 / 460
глибина (мм) 600 / 750 / 850 / 900
висота (мм) 1950 / 2200

Стандартна комплектація

- зовнішня та внутрішня антикоррозійна обробка металів (фосфатування) з полімерним покриттям;
- 5 полиць з пофарбованого листового металу;
- патрубок для підключення до системи вентиляції Ø100 мм;
- регульовані опори 0-30 мм.

Додаткова комплектація

- полиці з нержавіючої сталі;
- вентилятор каналного типу;
- конструкція повністю з нержавіючої сталі.

ШАФА для зберігання одягу (ШО)



Шафа металева призначена для зберігання одягу та особистих речей у лабораторії

- ширина (мм) 300 / 400 / 600 / 800
- глибина (мм) 500
- висота (мм) 1800 / 1950

Стандартна комплектація

- зовнішня та внутрішня антикоррозійна обробка металу (фосфатування) з полімерним покриттям;
- полиця стаціонарна для головних уборів;
- тримач для вішалок;
- замок;
- регульовані опори 0-30 мм.

Додаткова комплектація

- додаткова полиця для взуття;
- установка на металевих регульованих ніжках або подіумі;
- шафа для одного балону ШО-01;
- шафа для подвійного балону ШО-02.

ШАФИ для зберігання (ШЛ)



Шафи лабораторні (ШЛ) призначені для зберігання лабораторного посуду, легкого обладнання, безпечних хімічних реактивів і документів. Виготовляються з листового металу або ламінованої ДСП

- ширина (мм) 400 / 600 / 800 / 900 / 1200
- глибина (мм) 400 / 500 / 600
- висота (мм) 1950

Стандартна комплектація

Металеві шафи:

- зовнішня та внутрішня антикоррозійна обробка металу (фосфатування) з полімерним покриттям;
- полиці стаціонарні, виготовлені з листового металу з полімерним покриттям;
- регульовані опори 0-30 мм.

Шафи з ламінованої ДСП:

- корпус, полиці та двері з ЛДСП 18 мм світло-сірого кольору;
- 4 полиці з ЛДСП 18 мм світло-сірого кольору;
- регульовані опори 0-30 мм.

Додаткова комплектація

- патрубок для підключення до системи вентиляції Ø100 мм;
- установка на металевий подіум;
- скляні полиці;
- замок.

ШАФА для зберігання газових балонів (ШБ)



Шафа металева призначена для зберігання газових балонів

- ширина (мм) 400 / 625
- глибина (мм) 500
- висота (мм) 1850

Стандартна комплектація

- зовнішня та внутрішня антикоррозійна обробка металу (фосфатування) з полімерним покриттям;
- розбірна конструкція;
- тримач для балонів;
- патрубок для підключення до системи вентиляції Ø100 мм;
- замок;
- регульовані опори 0-30 мм.

Додаткова комплектація

- каркасна конструкція;
- виготовлення шафи на 2 балона;
- шафа для одного балону ШБ-01
- шафа для подвійного балону ШБ-02

ШЛ-2.131



ШЛ-2.151



ШЛ-2.161



ШЛ-2.231



ШЛ-2.221



ШЛ-2.251



СТЕЛАЖІ для зберігання (СТ)
СТ-1



Стелажі використовуються для зберігання інвентарю, документів, запасів. Типорозмір стелажа підбирається індивідуально у залежності від його призначення, умов експлуатації і передбачуваного навантаження

Стелажі металеві:
ширина (мм) **750 / 1000 / 1150**

глибина (мм) **300 / 400 / 500 / 600**

висота (мм) **1000 / 1500 / 2000 / 2500**

Стелажі з ЛДСП:
ширина (мм) **400 / 600 / 800 / 900 / 1200**

глибина (мм) **400 / 600**

висота (мм) **1950**

Стелажі металеві:

В основі металевих стелажів – зварна або збірно-розбірна металева конструкція, що складається з вертикальних стійок, які об'єднані між собою за допомогою полиць або горизонтальних траверс

Секції зберігання стелажів збираються в один або декілька рядів необхідної довжини з потрібною кількістю ярусів

У залежності від навантаження стелажі мають 2 варіанти виконання: стандартна (навантаження від 80 до 200 кг) і підсилена конструкція (навантаження до 3000 кг)

Стелажі з ламінованої ДСП:

В основі стелажів з ДСП збірно-розбірна конструкція вертикальних стійок і полиць з ДСП

Секції зберігання стелажів в один або декілька рядів необхідної довжини з потрібною кількістю ярусів

СТ-1




СТ-2



СТ-0




СТ-0

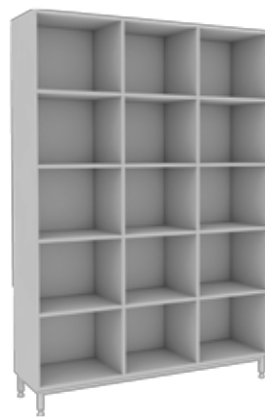

- Комплектуючі вироби, які застосовуються при виготовленні лабораторних меблів, стійкі до впливу агресивних середовищ, вологостійкі, міцні, термостійкі
- Електропанелі зручно розташовані на лицьових поверхнях меблів, обладнані блискозахищеними розетками та вимикачами

КОМПЛЕКТУЮЧІ ТА АКСЕСУАРИ

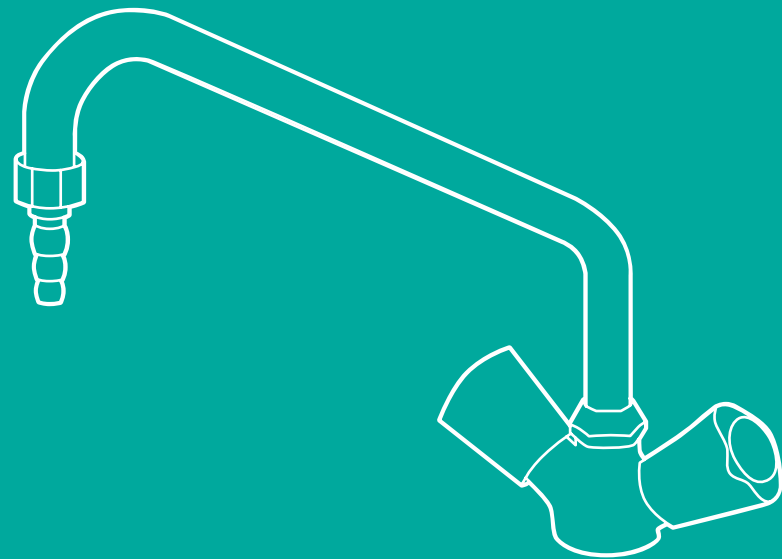

Комплектуючі для лабораторних меблів

Раковина ПП (сіра)



Розміри (мм) 550 x 450 x 300

Раковина ПП (біла)



Розміри (мм) 560 x 460 x 300

Раковина з нержавіючої сталі



Широкий типоразмерний ряд

Хімічно стійка лабораторна сантехніка TOF (Італія)

Змішувач TOF



Кран для холодної води TOF



Аварійний душ для очей



Сантехніка побутова

Кран для холодної води TOF (настінний)



Кран для холодної води з виносним управлінням



Кран для газу настінний



Додаткова сантехніка

Змішувач побутовий




Злив поліпропиленовий, діаметр 100 мм



Кран для холодної води настінний



ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

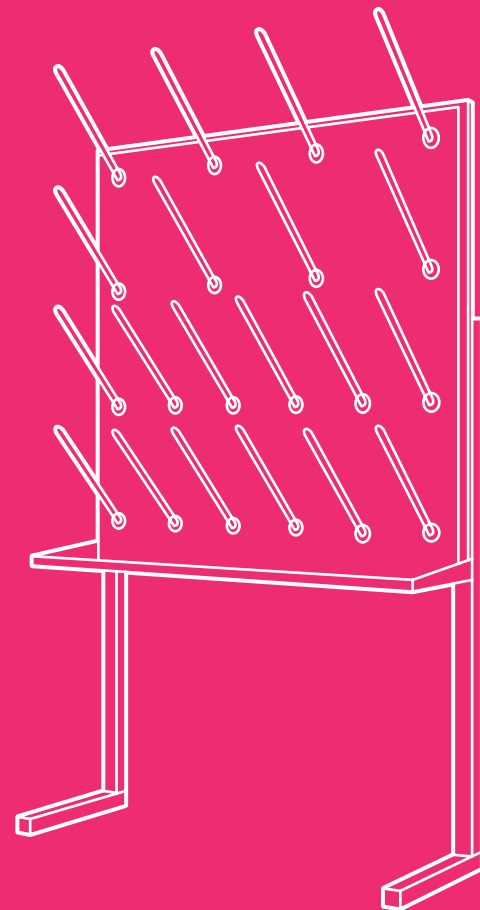


Захисний екран



Розміри (мм)
700 x 400 x 550

Захисний екран з оргскла захищає від дрібних уламків, бризок реактивів. Виготовляється на металевому каркасі, з полімерним покриттям

Зонт витяжний

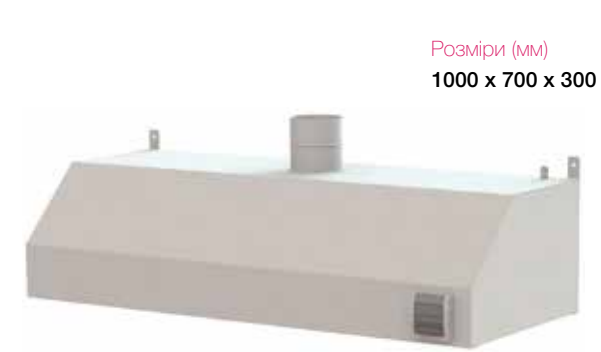

Розміри (мм)
1000 x 700 x 300

Зонт витяжний виготовлений з листового металу, з полімерним покриттям. Зонт витяжний призначений для відведення шкідливих випарів. Монтаж настінний


Штатив лабораторний



Висота (мм)
1000 / 1200

Штатив з важкою, стійкою основою
Матеріал штативу – нержавіюча сталь Ø 12 мм, основа – сталь

Штативна стінка

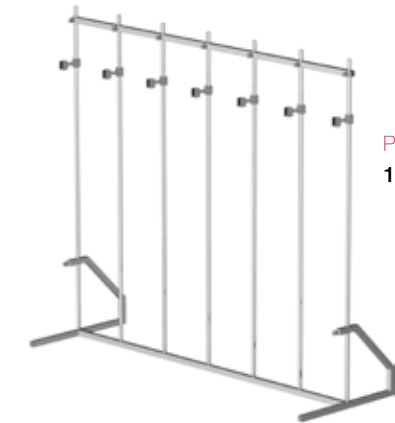

Розміри (мм)
1340 x 450 x 1200

Штативна стінка з сімома штативами.
Матеріал штативів – нержавіюча сталь Ø 12 мм. Лапки для борток під замовлення

Сервісний столик



Матеріал столика – сталь з полімерним покриттям або нержавіюча сталь. Дві полиці висувного ящика для збереження інструментів. Ручка для переміщення стола

Візок для балонів



Візок для балонів використовується для перевезення газових балонів на невеликі відстані у лабораторіях і медичних організаціях

Блок розеток



Додатковий блок для установки на стільницю столу має клас захисту IP 55, монтується на металевій трубі

Електропанель



Електропанель зі зручним розміщенням розеток і вимикачів

Підставка під дистилятор



Основа підставки – суцільнозварний каркас з полімерним покриттям. Полка виготовлена з вологостійкої фанери або ламінату високого тиску. Установка настінна

Підставка під дистилятор П-подібна



Основа підставки – суцільнозварний каркас з полімерним покриттям. Полка виготовлена з вологостійкої фанери або ламінату високого тиску. Установка настінна

- Великий асортимент хімічно стійких стільниць дозволяє задовольнити найвищі вимоги до міцності
- Меблі комплектуються поліпропіленовими мийками, стійкими до впливу агресивних середовищ
- Столи мають посилений металевий каркас, який витримує навантаження до 350 кг

СУШКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПОСУДУ

Сушка лабораторна виконана з пілопропілену товщиною 8 мм, має піддон з нержавіючої сталі з трубою для відводу води. Кількість стрижнів – 20 штук.

Виконується у 2-х варіантах: настінний і настільний

- Матеріал стрижнів – пластик;
- Піддон для зборів води з водовідвідною трубою;
- Встановлюється на столі або підвішується на стіну.



СУШ – 01


Ширина (мм)
600/180/600 (+60)



СУШ – 02

Ширина (мм)
600/180/600 (+90)

МЕБЛІ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ

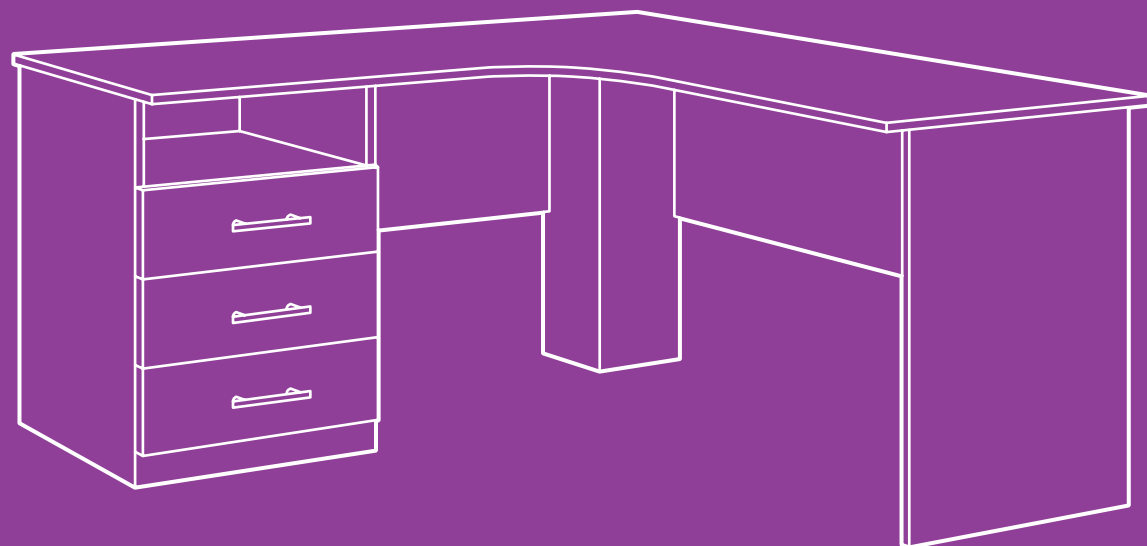


Сучасна лабораторія – це багатофункційне приміщення, де разом з лабораторними меблями використовуються меблі для персоналу. В багатьох лабораторіях необхідні робочі місця для роботи з документами, їх обробкою і збереженням, але при цьому немає необхідності у посиленні конструкції або в хімічній стійкості, що у свою чергу веде до подорожчання. Меблі для персоналу гармонійно будуть поєднуватися з лабораторними меблями і складуть цілісний робочий простір

Усі меблі у стандартному виконанні виготовляються з ламінованої ДСП, а при використанні меблів у приміщеннях з підвищеною вологістю використовується металевий каркас і ламінована вологостійка фанера



Столи робочі (CP)

Безкаркасні

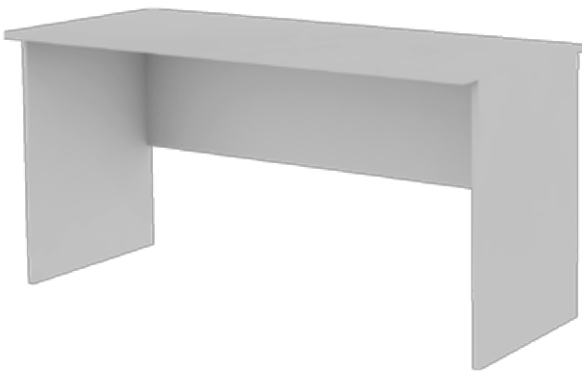

На металевому каркасі



Столи робочі виконуються у 2-х варіантах: безкаркасні і на металевому каркасі

Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню стола до 150 кг

Стільниця виготовляється з ламінованої ДСП. Товщина стільниці у стандартному виконанні 18 мм

ширина (мм) 1200 / 1400 / 1500 / 1600 / 1800

глибина (мм) 600 / 650 / 700 / 750 / 800


висота (мм) 750

Варіанти виконання безкаркасних столів:

CP-0.001



CP-0.011

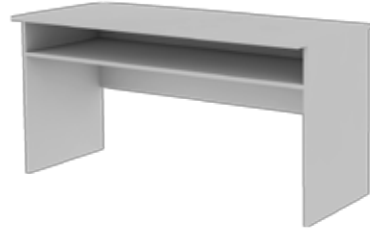

CP-0.051



CP-0.031



CP-0.041



CP-0.061




Варіанти заповнення столів можуть відрізнятися від пропозиції. (див. «Тумби стаціонарні та мобільні» стр.62)

Столи можуть додатково комплектуватися навісними шафками для документів. (див. «Полиці і шафки» стр.61)

Стільниця може бути виконана з інших матеріалів. (див. «Матеріали стільниць» стр.6-7)

Столи робочі кутові (СУ)

Безкаркасні

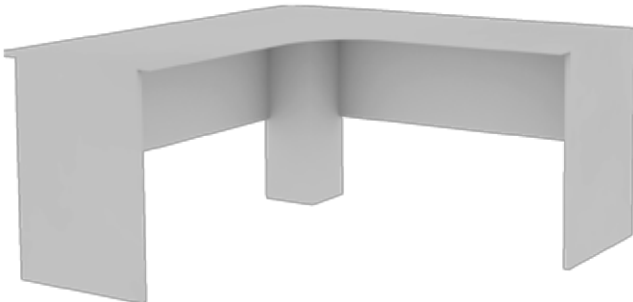

На металевому каркасі



Стіл призначений для роботи, сидячи з документами і обчислювальною технікою. Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню стола до 150 кг

Стільниця виготовляється з ламінованої ДСП. Товщина стільниці у стандартному виконанні 18 мм

Столи робочі виконуються у 2-х варіантах: безкаркасні і на металевому каркасі

ширина (мм) 1200 / 1400 / 1500 / 1600

глибина (мм) 1200 / 1400 / 1500 / 1600

висота (мм) 750

Варіанти виконання безкаркасних столів:


СУ-0.001



СУ-0.051




СУ-0.061

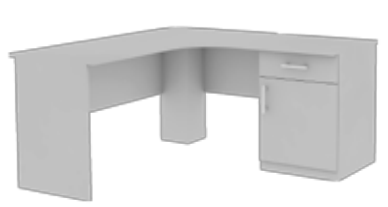

СУ-0.031



СУ-0.041

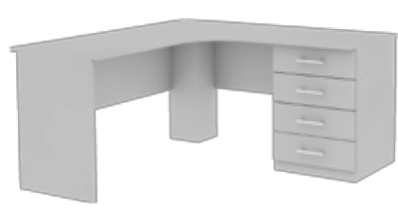

СУ-0.111



Варіанти заповнення столів можуть відрізнятися від пропозиції. (див. «Тумби стаціонарні та мобільні» стр.62)

Столи можуть додатково комплектуватися навісними шафками для документів. (див. «Полиці і шафки» стр.61)

Стільниця може бути виконана з інших матеріалів. (див. «Матеріали стільниць» стр.6-7)

Шафи для зберігання одягу і документів

Шафи для зберігання документів, одягу та інших предметів у сухому і провітрюваному приміщенні
Шафи можуть встановлюватись на металеві ніжки

ширина (мм)	400 / 600 / 700 / 800 / 900
глибина (мм)	380 / 500 / 600
висота (мм)	1850



Полиці і шафки

Полиці і шафки підвісні призначені для зберігання документів та інших предметів у сухому і провітрюваному приміщенні
Спосіб монтажу настінний

ширина (мм)	300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 900
глибина (мм)	300 / 380
висота (мм)	400 / 600 / 800

Стандартні



Високі



Широкі



Високі і широкі



Тумби стаціонарні і мобільні (ТС і ТМ)

Тумби призначені для зберігання документів та інших предметів у сухому і провітрюваному приміщенні. Тумби стаціонарні можуть встановлюватися на металеві ніжки


ширина (мм)	400 / 450 / 500 / 600 / 800
глибина (мм)	400 / 450 / 500 / 550 / 600
висота (мм)	630 / 750

Тумби мобільні

ТМ-0.041



ТМ-0.051

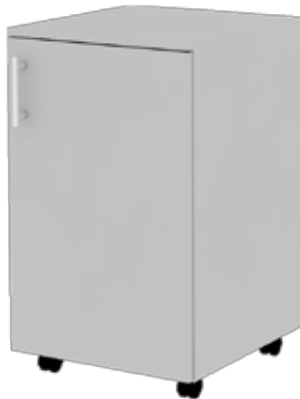


ТМ-0.061



Тумби стаціонарні

ТС-0.001

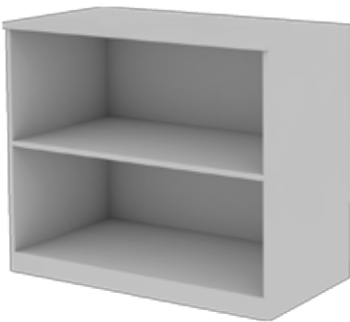

ТС-0.041



ТС-0.051



ТС-0.061



ТС-0.091



ТС-0.101




Рекомендації при виборі лабораторних меблів

Для того, щоб правильно підібрати лабораторні меблі потрібно обов'язково врахувати наступне:

- Скласти перелік реактивів, розчинників, робочих рідин і газів, які планується використовувати в лабораторії, щоб визначити необхідний клас стійкості лабораторних меблів;
- Врахувати необхідну кількість робочих місць;
- Врахувати наявність категорії приміщень лабораторій (протипожежний захист, вибухонебезпечність) відповідно до існуючої документації;
- Врахувати «чисті» розміри приміщень після ремонту. Також, точки, висоти відведення всіх комунікацій (бажаний проект із підписом відповідального, уточнюється у будівельників або у інженера проекту). Надалі необхідно попередити будівельників (проектувальника) про особливості підведень необхідних комунікацій до острівних столів

СТІЛЬЦІ ЛАБОРАТОРНІ

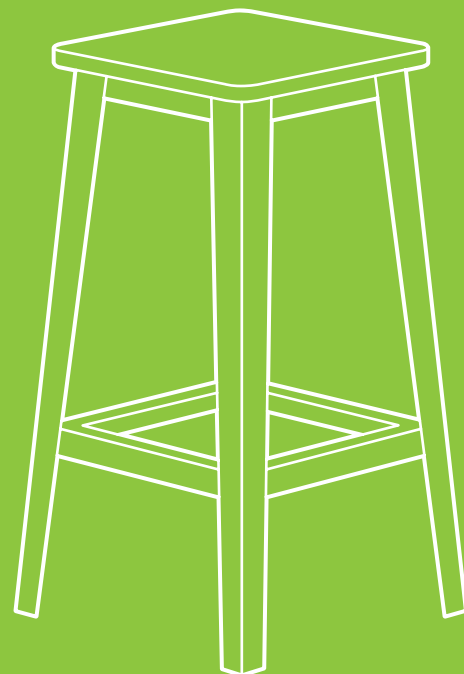

Крісло лабораторне PU високе

Для роботи за стандартними столами

- матеріал сидіння поліуретан, хімічно стійкий
- роликові опори
- кільцева підставка для ніг



Крісло лабораторне PU низьке

Для роботи за стандартними столами

- матеріал сидіння поліуретан, хімічно стійкий
- роликові опори



Стілець лабораторний PU високий

Для роботи за високими столами

- матеріал сидіння поліуретан, хімічно стійкий
- кільцева підставка для ніг
- шарнірні опори



Стілець лабораторний PU низький

Для роботи за високими столами

- матеріал сидіння поліуретан, хімічно стійкий
- роликові опори



Стілець високий лабораторний

Для роботи за високими столами

- матеріал сидіння шкірзам, чорного кольору, стійкий до слабких розчинів кислот і лугів
- кільцева підставка для ніг
- шарнірні опори



Стілець низький лабораторний

Для роботи за високими столами

- матеріал сидіння шкірзам, чорного кольору, стійкий до слабких розчинів кислот і лугів
- роликові опори



Табурет металевий UOSlab

Для роботи за високими столами

- міцний металевий каркас
- місце для сидіння із сірої вологостійкої фанери



Крісло лабораторне

Для роботи за стандартними столами

- матеріал сидіння шкірзам, чорного кольору, стійкий до слабких розчинів кислот і лугів
- роликові опори

Стійкість матеріалів при короточасному впливі хімічних реагентів, вологи і високих температур


№	Реактиви	Нержавіюча сталь AISI 304 (03)	Фанера ламінована (04)	Керамограніт 300х300 мм (05)	Керамограніт 800х800 мм (05)	ЛВТ (07)	HPL (09)	Постформінг (10)	Скло (11)	DURCON (12)	Кварц (13)	Поліпропілен (14)
1	Азотна кислота (65%)	+	+/-	+	+	+/-	+	-	+	+	+	+
2	Азотна кислота розбавлена (10%)	+	+/-	+	+	+	+	+/-	+	+	+	+
3	Сірчана кислота (92%)	+/-	-	+	+	+/-	+	+/-	+	+/-	+	+
4	Сірчана кислота розбавлена (10%)	-	-	+	+	+/-	+	+/-	+	+	+	+
5	Соляна кислота (30%)	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Соляна кислота розбавлена (10%)	-	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Ортофосфорна кислота (85%)	-	-	+	+	+/-	+	+/-	+	+	+	+
8	Плавикова кислота	-	+/-	-	-	+	+	+/-	-	+/-	+/-	+
9	Хромово суміш	+	-	+	+	+/-	+	+	+	+	+	+
10	Аміак (25%)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Крижана оцтова кислота	+	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Перекис водню (33%)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Гідроокис натрію / калію (50%)	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14	Гідроокис натрію / калію (10%)	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15	Толуол	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16	Гексан	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
17	Бензол	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18	Діоксан+соляна кислота	-	+/-	+	+	+/-	+	+	+	+	+	+
19	Гідразин	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20	Хлороформ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
21	Диметилсульфаксид	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
22	Диметилформамід	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
23	Йод	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
24	Нітрат срібла	+	-	+	+/-	-	+	-	+	-	-	+
25	Вологостійкість	+	+/-	+	+	+/-	+	+/-	+	+	+	+
26	Твердість	+	-	+	+	+/-	+	+/-	+	+	+	-
27	Термостійкість до 120°C	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
28	Термостійкість 120°C - 180°C	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-
29	Термостійкість 180°C - 300°C	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-







У К Р О Р Г С И Н Т Е З

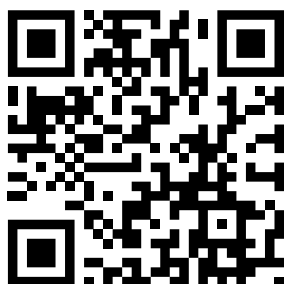

ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ»

м. Київ, вул. Червоноткацька, 67, корп. 45
т.: +38 (044) 502 20 80; +38 (044) 227 09 40
т.: +38 (044) 227 09 30; +38 (044) 227 09 20
e-mail: labmebli@uoslab.com
www.labmebli.com.ua