

Sof-Lex™

Комплексная система для шлифовки и полировки

Артикул	Комплектация
1980	Ознакомительный набор 120 Диски: супермягкие, мягкие, средние, грубые (30 шт) Ø 9,5 мм 120 Диски: супермягкие, мягкие, средние, грубые (30 шт) Ø 12,7 мм 1 Дискдержатель для углового наконечника
Рефилы SofLex диски Ø 9,5 мм	
8690 SF	50 Диски: супермягкие Ø 9,5 мм
8690 F	50 Диски: мягкие Ø 9,5 мм
8690 M	50 Диски: средние Ø 9,5 мм
8690 C	50 Диски: грубые Ø 9,5 мм
Рефилы SofLex диски Ø 12,7 мм	
8691 SF	50 Диски: супермягкие Ø 12,7 мм
8691 F	50 Диски: мягкие Ø 12,7 мм
8691 M	50 Диски: средние Ø 12,7 мм
8691 C	50 Диски: грубые Ø 12,7 мм
2380	Ознакомительный набор (extra thin) 120 Диски пластиковые (XT): супермягкие, мягкие, средние, грубые (30 шт) Ø 9,5 мм 120 Диски пластиковые (XT): супермягкие, мягкие, средние, грубые (30 шт) Ø 12,7 мм 1 Дискдержатель для углового наконечника
Рефилы SofLex диски пластиковые (XT) Ø 9,5 мм	
8693 SF	50 Диски (XT): супермягкие Ø 9,5 мм
8693 F	50 Диски (XT): мягкие Ø 9,5 мм
8693 M	50 Диски (XT): средние Ø 9,5 мм
8693 C	50 Диски (XT): грубые Ø 9,5 мм
Рефилы SofLex диски пластиковые (XT) Ø 12,7 мм	
8692 SF	50 Диски (XT): супермягкие Ø 12,7 мм
8692 F	50 Диски (XT): мягкие Ø 12,7 мм
8692 M	50 Диски (XT): средние Ø 12,7 мм
8692 C	50 Диски (XT): грубые Ø 12,7 мм

Артикул	Комплектация
2385 P	Полный набор 120 Диски: супермягкие, мягкие, средние, грубые (30 шт) Ø 9,5 мм 120 Диски: супермягкие, мягкие, средние, грубые (30 шт) Ø 12,7 мм 120 Диски пластиковые (XT): супермягкие, мягкие, средние, грубые (30 шт) Ø 9,5 мм 120 Диски пластиковые (XT): супермягкие, мягкие, средние, грубые (30 шт) Ø 12,7 мм 1 Дискдержатель для углового наконечника 15 Штрипсы, грубые / средние 15 Штрипсы, грубые / средние (узкие) 15 Штрипсы, мягкие / супермягкие
Рефилы SofLex Штрипсы	
1954	150 Штрипсы, грубые / средние
1954 N	100 Штрипсы, грубые / средние (узкие)
1956	120 Штрипсы, мягкие / супермягкие
SofLex Аксессуары	
8695 CA	2 Дискдержателя для углового наконечника

Степень абразивности			
Супертонкие (1 – 7 µm)	Тонкие (3 – 9 µm)	Средние (10 – 40 µm)	Грубые (50 – 90 µm)
Полировальные диски Sof-Lex™			
8691SF	8691F	8691M	8691C
8690SF	8690F	8690M	8690C
Полировальные диски Sof-Lex™ XT (сверхтонкие)			
8692SF	8692F	8692M	8692C
8693SF	8693F	8693M	8693C
Шлифовальные штрипсы Sof-Lex™			
SF	F	M	C
1956		1954	
		1954N	



3M ESPE

3M Украина
3M ESPE стоматологическая продукция
03680, Киев, ул. Физкультуры, 30-В
тел.: (044) 490-5777, факс: (044) 490-5775

3M ESPE

Совершенная полировка



Sof-

LexTM

Система шлифовки и полировки



3M ESPE – признанный лидер в сфере развития стоматологических технологий. Впервые представленная в середине 70-х гг. система для завершающей обработки и полировки Sof-Lex была революционным прорывом, предлагавшим стоматологам наиболее передовые решения в области финишной обработки реставраций.

Sof-Lex™

Диски и штрипсы для окончательной обработки

Увеличьте темп, не снижая качества результатов

Штрипсы и диски для финишной обработки Sof-Lex с диапазоном зернистости от грубой до супермелкой, с четкой цветовой маркировкой для быстрого выбора последовательности, легко заменяемые одним щелчком, дают исключительные, проверенные временем результаты, существенно экономя ваше время.

Диски Sof-Lex™


Реверсивные диски

Покрытие диска позволяет проводить финишную обработку различных поверхностей, в том числе в положении установки “реверс”



Быстрая и простая смена дисков

Просто и надежно защелкиваются на дискодержателе или снимаются с него без дополнительной регулировки

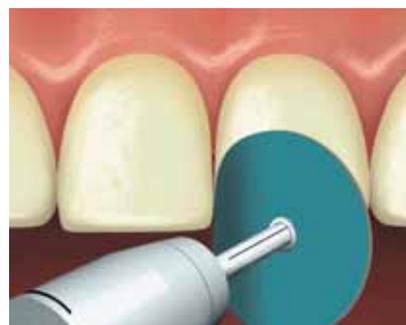

Цветовая маркировка

Постепенно меняется от темной (грубая поверхность) до светлой (супермелкая поверхность), что облегчает последовательную замену дисков

Два размера

В зависимости от потребности 13 мм (1/2 дюйма) или 9 мм (3/8 дюйма)

Увеличенная абразивная поверхность

Дискодержатель малогабаритный, на диске небольшое круглое отверстие

Выбор толщины и гибкости диска


Могут использоваться для решения самых разных задач. Выпускаются в стандартном и сверхтонком варианте



Контурирующие и полирующие диски Sof-Lex™




Сверхтонкие контурирующие и полирующие диски Sof-Lex™ ExtraThin (XT)

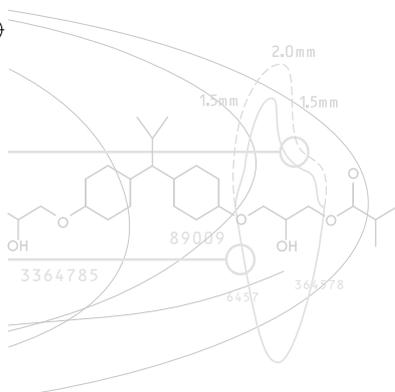

Sof-Lex™

Диски и штрипсы для окончательной обработки

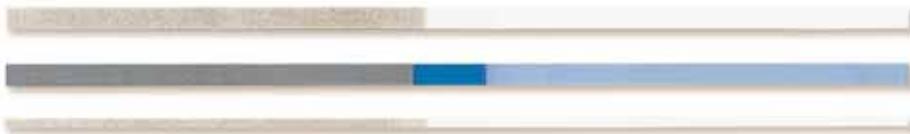

Штрипсы для завершающей обработки и полировки Sof-Lex™

Штрипсы Sof-Lex™

Предназначенные для завершающей обработки и полировки интерпроксимальных участков, штрипсы Sof-Lex являются необходимым элементом системы



Легко вводятся

В центре абразивного слоя на штрипсе имеется пробел, что позволяет легко помещать его между зубами, не повреждая контакты

Два уровня зернистости на одной ленте

Для экономии времени каждая штрипса выполняет две функции

Цветовая маркировка


Постепенно меняется от темной (грубая) до светлой (сверхмелкая), чтобы легко проводить последовательную замену

Выбор ширины и зернистости

Предлагается четыре варианта зернистости и две ширины штрипс

Устойчивы к разрыву

Полиэфирная подкладка устойчива к разрыву, сохраняет гибкость и не повреждает десну

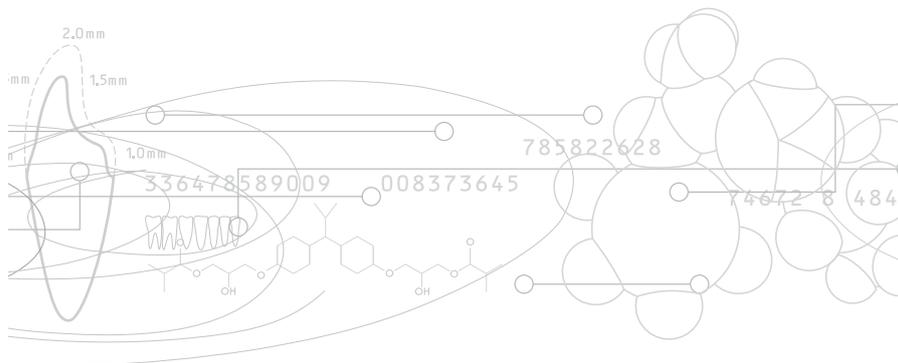

Ознакомительный набор Sof-Lex™ для финишной обработки



Полный набор Sof-Lex™ для финишной обработки