



Пересадка шкіри

TCM 3000 BL

Хірургічний мікромотор для реконструктивної хірургії



TCM 3000 BL - це невеликий практичний хірургічний мікромотор, який застосовується для розпилювання, свердління, фрезерування та шліфування кісткової тканини, а також для пересадки шкіри за допомогою дерматомів. Його перевагою є просте й інтуїтивно зрозуміле управління.

**Мікромотор з
регулюванням
крутного моменту**

Дерматом

для пересадки шкіри і опікової медицини

Дерматоми приводяться в дію потужним мікро мотором з блоком управління, таким як практичний TCM 3000 BL або більш потужний HighSurg 30.



**Глибина зрізу
0.05 – 1.00 мм**

**Заміна лез без
додаткових
інструментів**

**Оптимальна
вага**

Дерматоми

14 000 об/хв

4 різних ширини зрізу

Обирайте дерматом зі специфічною шириною зрізу, залежно від ділянки тіла, з якої планується зрізання трансплантатів.

Леза можна зняти і замінити без інструментів, відкрутивши два гвинти вгору. Глибину зрізу можна регулювати в діапазоні від 0,05 мм до 1,00 мм за допомогою коліщатка для прокручування.

Змінні обмежувальні пластини дозволяють зрізати більш вузькі ділянки шкіри за допомогою широкого дерматома. Вам не потрібно купляти декілька дерматомів.



Коліщатко для регулювання глибини зрізу в діапазоні від 0,05 мм до 1,00 мм



Акcesуари та запасні частини



Артикул 19872
Обмежувальна пластина до дерматому 100 мм
для звуження ширини зрізу до 75 мм




Артикул 19871
Обмежувальна пластина до дерматому 100 мм
для звуження ширини зрізу до 50 мм



Артикул 19887
Обмежувальна пластина до дерматому 75 мм
для звуження ширини зрізу до 50 мм



Артикул 19886
Обмежувальна пластина до дерматому 75 мм
для звуження ширини зрізу до 25 мм

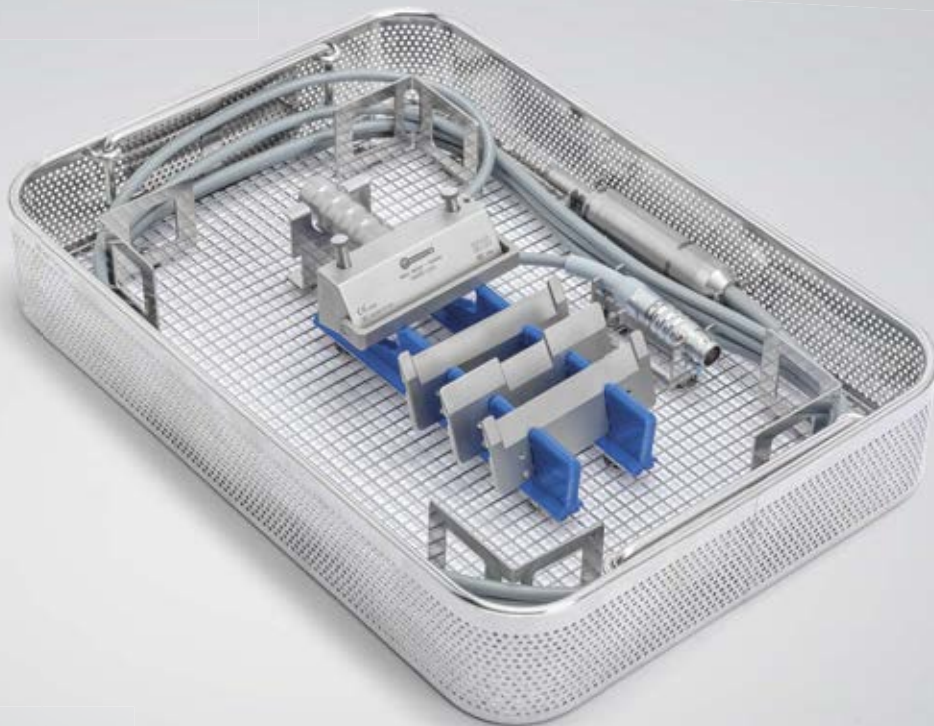


Артикул 4131
Кошик для стерилізації та зберігання дерматому.
Тримачі для зручного кріплення наконечника
дерматому, мікромотора з кабелем і обмежувальних
пластин.

Артикул 4133
Кришка до стерилізаційного кошика.

STERILE



Артикул 1919
Запасне лезо до дерматому 100
ПО* 10 шт

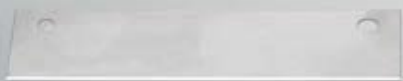

Артикул 1995
Запасне лезо до дерматому 75
ПО* 10 шт



Артикул 1996
Запасне лезо до дерматому 50
ПО* 10 шт



Артикул 1997
Запасне лезо до дерматому 25
ПО* 10 шт

*ПО: пакувальна одиниця

Meshher

Система розширення шкірного клаптя

Попередньо зняті за допомогою дерматома клапті шкіри викладаються на несучу пластину для шкіри, що відповідає вимогам, і продавлюються через Meshher парою валиків: валиком з лезами і штовхальним валиком.

Отримана таким чином перфорована секція шкіри дозволяє розтягувати її по ширині як сітку відповідно до специфікації використовуваної сітчастої плити.

Збільшення площі шкірного зрізу за рахунок розтягнення дозволяє уникнути подальшого зрізання трансплантатів шкіри в пацієнта. Проміжні отвори трансплантованої шкіри нарощуються в процесі загоєння шкіри.




Артикул 1986пou
Meshher, система розширення шкірного клаптя

Відгорнувши перемичку, валик з лезами можна зняти для догляду й очищення.



Коли тиск валика з лезами на штовхальний валик відрегульовано правильно, трансплантат можна легко розтягнути.

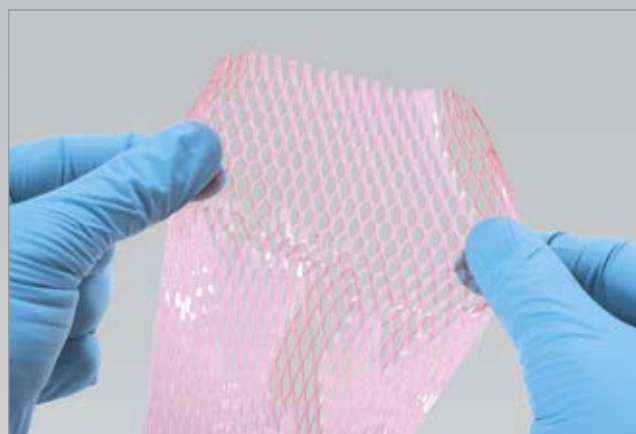

Несуча пластина для шкіри Сітчаста плита



STERILE

Несучі пластини для Mesher	Коефіцієнт розширення	ПО*	Артикул
1,5 : 1 Несучі пластини	1,5 : 1	20 шт	1981
3,0 : 1 Несучі пластини	3,0 : 1	20 шт	1982
6,0 : 1 Несучі пластини	6,0 : 1	20 шт	2105

*ПО: Пакувальна одиниця



Технічні дані

ТСМ 3000 VL: артикул 3285

Напруга	перемикається: 100 В ~/ 115 В ~/ 230 В ~, 50 - 60 Гц
Діапазон швидкостей	500 - 40 000 об/хв
Макс. крутний момент	6 Н·см
Муфта з боку мотора	ISO 3964
Розміри (Ш x Г x В)	120 x 180 x 115 мм

Мікромотор 21: артикул 2112пou

Макс. швидкість	40 000 об/хв
Макс. крутний момент	6 Н·см
Муфта	ISO 3964
Вага	280 г, без кабелю
Довжина кабелю	3 м

Дерматом: артикул 1992пou, 1991пou, 1990пou, 1983пou

Муфта	ISO 3964
Швидкість	14 000 об/хв
Ширина зрізу	25 мм, 50 мм, 75 мм, 100 мм
Глибина зрізу	0,05 - 1,00 мм
Крутний момент макс.	6 Н·см
Вага	330 г, 420 г, 560 г, 700 г

Meshер: артикул 1986пou

Ролик з лезами Ø	30 мм
Вага	4,9 кг
Розміри (Ш x Г x В)	210 x 195 x 110 мм

Несучі пластини для шкіри 1.5:1 / 3:1 / 6:1

На брошури можуть бути представлені продукти, які доступні не на всіх ринках.



Nouvag AG
St.Gallerstr. 23-25
CH-9403 Goldach

Тел. +41 (0)71 846 66 00

info@nouvag.com
www.nouvag.com



Nouvag GmbH
Schulthaißstr. 15
D-78462 Konstanz

Тел. +49 (0)7531 1290-0
Факс +49 (0)7531 1290-12

info-de@nouvag.com
www.nouvag.com



Nouvag USA, LLC
6201 Airport Freeway, Suite 200
USA-76117 Haltom City, Texas

Тел. +1 817 887-9814
Факс +1 817 887-9817

Безкоштовний номер (800) 673 7427
www.nouvagusa.com