



Просто ЄДИНИЙ

Надійний

Універсальний

Естетичний

Нечутливий
до техніки

Простий

G-CEM ONE™

Самоадгезивний
композитний цемент




Since 1921
100 years of Quality in Dental

ЄДИНИЙ... це спрощує!

G-CEM ONE дійсно **універсальний, нечутливий до техніки** цемент із **високою міцністю адгезії** та відмінною здатністю до самополімеризації. Він спрощує усі ваші процедури фіксації та дає більш **прогнозовані результати** та душевний спокій. G-CEM ONE можна використовувати для **широкого спектра показань**, включаючи складні клінічні ситуації, завдяки **GC Touch Cure**.

Єдиний GC Touch Cure

Хімічний ініціатор у **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer** прискорить хімічне твердіння цементу від поверхні зуба, щоб забезпечити стабільну адгезію.

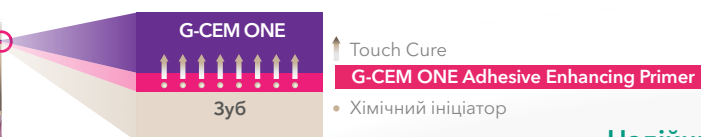


Надійний

Оптимальна міцність адгезії до ретенційних та неретенційних препаратів завдяки унікальній здатності **GC Touch Cure**, якою володіє **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer**.

Нечутливість до техніки

Вияткова самополімеризація для вашого душевного спокою, здатність преполімеризації надлишків для легшого видалення та очищення, стійкість до вологи та слини¹, оптимізована текучість цементу та майже відсутня постопераційна чутливість.³

Єдина оптимізована здатність до самополімеризації

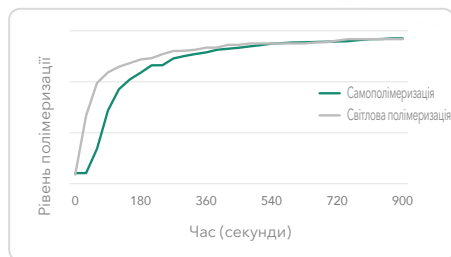


Джерело: професор Міузакі,
Університет Ніхон, Японія

¹ Із G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

² Із G-Multi PRIMER

³ З Результати практичних досліджень. Використовуючи лише G-CEM ONE. Файл даних.

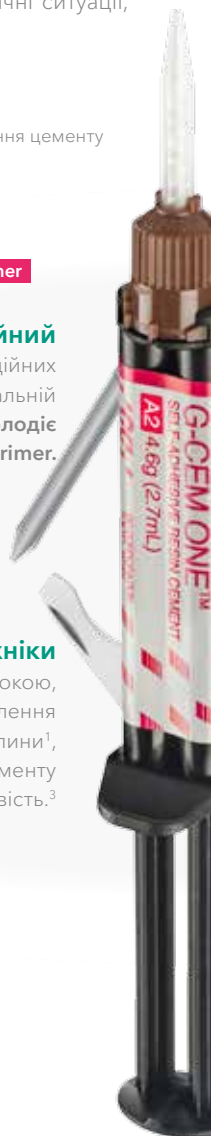

ЄДИНИЙ... це спрощує!

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (Додатково)

Для усіх кукс зубів та порожнин

- MDP: адгезія до тканин зуба, цирконію та недорогоцінних металів
- 4-MET: адгезія до тканин зуба
- MDTP: адгезія до дорогоцінних металів
- Прискорювач ⇒ міцна адгезія до будь-якої кукси зуба та порожнин завдяки **GC Touch Cure**.



Без полімеризації світлом,
лише сушіння

Зачекайте 10 сек

Максимальний тиск повітря протягом 5 сек

Універсальний

Відмінна міцність адгезії до тканин зуба та усіх каркасів: емалі, дентину, циркону, металу, склокераміки², гібридної кераміки².

Естетичний

Невидиме зносостійке крайове прилягання для естетичного результату.

Простий

Зменшена кількість необхідних матеріалів для оптимізованого робочого процесу.

Єдиний результат
незалежно від прозорості



Метал

З любов'язного дозволу лікаря
Казумоті Отані, Японія




Дисилікат літію


З любов'язного дозволу лікаря
Акітава Тсудзімото, Японія

ЄДИНИЙ... кому ви можете довіряти!

Єдиний цемент для неперевершеної міцності адгезії до усіх конструкцій

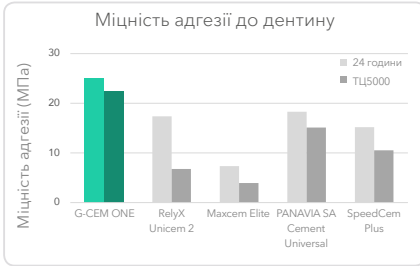


Джерело: GC R&D, Файл Даних

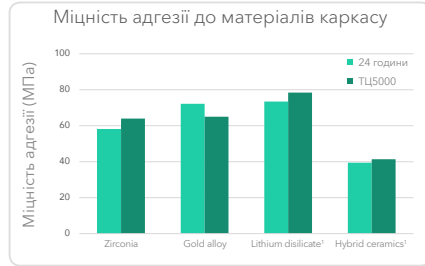


Джерело: GC R&D, Файл Даних
1 - G-Mill, PRIMER

Єдиний праймер для усіх клінічних випадків

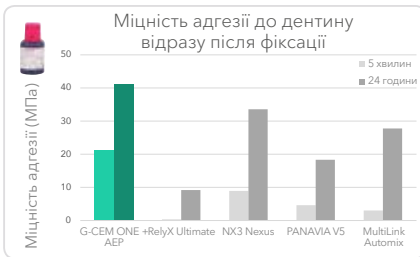

Джерело: GC R&D, Файл Даних

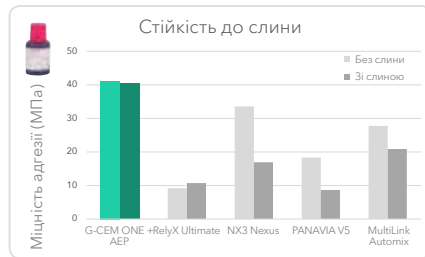


Джерело: GC R&D, Файл Даних

Міцність адгезії відразу після фіксації для уникнення передчасного дебондингу у неретенційних випадках та для CAD/CAM фрезерованих коронок для комфорту ваших пацієнтів.

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer забезпечує високу міцність адгезії, навіть у випадках забруднення слиною.

Невидиме крайове прилягання для естетичного результату

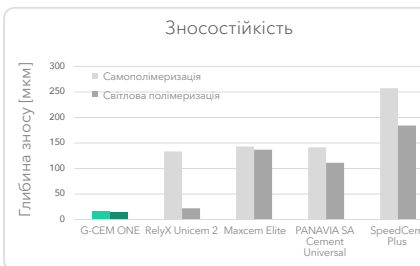

Джерело: GC R&D, Файл Даних



Перед лікуванням



Через 6 місяців

Низька товщина плівки (5 мкм) та висока зносостійкість невидимою невидимим лінію цементу.

З люб'язного дозволу лікаря Masayuki Okawa, Японія



З неов'язковим G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

ЄДИНИЙ... клінічний партнер!

Єдиний оптимізований процес



Легке видалення надлишків із преполімеризацією протягом 1 секунди



З любов'язного дозволу лікаря
Катерини Оліан, Японія

Єдиний для усіх клінічних випадків

Коронка на жувальному зубі (Циркон)



Очищений та висушений відпрепарований зуб



Зафіксована конструкція



Кінцевий результат

З любов'язного дозволу лікаря
Катерини Оліан, Японія

 Коронка на фронтальному зубі дисилікат літію



Очищений та висушений відпрепарований зуб



Нанесення G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer



Кінцевий результат

З любов'язного дозволу лікаря
Катерини Оліан, Японія

 Накладка на жувальному зубі дисилікат літію



Початкова ситуація



Реставрація зафіксована з використанням G-CEM ONE Adhesive Encasing Primer



Кінцевий результат

З любов'язного дозволу лікаря
Ріксайдо Темпреста, Італія

 З необов'язковим G-CEM ONE Adhesive Encasing Primer

Пакування

Артикул

10006927
10006928
10006929
10006930
10006931
10006932
10006933
10006934
10006935
10006834

Опис

G-CEM ONE Starter Kit A2 EEP
G-CEM ONE Starter Kit Translucent EEP
G-CEM ONE System Kit EEP
G-CEM ONE Twin Refill A2 EEP
G-CEM ONE Twin Refill Translucent EEP
G-CEM ONE Single Refill AO3 EEP
G-CEM ONE Single Refill White Opaque EEP
G-CEM ONE Value Refill A2 EEP
G-CEM ONE Value Refill Translucent EEP
G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer EEP



G-CEM ONE System Kit




G-CEM ONE Starter Kit



G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Діапазон відтінків

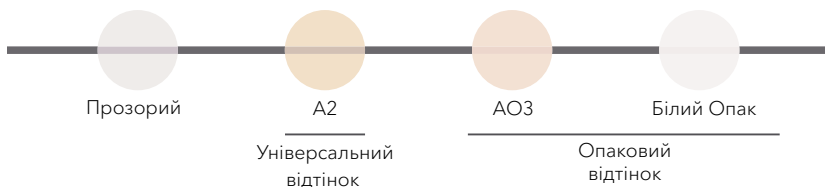

Супутні товари



G-Multi PRIMER
Універсальний праймер



D-Light* Pro
LED-полімеризатор подвійної довжини хвилі



FREEGENOL
Цемент для тимчасової фіксації

G-Multi PRIMER, D-Light* Pro та FREEGENOL торгові марки GC.

RelyX Unicem, RelyX Ulitimate, Maxcem Elite, PANAVIA SA Cement Universal, PANAVIA V5, SpeedCem Plus, NX3 Nexus та MultiLink Automix не є торговими марками GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC EUROPE N.V.

GCEEO Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 32, оф. 10
Тел. (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
https://europe.gc.dental/uk-UA

Офіційний дистриб'ютор компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/Факс: (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

