


BEAUTIFIL II LS

Реставрационный материал

Максимум Эстетики, Минимум Усадки

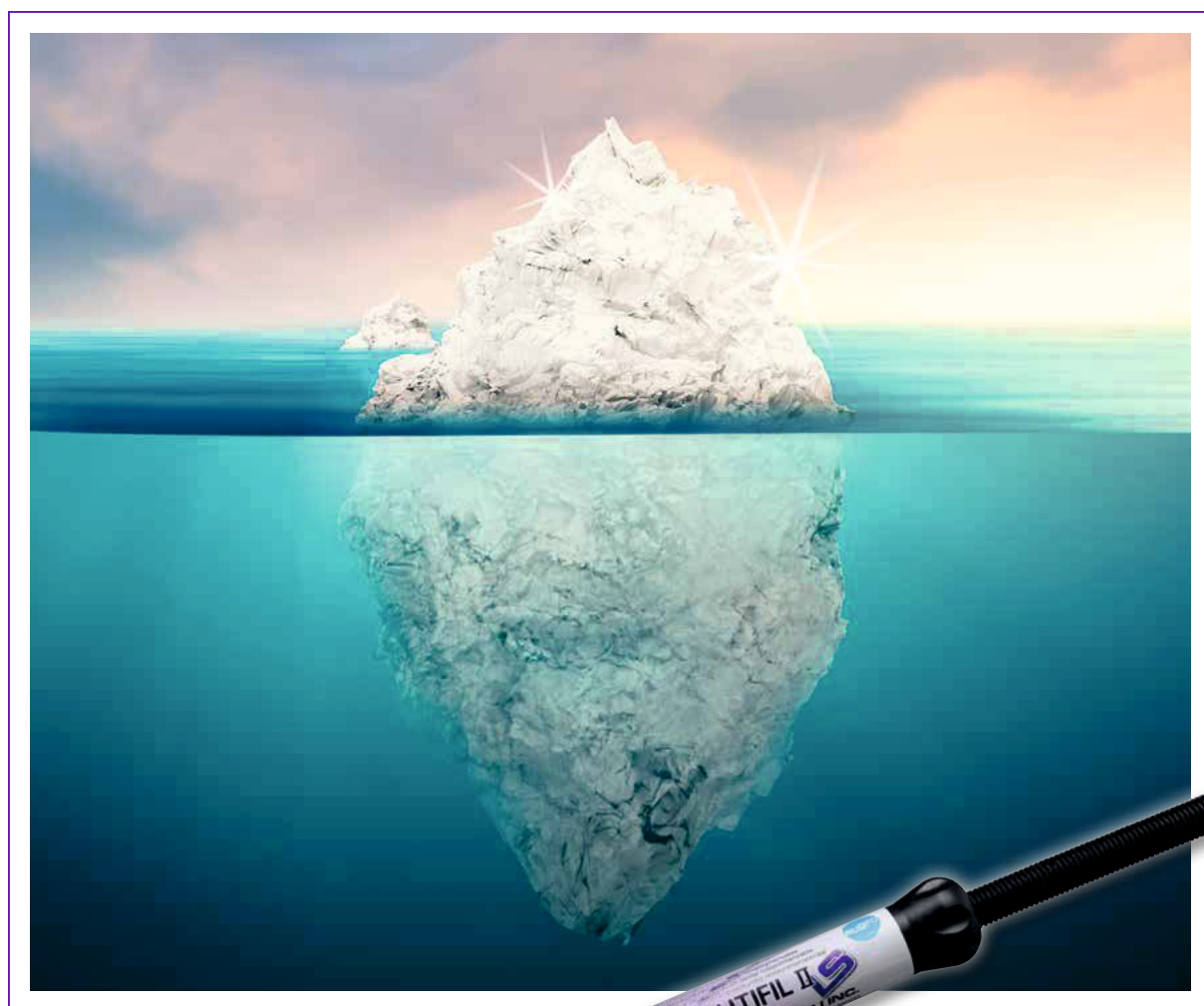


Низкий уровень усадки и усадочной нагрузки

Уровень полимеризационной усадки – это ключевой параметр, определяющий успешность прямой композитной реставрации. Современные низкоусадочные композиты, такие как BEAUTIFIL II L_S предотвращают образование микротрещин и краевого потемнения реставрации.

При использовании этого материала в комбинации с надежной адгезивной системой, они позволяют стоматологу создать действительно надежную, долгосрочную эстетическую реставрацию

Полимеризационная усадка, тестирование согласно ISO 17304:2013 (E)

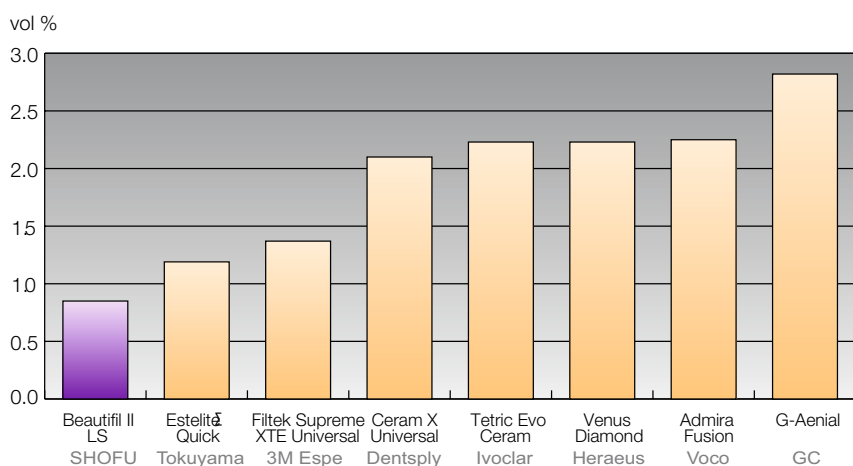


Эта диаграмма показывает уровень полимеризационной усадки BEAUTIFIL II L_S в сравнении с конкурирующими материалами: усадка BEAUTIFIL II L_S составляет всего 0,85% от объема, самый низкий, показатель объемной усадки среди всех тестируемых материалов.

Естественное отражение света и устойчивость блеска

Этот рентгеноконтрастный универсальный композит обладает уникальными эстетическими свойствами. Использование мультифункциональных стеклоиономерных наполнителей и композитных наполнителей, прошедших предварительную реакцию, обеспечивает высокую устойчивость к стиранию, твердость поверхности, не травмирующей антагонисты и уникальную прочность реставрации. Кроме того, уникальный состав обеспечивает свойство естественного светоотражения, что способствует воспроизведению естественной структуры зуба, а также создает сбалансированный «эффект хамелеона», как на уровне дентина, так и в эмалевых слоях. Благодаря особой структуре наполнителей реставрации очень быстро полируются до зеркального блеска.



Полируемость (30 сек), тестирование согласно ISO 2813:2014

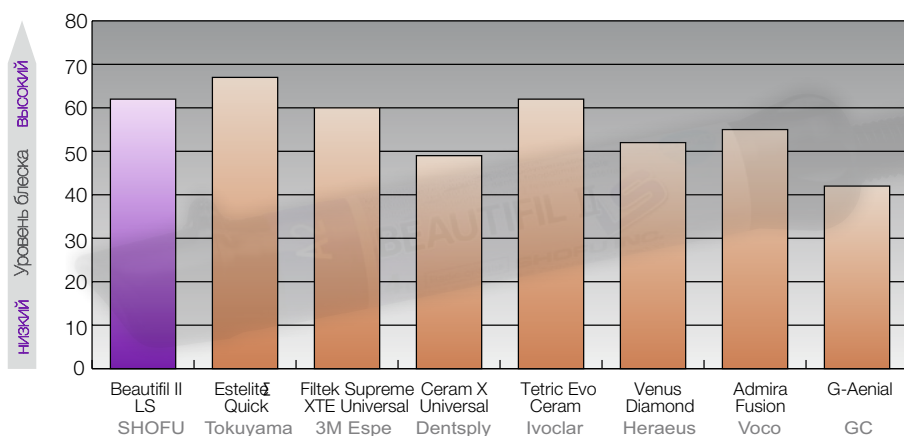

Мультифункциональные стеклоиономерные наполнители и композитные наполнители, прошедшие предварительную реакцию, гарантируют быструю полировку BEAUTIFIL II L_S до зеркального блеска – создается очень гладкая поверхность, устойчивая к образованию налета и сохраняющая блеск.

Разнообразие цветов

Композитная система BEAUTIFIL II LS содержит 10 основных оттенков зубов. Это разнообразие позволяет стоматологу удовлетворить все эстетические требования как при работе техникой послойной реставрации, так и при однослойном нанесении. Цветовой ряд совпадает с системой оттенков BEAUTIFIL II и обладает уникальной стабильностью цвета.

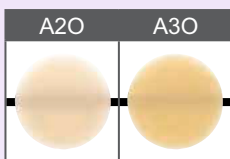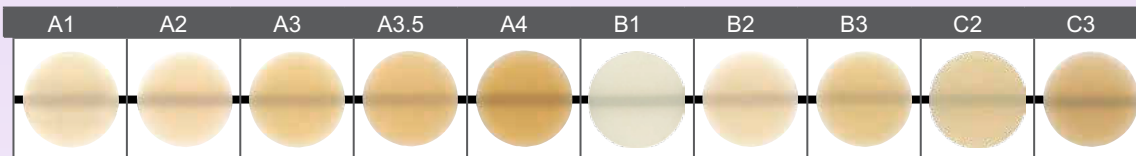

Цвета A1 – C3 соответствуют расцветке VITA® Classica

Оптические характеристики

BEAUTIFIL II LS имитирует свойства передачи и рассеивания света эмали и дентина естественных зубов благодаря наполнителям, сделанным по уникальной технологии Giomer. Это идеальное соответствие позволяет стоматологу создавать реставрации с оптическими характеристиками естественных зубов.



В Преимущества

Низкий уровень усадки (<1%) и усадочной нагрузки

Отличная полируемость и сохранение блеска

Высокая устойчивость к стиранию, сохранение твердости поверхности

Естественная передача и рассеивание света

Постоянное выделение и накопление фтора

Цветовой ряд, соответствующий системе BEAUTIFIL II

Информация для заказа

BEAUTIFIL II LS шприцы и капсулы



Shade	PN 4 g
SYRINGE	
A1	Y2270
A2	Y2271
A3	Y2272
A3.5	Y2273
A4	Y2274
B1	Y2275
B2	Y2276
B3	Y2277
C2	Y2278
C3	Y2279
A2O (opacious A2)	Y2280
A3O (opacious A3)	Y2281
Inc (Incisal)	Y2282
BW (Bleaching White)	Y2283

Shade	PN 0.25 g
TIPS, 20 pcs	
A1	Y2284
A2	Y2285
A3	Y2286
A3.5	Y2287
A4	Y2288
B1	Y2289
B2	Y2290
B3	Y2291
C2	Y2292
C3	Y2293
A2O (opacious A2)	Y2294
A3O (opacious A3)	Y2295
Inc (Incisal)	Y2296
BW (Bleaching White)	Y2297

Адгезивные системы



BeautiBond

Светоотверждаемый, самопротравливающий однокомпонентный адгезив



FL-Bond II

Самопротравливающая «двух-шаговая» адгезивная система, выделяющая фтор

ЧП «Вертикаль»



г. Днепр, пр. А. Поля 46 /210, тел. 0562 32-06-10, 36-69-02

г. Киев, ул. Героев Днепра 18, тел. 044 464-02-16

г. Одесса, тел. 066.148-30-06

г. Львов, тел. 067 672-32-91

e-mail: shofu@ua.fm

www.vertical.dp.ua