

**yuwell**

**«Керуйте своїм  
рівнем глюкози у  
будь-який час та в  
будь-якому місці!»**

**Anytime CT3**

**Система безперервного  
моніторингу глюкози у  
реальному часі**



# Знайдомтесть із системою Anytime СТ3



## АВТОМАТИЧНИЙ АПЛІКАТОР ТА СЕНСОР



**01.** Простий автоматичний аплікатор – це одноразовий аплікатор, який легко встановлює маленький вбудований сенсор на тіло.

## ПЕРЕДАВАЧ (ТЕРМІН ПРИДАТНОСІТ 2 РОКИ)



**02.** Передавач, що перезаряджається, можна використовувати до двох років. Він підтримує 14-денне носіння на одній зарядці (<1,5 години).

## ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ



**03.** Швидка зарядка займає менше 1,5 години.

480 безперервних вимірювань на день відправляються на ваш телефон через Bluetooth.



Досягайте своїх цілей з Anytime СТ3



Без уколів  
пальців



Без сканування



Зручний для  
носіння на  
протязі 14 днів



Оповіщення та  
сигнали що  
налаштовуються

ЛЕГШЕ



## Досягайте своїх цілей з Anytime СТЗ



### РОЗУМНІШЕ

- 7 стрілок трендів рівня глюкози
- 4 варіанти тимчасової шкали рівня глюкози
- Можливість виводити статистику і щоденні звіти
- Поділіться даними в реальному часі з 20 людьми
- Можливість фіксувати прийоми їжі, фізичну активність та інсулін





### НАДІЙНІШЕ

Клінічне випробування системи безперервного моніторингу глюкози СТЗ завершилося у 2022 році. У ньому взяли участь 72 пацієнти у трьох провідних лікарнях Китаю. Загальний MARD (порівняно з венозною кров'ю) становив 9,07%, а узгоджена сітка помилок - 99,95%.




### ЕФЕКТНІШЕ

- Сигнали в реальному часі при високих та низьких рівнях для вжиття заходів
- Може допомогти знизити HbA1c
- Може допомогти знизити кількість гіпоглікемічних подій

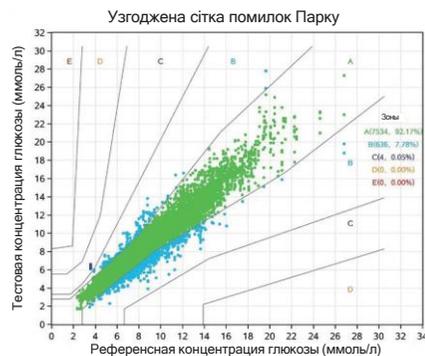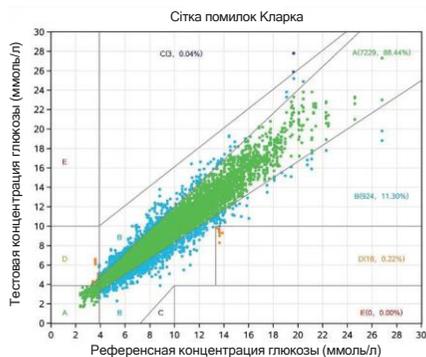

# Найкраще керування за допомогою програми Anytime

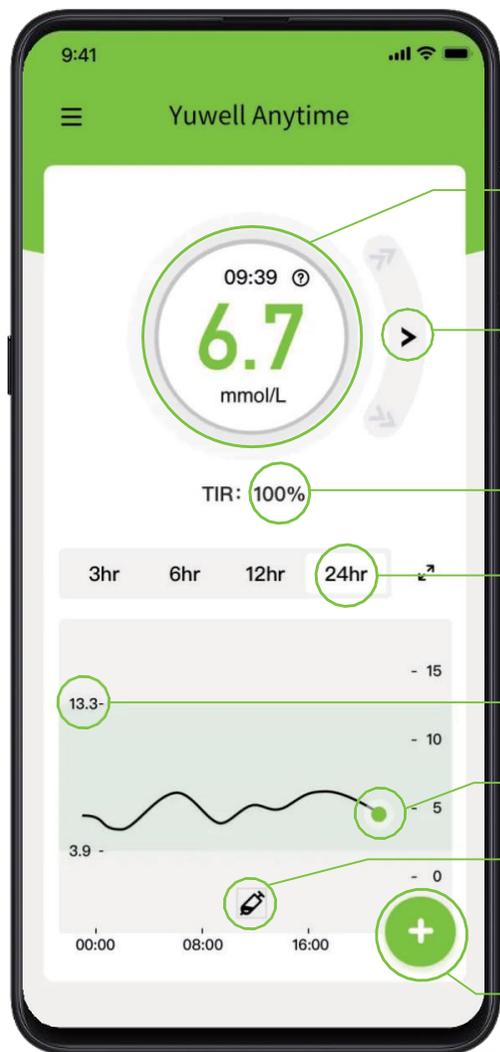

Поточні показання глюкози

Стрілка тренда

Час у цільовому діапазоні

Час, що відображається на графіку

Цільовий діапазон

Графік трендів

Записи подій

Додавання подій

Доступно в  
**App Store**

Получите в  
**Google Play**

## Anytime

### СИНХРОНІЗАЦІЯ



## Пацієнти можуть :



Glooko для персонального використання

- ✓ Вводити та переглядати дані про діабет в одному місці, щоб краще зрозуміти, що впливає на рівень глюкози
- ✓ Синхронізувати дані з СТЗ
- ✓ Вести журнал прийомів їжі та активності – база даних про продукти харчування містить понад 500 000 найменувань, і Glooko сумісний з популярними фітнес-трекерами, такими як Fitbit та Strava
- ✓ Переглядати освітні ресурси та найкращі практики з діабету

## Професіонали допоможуть:



Веб-додаток для професіоналів

- ✓ Керувати популяцією пацієнтів з діабетом для цілодобового догляду
- ✓ Переглядати та аналізувати дані про діабет, синхронізовані віддалено пацієнтами або завантажені під час візиту до клініки
- ✓ Знаходити та групувати цільові групи пацієнтів за допомогою можливостей пошуку та фільтрації
- ✓ Ефективно аналізувати та давати рекомендації щодо груп пацієнтів
- ✓ Підвищувати ефективність робочого процесу та збільшувати кількість пацієнтів

# Специфікація Anytime СТ3



Передавач	
Термін служби	14 днів
Термін придатності	2 роки
Час розігріву	1 година
Джерело живлення	Перезаряджається
Тривалість роботи батареї	14 днів на одній зарядці
Час зарядки	< 1,5 години
Діапазон та частота зв'язку	6 метрів, 2,4 ГГц Bluetooth з низьким енергоспоживанням (BLE)
Умови зберігання та транспортування	Температура: 5°C до 40°C, Вологість (відносна): < 93%
Датчик	
Діапазон вимірів глюкози	1,7 - 27,8 ммоль/л
Термін служби	14 днів
Термін придатності	1 рік
Умови зберігання	Температура: 2°C - 30°C, Вологість: без особливих вимог
Умови транспортування	Температура: 2°C - 45°C, Вологість: без особливих вимог

**yuwell**

JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT&SUPPLY CO.,LTD

Адреса виробництва: №1, Вул. Байшен, Зона розвитку, місто Даньян, провінція Цзянсу, КНР

Тел.: 86-0511-8690 0859      86-0511-8690 0860

Ел.пошта: [sales@yuyue.com.cn](mailto:sales@yuyue.com.cn); [zhang.yt@yuyue.com.cn](mailto:zhang.yt@yuyue.com.cn); [chen.dm@yuyue.com.cn](mailto:chen.dm@yuyue.com.cn)

[www.yuwell.com](http://www.yuwell.com)

f |  |  |  | Yuwell Global


2024, Yuyue medical, all rights reserved. The "  ", yuwell, the yuwell logo and name are trademarked by Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd, and may not be distributed, modified, reproduced in whole or in part without the prior. All specifications and product configurations are subject to change without notification.

# Anytime CT3

## Система безперервного моніторингу глюкози у реальному часі

Система Anytime CT3 для безперервного моніторингу рівня глюкози - це розумний і зручний помічник в управлінні діабетом 1 і 2 типу.





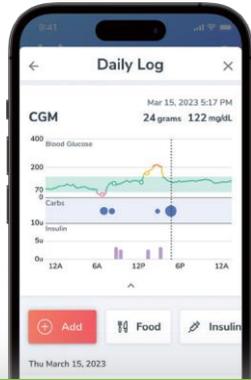

**Глюко для персонального використання**



**Веб-сайт для професіоналів**

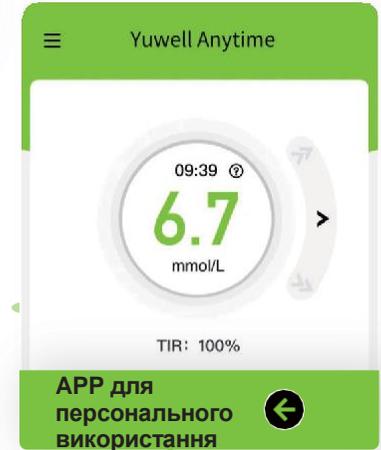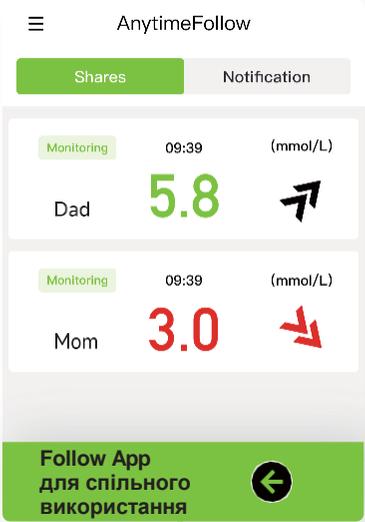

# Anytime!